Гарантии изготовителя:

1. Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие матраца требованиям ТУ РБ 100615733.004-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – ____ месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки.

3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет матрац и его части в случае неисправностей при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

4. Пересылка матраца, подлежащего гарантийному ремонту, производится за счет предприятия-изготовителя.

5. Срок службы матраца не менее 2 лет.

6. При направлении матраца на гарантийный ремонт необходимо приложить гарантийный талон.

7. Адрес предприятия-изготовителя:

220113. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 10

ОАО «Опытно-механический завод»

Гарантийный талон на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока.

Изделие медицинской техники: Матрац МВ
(наименование)

ТУ РБ 100615733.004-2015

Номер и дата изготовления _____
(заполняется предприятием – изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

М.П.

Открытое акционерное общество «Опытно-механический завод»
г. Минск

МАТРАЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ПАСПОРТ

МВ

Назначение

Матрацы медицинские, в дальнейшем – матрацы, предназначены для широкого использования в общественных и бытовых помещениях, в том числе для оборудования больничных палат, домов-интернатов, наркологических диспансеров и в общежитиях, турбазах, спортлагерях и военных казармах.

Правила транспортирования и хранения

1. Матрац транспортируется всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом вид транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -5 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температур +25 °С).

2. Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 г ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительна влажность не более 98% при +25 °С).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Основные технические данные

Матрацы изготавливают разборными, одно – или многосекционными.

Таблица **1**

Обозначение матраца	Кол – во секций	Назначение секций матраца	Оснащаемая модель кровати
МВ1	1	Общая	КРМ1- У
МВ1	1	Общая	КРМ1-Ш
МВ2	2	С головной секцией	КРМ2-Ш, КРМК2-Б, КРМК2-Б-СТ
МВ3	3	Головная, тазовая, ножная	КРМК3-Б, КРМК3-Б-СТ
МВ4	4	Головная, тазовая, бедренная, секция для голени	КРМК4-Б, КРМК4-Б-СТ

Рис.1 Общий вид матраца*.

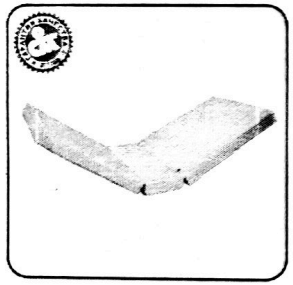

* В качестве примера приведен матрац МВ3, состоящий из 3-х секций.

Порядок сборки и разборки

1. Матрацы МВ1, МВ2, МВ3, МВ4 поставляются в собранном виде.
2. Для проведения санитарно-гигиенической обработки любого указанного матраца разберите его в следующей последовательности:
   - откройте текстильные застёжки в секциях чехла матраца;
   - снимите чехол из тика с наволочки вместе с наполнителем или с двух – четырёх наволочек с основаниями матраца;
   - снимите бязевую наволочку с основы или наволочки с основ матраца.

После разборки элементы матрацев подвергают санитарно-гигиенической обработке.

3. Сборку матрацев осуществляют в обратном порядке.

Порядок санитарной обработки матрацев.

1. Разборные матрацы устойчивы к очистке и дезинфекции, проводимым согласно ОСТ 42-21-2 и инструкциям по вопросам стерилизации и дезинфекции Минздрава РБ.2. Чехлы с текстильными застёжками подлежат химической чистке тетрахлорэтиленом (перхлорэтиленом) с применением обычного процесса обработки. **Застежки не подлежат глажению.**
3. Бязевые наволочки 2 подлежат санитарной обработке в прачечных с применением моющих средств в соответствии с инструкцией по стирке с глажением и запариванием используемых материалов.
4. Наполнитель ∠ эластичный пенополиуретан стирают при температуре не более 40 – 50 8С, используя синтетические моющие средства в соответствии с инструкцией для медучреждений.
5. Санитарную обработку матрацев, используемых в инфекционн больницах, очагах заражения и других эпидемиологических ситуаци осуществляют в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и дру объектов в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинирован дезинфекционных камерах».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru