Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»



КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ


КГ-9701

Руководство по эксплуатации

Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5957/1511 от 16.11.2015

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

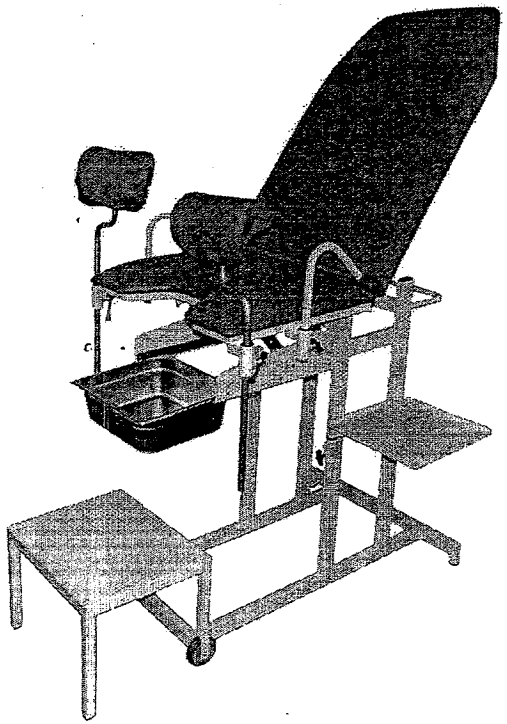

10 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ РБ 14440234.026-98 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресла 24 месяца со дня ввода кресла в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

При направлении кресла на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящее руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон

изъят_____

_____

Копия верна

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Кресло гинекологическое КГ-9701
(наименование)

ТУ РБ 14440234.028-98
(номер ТУ)

Заводской номер _____ дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретено_____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Введено в эксплуатацию_____
(дата, подпись)

- соедините фиксатор 13 («Rastomat»), расположенный на раме 7 со спинкой с помощью винтов М6х16, шайб 6.65Г и шайб 6.01 из крепежного комплекта;
- установите сиденье и спинку в рабочее положение;
- подколенники 9 расфиксируйте, ослабив винты 6, снимите, разверните в рабочее положение, установите, зафиксируйте винтами 6, проверьте надежность фиксации нажатием на подколенники;
- установите в рабочее положение ручки 10, столик 4, ступень 2.

Выполните работы, предусмотренные техническим обслуживанием.

Перед приемом пациента произведите санитарную обработку наружных поверхностей сиденья, спинки, подколенников дезинфектантом в соответствии с инструкцией производителя по его применению.

7 Техническое обслуживание

Кресло необходимо содержать в чистоте и оберегать от механических повреждений.

Для поддержания кресла в постоянной готовности к работе необходимо периодически, не реже одного раза в квартал, подтягивать ослабленные винтовые и болтовые соединения.

8 Транспортирование и хранение

Кресло в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:
температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;
относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:
температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;
относительная влажность 80 % при 25 °С.

9 Свидетельство о приемке

Кресло гинекологическое КГ-9701 заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.026-98 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

1 Общие указания

Кресло гинекологическое КГ-9701 (далее по тексту - кресло) предназначено для размещения на нем пациента во время гинекологических или урологических обследований, проведения лечебных процедур, мелких хирургических вмешательств, абортов.

Кресло предназначено для работы в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при температуре 25 °С.

Подготовка кресла к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Перед эксплуатацией кресла необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кресла в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кресла:
длина (спинка в разложенном состоянии, ступень опущена) – 1555 мм;
ширина кресла (без столика, с учетом подколенников) - 970 мм,
высота (спинка в поднятом состоянии) - 1635 мм,
ширина сиденья – 580 мм,
высота до сиденья от пола – 890 мм.

Масса кресла не более 60 кг.

Максимальная нагрузка на кресло 145 кг со следующим распределением: 55 кг - на спинку; 90 кг - на сиденье.

Максимальная нагрузка на столик – 3,5 кг.

Угол наклона спинки от 0 до 70 градусов к горизонтали.

Угол наклона сиденья от 0 до 20 градусов к горизонтали.

Драгметаллов не содержит.

Копия верна

3 Комплектность

Кресло гинекологическое КГ-9701 – 1 шт., в том числе:
спинка – 1 шт. (снимается при транспортировании), подколенник – 2 шт., лоток – 1 шт., ступень – 1 шт., столик – 1 шт., крепежный комплект – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Указание мер безопасности

Перед эксплуатацией кресла необходимо проверить надежно ли затянуты крепежные детали, фиксирующие подвижные части кресла в рабочем положении. Нажатием на спинку убедитесь в надежности ее фиксации, а также убедитесь в надежной фиксации сиденья следующим образом: нажмите двумя руками на углы сиденья, если один из углов проседает, то необходимо немного приподнять этот угол до щелчка.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Устройство кресла

Кресло, изображенное на рисунке, состоит из каркаса 3, на котором крепится рама 7 с сиденьем 8. На раме 7 закрепляются рама 12 со спинкой 11, подколенники 9, ручки 10. Кресло укомплектовано съемным, регулируемым по высоте с помощью винта 16 поворотным столиком 4 для размещения инструментов и принадлежностей.

Внешний вид кресла

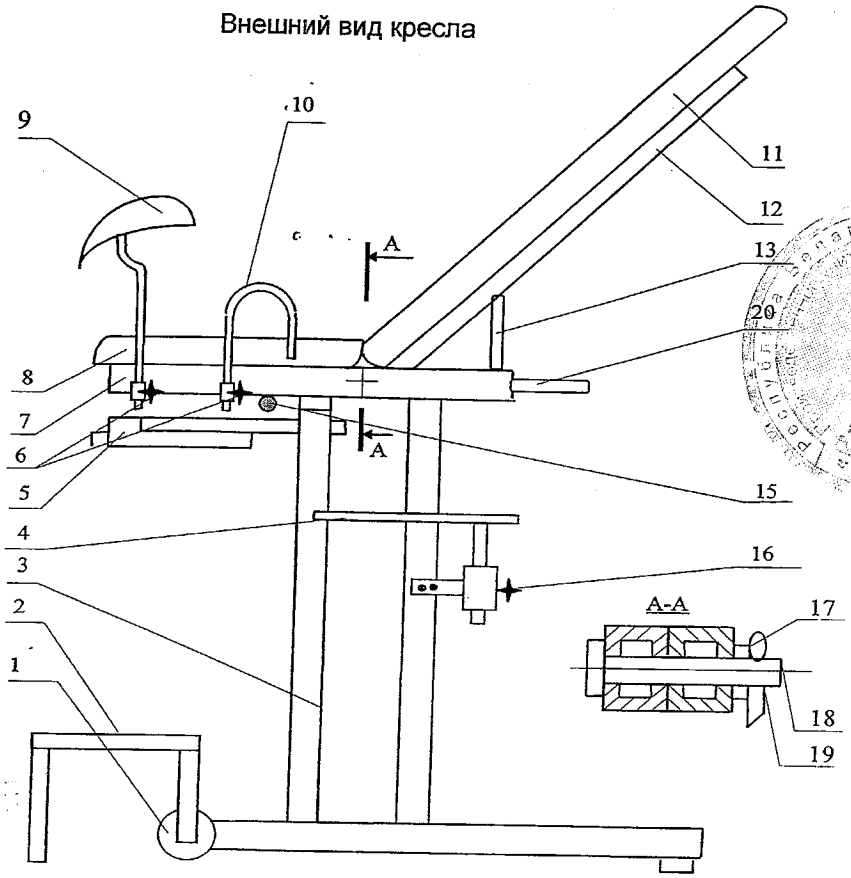

Копия верна

1 – опора;	5 – лоток;	9 – подколенник;	17 – шайба;
2 – ступень;	6, 16 – винт;	10 – ручка;	18 – палец;
3 – каркас;	7, 12 – рама;	11 – спинка;	19 – шплинт;
4 – столик;	8 – сиденье;	13, 15 – фиксатор;	20 – ручка

Сиденье и спинка представляют собой мягкие элементы с обивкой из винилискожи, устойчивой к многократной влажной обработке и дезинфекции. Нужное положение сиденья и угол наклона спинки устанавливаются и регулируются ступенчато при помощи механизмов «Rastomat» (фиксаторы 15 и 13). Установка положения спинки производится следующим образом: опустите спинку в горизонтальное положение, для чего поднимите ее вверх до упора (при этом фиксатор отключается), затем опустите до упора вниз. Приведите спинку в требуемое положение, для чего из крайнего нижнего положения плавно поднимите спинку до необходимого положения, при этом происходит срабатывание механизма фиксатора, сопровождаемое характерным щелчком. Нажатием на спинку убедитесь в надежности фиксации. Положение сиденья устанавливается аналогичным образом, после приведения сиденья в необходимое положение убедитесь в надежной фиксации обеих механизмов «Rastomat» следующим образом: нажмите двумя руками на углы сиденья, если один из углов проседает, то необходимо немного приподнять этот угол до щелчка.

Подколенники регулируются по высоте и вращаются вокруг вертикальной оси. Для регулировки подколенника по высоте необходимо ослабить крепление винта 6, выставить подколенник и зафиксировать винт, проверив надежность фиксации нажатием на подколенник. Подколенники снабжены легкосъемными чехлами из винилискожи.

Ручка 10, при необходимости (для увеличения ширины сидения), может быть снята, для чего необходимо ослабить зажимной винт 6.

Ступень 2 служит для подъема пациента на кресло, выполнена в откидном варианте.

Кресло снабжено выдвижным лотком 5, предназначенным для сбора жидкости, а также инструментов и материалов, используемых при проведении процедур.

Кресло установлено на колесные опоры 1 для удобства перемещения, для чего необходимо приподнять кресло за ручку 20, расположенную сзади на раме под спинкой.

Материалы, применяемые при изготовлении кресла, в том числе полимерное покрытие металлических частей, наносимое методом порошкового напыления, обивка мягких элементов - устойчивы к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов.

6 Подготовка кресла к эксплуатации

Освободите кресло от упаковки.

Установите снятые при транспортировании составные части кресла следующим образом:

- раму 12 со спинкой 11 установите на раму 7, совместив отверстия в рамах, и закрепите с двух сторон при помощи пальцев 18, шайб 17 и шплинтов 17 (см. рис.), которые при транспортировании закрепляются в отверстиях кресла;
- после установки спинки заправьте пластину из винилискожи, расположенную между спинкой и сиденьем, для чего:

а) спинку установите в верхнее положение, сиденье в крайнее опущенное положение;

б) ослабьте 2 нижних винта под спинкой;

в) приподнимите обтянутую часть спинки и заправьте пластину из винилискожи под раму спинки;

г) зажмите винты;