«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "Полимер-Стоматология"
_____В.П. Чуев
"___"_____ 2018 г.

Версия/Version № 3 от 06.06.2018
RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделий абразивных стоматологических
(ТУ 9391-011-66884762-2011)

НАЗНАЧЕНИЕ

«Изделия абразивные стоматологические» – это:

- диски бумажные водостойкие для обработки цементных пломб
- диски сепарационные вулканитовые для обработки твердых тканей зуба и создания межзубных промежутков (сепарации);
- круги-диски прорезные для отрезки или прорезки металла;
- круги прорезные стоматологические;
- круги полировальные гибкие стоматологические для бормашин;
- круги шлифовальные эластичные стоматологические для шлифмашин;
- круги шлифовальные стоматологические;
- круги шлифовальные стоматологические для обработки кобальто-хромового сплава;
- головки шлифовальные стоматологические;
- головки шлифовальные для обработки протезов,

предназначенны для обработки металлических и пластмассовых протезов и их деталей, бюгельных протезов и деталей из КХС, для обработки цементных пломб, естественных зубов.

Изделия абразивные стоматологические предназначены для применения в стоматологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Изделия абразивные изготавливают различных типов, размеров, различной зернистости. Коэффициент шлифования абразивных изделий должен быть:

Для кругов шлифовальных стоматологических:

- предназначенных для обработки естественных зубов, типов ПВ, ЧК, ЧЧВ - не менее 10;
- предназначенных для обработки стальных протезов, типа ПП - не менее 8, типа ПВ - не менее 3, типов ЧК и ЧЧВ - не менее 2;
- предназначенных для обработки пластмассовых протезов, типа ПП - не менее 15, типа ПВ - не менее 10.

Для кругов шлифовальных для обработки кхс:

- типа ПП диаметром 14 и 20 мм – не менее 4;
- типа ПП диаметром 50 и 60 мм – не менее 10;
- типа ЧК и ЧЧВ– не менее 2.

Для головок шлифовальных:

- предназначенных для обработки изделий из КХС - для головок ГЦ-2,5 – не менее 0,8; -для головок ГУ-4, ГУ-6, ГУ-10, ГСв-3,5, ГСв-7, ГСв-10, ГСв-12,5, ГЦ-5, ГЦ-7, ГУЗ-10,8, ГК-6 - не менее 1,0.
- предназначенных для обработки пломб - не менее 20;
- предназначенных для обработки естественных зубов - не менее 15;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- предназначенных для обработки пластмассовых протезов - не менее 20;
предназначенных для обработки стальных протезов - не менее 1;

Для кругов и дисков прорезных, полировальных гибких – не нормируется.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Принцип действия - полирование, шлифование, резание, сепарация стоматологических протезов, пломб, зубов в соответствии с общепринятыми в стоматологии и зубопротезировании методиками.

ФОРМА ВЫПУСКА

Головки:

- головки одного типоразмера	- 10 шт.;
- картонная коробка	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.

Круги:

- круги прорезные одного типоразмера	-30 шт. или 45 шт.
- картонная коробка	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.
- круги шлифовальные одного типоразмера	- 10 шт. или 50 шт.;
- картонная коробка	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.

Диски:

- диски одного типоразмера	- 400 шт.;
- картонная коробка	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.

По согласованию с потребителем допускается другая комплектация.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°С до +30°С. Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30^{0}С до +30^{0}С. Гарантийный срок хранения – 10 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки изделий и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11579 от 03.08.2011 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-Стоматология»
(ООО «Полимер-Стоматология»)
Россия, 308023, г.Белгород,
ул. Студенческая, 52
тел. +7/4722/200-555
postmaster@vladmiva.ru
www.polimerstom.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place


 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number

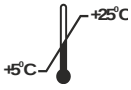

- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, КК – казахский язык/Kazakh, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, PT – португальский язык/Portuguese, FR – французский язык/French.

- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru