ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трубки медицинские поливинилхлоридные однократного применения
ТУ BY 600012098.014-2007

ИСЖЕ.942273.12 ИП **Дата выпуска 09.11.2020. Рев. 05**

НАЗНАЧЕНИЕ: Трубки медицинские поливинилхлоридные однократного применения (далее – трубки), предназначенные для аспирационно-промывного лечения внутренних полостей в различных областях хирургии.

Трубки должны использоваться только квалифицированным и обученным медицинским персоналом.

ФОРМА ВЫПУСКА: Трубки выпускаются в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Трубки изготовлены из медицинского ПВХ-пластиката (свободного от фталатов), выдержавшего токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Трубки в первичной упаковке стерильны, апирогенны и нетоксичны.

Стерилизованы окисью этилена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Специальные противопоказания неизвестны. Пациент, у которого возникают гиперчувствительные реакции в отношении одного из материалов, не должен проходить лечение с использованием данного изделия.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Побочных действий не обнаружено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Установка дренажа

- Хирург должен промыть рану стерильной жидкостью, затем удалить промывные воды и очистить операционную рану.
- При установке дренажа (-ей) следует обратить внимание на отсутствие перегибов трубки, как в зоне операции, так и в области выхода дренажа.
- Место установки дренажа, а также необходимое число дренажей, определяется оперирующим хирургом.
- Трубки должны лежать в одной плоскости с запланированным местом выведения дренажа через кожу. Для облегчения последующего извлечения дренажа трубка не должна изгибаться, зажиматься и фиксироваться швами в операционной ране.
- Трубка должна располагаться в тех зонах, где ожидается скопление максимального количества жидкости (гноя, крови, желчи).
- Трубка должна герметично прилегать к тканям в зоне входа дренажа. Все дренирующие отверстия и каналы трубки должны располагаться внутри раны.
- Не следует накладывать швы, захватывающие дренаж, и делать на нем надрезы, так как это может привести к разрыву дренажа и/или оставлению частей трубки в ране.
- Для предотвращения случайного смещения дренажа его фиксируют пластырем или трехпетлевым швом (накладываемым вокруг, а не сквозь трубку).
- При закрытии операционной раны следует контролировать подвижность трубки для предотвращения ее разрыва и/или оставления фрагментов трубки в ране.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

• При закупорке дренажа может потребоваться промывание трубки или аспирация ее содержимого.

• Следует регулярно контролировать качество и количество отделяемого, поступающего в резервуар, и информировать хирурга. Отсутствие своевременного опорожнения резервуара при его заполнении ведет к снижению эффективности дренажа.

• Присутствие в ране дренажа, изготовленного из ПВХ-пластиката, вызывает врастание в него тканей. Врастание тканей затрудняет извлечение дренажей и снижает эффективность их работы. В связи с этим хирург должен тщательно контролировать скорость заживления операционной раны.

• Эффективность дренажа увеличивается при использовании источника вакуума.

Дренирование плевральной полости

• До начала процедуры приготовьте следующие инструменты: скальпель или специальный инструмент, трубку, емкость с водой.

• Положите больного на спину, найдите последнее снизу ребро на стороне пораженного легкого по линии вниз от подмышечной ямки. Отсчитайте 2 межреберных пространства вверх.

• В этом месте, ориентируясь на высшую точку лежащего ниже ребра, введите скальпель в ткани кожи и далее до тех пор, пока не почувствуете отсутствие сопротивления для инструмента. В этот момент вы проникли в плевральную полость.

• Вставьте в разрез трубку. Другой конец трубки поместите в емкость с жидкостью.

• Закрепите трубку в данном положении и закройте любыми имеющимися в наличии средствами рану, через которую проникает воздух в полость. Как только больной начнет дышать, легкое увеличится в размере, и воздух, находящийся в плевральной полости, будет выталкиваться наружу через трубку. Жидкость будет служить клапаном и предотвращать повторное поступление воздуха в плевральную полость, таким образом, после нескольких дыхательных движений легкое вновь увеличится в размере и сможет нормально функционировать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Не использовать не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки. В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Дата изготовления



Использовать до



Код партии




Не использовать повторно



Не применять при повреждении упаковки



Стерилизация с применением окиси этилена

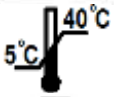

Ограничение температуры



Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Трубки должны храниться во вторичной упаковке при температурах от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить трубки от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж. Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru