JSV Медицинские системы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖНЫЙ СТОЛ СМ 01

ТУ BY 192187683.010-2015



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 230±23 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность 100 Вт
- Масса не более 70 кг
- длина стола 2000 мм
- длина стола не более 2000 мм;
- максимальная высота стола, разложенного горизонтально не более 920мм;
- минимальная высота стола, разложенного горизонтально не более 520мм;
- ширина стола не более 610 мм;
- ширина стола с подлокотниками 800 мм.
- наклон спинки 45°±3°.
- грузоподъемность до 150кг.

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол массажный СМ 01 (далее стол) предназначен для оснащения рабочего места массажных кабинетов, салонов красоты, центров оздоровления и лечебных учреждений при проведении профессионального массажа Высота стола регулируется с помощью электрического механизма, положение подголовника и подлокотников изменяется вручную. Изменение высоты стола позволяет самому массажисту не приспосабливаться при выполнении каждого приема к той или иной высоте, а выполнять их в оптимальном положении. Стол может быть установлен на роликах или на ножках. Ролики позволяют свободно переставлять стол в нужное место. Ножки обеспечивают надёжную фиксацию стола на месте установки

Дополнительное удобство применения обеспечивается благодаря наличию кнопок управления электрическим механизмом подъема и опускания, расположенных с обеих сторон стола. Положение подголовника и подлокотников изменяется вручную. Стол позволяет пациенту комфортно расположиться при проведении процедуры, а врачу иметь наиболее удобный доступ для проведения процедуры.

Колеса позволяют свободно переставлять стол в любое место. Есть возможность блокировки колес во время проведения процедуры.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- стол;
- шнур питания;
- руководство по эксплуатации.

СПОСОБ УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка высоты

Электронное изменение высоты стола с помощью кнопок, расположенных с обеих сторон стола, как показывает стрелка № 2 на рисунке. Нажимая кнопку, можем изменять высоту кушетки.

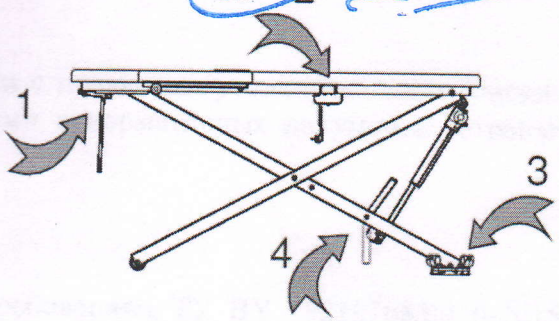

Установка и регулировка подголовника

Способ установки и регулировки подголовника прост, тем не менее следует соблюдать осторожность при изменении положения и убедиться в том, что блокировочный механизм зафиксирован!

Доступ к блокировке со всех сторон свободный.

Чтобы поднять вверх подголовник его следует просто осторожно поднять вверх, не дотрагиваясь до блокировок. Чтобы его опустить, необходимо держать подголовник рукой и одновременно поднять вверх блокировку (стрелка № 1), что позволит опустить подголовник.

Блокировка стола

Стол можно установить на роликах или на ножках. Чтобы сменить положение роликов или ножек следует:

1) с помощью кнопки установить максимальную высоту стола (стрелка № **2**)
2) опустить подъемник (стрелка № **4**)
3) установить минимальную высоту стола
4) повернуть основание (стрелка № **3**) в положение роликов или ножек

ВНИМАНИЕ – с обеих сторон должны быть установлены ролики или ножки

5) установить максимальную высоту стола
6) поднять подъемник (стрелка № **4**).

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Стол легко содержится в чистоте. Сертифицированный, кожимитовый материал можно чистить влажной тряпочкой и мыльной водой. После каждого использования провести дезинфекцию традиционными средствами такими как: Спитадерм или 70% Салициловый Спирт. Рекомендуем использовать для покрытия стола сменные чехлы, облегчающие поддержку чистоты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не перегружать. Допустимый вес человека, садящегося в кресло – 150 кг.
- Садится исключительно на сидение.
- Предохранять от влажности и пыли.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под контролем для недопущения игры с прибором.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службе.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Стол транспортируется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте, осуществляющем доставку груза.
В части воздействия климатических факторов стол должен транспортироваться по группе 5 ГОСТ 15150.
В части воздействия механических факторов стол должен транспортироваться по группе Л ГОСТ 23216.
Упакованный стол должен храниться в условиях 2 по ГОСТ 15150. При хранении не допускается наличие в окружающей среде паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация стола осуществляется в соответствии с правилами утилизации медицинских изделий и медицинской техники, установленными в нормативных документах страны-потребителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям ТУ BY 192187683.010-2015 при
соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации кресла - не менее 24 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок хранения - не менее 6 месяцев со дня продажи.
За критерий предельного состояния принимается такое состояние стола, при котором восстановление его работоспособности и электробезопасности невозможно или экономически нецелесообразно.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При обнаружении неисправности стола следует обратиться к производителю.
Контактная информация – ООО «ЮСВ-медицинские системы», Минский р-н, д.Тарасово, ул. Ратомская 1б, пом 6, тел. +375 17 513 69 51

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МАРКИРОВКЕ

 - Изделие типа B

 - «Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам»



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru