УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Фирма Конкор»
_____ А.А.Силашин
«22» 01 2020 г

Инструкция по применению медицинского изделия

Название медицинского изделия: *Линзы контактные мягкие корнеосклеральные «Конкор» исполнения «Конкор».*
Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00546 от 25 декабря 2013 года.
Производитель: ООО «Фирма Конкор», г. Вологда, Россия.
Область применения: Офтальмология.
Назначение:
Линзы контактные мягкие корнеосклеральные «Конкор» ежедневного и длительного ношения предназначены для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским и профессиональным показаниям .
Контактные линзы всегда должны подбираться специалистом по контактной коррекции.

Основные технические характеристики:
- общий диаметр 14,0 мм; 14,3 мм, 14,5 мм
- задняя вершинная рефракция от + 20, 00 до - 20,00 дптр
- базовый радиус 8,4 мм; 8,6 мм

Материал и упаковка:
Линзы контактные мягкие корнеосклеральные «Конкор» изготавливаются из гидрофильного полимерного материала. Наименование материала, влагосодержание и параметры указываются на маркировке линз.
Линзы контактные мягкие корнеосклеральные «Конкор» упакованы в стеклянные флаконы: одна стерильная мягкая контактная корнеосклеральная линза в фосфатно-буферном солевом растворе при pH 7,2-7,4.
Линзы стерилизованы паром.
Рекомендуемый срок замены линз:

BENZ T 38% HIGH BLUE TINT(США) – 8 месяцев,
BENZ UV 38% HIGH BLUE TINT (США) - 8 месяцев,
BENZ 56 MF HIGH BLUE TINT (США) - 6-8 месяцев,
Contaflex 38 (Великобритания) – 8 месяцев,
Contaflex 67 UV Clear (Великобритания) 6-8 месяцев,
Definitive 74 Clear (Великобритания) – 3 месяца.

Правила обращения с контактными линзами.
Специалист по контактной коррекции должен подробно объяснить Вам правила надевания и снятия линзы.
Не используйте линзы после истечения срока годности.
Линзы должны быть выброшены по окончанию срока их пользования. Специальная утилизация не требуется.
Не используйте острые предметы, щипчики или ногти для снятия линзы или извлечения её из контейнера.
Будьте осторожны, используя мыло, лосьоны, косметику, дезодоранты, так как они могут вызвать раздражение глаз в случае контакта с линзами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Не допускайте контакта линз с нестерильными жидкостями (включая воду из крана, слюну), так как это может привести к микробному загрязнению, а в дальнейшем к необратимым повреждениям глаза.
При ощущении дискомфорта, раздражения или покраснения глаз немедленно снимите линзу и обращайтесь к офтальмологу.
Периодическая сухость может исчезнуть после того, как моргнуть несколько раз, или после использования увлажняющих капель, рекомендованных врачом.

НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ ЛИНЗ:

1. Надевание и снятие линзы всегда следует начинать с одного и того же глаза (например, с правого).
2. Делайте это над гладкой поверхностью (стол), чтобы без труда найти линзу в случае ее падения.
3. Перед любыми действиями с линзами тщательно вымойте руки с мылом и высушите их полотенцем, не оставляющим ворсинок.
4. Прикасаться к линзам можно только подушечками пальцев.
5. Перед надеванием линзы на глаз убедитесь, что она:

— достаточно увлажнена;
— не содержит трещин или разрывов;
— находится в правильном положении — поместите линзу на кончик указательного пальца и проверьте положение линзы.

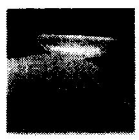


Рис.1

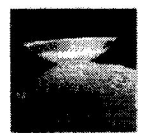


Рис.2

Если края линзы направлены вверх, линза в правильном положении (рис.1). Если края линзы направлены в стороны, то линза вывернута (рис.2)

НАДЕВАНИЕ ЛИНЗ ОДНОЙ РУКОЙ:

— Поместите линзу на подушечку указательного пальца;
— Смотрите прямо перед собой;
— Оттяните вниз нижнее веко средним пальцем;
— Переведите взгляд вверх и зафиксируйте его;
— Расположите линзу на нижней белой части глаза (склере);
— Осторожно переведите взгляд вниз;
— Медленно отпустите нижнее веко;
— Закройте глаза — линза сама разместиться на глазу.

НАДЕВАНИЕ ЛИНЗ ДВУМЯ РУКАМИ:

— Поместите линзу на подушечку указательного пальца;
— Средним пальцем оттяните вниз нижнее веко;
— Средним пальцем другой руки оттяните верхнее веко вверх;
— Поместите линзу на глазное яблоко;
— Не отпуская пальцы, переведите взгляд вниз: линза сама встанет в удобное положение;
— Осторожно отпустите веки.

СНЯТИЕ ЛИНЗ:

— Оттяните пальцем нижнее веко, смотрите вверх;
— Указательным пальцем сместите линзу за край на нижнюю белую часть глаза;
— Подушечками большого и указательного пальцев слегка ущипните линзу и снимите ее с глаза;
— Расправьте линзу, чтобы не слиплись ее края.

УХОД ЗА ЛИНЗАМИ:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Гигиена и правильное обращение с линзами являются важными факторами в достижении безопасного и комфортного ношения линз.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД:

— Снимите линзу и положите ее на ладонь;
— Нанесите на линзу несколько капель многофункционального раствора и осторожно потрите поверхность линзы подушечкой пальца другой руки в течение 10 секунд с каждой стороны;
— Сполосните линзу раствором;
— Поместите линзу в контейнер, наполненный свежим многофункциональным раствором для обработки мягких контактных линз;
— Закройте контейнер крышечкой с соответствующей линзе отметкой;
— Оставьте линзы в растворе не менее чем на 4 часа (можно оставлять линзы в растворе на ночь);
— По истечении этого времени линзы можно сразу надевать;
— Механическая очистка удаляет 90% всех поверхностных загрязнений, образующихся на линзе, а дезинфекция в многофункциональном растворе убивает болезнетворные микробы;
— 1 раз в неделю используйте рекомендуемые для ваших линз ферментные очистители.

Противопоказания (когда нельзя носить линзы)

Контактные линзы нельзя носить при наличии медицинских противопоказаний:
Контактные линзы нельзя носить при наличии медицинских противопоказаний или при неблагоприятных условиях окружающей среды.

Не благоприятные условия для ношения контактных линз:

— Аллергия, воспаление, инфекция или раздражение глаза, век или прилегающих тканей;
— Состояния плохого самочувствия, такие как простуда или грипп;
— Нарушение слезной пленки;
— Среда с избыточной сухостью или запыленностью, делающая ношение контактных линз некомфортным;
— Занятие водным спортом без очков для плавания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

— Ощущение инородного тела в глазу;
— Дискомфорт при ношении линзы;
— Покраснение глаза;
— Чувствительность к свету;
— Ощущение жжения, покалывания, зуда в глазах, повышенное слезоотделение;
— Радужные круги или ореолы вокруг источника света;
— Сильная или не проходящая сухость глаза.

Данные симптомы, оставленные без внимания, могут приводить к развитию более серьёзных осложнений.
Немедленно снимите линзу и обратитесь к специалисту по контактной коррекции или офтальмологу.

Уход за контейнером для линз.

В контейнере для хранения контактных линз могут присутствовать бактерии, поэтому после надевания линз из контейнера необходимо вылить жидкость, промыть рекомендованными стерильными растворами и дать высохнуть на открытом воздухе. Контейнер для линз необходимо регулярно заменять на новый, в соответствии с инструкциями изготовителя или офтальмолога.
НИКОГДА НЕ ПРОМЫВАЙТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛИНЗ ВОДОЙ.

Срок годности

Указан на этикетке.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в обычных условиях.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дополнительная информация:
Линзы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 31586-2012 «Линзы контактные мягкие. Общие технические условия» и ТУ 9488-002-22757703-2001 «Линзы контактные мягкие корнеосклеральные «Конкор».

Производитель:
ООО «Фирма Конкор», Россия,160000,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40
т/ф 8-8172-75-88-26

Место производства:
ООО «Фирма Конкор», Россия,
160013, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.10.

Претензии и информация о нежелательных событиях (инцидентах) принимаются по адресу:
ООО «Фирма Конкор», Россия,160000,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40, офис 43
т/ф 8-8172-75-88-26, e-mail: info@concor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru