

SANLI Medical 浏阳市三力医用科技发展有限公司


Liuyang SANLI Medical Technology Development Co., Ltd

地址：湖南省浏阳市金沙北路99号 Add：No.99, Jinsha North Road, Liuyang,Hunan,China

Tel：+86 731 83655125 Fax：+86 731 83669587 Web: www.hunansanli.com

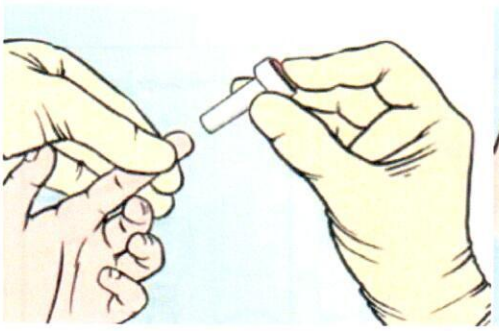

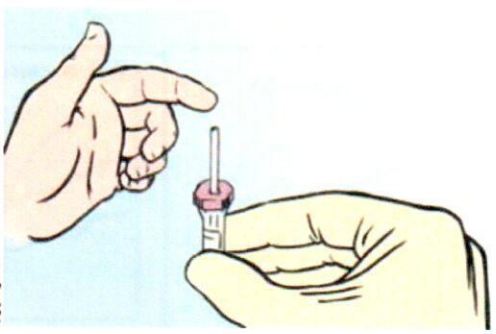

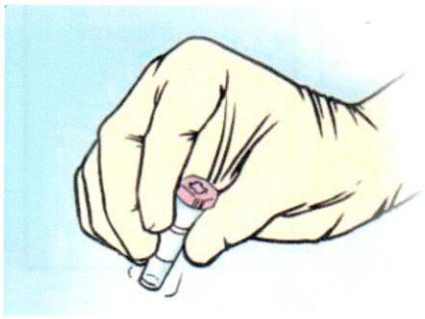

1. В крышку пробирки вставляется капилляр.
2. С помощью автоматического ланцета или обычного скарификатора делается разрез на подушечке пальца.
3. Кровь собирается в пробирку с помощью капилляра - под действием капиллярного эффекта.
4. Капилляр удаляется из крышки, при этом клапан крышки автоматически закрывается.
5. Пробирка аккуратно переворачивается вокруг своей оси 8-10 раз для лучшего смешения крови с реагентом.
6. После нанесения на этикетку данных пациента, пробирка готова к дальнейшему использованию.

LIUYANG SANLI MEDICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

_____ Боровик А.В.

КОПИЯ ВЕРНА


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

浏阳市三力医用科技发展有限公司

Liuyang SANLI Medical Technology Development Co., Ltd

地址：湖南省浏阳市金沙北路99号 Add：No.99, Jinsha North Road, Liuyang,Hunan,China

Tel：+86 731 83655125 Fax：+86 731 83669587 Web: www.hunansanli.com

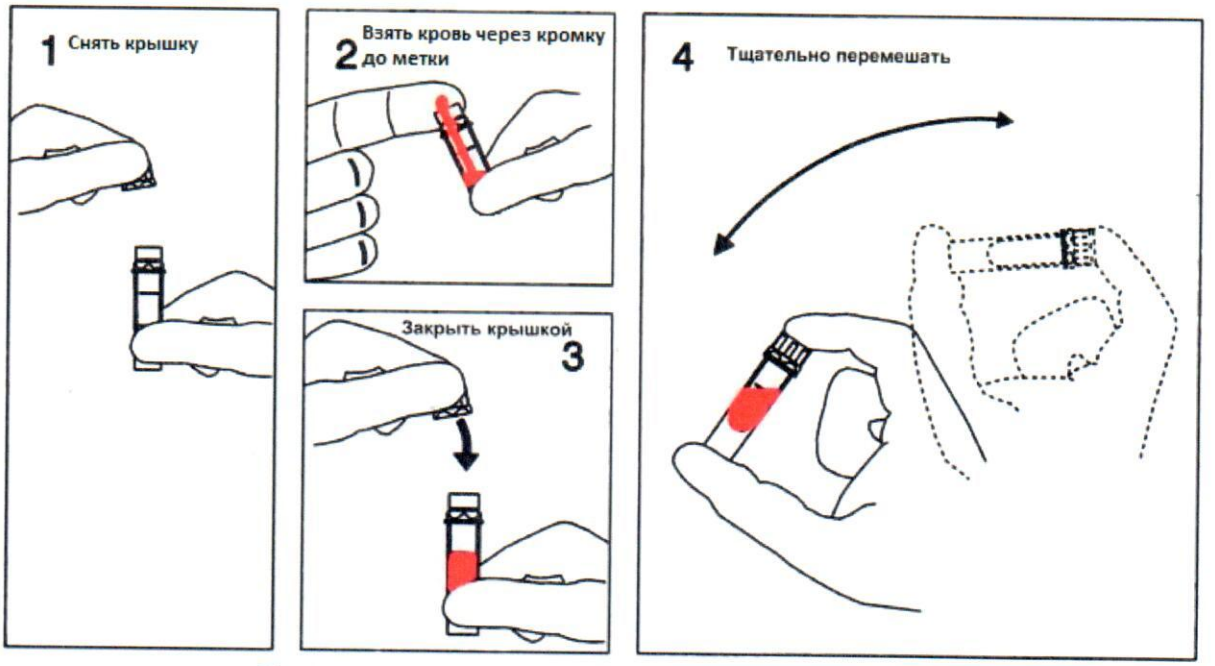

Рекомендуется работать в перчатках

LIUYANG SANLI MEDICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Боровик А.В.

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru