7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Табурет вращающийся ТВ-2П, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документацией.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ BY 800017554.037-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

8.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Табурет вращающийся ТВ-2П, заводской №_____
ТУ BY 800017554.037-2006

Приобретен_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТАБУРЕТ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТВ-2П

ТУ BY 800017554.037-2006
Паспорт
БИПЯ.324312.037.ТВ-2П ПС



Копия верна
Директор СЗАО «Белмедматериалы»
А.И. Валицкий

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Табурет вращающийся ТВ-2П (в дальнейшем - табурет) предназначен для использования в стоматологических кабинетах. Табуреты выпускаются с разными крестовинами, гильзами пневмоамортизатора (далее – гильза) и опорами для ног. Описание модели табуретов приведены в таблице.

1.2 Табурет предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 35°С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, не более:
- диаметр сиденья 400
- диаметр основания 600
- высота .....500...700

2.2 Масса, кг, не более.....12

2.3 Допускаемая нагрузка, кг.....130

2.4 Срок службы, лет, не менее.....5

Обозначение	Описание стула
ТВ-2П	Крестовина, гильза – цвет черный
ТВ-2П (с кольцевой опорой д/ног)	Крестовина, гильза, опора для ног – цвет черный
ТВ-2П (хром)	Крестовина, гильза – цвет хром
ТВ-2П (хром, с кольцевой опорой д/ног)	Крестовина, гильза, опора для ног – цвет хром

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы.

Наименование	Кол.шт	Наименование	Кол.шт
сиденье в сборе с опорой	1	крестовина	1
пневмоамортизатор в сборе с гильзой	1	паспорт	1
колесная опора	5		
Опора для ног*	1	*) Для стульев с кольцевой опорой д/ног	

4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

4.1 Соберите табурет (см. рисунок). Вставьте колесные опоры поз.7 в отверстия крестовины поз.5. Обработку наружных поверхностей проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом РБ


4.2 Пневмоамортизатор поз.5 в сборе с гильзой поз.6 вставьте в центральное отверстие крестовины поз.5.

4.3 Сиденье поз.1 в сборе с опорой поз.2 установите на шток пневмоамортизатора поз.3.

4.4 Высота сиденья поз.1 регулируется с помощью кольцевого рычага. Для опускания сиденья нажать на рычаг вверх, сидя на табурете, а для поднятия сиденья – нажать на рычаг вверх и привстать с табурета.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.5 Проведите дезобработку наружных поверхностей табурета дезсредствами, разрешёнными к применению Минздравом Республики Беларусь.

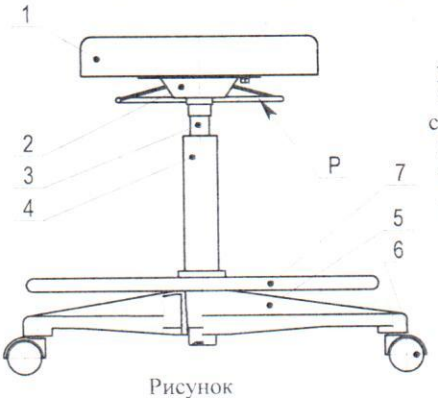

1. Сиденье
2. Опора сиденья с нажимным кольцом Р
3. Пневмоамортизатор
4. Гильза
5. Крестовина
6. Колесная опора
7. Опора для ног

Рисунок

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Табурет в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 25° С.

5.2 Хранить табурет допускается в не отапливаемом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Табурет вращающийся ТВ-2П, заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.037-2006 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Табурет вращающийся с седлообразным сиденьем ТС-1П, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документацией.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям т[illegible]ческих условий ТУ BY 800017554.037-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

8.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Табурет вращающийся с седлообразным сиденьем ТС-1П, заводской №_____ ТУ BY 800017554.037-2006
Приобретен_____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Р[illegible]ен в эксплуатацию_____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия
Подпись и печать
руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТАБУРЕТ ВРАЩАЮЩИЙСЯ
с седлообразным сиденьем

ТС-1П

ТУ BY 800017554.037-2006
ПАСПОРТ

БИПЯ.324312.037.ТС-1П ПС



Копия верна
Директор СЗАО «Белмедматериалы»
А.И. Ваницкий

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Табурет с седлообразны сиденьем ТС-III (далее табурет) предназначен для использования в стоматологических кабинетах.

1.2 Табурет предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 35°С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 габаритные размеры, мм, не более:

- размеры сиденья.....400x410
- диаметр крестовины.....680
- высота 560-760

2.2 Масса, кг, не более 12

2.3 Срок службы, лет, не менее 5

Обозначение	Описание стула
ТС-III	Крестовина, гильза – цвет черный
ТС-III (с кольцевой опорой д/ног)	Крестовина, гильза, опора для ног – цвет черный
ТС-III (хром)	Крестовина, гильза – цвет хром
ТС-III (хром, с кольцевой опорой д/ног)	Крестовина, гильза, опора для ног – цвет хром

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы.

Наименование	Кол.шт	Наименование	Кол.шт
сиденье	1	колесная опора	5
опора сиденья	1	крестовина	1
пневмоамортизатор в сборе с гильзой	1	паспорт	1
Опора для ног*	1	*) Для стульев с кольцевой опорой д/ног	

4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

4.1 Соберите табурет (см. рисунок). Вставьте колесные опоры поз.7 в отверстия крестовины поз.5.


4.2 Пневмоамортизатор поз.3 в сборе с гильзой поз.4 вставьте в центральное отверстие крестовины поз.5.

4.3 Сиденье поз.1 в сборе с опорой поз.2 установите на шток пневмоамортизатора поз.3.

4.4 Высота сиденья поз.1 регулируется с помощью рычага П. Для опускания сиденья нажать на рычаг вверх, сидя на табурете, а для поднятия сиденья – нажать на рычаг Р вверх и привстать с табурета. Регулировка угла наклона сиденья осуществляется при помощи рычага П.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.5 Проведите дезобработку наружных поверхностей табурета дезсредствами, разрешёнными к применению Минздравом Республики Беларусь.

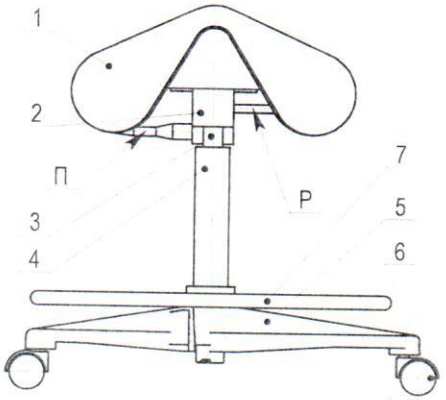

1. Сиденье
2. Опора сиденья с механизмом регулировки
3. Пневмоамортизатор
4. Гильза
5. Крестовина
6. Колесная опора
7. Колесная опора.

Рисунок

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Табурет в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 25° С.

5.2 Хранить табурет допускается в не отапливаемом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Воздух помещения должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Табурет вращающийся с седлообразным сиденьем ТС-III, заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.037-2006 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru