Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 15.19.00.00.00.000 - 01 РЭ кровати медицинской ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП"

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии. Внешний вид кровати медицинской ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП" приведен на рисунке 1.

Кровать медицинская ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП" удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кровать медицинская ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП" (далее по тексту – кровать) предназначенные для лечения, реанимации и наблюдения за пациентом в лечебных учреждениях и домашних условиях и соответствует требованиям ТУ BY 700049597.049-2021.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1.2 Ложе кровати состоит из четырех секций: секция спинная, секция тазобедренная, секция промежуточная, секция ножная (см. рисунок 2). Секция спинная, секция промежуточная, секция ножная регулируются по углу наклона. Рама регулируется по высоте - «вверх-вниз» нажатием на рычаг поз. 7.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики кровати приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование технической характеристики	Величина технической характеристики
Предельная рабочая нагрузка кровати, кг, не более, представляющая собой сумму нагрузок: - пациент - матрац - принадлежности	240 205 20 15
Масса кровати, кг, не более	131
Габаритные размеры кровати: -длина х ширина, мм, не более -высота, мм	 2270 x 1000 1880 min / 2305 max
Габаритные размеры поверхности лежания (длина х ширина), мм, не менее	2000 x 884
Высота ложа, поддерживающего матрац, от уровня пола (без матраца), мм, не более	450 min / 875 max
Углы наклона секций (рисунок 2): A – угол между спинной секцией и горизонталью B - угол между промежуточной секцией и горизонталью D - угол между поднятыми промежуточной секцией и ножной секцией C - угол между ножной секцией и горизонталью (в зависимости от угла B	 0º – 70º 0° – 55° 120° – 135° 0° – 45°

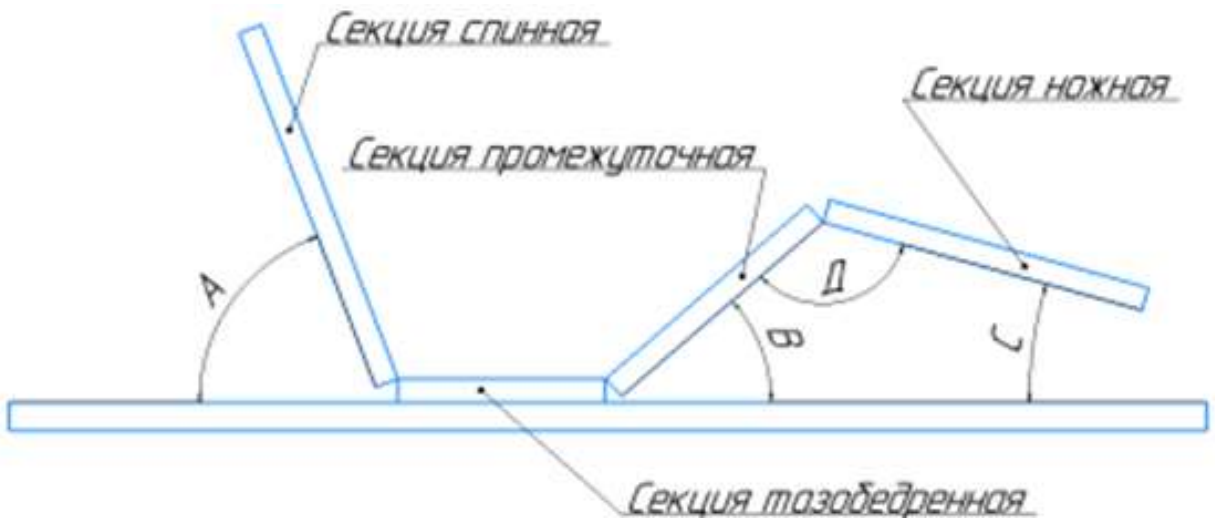


Рисунок 2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

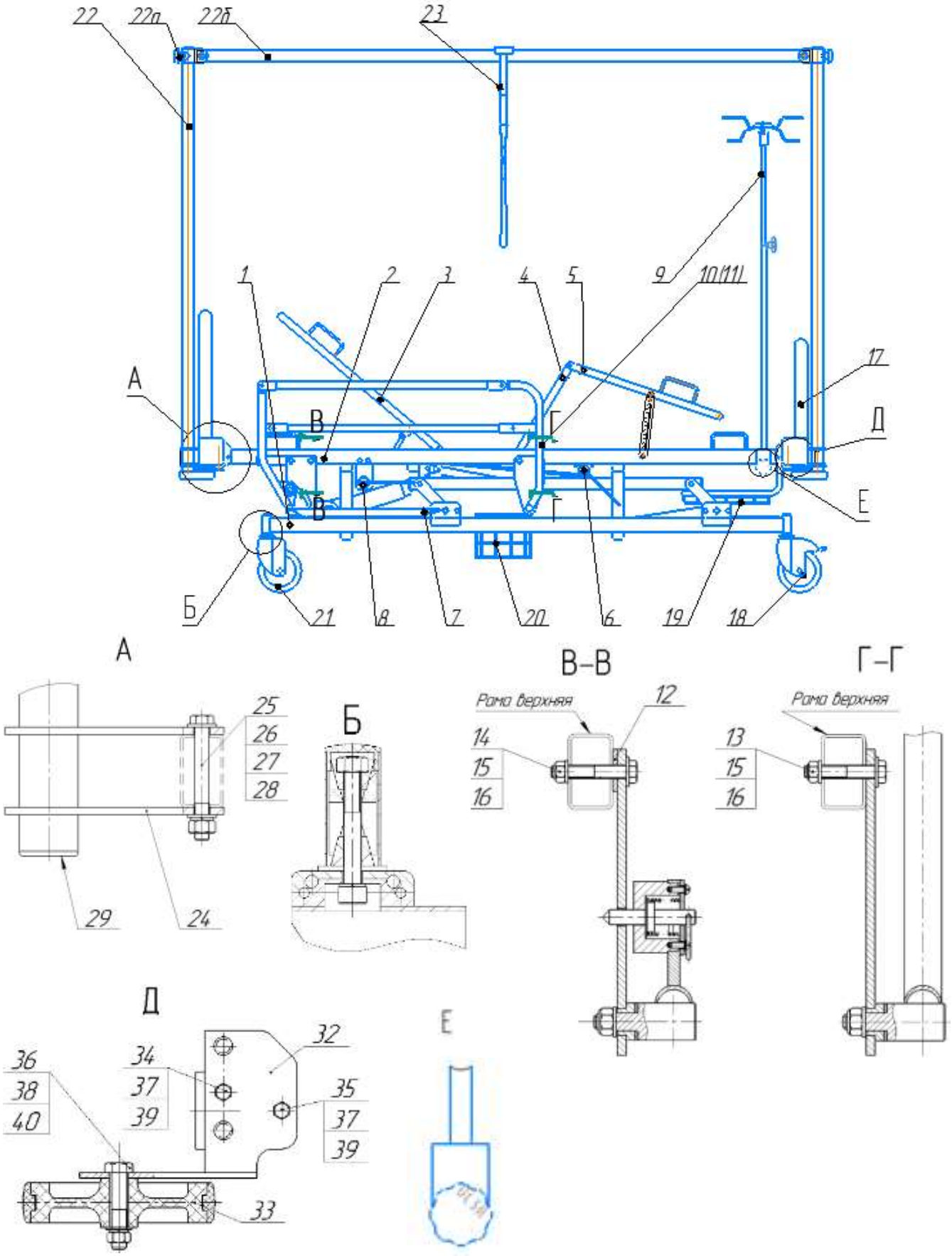


Рисунок 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.2 Перечень основных применяемых материалов для изготовления кровати: труба металлическая, прокат тонколистовой и проволока стальная, полиамид стеклонаполненный, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, пенополиуретан эластичный, клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием автоклавируемая.

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

1. Рама нижняя	- 1шт. (в сборе)		22. Стойка	- 2 шт.
2. Рама верхняя			22.а Рукоятка	- 2 шт.
3. Секция спинная			22.б Перемычка	- 1 шт
4. Секция промежуточная			23. Подвесная система с рукояткой	- 1 шт.
5. Секция ножная			24. Пластина	- 2 шт.
6. Рукоятка			25. Болт М10х80	- 4 шт.
7. Рычаг			26. Гайка М10 контрящая	- 4 шт.
8. Рукоятка			27. Шайба 10 пружинная	- 4 шт.
9. Стойка инфузионная *	- 1 шт.		28. Шайба 10	- 8 шт.
10. Ограждение левое (с кронштейнами)	- 1 шт.	Ограждение левое *, ограждение правое*	29. Заглушка	- 2 шт.
11. Ограждение правое (с кронштейнами)	- 1 шт.		32. Кронштейн	- 4 шт.
12. Пластина	- 2 шт.		33. Амортизатор	- 4 шт.
13. Болт М8х45	- 4 шт.		34. Болт М6х16	- 4 шт.
14. Болт М8х50	- 4 шт.		35. Болт М6х45	- 4 шт.
15. Гайка М8 контрящая	- 8 шт.		36. Болт М10х55	- 4 шт.
16. Шайба 8	- 8 шт.		37. Гайка М6 контрящая	- 8 шт.
17. Спинка (высокая, низкая)	- 2 шт.		38. Гайка М10 контрящая	- 4 шт.
18. Колесо с тормозом	- 2 шт.		39. Шайба 6	- 8 шт.
19. Кронштейн для судна *	- 1 шт.		40. Шайба 10	- 4 шт.
20. Держатель мочеприемника *	- 1 шт.		41. Матрац с наматрацником *	- 1 шт.
21. Колесо без тормоза	- 2 шт		Руководство по эксплуатации	- 1 экз.

Рама Балканского*

Примечание:

1.* По требованию заказчика составляющие могут не поставляться либо поставляться самостоятельно за отдельную плату.

2. Нумерация перечислений соответствует позициям на рисунке 3.

3. Комплектующие поз. 12 - 16, 18, 21, 24-40 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. Проверьте комплектность. Проверьте целостность составляющих и наличие руководства по эксплуатации.

Внимание: Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

4.2 Установите колеса поз.18 и поз.21 на раме нижней поз.1 приподнимая поочередно углы рамы. Зафиксируйте колеса болтами с пружинными шайбами через раздвижные цапфы (находящиеся в комплекте с колесом) (см. вид Б).

Внимание! Колеса с тормозом поз.18 располагайте по диагонали рамы.

4.3 Закрепите кронштейны поз. 32 к раме верхней (см. вид Д), используя болты поз. 34, 35, гайки поз.37, шайбы поз. 39.

4.4 Закрепите амортизаторы поз. 33 (см. вид Д), используя болты поз.36, гайки поз. 38, шайбы поз. 40.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.5 Установите спинки поз.17 на кронштейны поз. 32, установленные на раме верхней поз.2.

4.6 Установите ограждение левое поз.10 и ограждение правое поз.11 (при их комплектации) на кровать, зафиксировав кронштейны ограждений на раме поз.2 и закрепив их болтами поз.13, поз.14, гайками поз.15 и шайбами поз.16 предварительно установив пластины поз.12 (см. вид В-В).

4.7 При комплектации рамой Балканского (поз.22 - поз.29) установите стойки рамы Балканского поз.22 приваренными пластинами на раму верхнюю поз.2 у изголовья и ног больного и, установив пластины поз.24, зафиксируйте их болтами поз.25, гайками поз.26 и шайбами поз.27, 28 (см. вид А). Установите заглушки поз.29. На перемычку рамы Балканского поз.22б подвесьте подвесную систему с рукояткой поз.23. Установите перемычку на стойках на необходимой высоте и закрепите рукоятками поз. 22а.

4.8 При комплектации кронштейном для судна поз.19 и держателем мочеприемника поз.20 установите их в нижней части рамы нижней поз.1.

4.9 При комплектации стойкой инфузионной поз.9 закрепите ее на раме верхней поз.2 в любом свободном месте, посредством рукоятки (см. вид Е).

4.10 На раму верхнюю поз. 2 положите матрац с наматрацником поз. 41.

Кровать готова к использованию.

5 Использование изделия

5.1 При первоначальном и перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

• колеса с тормозом заблокированы;

• отсутствуют препятствия (конечности пациента, предметы, дополнительное оборудование, кабельные желоба и т.п.) мешающие регулировке кровати;

• все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к использованию кровати.

5.2 Перед первым и повторным использованиями необходимо почистить и продезинфицировать кровать:

- протирайте кровать тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим составом;
- не скребите поверхности;
- после чистки кровати дайте ей хорошо просохнуть.

ВНИМАНИЕ: Не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как металлические губки и сильнодействующие очистители или растворители. Это может привести к повреждению оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.

5.3 Для неподвижной установки кровати необходимо застопорить колеса с тормозом поз.18 с помощью легкого нажатия носком туфли на стопорные педали. Для придания движения кровати необходимо поднять стопорные педали.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.4 Высота ручки в сборе поз. 23 на каркасе кронштейна переставного поз. 22 регулируется затяжкой или ослаблением регулировочного ремня.

5.5 Ограждения могут использоваться как в сложенном так и в разложенном состоянии.

Для раскладывания и неподвижной установки ограждений поз. 10 и поз. 11 потяните их к изголовью кровати до упора, потяните на себя кольцо с осью, введите ось в отверстие.

Для складывания ограждений поз. 10 и поз. 11 потяните кольцо с осью на себя и выведите ось из отверстия, сложите ограждения.

5.6 Поднятие и опускание спинной секции поз.3:

- для увеличения угла наклона необходимо взявшись рукой за ручку, расположенную на спинной секции, поднять ее вверх до нужного угла и отпустить. Секция зафиксируется;

- для уменьшения угла наклона необходимо одной рукой приподнять секцию за ручку, расположенную на спинной секции, второй рукой приподнять рукоятку поз.8, опустить секцию на нужный угол, и зафиксировать ее, отпустив рукоятку поз.8.

5.7 Поднятие и опускание промежуточной секции:

- для поднятия промежуточной секции поз. 4 необходимо поднять рукоятку поз.6. Секция начнет подниматься. Опускание рукоятки поз.6 зафиксирует секцию в нужном положении.

- для опускания промежуточной секции необходимо поднять рукоятку поз.6 и, удерживая ее в верхнем положении, нажать на секцию, опустить ее в нужное положение и опустить рукоятку поз. 6.

5.8 Поднятие или опускание ножной секции производится одновременно с поднятием или опусканием промежуточной секции.

Для дополнительного изменения угла наклона ножной секции необходимо:

- для увеличения угла наклона необходимо взявшись рукой за ручку, расположенную на ножной секции, поднять ее вверх и зафиксировать в одном из выбранных положений на рычаге;

- для уменьшения угла наклона необходимо приподнять ножную секцию до упора на рычаге взявшись за ручку, второй рукой опустить секцию на раму.

При этом ножную секцию нельзя бросать, а спокойно опустить на раму.

5.9 Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов. Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

5.10 Смазывайте движущиеся металлические части кровати Литолом-24 или аналогичным по своему составу веществом каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

6 Меры безопасности

6.1 Перед каждым использованием необходимо проверять прочность крепления составляющих во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование кровати ненадлежащим образом может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

• использование для целей, не относящихся к нормальной функции больничной кровати, предназначенной для интенсивной или обычной терапии,

• использование кровати в барокамере,

• использование кровати, функций, принадлежностей или перемещение кровати детьми или неуполномоченными лицами,

• размещение каких-либо предметов или оборудования на колесах или их использование в качестве опоры для человека,

• использование кровати с нагрузками, превышающими предельную,

• перемещение кровати, если два колеса заблокированы,

• использование кровати на улице или транспортировка пациентов в кровати в автомобиле,

• перемещение кровати по мягкому грунту,

• перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).

7 Хранение, транспортирование, утилизация

7.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений и действия химически активных веществ.

7.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

7.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырье» и «Втормет».

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации кровати – 24 месяца с момента реализации через торговую сеть, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Срок службы кровати - 5 лет.

8.3 Юридический адрес изготовителя: 212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96.

Тел.: (0222) 65-07-32, 65-07-40 Факс (0222) 65-07-41. Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa_ garden@tut.by

Штамп комплектовщика метизов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 15.19.00.00.00.000 - 01 РЭ кровати медицинской ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП"

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии. Внешний вид кровати медицинской ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП" приведен на рисунке 1.

Кровать медицинская ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП" удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кровать медицинская ИЯУБ 15.19 - 01 "Юнова-4ГП" (далее по тексту – кровать) предназначенные для лечения, реанимации и наблюдения за пациентом в лечебных учреждениях и домашних условиях и соответствует требованиям ТУ BY 700049597.049-2021.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1.2 Ложе кровати состоит из четырех секций: секция спинная, секция тазобедренная, секция промежуточная, секция ножная (см. рисунок 2). Секция спинная, секция промежуточная, секция ножная регулируются по углу наклона. Рама регулируется по высоте - «вверх-вниз» нажатием на рычаг поз. 7.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики кровати приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование технической характеристики	Величина технической характеристики
Предельная рабочая нагрузка кровати, кг, не более, представляющая собой сумму нагрузок: - пациент - матрац - принадлежности	240 205 20 15
Масса кровати, кг, не более	131
Габаритные размеры кровати: -длина х ширина, мм, не более -высота, мм	 2270 x 1000 1880 min / 2305 max
Габаритные размеры поверхности лежания (длина х ширина), мм, не менее	2000 x 884
Высота ложа, поддерживающего матрац, от уровня пола (без матраца), мм, не более	450 min / 875 max
Углы наклона секций (рисунок 2): A – угол между спинной секцией и горизонталью B - угол между промежуточной секцией и горизонталью D - угол между поднятыми промежуточной секцией и ножной секцией C - угол между ножной секцией и горизонталью (в зависимости от угла B	 0º – 70º 0° – 55° 120° – 135° 0° – 45°

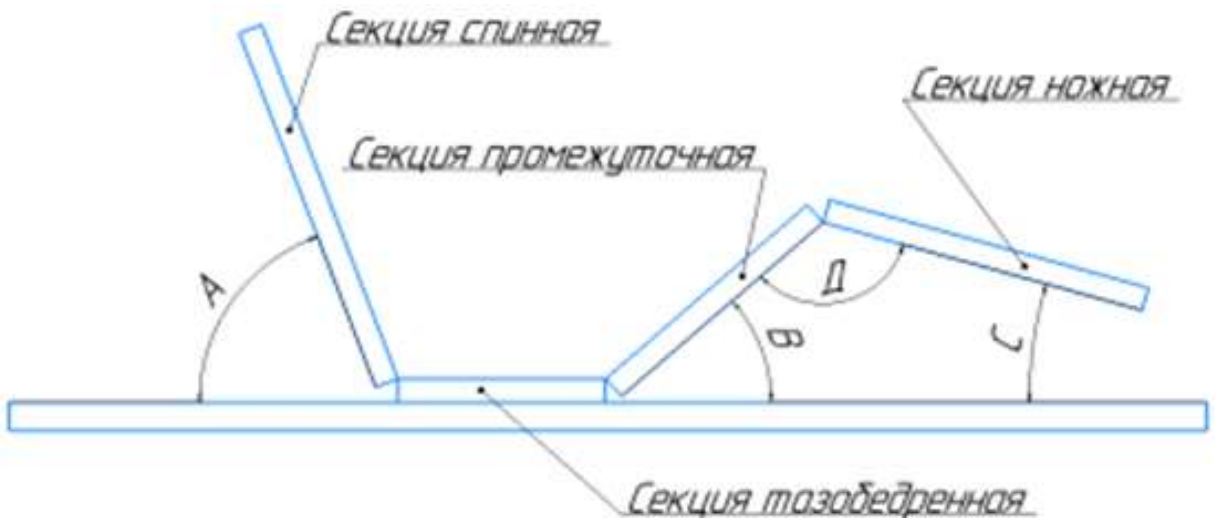


Рисунок 2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

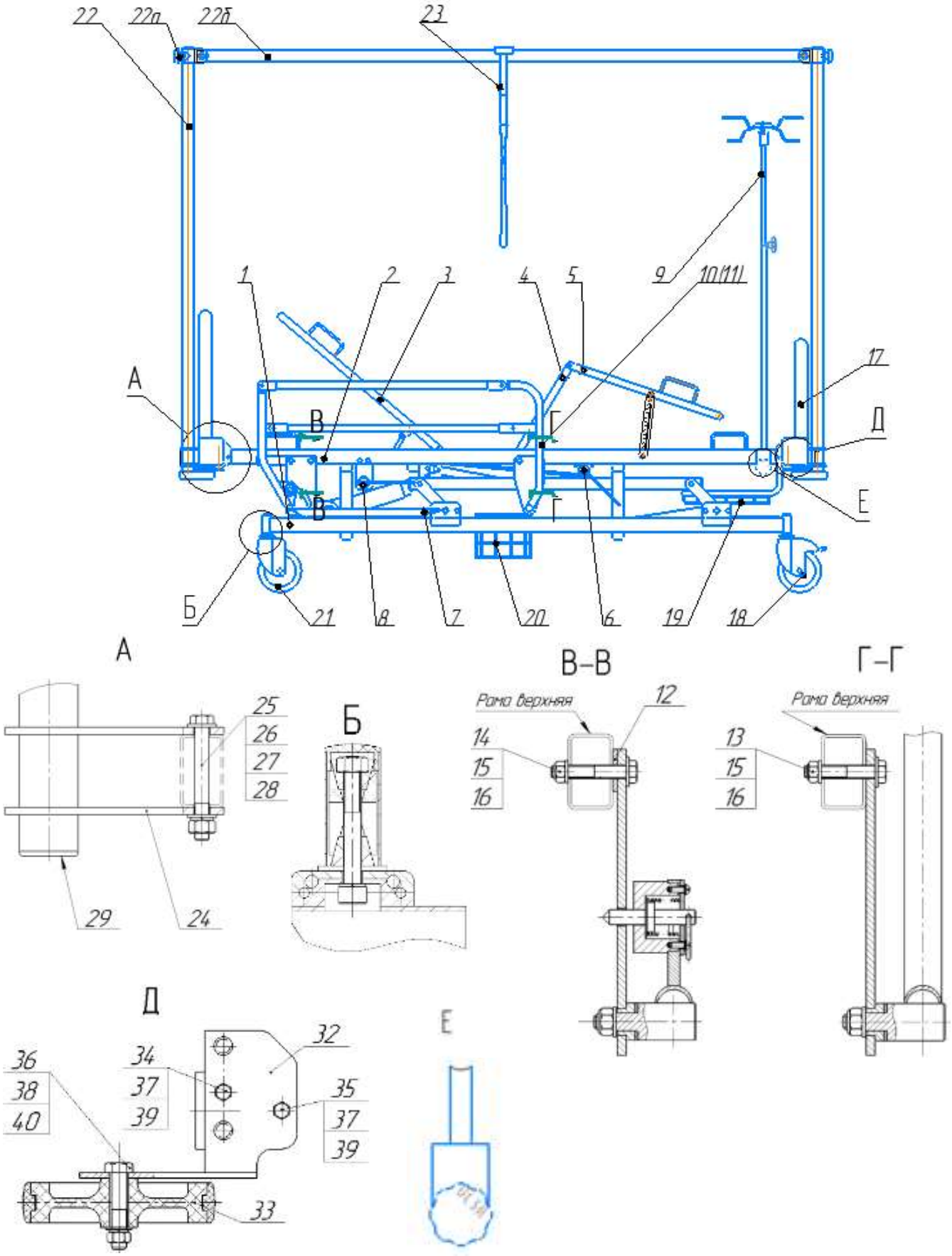


Рисунок 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.2 Перечень основных применяемых материалов для изготовления кровати: труба металлическая, прокат тонколистовой и проволока стальная, полиамид стеклонаполненный, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, пенополиуретан эластичный, клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием автоклавируемая.

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

1. Рама нижняя	- 1шт. (в сборе)		22. Стойка	- 2 шт.
2. Рама верхняя			22.а Рукоятка	- 2 шт.
3. Секция спинная			22.б Перемычка	- 1 шт
4. Секция промежуточная			23. Подвесная система с рукояткой	- 1 шт.
5. Секция ножная			24. Пластина	- 2 шт.
6. Рукоятка			25. Болт М10х80	- 4 шт.
7. Рычаг			26. Гайка М10 контрящая	- 4 шт.
8. Рукоятка			27. Шайба 10 пружинная	- 4 шт.
9. Стойка инфузионная *	- 1 шт.		28. Шайба 10	- 8 шт.
10. Ограждение левое (с кронштейнами)	- 1 шт.	Ограждение левое *, ограждение правое*	29. Заглушка	- 2 шт.
11. Ограждение правое (с кронштейнами)	- 1 шт.		32. Кронштейн	- 4 шт.
12. Пластина	- 2 шт.		33. Амортизатор	- 4 шт.
13. Болт М8х45	- 4 шт.		34. Болт М6х16	- 4 шт.
14. Болт М8х50	- 4 шт.		35. Болт М6х45	- 4 шт.
15. Гайка М8 контрящая	- 8 шт.		36. Болт М10х55	- 4 шт.
16. Шайба 8	- 8 шт.		37. Гайка М6 контрящая	- 8 шт.
17. Спинка (высокая, низкая)	- 2 шт.		38. Гайка М10 контрящая	- 4 шт.
18. Колесо с тормозом	- 2 шт.		39. Шайба 6	- 8 шт.
19. Кронштейн для судна *	- 1 шт.		40. Шайба 10	- 4 шт.
20. Держатель мочеприемника *	- 1 шт.		41. Матрац с наматрацником *	- 1 шт.
21. Колесо без тормоза	- 2 шт		Руководство по эксплуатации	- 1 экз.

Рама Балканского*

Примечание:

1.* По требованию заказчика составляющие могут не поставляться либо поставляться самостоятельно за отдельную плату.

2. Нумерация перечислений соответствует позициям на рисунке 3.

3. Комплектующие поз. 12 - 16, 18, 21, 24-40 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. Проверьте комплектность. Проверьте целостность составляющих и наличие руководства по эксплуатации.

Внимание: Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

4.2 Установите колеса поз.18 и поз.21 на раме нижней поз.1 приподнимая поочередно углы рамы. Зафиксируйте колеса болтами с пружинными шайбами через раздвижные цапфы (находящиеся в комплекте с колесом) (см. вид Б).

Внимание! Колеса с тормозом поз.18 располагайте по диагонали рамы.

4.3 Закрепите кронштейны поз. 32 к раме верхней (см. вид Д), используя болты поз. 34, 35, гайки поз.37, шайбы поз. 39.

4.4 Закрепите амортизаторы поз. 33 (см. вид Д), используя болты поз.36, гайки поз. 38, шайбы поз. 40.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.5 Установите спинки поз.17 на кронштейны поз. 32, установленные на раме верхней поз.2.

4.6 Установите ограждение левое поз.10 и ограждение правое поз.11 (при их комплектации) на кровать, зафиксировав кронштейны ограждений на раме поз.2 и закрепив их болтами поз.13, поз.14, гайками поз.15 и шайбами поз.16 предварительно установив пластины поз.12 (см. вид В-В).

4.7 При комплектации рамой Балканского (поз.22 - поз.29) установите стойки рамы Балканского поз.22 приваренными пластинами на раму верхнюю поз.2 у изголовья и ног больного и, установив пластины поз.24, зафиксируйте их болтами поз.25, гайками поз.26 и шайбами поз.27, 28 (см. вид А). Установите заглушки поз.29. На перемычку рамы Балканского поз.22б подвесьте подвесную систему с рукояткой поз.23. Установите перемычку на стойках на необходимой высоте и закрепите рукоятками поз. 22а.

4.8 При комплектации кронштейном для судна поз.19 и держателем мочеприемника поз.20 установите их в нижней части рамы нижней поз.1.

4.9 При комплектации стойкой инфузионной поз.9 закрепите ее на раме верхней поз.2 в любом свободном месте, посредством рукоятки (см. вид Е).

4.10 На раму верхнюю поз. 2 положите матрац с наматрацником поз. 41.

Кровать готова к использованию.

5 Использование изделия

5.1 При первоначальном и перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

• колеса с тормозом заблокированы;

• отсутствуют препятствия (конечности пациента, предметы, дополнительное оборудование, кабельные желоба и т.п.) мешающие регулировке кровати;

• все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к использованию кровати.

5.2 Перед первым и повторным использованиями необходимо почистить и продезинфицировать кровать:

- протирайте кровать тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим составом;
- не скребите поверхности;
- после чистки кровати дайте ей хорошо просохнуть.

ВНИМАНИЕ: Не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как металлические губки и сильнодействующие очистители или растворители. Это может привести к повреждению оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.

5.3 Для неподвижной установки кровати необходимо застопорить колеса с тормозом поз.18 с помощью легкого нажатия носком туфли на стопорные педали. Для придания движения кровати необходимо поднять стопорные педали.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.4 Высота ручки в сборе поз. 23 на каркасе кронштейна переставного поз. 22 регулируется затяжкой или ослаблением регулировочного ремня.

5.5 Ограждения могут использоваться как в сложенном так и в разложенном состоянии.

Для раскладывания и неподвижной установки ограждений поз. 10 и поз. 11 потяните их к изголовью кровати до упора, потяните на себя кольцо с осью, введите ось в отверстие.

Для складывания ограждений поз. 10 и поз. 11 потяните кольцо с осью на себя и выведите ось из отверстия, сложите ограждения.

5.6 Поднятие и опускание спинной секции поз.3:

- для увеличения угла наклона необходимо взявшись рукой за ручку, расположенную на спинной секции, поднять ее вверх до нужного угла и отпустить. Секция зафиксируется;

- для уменьшения угла наклона необходимо одной рукой приподнять секцию за ручку, расположенную на спинной секции, второй рукой приподнять рукоятку поз.8, опустить секцию на нужный угол, и зафиксировать ее, отпустив рукоятку поз.8.

5.7 Поднятие и опускание промежуточной секции:

- для поднятия промежуточной секции поз. 4 необходимо поднять рукоятку поз.6. Секция начнет подниматься. Опускание рукоятки поз.6 зафиксирует секцию в нужном положении.

- для опускания промежуточной секции необходимо поднять рукоятку поз.6 и, удерживая ее в верхнем положении, нажать на секцию, опустить ее в нужное положение и опустить рукоятку поз. 6.

5.8 Поднятие или опускание ножной секции производится одновременно с поднятием или опусканием промежуточной секции.

Для дополнительного изменения угла наклона ножной секции необходимо:

- для увеличения угла наклона необходимо взявшись рукой за ручку, расположенную на ножной секции, поднять ее вверх и зафиксировать в одном из выбранных положений на рычаге;

- для уменьшения угла наклона необходимо приподнять ножную секцию до упора на рычаге взявшись за ручку, второй рукой опустить секцию на раму.

При этом ножную секцию нельзя бросать, а спокойно опустить на раму.

5.9 Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов. Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

5.10 Смазывайте движущиеся металлические части кровати Литолом-24 или аналогичным по своему составу веществом каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

6 Меры безопасности

6.1 Перед каждым использованием необходимо проверять прочность крепления составляющих во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование кровати ненадлежащим образом может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

• использование для целей, не относящихся к нормальной функции больничной кровати, предназначенной для интенсивной или обычной терапии,

• использование кровати в барокамере,

• использование кровати, функций, принадлежностей или перемещение кровати детьми или неуполномоченными лицами,

• размещение каких-либо предметов или оборудования на колесах или их использование в качестве опоры для человека,

• использование кровати с нагрузками, превышающими предельную,

• перемещение кровати, если два колеса заблокированы,

• использование кровати на улице или транспортировка пациентов в кровати в автомобиле,

• перемещение кровати по мягкому грунту,

• перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).

7 Хранение, транспортирование, утилизация

7.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений и действия химически активных веществ.

7.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

7.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырье» и «Втормет».

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации кровати – 24 месяца с момента реализации через торговую сеть, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Срок службы кровати - 5 лет.

8.3 Юридический адрес изготовителя: 212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96.

Тел.: (0222) 65-07-32, 65-07-40 Факс (0222) 65-07-41. Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa_ garden@tut.by

Штамп комплектовщика метизов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru