Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 30.19.00.000 РЭ
для стоек инфузионных ИЯУБ 30.19, -01

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии, внешний вид которого приведен на рисунках 1, 2.

Стойки инфузионные ИЯУБ 30.19, -01 (далее по тексту - стойка) удобны и безопасны в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право на незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.



Рисунок 1 – Общий вид стойки инфузионной ИЯУБ 30.19



Рисунок 2 – Общий вид стойки инфузионной ИЯУБ 30.19-01

Изм	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	ИЯУБ 30.19.00.000 РЭ		
Разраб.		Казакова			Стойка инфузионная	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Шупленков						
Н. контр.		Воропаева			Руководство по эксплуатации	ОАО «Ольса»		
Утв.		Круглов						

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взаим.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Основные сведения об изделии

1.1 Стойки инфузионные предназначены для удерживания (фиксации) на определенной высоте емкостей или одноразовых систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур (вливаний) медперсоналом в лечебных учреждениях или в домашних условиях и соответствуют требованиям ТУ BY 700049597.051-2021.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные стойки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические данные	Значение	
	ИЯУБ 30.19 (рисунок 1)	ИЯУБ 30.19-01 (рисунок 2)
Возможность быстрого перемещения стойки	-	наличие роликов
Масса стойки, кг, не более	2,3	2,5
Габаритные размеры стойки (длина х ширина х высота) мм, не более	638х638х1150…2000	638х638х1200…2050
Статическая нагрузка, кг, не более	8±0,2	

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки стоек: труба металлическая, лист и проволока стальные, краска порошковая полиэфирная, пленка полиэтиленовая, картон гофрированный.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки стойки инфузионной ИЯУБ 30.19 включает в себя:

1. Штатив	- 1 шт.	6. Заглушка	- 4 шт.
2. Стойка в сборе	- 1 шт.	7. Колпачок	- 8 шт.
3. Опора	- 2 шт.	8. Винт М6х75	- 4 шт.
4. Опора	- 2 шт.	9. Шайба 6	- 8 шт.
5. Подножник	- 4 шт.	10. Гайка М6	- 4 шт.
		Руководство по эксплуатации	- 1 экз.

Примечания: 1. Номера перечислений составляющих соответствуют номерам позиций на рисунке 3.1, 3.3

2. Комплектующие поз. 5-10 упакованы в пакет.

3.2 Комплект поставки стойки инфузионной ИЯУБ 30.19-01 включает в себя:

1. Штатив	- 1 шт.	7. Колпачок	- 8 шт.
2. Стойка в сборе	- 1 шт.	8. Винт М6х75	- 4 шт.
3. Опора в сборе	- 2 шт.	9. Шайба 6	- 8 шт.
4. Опора в сборе	- 2 шт.	10. Гайка М6	- 4 шт.
5. Ролик	- 4 шт.	11. Гайка М8	- 4 шт.
6. Заглушка	- 8 шт.	Руководство по эксплуатации	- 1 экз.

Примечания: 1. Номера перечислений составляющих соответствуют номерам позиций на рисунке 3.2, 3.3

2. Комплектующие поз. 5-10 упакованы в пакет.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

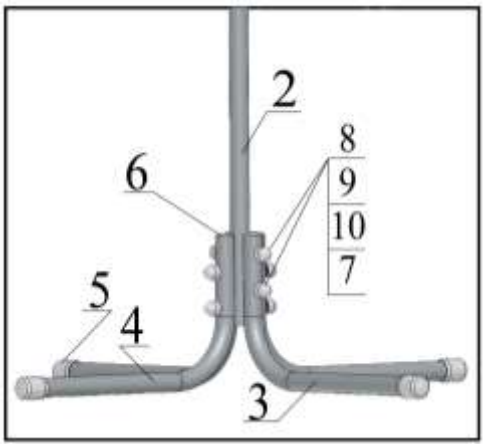


Рисунок 3.1

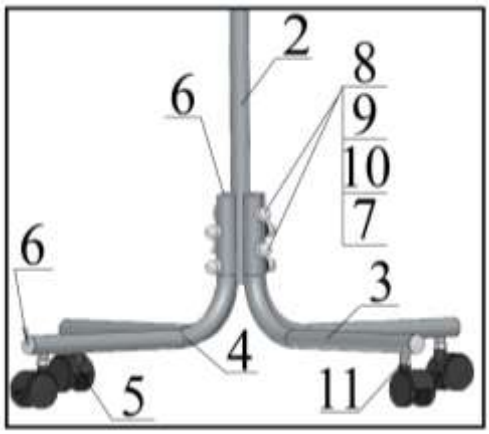


Рисунок 3.2

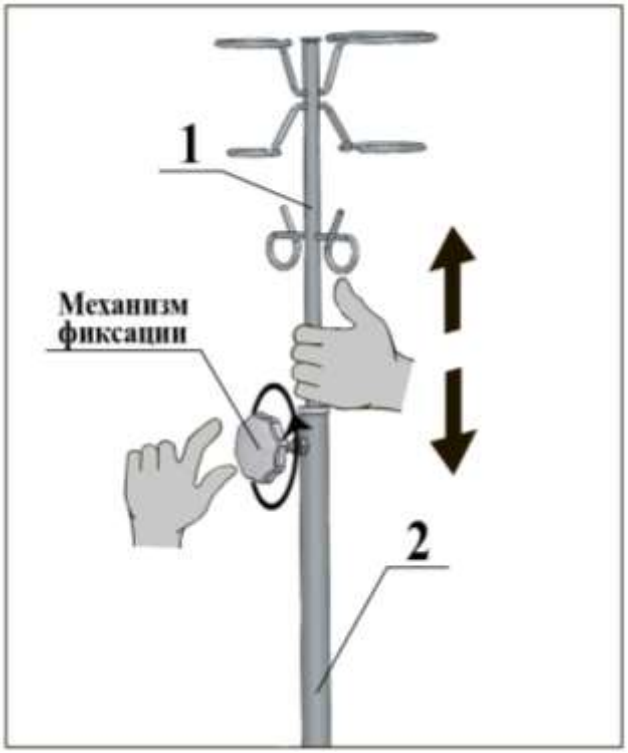


Рисунок 3.3

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.

4.2 Подготовка к использованию стойки инфузионной ИЯУБ 30.19 (рисунок 3.1, 3.3):

- Соедините опоры поз. 3 и поз. 4 со стойкой в сборе поз.2 при помощи винтов поз. 8, шайб поз. 9 и гаек поз. 10. На гайки установите колпачки поз. 7. Внимание! Опоры поз. 3 и поз. 4 отличаются уровнем расположения отверстий для возможности их соединения со стойкой в сборе поз. 2;

- Установите в опоры поз. 3 и поз. 4 заглушки поз. 6 и подножники поз. 5 (см. рисунок 3.1);

- Установите стойку в сборе поз. 2 с составляющими на горизонтальную поверхность;

- В стойку в сборе поз. 2 установите штатив поз. 1 и зафиксируйте его на необходимой высоте при помощи механизма фиксации (рисунок 3.3).

Стойка инфузионная готова к использованию.

4.3 Подготовка к использованию стойки инфузионной ИЯУБ 30.19-01 (рисунок 3.2, 3.3):

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Соедините опоры в сборе поз. 3 и поз. 4 со стойкой в сборе поз.2 при помощи винтов поз. 8, шайб поз. 9 и гаек поз. 10. На гайки установите колпачки поз. 7.

Внимание! Опоры поз. 3 и поз. 4 отличаются уровнем расположения отверстий для возможности их соединения со стойкой в сборе поз. 2;

- Установите гайки поз. 11 на оси роликов поз. 5;

- Вставьте ролики поз. 5 во втулки опор в сборе поз. 3 и поз. 4, отрегулируйте ролики поз. 5 по высоте и зафиксируйте в выбранном положении гайками поз. 11 (см. рисунок 3.2).

- Установите в опоры в сборе поз.3 и поз.4 заглушки поз. 6 (см. рисунок 3.2);

- Установите стойку в сборе поз. 2 с опорами поз. 3 и поз. 4 на горизонтальную поверхность;

- В стойку в сборе поз. 2 установите штатив поз. 1 и зафиксируйте его на необходимой высоте при помощи механизма фиксации (рисунок 3.3).

Стойка инфузионная готова к использованию.

5 Использование изделия

5.1 Регулировка высоты штатива поз. 1 осуществляется при помощи механизма фиксации (см. рисунок 3.3).

5.2 В стойке инфузионной ИЯУБ 30.19-01 (рисунок 2) предусмотрены ролики для легкого перемещения стойки.

6 Меры безопасности

6.1 **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется *не реже одного раза в месяц* проверять затяжку винтовых соединениях и, при необходимости, их подтянуть во избежание расшатывания и разрушения стойки.

6.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоответствующее использование стойки может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

6.3 Стойку инфузионную применять только в исправном состоянии.

6.4 Стойку инфузионную устанавливать на ровную горизонтальную поверхность.

6.5 Держатели на штативе поз. 1 предназначены только для удерживания (фиксации) на определенной высоте емкостей или одноразовых систем с лекарственными растворами.

7 Хранение, транспортирование, утилизация

7.1 Стойка инфузионная должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений и действия химически активных веществ.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7.2 Стойка инфузионная транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

7.3 После истечения срока службы стойки и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части стойки подлежат сдаче в «Утильсырье» и «Втормет».

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.

8.2 Средний срок службы стойки – не менее 3 лет.

8.3 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, претензии не принимаются.

8.4 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия: www.olsa.by E-mail: Olsa_garden@tut.by

Печать комплектовщика метизов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru