ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Г-21
ПАСПОРТ


1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Г-21 предназначена для перевозки различных грузов в учреждениях здравоохранения: изделий, имеющих функциональное медицинское назначение, средств для поддержания гигиенического состояния помещений, а также других средств, обеспечивающих жизнедеятельность и функционирование этих учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 200;
- длина тележки, не более, мм - 1000
- ширина тележки, не более, мм - 600
- высота, не более мм: - 1100
- масса тележки не более, кг - 21
- диаметр колес, мм - 160

При изготовлении тележки использованы следующие материалы:
труба стальная 16х1,0, труба профильная 20х20х1,5, лист х/к 1,5мм..
Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь»

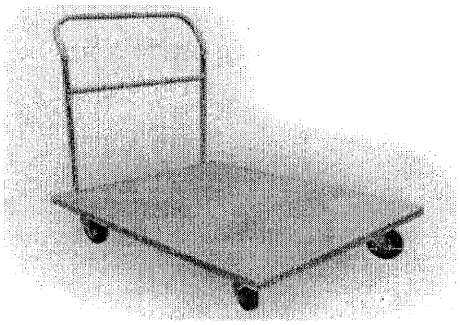

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
1.Тележка – 1 шт.
2.Колеса поворотные Ф 160 мм –2шт.
3.Колеса неповоротные Ф 160 мм – 2 шт.
4.Паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Г-21 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Г-21.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Г-21 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011. изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

М.П.

Директор А.А. Ахременко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Г-23
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Г-23 предназначена для перевозки различных грузов в учреждениях здравоохранения: изделий, имеющих функциональное медицинское назначение, средств для поддержания гигиенического состояния помещений, а также других средств, обеспечивающих жизнедеятельность и функционирование этих учреждений.

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Г-23 применяется в медицинских, санаторно-курортных и дошкольных учреждениях. Предназначена для транспортировки грязного белья, перевязочного материала, медицинских препаратов, инструментов, биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 200 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 200;
- длина тележки, не более, мм - 1000
- ширина тележки, не более, мм - 600
- высота, не более мм: - 1100
- масса, не более, кг - 30
- диаметр колес, мм - 160

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 20х20х1,5, лист х/к 1,5. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 160мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Г-23 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Г-23

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Г-23 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

м.п.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Г-25
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Г-25 применяется в медицинских, санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для транспортировки грязного белья, перевязочного материала, медицинских препаратов, инструментов, биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 200 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 200;
- длина тележки, не более, мм - 1000
- ширина тележки, не более, мм - 600
- высота, не более мм: - 1100
- масса, не более, кг - 25
- диаметр колес, мм - 160

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 20х20х1,5, лист х/к 1,5. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 160мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Г-25 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Г-25

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Г-25 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку_____

М.П.




Директор С.А. Дубинский

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Т-01
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Т-01 применяется в медицинских, санаторно-курортных и дошкольных учреждениях. Предназначена для транспортировки медицинских препаратов, инструментов, биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

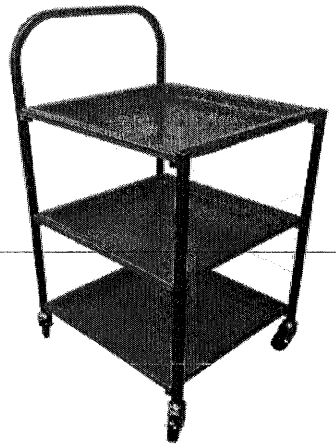

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 30;
- длина тележки, не более, мм - 540
- ширина тележки, не более, мм - 510
- высота, не более мм: - 1050
- масса, не более, кг - 13
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89.. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Т-01 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Т-01

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Т-01 соответствует требованиям, изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку_____
М.П.

Директор А.А. Ахременко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Т-02
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Т-02 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для транспортировки пищи, медицинских препаратов, инструментов, биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 30;
- длина тележки, не более, мм - 790
- ширина тележки, не более, мм - 510
- высота, не более мм: - 910
- масса, не более, кг - 13
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75мм – 4 шт(два из которых с тормозом).;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Т-02 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Т-02

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Т-02 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку_____

м.п.

Директор А.А. Артемьянко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Т-03
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Т-03 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для транспортировки медицинских препаратов, инструментов, биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 30;
- длина тележки, не более, мм - 790
- ширина тележки, не более, мм - 510
- высота, не более мм: - 910
- дорожный просвет, не менее, мм - 130
- масса, не более, кг - 13
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Т-03 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Т-03

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Т-03 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

М.П.

Директор А.А. Антонюк

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Т-10
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-Т-10 применяется в медицинских, санаторно-курортных и дошкольных учреждениях. Предназначена для транспортировки биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 80 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 80;
- длина тележки, не более, мм - 660
- ширина тележки, не более, мм - 540
- высота, не более мм: - 1850
- масса, не более, кг - 16
- диаметр колес, мм - 75

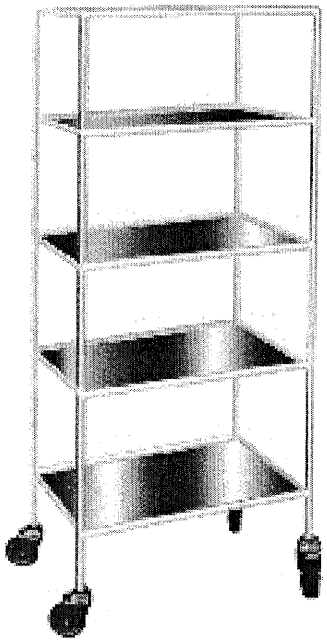

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: лист из нержавеющей стали, труба профильная 15х15х1,5, 4 полки из нержавеющей стали.
Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель ОДО «НТМ-2000» гарантирует нормальную работу ТМ-Т-10 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Т-10.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Т-10 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____
М.П.

НТМ-2000

Директор А.А. Ахремчик

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-Т-12
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ


Тележка медицинская ТМ-Т-12 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для транспортировки медицинских препаратов, инструментов, , изделий медицинского назначения общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 30;
- длина тележки, не более, мм - 790
- ширина тележки, не более, мм - 510
- высота, не более мм: - 910
- масса, не более, кг - 13
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ

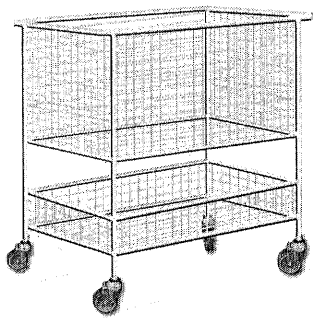

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-Т-12 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-Т-12

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-Т-12 соответствует требованиям, изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку_____

М.П.

Директор А.А. Ярмоленк


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская уборочная ТМ-У-01
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-У-01 применяется в медицинских, и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для проведения текущих и генеральных уборок в помещениях данных учреждений, транспортировки дезинфицирующих и моющих средств, санитарно-гигиенических приспособлений и принадлежностей и т.п. к месту уборки, сбора отходов группы А и Б общей массой до 40 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

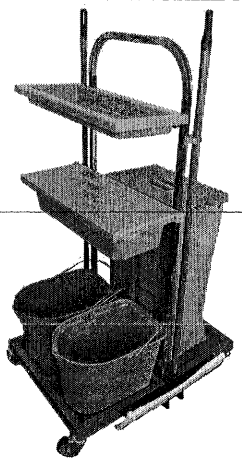

- грузоподъёмность, кг - 40;
- длина тележки, не более, мм - 680
- ширина тележки, не более, мм - 660
- высота, не более мм, - 1140
- масса, не более, кг - 11
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16, труба профильная 15х15, круг диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89.

Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

Мешок-контейнер из клеенки медицинской устойчив к многократной дезинфекции химическим методом при использовании средств разрешенных к применению в РБ по ОСТ 42-21-2-85.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1;
- ведро (12л) – 2 шт.;
- швабра – 2 шт.
- поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.;
- поддон для установки мешка – 1шт.;
- контейнер для установки приспособлений с крышкой (7л) (510х220х110мм.) – 1 шт.;
- поддон для установки приспособлений (505х225х50мм.) – 1 шт.;
- мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.;
- крышка пластиковая для мешка для сбора отходов – 1 шт.;
- кронштейн для установки швабр – 2 шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Не допускается перегружать тележку.
6. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
9. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
10. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
11. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-У-01 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-01

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-У-01 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

М.П.

Директор А.А. Ахременко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-У-02
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-У-02 предназначена для текущей уборки помещений медучреждений, транспортировки двух ведер с моющим раствором и двух швабр к месту уборки в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 40;
- длина тележки, не более, мм - 450
- ширина тележки, не более, мм - 510
- высота, не более мм, - 1050
- масса, не более, кг - 8
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89
Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1 шт.;
- ведро 12л. – 2шт.;
- швабра – 2 шт.;
- емкость с крышкой на 5л.(510х225х110) и поддоном для выполнения отжима мопа швабры -1 шт.;
- емкость (240х90х65) для размещения отжимного устройства – 1 шт.;
- механическое отжимное устройство с валиком – 1 шт.;
- поддон для установки ведер пластиковый – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Отжим мопа производится следующим образом: моп укладывается на поддон 5-литровой емкости и несколькими поступательными движениями валиком отжимного устройства производится его отжим. Отжатый моющий раствор после этого сливается в соответствующее ведро.
Не подвергайте оборудование чрезмерному физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-У-02 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-02

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-У-02 соответствует требованиям, изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм. №2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Подпись ответственного за приемку_____

М.П

НТЦМ-2000

Директор А.А. Антемиюк


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-У-03
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-У-03 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для «безведерной» уборки помещений в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

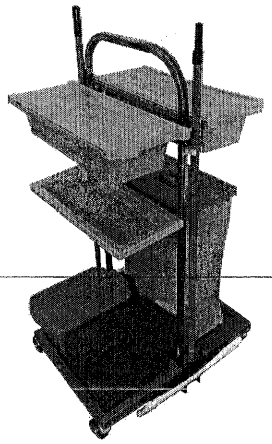

- грузоподъёмность, кг - 40;
- длина тележки, не более, мм - 680
- ширина тележки, не более, мм - 630
- высота, не более мм, - 1210
- масса, не более, кг - 13,5
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16, труба профильная 15х15, круг диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89.

Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

Мешок-контейнер из клеенки медицинской устойчив к многократной дезинфекции химическим методом при использовании средств разрешенных к применению в РБ по ОСТ 42-21-2-85.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1;
- швабра – 2 шт.;
- контейнер с крышкой для мопов, подготовленных для «безведерной» уборки(7л.) – 2шт.;
- комплект из 5 насадок к швабре – 2шт.;
- поддон для установки мешка для отходов – 1шт.;
- контейнер с крышкой для отработанных мопов (9л.) – 2 шт.;
- поддон для установки контейнеров для отработанных мопов – 1 шт.;
- поддон для установки приспособлений (505х225х50мм.) – 1 шт.;
- мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.;
- крышка пластиковая для мешка для сбора отходов – 1 шт.;
- кронштейн для установки швабр – 2шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается перегружать тележку.
5. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
6. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
7. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов..
8. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
9. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
10. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения людей, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-У-03 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-03

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-У-03 соответствует требованиям, изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку_____

М.П.

Республика Беларусь, Могилевская область, г. Осиповичи, НТМ-2000

Директор

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-У-06
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка ТМ-У-06 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для транспортировки грязного белья, перевязочного материала общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

применяется в медицинских, санаторно-курортных и дошкольных учреждениях. Предназначена для транспортировки грязного белья, перевязочного материала, медицинских препаратов, инструментов, биксов, изделий медицинского назначения общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

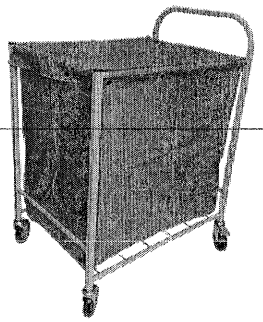

- грузоподъёмность, кг	- 30;
-длина тележки, не более, мм	- 850
- ширина тележки, не более, мм	- 530
- высота, не более мм:	- 820
- масса, не более, кг	- 8
- диаметр колес, мм	- 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5.

Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

Мешок-контейнер из клеенки медицинской устойчив к многократной дезинфекции химическим методом при использовании средств разрешенных к применению в РБ по ОСТ 42-21-2-85.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- мешок – контейнер из плотной полиэстер ткани для сбора белья - 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-У-06 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-06

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-У-06 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

М.П


Директор А.А. Хмелевец

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-У-10
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-У-10 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для проведения текущей уборки транспортировки грязного белья, перевязочного материала, сбора отходов группы А и Б, дезинфицирующих и моющих средств, санитарно-гигиенических приспособлений и принадлежностей для уборки общей массой до 40 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

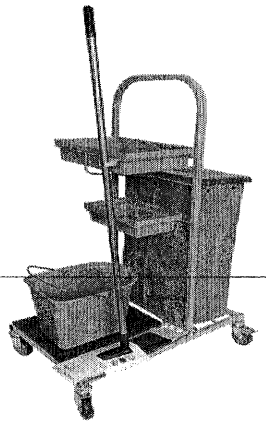

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг	- 30;
- длина тележки, не более, мм	- 680
- ширина тележки, не более, мм	- 420
- высота, не более мм:	- 1140
- масса, не более, кг	- 8,3
- диаметр колес, мм	- 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16, труба профильная 15х15, круг диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89.
Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь .
Мешок-контейнер из клеенки медицинской устойчив к многократной дезинфекции химическим методом при использовании средств разрешенных к применению в РБ по ОСТ 42-21-2-85.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- ведро 12л.– 1 шт.;
- швабра -1шт.;
- поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.;
- поддон для установки приспособлений (370х240х70мм.) – 1 шт.;
- поддон для установки приспособлений (290х170х70мм.) – 1 шт.;
- мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.
- крышка пластиковая для мешка из плотной полиэстер ткани – 1 шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-У-10 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТМ-У-10 соответствует требованиям, изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку_____
М.П.


Директор А.А. Авдеенко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-У-13
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-У-13 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для проведения текущих и генеральных уборок в помещениях данных учреждений. Обеспечивает сбор и транспортировку отходов группы А и Б, дезинфицирующих и моющих средств, санитарно-гигиенических приспособлений и принадлежностей и т.д. общей массой до 40 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

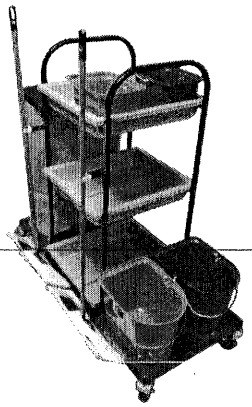

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- грузоподъёмность, кг - 40;
- длина тележки, не более, мм - 1160
- ширина тележки, не более, мм - 550
- высота, не более мм, - 1080
- масса, не более, кг - 17,7
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16, труба профильная 15х15х1,5, круг диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89.
Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.
Мешок-контейнер из клеенки медицинской устойчив к многократной дезинфекции химическим методом при использовании средств разрешенных к применению в РБ по ОСТ 42-21-2-85.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1;
- ведро 12л. – 2 шт.;
- швабра с мопом – 2 шт.
- поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.;
- поддон для установки мешка – 1шт.;
- поддон для установки приспособлений – 3 шт.;
- ведро 4л. – 2 шт.;
- мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.;
- крышка пластиковая для мешка для сбора отходов – 1 шт.;
- кронштейн для установки швабр – 2 шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов, людей.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения транспорта, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ТМ-У-13 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-13

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-У-13 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____

Подпись ответственного за приемку_____

М.П.

НТМ-2000

Директор А.А. Ахремчик


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕЛЕЖКА
медицинская ТМ-У-17
ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТМ-У-17 применяется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Предназначена для транспортировки чистого и грязного белья, перевязочного материала, при уборке помещений, может использоваться для транспортирования медицинских препаратов, инструментов, биксов, других изделий медицинского назначения общей массой до 30 кг в помещениях с полами, имеющими твердые покрытия (линолеум, паркет, бетон и проч.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

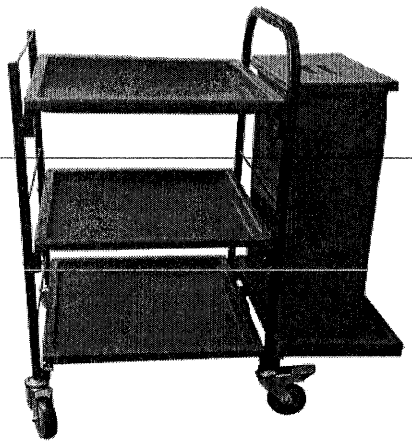

- грузоподъёмность, кг - 30;
- длина тележки, не более, мм - 900
- ширина тележки, не более, мм - 500
- высота, не более мм: - 810
- масса, не более, кг - 13,6
- диаметр колес, мм - 75

При изготовлении тележки использованы следующие материалы: труба стальная 16х1,0, труба профильная 15х15х1,5, пруток диаметр 5, полистирол ударопрочный ГОСТ 28250-89. Металлические поверхности тележки покрыты порошковой полимерной краской.

Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения РБ.

Мешок-контейнер из клеенки медицинской устойчив к многократной дезинфекции химическим методом при использовании средств разрешенных к применению в РБ по ОСТ 42-21-2-85.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тележка – 1шт.;
- колеса поворотные, диаметр 75мм – 4 шт.;
- мешок – контейнер плотной полиэстер ткани – 1 шт.;
- поддоны пластиковые – 4 шт;
- крышка пластиковая для мешка из плотной полиэстер ткани – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не подвергайте оборудование физическому воздействию и повреждению.
2. При работе всегда принимайте устойчивое положение, не допускающее потерю равновесия.
3. Не допускается складирование и перевозка на тележках материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
4. Не допускается беспорядочное укладка перевозимых материалов на тележки. Груз не должен выступать за боковые габариты тележки.
5. Транспортируемые и складируемые материалы, необходимо укладывать в устойчивое положение, используя лотки, приспособления тележек соответствующих размеров и габаритов.
6. Не допускается перегружать тележку.
7. Перед перемещением тележки необходимо определить маршрут движения. При необходимости освободить пути движения от посторонних предметов, мусора и т.п.
8. Перемещать тележку необходимо перед собой, удерживая ее двумя руками, избегая резких толчков, рывков.
9. При передвижении перемещать тележку необходимо плавно, следя за тем, чтобы на пути движения не было посторонних предметов.
10. Не допускается перемещать тележку «самоходом» (толчком, пускать под уклон и т.п.).
11. При установке тележки необходимо принимать меры по предотвращению ее самопроизвольного движения.
12. Не допускается оставлять и устанавливать тележки в проходах, на путях движения людей, перемещения грузов.

5.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тележки устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 15150 при транспортировании и при хранении - для условий хранения 1.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель ОДО «НТМ-2000» гарантирует нормальную работу ТМ-У-17 в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи ТМ-У-17

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТМ-У-17 соответствует требованиям изложенным в ТУ BY 190196707.007-2011, изм.№2 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

М.П.

Директор А.А. Ахременко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru