СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь
_____ Б.Н.Андросюк
«___»_____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ О.И.Швед
«___»_____ 20___ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ФАРТУК ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ФВН

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
РУП «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении»
_____Д.В.Гринько
«___»_____ 20___ г.

РАЗРАБОТАНО

Начальник участка
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ В.И. Федукович
«18» июня 20 20 г.

Ведущий технолог
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ Зубченко Е.Н.
«18» июня 20 20 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению санитарно-гигиенических изделий для лечебно-профилактических учреждений .

ГЛАВА 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящая инструкция распространяется на санитарно-гигиенических изделия многоразового использования фартуки влагонепроницаемые ФВН для лечебно-профилактических учреждений (далее по тексту – фартуки), предназначенные для ношения в лечебно-профилактических учреждениях медперсоналом и пациентами, требования к материалам по изготовлению этих изделий, устанавливает порядок их использования и утилизации, предназначена для органов и учреждений системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению.

ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Санитарно-гигиенические изделия создают оптимальные условия при проведении различного рода медицинских и других услуг. Эти фартуки обуславливают соблюдение санитарных правил в лечебно-профилактических учреждениях, помогают в проведении различных мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление условий жизни и труда человека. Применение фартуков в современных условиях позволяет рационально решать проблемы профилактики от внутрибольничных инфекций, способствует предупреждению профессиональных заражений медицинских работников. Использование санитарно-гигиенических изделий многоразового использования, позволит повысить эффективность затрат на здравоохранение. Кроме этого, применение фартуков позволяет более рационально и экономично организовать работу соответствующих служб лечебного учреждения.

ГЛАВА 3 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Санитарно-гигиенические изделия предназначены для использования в медицинских учреждениях. Они применяются в учреждениях здравоохранения, с целью защиты одежды от соприкосновения с водой, физиологическими жидкостями, агрессивными веществами, реагентами и любой средой, представляющей бактериальную или вирусную угрозу. Фартуки отличаются простотой формы, соответствуют современным требованиям эстетики, изготовлены из современных экологически чистых и безопасных материалов.

ГЛАВА 4 НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ) САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Номенклатура фартуков влагонепроницаемых ФНВ включает широкий ассортимент моделей: ФНВ-1, ФНВ-2, ФНВ-3. ФНВ-4, ФНВ-5, ФНВ-6.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Фартуки могут изготавливаться из винилискожи – ТР или влагонепроницаемой клеенки ПВХ, стойкой к многократной обработке дезинфицирующим раствором. Допускается применять другие аналогичные материалы, не ухудшающие внешний вид, гигиенические, эстетические и прочностные свойства изделия и соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) на данный вид изделия.

ГЛАВА 6 ТРЕБОВАНИЯ К СТЕРИЛИЗАЦИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Фартуки могут использоваться в течение длительного времени и многократно вплоть до повреждения поверхностного слоя ПВХ пропитки. В учреждениях здравоохранения изделия должны подвергаться обеззараживанию методом камерной дезинфекции не более (60-70) C^0 . Производить очистку (дезинфекцию) можно путём замачивания или протирания мягкой тканью, смоченной в моющем (дезинфицирующем) растворе в режимах действующих нормативных документов средствами, разрешёнными к применению Министерством здравоохранения республики Беларусь, с последующей просушкой. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется применять: хлорамин 1%,перекись водорода 3%с добавлением 0,5% моющего средства «Лотос» или «Биолот», хлордизин 0,5%.

Не подвергать поверхности изделия воздействию растворов кислот, щелочей, растворителей. Не подвергать поверхности изделия механическим воздействиям, сопровождающимся нарушением целостности материала (царапины, порезы).

ГЛАВА 7 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Хранение фартуков: в удаленном не менее чем на 1м от нагревательных приборов в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 1° до плюс 45°, с относительной влажностью воздуха не более 80%.

Грязные фартуки должны собираться в специальную тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки) и транспортироваться в специальные помещения учреждения здравоохранения. Порядок сбора и дезинфекции использованных изделий определяется требованиями законодательства Республики Беларусь и внутренними нормативными документами организации.

Срок хранения изделий не более 6 месяцев.

Средний срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок выявления дефектов – 1 месяц со дня покупки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Фартуки, бывшие в употреблении и получившие в результате механические повреждения и загрязнения, а так же, изделия, подвергнутые ремонту не заводом-изготовителем, обмену и возврату не подлежат.

Маркировка изделий

Фартуки могут выпускаться без вшивной ленты.
На каждую групповую упаковку должна быть нанесена маркировка, включающая в себя всю информацию, а также число единиц продукции в групповой упаковке.

Упаковка изделий

Фартуки упаковываются индивидуально или в комплекте по несколько штук, маркируются упаковочным ярлыком, методом наклеивания (вложения) упаковочного ярлыка. Образец заполнения упаковочного и товарного ярлыка (рисунок 1,2)

Примерный вид заполнения упаковочного и товарного ярлыков.

Республика Беларусь

Республиканское унитарное

Предприятие «Медтехноцентр»

Ул. Ботаническая,16, 220037 ,г. Минск

Фартук влагонепроницаемый

ГКСН 803.00.000.000-01

СТБ 757-2001/ТО ВУ 102307694.105-201

Артикул (модель) ….ФВН-2……

Размер полотна(ширина-длина), см: 870/1200

Цвет: мята

Количество изделий (комплектов) в упаковке ……

№ упаковщика …2……

Дата выпуска……...20 г

Рисунок 1. Примерный вид заполнения упаковочного ярлыка

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Республика Беларусь
Республиканское унитарное
Предприятие «Медтехноцентр Ул.
Ботаническая 16, 220037, г. Минск

Фартук влагонепроницаемый

ГКСН 803.00.000.000-01

СТБ 757-2001/ТО ВУ 102307694.105-201

Артикул (модель) ….ФВН-2……
Размер полотна(ширина-длина), мм: 870/1200
Материал: Клеенка медицинская, марка КМ-Т
ТУ ВУ 200250840.022-2008
Состав: ПВХ
Цвет …изумрудный……

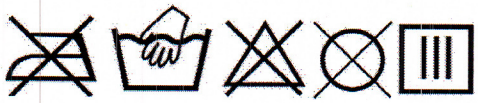

Количество изделий (комплектов) в упаковке ……

Свидетельство о приемке

_____ _____20
Штамп ОТК дата выпуска

Рисунок 2. Примерный вид заполнения товарного ярлыка

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru