Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



Коляска малогабаритная

Руководство по эксплуатации
ОПИ-37.00.000РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ОПИ-37.00.000РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством коляски малогабаритной ОПИ-37.00.000 (далее - коляска), условиями её эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Коляска предназначена для передвижения пользователя с двусторонней ампутацией нижних конечностей на уровне бедра на короткие расстояния по дорогам с твёрдым покрытием, с уклоном не более 10%.

Противопоказанием к применению коляски является вычленение в тазобедренном суставе.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, не более:

- длина – 485 мм;
- ширина – 375 мм;
- высота – 250 мм.

2.2 Максимальная грузоподъёмность (масса пользователя) – 100 кг.

2.3 Масса коляски (с толкателями) – не более 9 кг.

3 Устройство и работа

3.1 Коляска (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов:

сиденье 1, ремни 2 и 3, четыре колеса (два поворотных 4 и два неповоротных 5).

Примечание – *Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

3.2 Подготовка к работе

Для приведения коляски в рабочее состояние необходимо её расчехлить.

Коляска готова к использованию.

3.3 Работа

Передвижение происходит с помощью толкателей 6 за счёт мускульной силы рук пользователя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

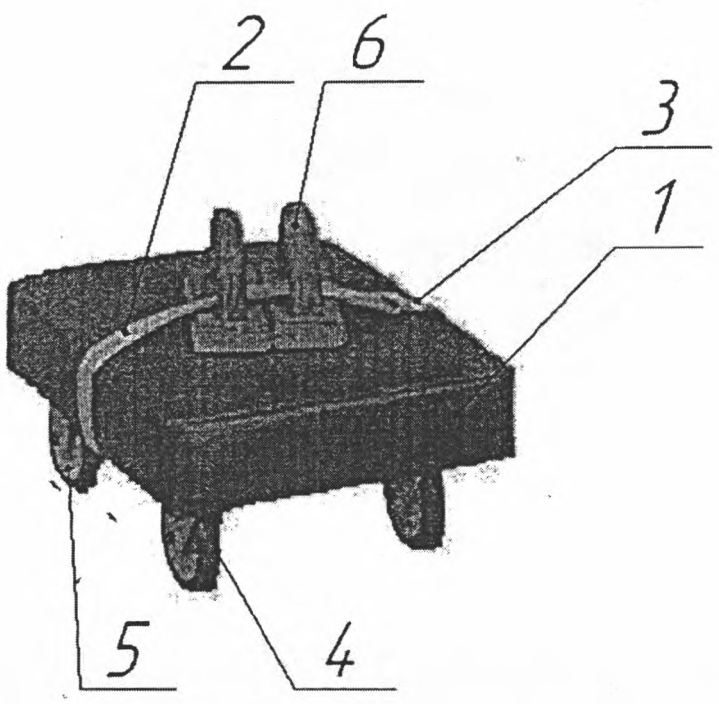


Рисунок Общий вид коляски

4 Меры безопасности

4.1 Пользоваться коляской разрешается только при застёгнутых ремнях.

4.2 Необходимо соблюдать осторожность при размещении и передвижении в коляске, не смещать резко центр тяжести тела в стороны, вперёд или назад для предотвращения падения и опрокидывания коляски.

4.3 Запрещается пользование коляской для перемещения по неровной поверхности, поверхности с резкими уклонами, поверхности без твёрдого покрытия.

4.4 Запрещается пользование коляской при наличии снежного покрова, гололёда, наледи.Не рекомендуется использовать её при температуре окружающей среды ниже минус 25°С.

4.5 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.6 Запрещается перевозить грузы.

5 Техническое обслуживание

5.1 Сиденье коляски необходимо протирать водой с применением моющих средств.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Комплектность

6.1 Коляска - 1 шт.;
6.2 Толкатель - 2 шт.;
6.3 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

7.1 Маркировка коляски должна содержать:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015»;
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий)

8 Свидетельство о приемке

Коляска малогабаритная ОПИ 37.00.000
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.062-2011, действующей технической документацией, и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП _____ _____
личная подпись *расшифровка подписи*

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство об упаковывании

Коляска малогабаритная ОПИ 37.00.000
наименование изделия обозначение заводской номер

упакована на РУП БПОВЦ согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник участка ***Шацкий В.В.***
должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ.

Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: **220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.**

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.97843/1609.

Действительно до 02.09.2021 г.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru