1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кровать больничная четырёхфункциональная с электроприводом КБЭ-4П (в дальнейшем - кровать) предназначена для использования в медицинских учреждениях.

1.2 Исполнение кровати: на колёсах.

1.3 Кровать предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности 80 % при температуре +25 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, исполнение на колесах:
длина.....2120±20
ширина.....950±20
высота.....925±20
2.2 Ширина кровати с боковыми ограждениями.....970±10
2.3 Размеры ложа, мм
длина.....1940±10
ширина.....840±10
2.4 Габаритные размеры матраца, мм:
длина.....1950±10
ширина.....840±10
высота.....70±5
2.5 Угол подъема головной секции .....0° - 60°
2.6 Угол подъема тазобедренной секции ..... 0° - 40°
2.7 Высота ложа, мм..... 440-830
2.8 Масса (без принадлежностей), кг, не более.....100
2.9 Допускаемая нагрузка, кг, не более.....150
3.0 Усилие перемещения кровати, Н, не более.....200
3.1 Электропитание В/Гц.....220/50
3.2 Электропитание пульта, В.....24
3.1 Степень защиты электрооборудования IP42
3.3 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы:

Наименование	Кол-во
Рама с закреплёнными на ней секциями и электроприводами	1
Боковины (передняя и задняя)	2
Колесо Ø 125мм с тормозом	4
Паспорт БИПЯ.942811.057.КБЭ-4П ПС	1
Принадлежности (по желанию заказчика)	
Штатив-стойка для капельниц	1
Матрас четырёхсекционный	1
Ограждения боковые складные (комплект)	2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 ПОРЯДОК СБОРКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ

4.1 Основание кровати, опоры изготовлены из металлических труб размером 60х30мм; ложе – труба металлическая 30х20мм с перфорированным листом; покрытие – порошковое, полимерное.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Распакуйте кровать, очистите от пыли.

4.3 Основная конструкция кровати не требует сборки.

4.4. Возьмите боковины поз.1 и поз.2 (рис.1). Отведите крючки, которые расположены внизу боковин вверх, наденьте боковины на оси, которые приварены к основанию кровати. Отпустите крючки. Боковины должны быть зафиксированы. (см. рис.1, вид сверху)

4.5 Ограждение поз. 4 надеть сверху на основание кровати, зафиксировав с помощью крепежа (прилагается в комплекте с ограждением) (см. рис.1, вид А). Штатив для капельниц поз. 5 вставить в отверстие в основании кровати (см. рис.1). Уложите матрац поз. 3 на ложе кровати.

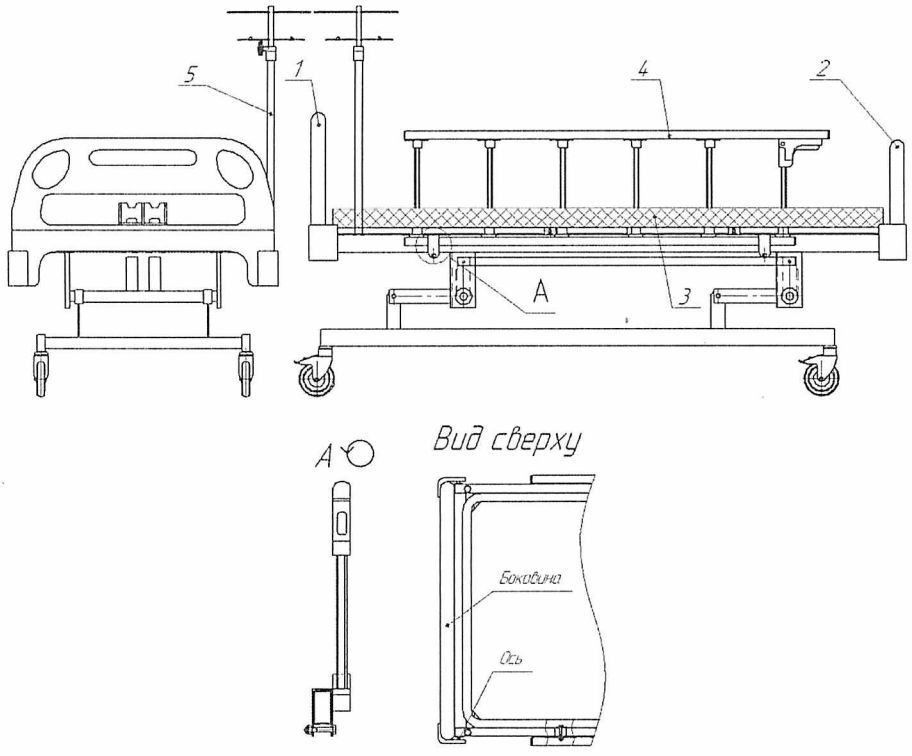


Рис.1

4.6 Внешний вид пульта управления приведён на рисунке 2.

4.7 Функциональное обозначение кнопок:

1- подъём головной секции

2 – опускание головной секции

3 – одновременное поднятие головной и тазобедренной секции (автоконтур)

4 – одновременное опускание головной и тазобедренной секции

5 – подъём тазобедренной секции

6 – опускание тазобедренной секции

7 - подъём ложа

8 - опускание ложа

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

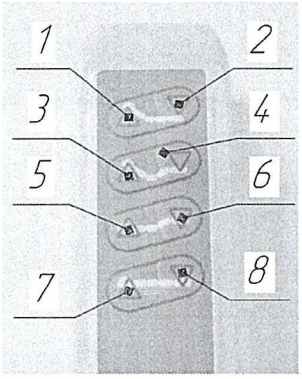


Рис 2.

Нажмите на соответствующую кнопку и удерживайте её столько времени, пока кровать не приобретёт нужное положение.

4.8 Выполните санитарную обработку кровати путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной 3,0 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 %-го раствора моющего средства или 1,0 % раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации кровати необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

5.2 Во избежание поломки ходовой части кровати не следует переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия. Ложе кровати должно находиться в нижнем положении.

5.3 Перед перемещением кровати необходимо отсоединить её от сети и удостовериться в том, что кабель не растягивается и не попадает под колёса.

5.4 Раз в полгода производите осмотр, очистку и смазку подшипниковых узлов колес.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Кровать в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре +25 °С.

6.2 Хранить кровать допускается в помещении при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать больничная четырёхфункциональная с электроприводом КБЭ-4П, заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.080-202_ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кровать больничная четырёхфункциональная с электроприводом КБЭ-4П, заводской №_____ упакована согласно требованиям, предусмотренных в конструкторской документации.

Дата упаковки

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, предусмотренным в ТУ BY 800017554.080-202_, при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Кровать больничная четырёхфункциональная с электроприводом КБЭ-4П, заводской №_____, ТУ BY 800017554.080-202_

Приобретена_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения- владельца

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кровать больничная пятифункциональная с электроприводом КБЭ-5П (в дальнейшем - кровать) предназначена для использования в медицинских учреждениях.

1.2 Исполнение кровати: на колёсах.

1.3 Кровать предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности 80 % при температуре +25 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм:
Длина.....2160±20
Ширина.....990±20
Высота.....860-1210±20
2.2 Размеры ложа, мм
Длина.....1940±10
Ширина.....840±10
2.3 Габаритные размеры матраца, мм:
Длина.....1950±10
Ширина.....840±10
Высота.....70±5
2.4 Угол подъема головной секции .....0° - 70°
2.5 Угол подъема тазобедренной секции .....0° - 40°
2.6 Угол Тренделенбург .....15°
2.7 Угол анти-Тренделенбург .....-15°
2.8 Высота ложа, мм.....490-840
2.9 Масса (без принадлежностей), кг, не более.....110
2.10 Допускаемая нагрузка, кг, не более.....150
2.11 Усилие перемещения кровати, Н, не более.....200
2.12 Электропитание В/Гц.....220/50
2.13 Электропитание пульта, В.....24
2.14 Степень защиты электрооборудования IP42
2.15 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы:

Наименование	Кол.-во
Рама с закреплёнными на ней секциями, боковинами и электроприводами	1
Боковины (передняя и задняя)	2
Колесо Ø 125мм с тормозом	4
Паспорт БИПЯ.942811.057.КБЭ-5П ПС	1
Принадлежности (по желанию заказчика)	
Штатив-стойка для капельниц	1
Матрас четырёхсекционный	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru