ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Катетеры аспирационные однократного применения
ТУ BY 600012098.017-2008

ИСЖЕ.942272.48 ИП **Дата выпуска 14.05.2021. Рев. 04**

Настоящая инструкция применяется для катетеров аспирационных однократного применения, которые включают в себя следующие варианты исполнений: с вакуум-контролем и без вакуум-контроля.

НАЗНАЧЕНИЕ: Катетеры аспирационные однократного применения (далее – катетеры) предназначены для трахеобронхиального отсасывания из легких.

ФОРМА ВЫПУСКА: Катетер выпускается в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали катетера изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Катетер в первичной упаковке стерилен, апирогенен и нетоксичен.

Стерилизованы окисью этилена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Специальные противопоказания неизвестны.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Побочных действий не обнаружено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности катетера аспирационного.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлечь катетер аспирационный.
3. Ввести катетер через нос или рот до уровня, требующего активной аспирации.
4. Подсоединить отсасывающее оборудование к коннектору катетера и произвести аспирацию.
5. По окончании процедуры отсоединить от отсасывающего оборудования и извлечь катетер.
6. Обработать и утилизировать катетер аспирационный в установленном порядке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Катетер предназначен для однократного применения. Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Не использовать не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки.

После использования подлежит обработке и утилизации.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:


Дата изготовления


Использовать до




Код партии


Не использовать повторно


Не применять при повреждении упаковки



Стерилизация с применением окиси этилена

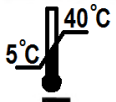

Ограничение температуры


Хрупкое. Осторожно


Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Катетеры должны храниться во вторичной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить катетеры от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж. Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru