Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.
Unit 93, Building 12, No, 818, Qiming Road,
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, P.R. China

Tel: +86-574-8778 6632
Fax: +86-574-8778 6644
info@greatcare.cn

Greatcare
Creating a Better Care

Инструкция по применению

Мочеприемники стомийные двухкомпонентные
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификации (кат. №): GCU 2502
Размер фланцевого соединения, мм: 15 – 100

Мочеприемники стомийные двухкомпонентные (мешки)
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификации (кат. №): GCU 2503
Размер фланцевого соединения, мм: 15 – 100

Мочеприемники стомийные двухкомпонентные (фланцы)
(включая системные компоненты и принадлежности)
Модификации (кат. №): GCU 2504
Размер фланцевого соединения, мм: 15 – 100

- мешок изготовлен из непрозрачного многослойного не пропускающего запаха полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера.
- диаметр отверстия адгезивных пластин от 15 до 70 мм.
- Объем мочеприемника – 200мл.
- трафарет на клеевой пластине.
- размер фланцевого соединения до 100 мм.
- Не содержит латекса и фталатов.
- Каждая упаковка мочеприемника стомийного двухкомпонентного (мешок) и мочеприемника стомийного двухкомпонентного (фланец) сопровождается листком-вкладышем.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- тщательно вымыть кожу вокруг стомы теплой водой с нейтральным мылом.
- по нанесенному на бумажное покрытие шаблону со стандартными отверстиями подобрать размер отверстия, соответствующий диаметру стомы (можно воспользоваться зеркалом).
- если стома имеет неправильную форму - изменить форму отверстия в трафарете с помощью ножниц (желательно использовать ножницы с закругленными тупыми концами).
- размер вырезанного отверстия должен на 3-4 мм превышать размер стомы.
- вырежьте отверстие в клеевом слое по нанесённому контуру, следя, чтобы не прорезать мочеприемник насквозь.
- у лежачих пациентов нижний конец мочеприемника должен быть направлен не к ногам, а к спине
- снять защитное бумажное покрытие с нанесенной разметкой.
- совместите нижний край вырезанного отверстия с нижней границей стомы (можно использовать зеркало).
- приклеить адгезивную пластину к коже начиная с нижнего края пластины, следя, чтобы на клейком участке не образовались складки.
- прижать рукой край отверстия к коже, прилежащей к стоме, на 1 мин.
- возьмите стомный мешок и насадите на кольцо пластины.
- по мере наполнения мешка мочеприемника опорожняйте его через сливной клапан.

ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС
С.В. ТРАФИМОВИЧ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- не допускайте попадания воды в верхнюю часть пакета во избежание ее проникновения под клеевой слой, это ведёт к преждевременному отклеиванию адгезивной пластины.
- если под адгезивной пластиной возникло ощущение жжения, её надо немедленно снять. Это может быть аллергическая реакция.
- регулярно производите опорожнение мешка мочеприёмника!!! Обычно мешок опорожняется при заполнении на 1/3-1/2 объёма. **Несоблюдение этого правила может привести к попаданию содержимого под клеевой слой и отклеиванию мочеприемника.**
- для предупреждения травмирования кожи не снимайте адгезивную пластину рывком.

ПРИМЕЧАНИЕ

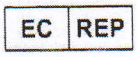
- стерилизовано ЕО (оксид этилен).
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- не использовать при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
- хранить при температуре от +5 до +45°С.
- после использования, изделие может представлять потенциальную биологическую опасность. После использования, подлежит утилизации как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

СИМВОЛЫ

Толкование обозначений, используемых для упаковки:

 Изготовитель

 Стерилизация оксидом этилена

 Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе

 Использовать только один раз

 Дата изготовления

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Использовать до

 Не использовать при повреждении упаковки

 Код партии

 Номер по каталогу

 Не стерилизовать повторно

 Не допускать воздействия солнечного света

 Беречь от влаги

 Хрупкое, обращаться осторожно

 0197 Знак СЕ и идентификационный номер Нотифицированного органа.

ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС
С.В. ТРАФИМОВИЧ

Дата вступления в силу

Данное издание Инструкции пользователя вступает в силу в 2019.01.20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Unit 93, Building 12, No.818, Qiming Road, Yinzhou, 315105, Ningbo, Zhejiang,
P.R. China
Производственные площадки всех стадий производства:
No.92 Cishanhe Rd. Chunxiao, Beilun, Ningbo, 315830 Zhejiang, P.R. China;
4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, No.10, Fenghuang Yuan Mid-Road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, P.R.China.

EC REP: **Greatcare Medical GmbH**
Bonner Str. 31, 50389 Wesseling, Germany

Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь
УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1.

ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС
С.В. ТРАФИМОВИЧ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru