ИскаМедТех

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИСКАМЕДТЕХ», г. МИНСК

ПОЛКИ И ЛОТКИ МЕДИЦИНСКИЕ НАВЕСНЫЕ IMT

Руководство по эксплуатации и паспорт
ТУ BY 100991302.009-2010



2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Основные сведения

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным с паспортом документом, содержащим основные сведения о конструкции полок и лотков медицинских навесных IMT (далее – изделия), технических характеристиках, комплектности, правилах эксплуатации, сведения о приемке и упаковывании, гарантийные обязательства.

1.2. Изделия предназначены для медицинской аппаратуры, приборов, инструментов, материалов и приспособлений. Изделия изготавливаются с элементами крепления для стационарной установки на настенные рельсовые системы или непосредственно на медицинское оборудование.

Изделия предназначены для применения в отделениях терапевтического, хирургического профилей и иных помещениях лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

1.3. Изделия изготавливаются в соответствии с ТУ BY 100991302.009-2010, ГОСТ 20790 и КД: ЦИЛГ.009.001 – ЦИЛГ.009-005.

2. Технические характеристики

2.1. По виду конструкции изделия подразделяются на следующие модификации:

- полки и лотки одноярусные (с одной полкой или лотком);
- полки и лотки многоярусные, с общим количеством ярусов (полок или лотков) не более пяти.
- полки комбинированные (с полками и выдвижными ящиками с общим количеством ярусов для размещения полок и ящиков не более пяти).

Виды и комплектация изделий приведены в таблице 1:

Таблица 1

Обозначение изделий	Кол-во ярусов, шт.	Кол-во ящиков, шт.
Полка одноярусная IMT-ПО	1	-
Полка многоярусная IMT-ПМ	1-5	-
Полка комбинированная IMT-ПК	1-5	1-5
Лоток одноярусный IMT-ЛО	1	-
Лоток многоярусный IMT-ЛМ	1-5	-

2.2. Габаритные размеры и масса изделий в зависимости от модификации указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение				
	Полки			Лотки	
	Одноярусные	Многоярусные	Комбинированные	Одноярусные	Многоярусные
Длина, мм	200-600			90-450	
Ширина, мм	200-600			90-450	
Высота, мм,	-	100·N*	100·N*	50	100·N*
Масса, кг,	2	2·N*	3·N*	0,5	0,5·N*
* N – количество ярусов (горизонтальных элементов – лотков, полок или ящиков) в изделии.					

2.3. Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.4. Максимальная весовая нагрузка на изделия:

- для горизонтального элемента (яруса) полок – не более 20 кг;
- для горизонтального элемента (яруса) лотков – не более 2 кг;
- для днищ ящиков полок комбинированных – не более 2 кг.

2.5. Средний срок службы изделий – 5 лет.

3. Виды и модификации изделий

3.1 Полки одноярусные IMT-ПО, многоярусные IMT-ПМ, комбинированные IMT-ПК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

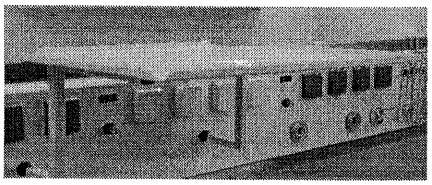


Рис. 1 Полка одноярусная IMT-ПО с креплением на стандартный рельс

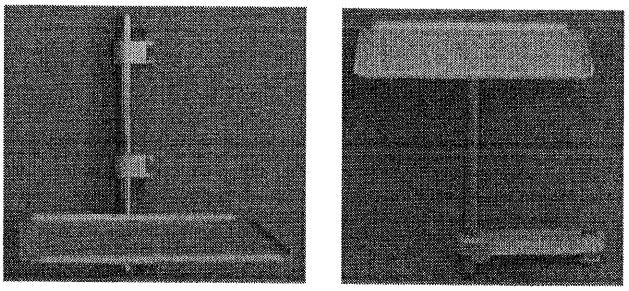


Рис. 2 Полка одноярусная IMT-ПО поворотная с фиксацией положения с креплением на стандартный рельс

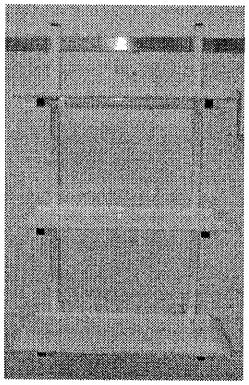


Рис. 3 Полка многоярусная IMT-ПМ с тремя ярусами (для инфузоматов)

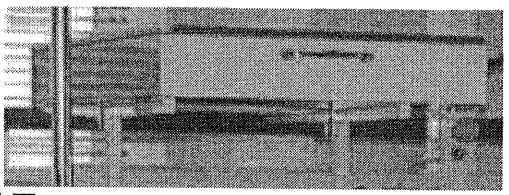


Рис. 4 Полка одноярусная IMT-ПО с выдвижным ящиком с креплением на стандартный рельс

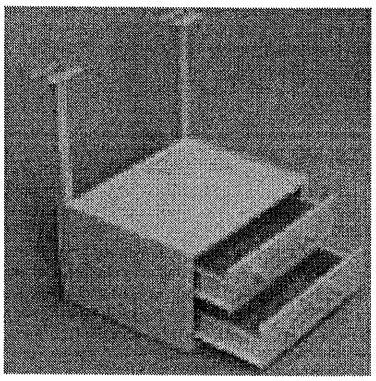


Рис. 5 Полка многоярусная IMT-ПМ с двумя выдвижными ящиками с креплением к профилю консоли

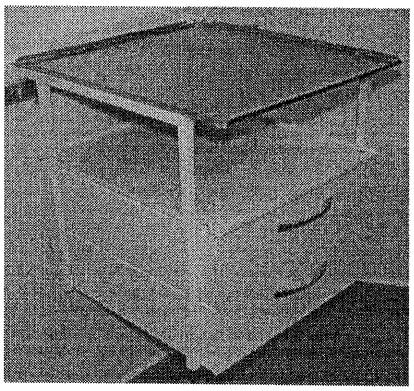


Рис. 6 Полка комбинированная IMT-ПК с креплением на стандартный рельс

3.2 Лотки одноярусные IMT-ЛО и многоярусные IMT-ЛМ.

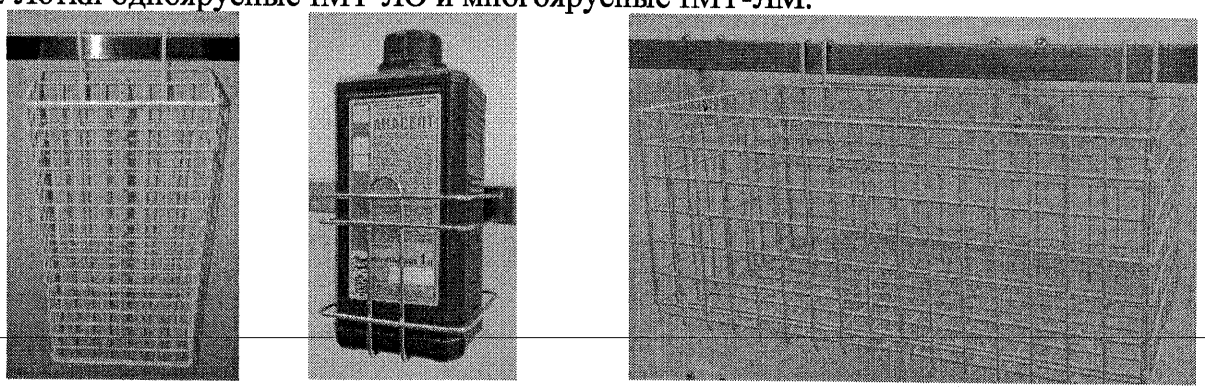


Рис. 6 Лотки одноярусные IMT-ЛО различных размеров с креплением на стандартный рельс

4. Правила эксплуатации и меры безопасности

4.1. Изделия должны эксплуатировать при температуре от плюс 10°С до плюс 35°С и относительной влажности 80% при 25°С.

4.2. Запрещается нагружать изделия весом большим, чем указано в п. 2.4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Очистка и дезинфекция

5.1. Изделия устойчивы к обработке 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644. Возможно проведение очистки и дезинфекции другими средствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, согласно методическим и эксплуатационным документам.

6. Правила хранения

Изделия подлежат хранению в упаковке изготовителя на складах поставщика (потребителя) при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и влажности – 75%. Окружающий воздух не должен содержать коррозионно-активных примесей, масляных паров и взвесей.

7. Комплектация изделий

В комплект поставки должны входить:

- изделие в составе согласно таблице 1;
- паспорт.

8. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 36 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 мес. со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

9. Изготовитель и его юридический адрес

Полки и лотки медицинские навесные IMT изготавливаются предприятием ЗАО «Искамедтех», 220070, РБ, г. Минск, ул. О. Кошевого, 10-1Н. Тел/факс +375 17 202-11-52.

10. Свидетельство о приемке

Полки и лотки медицинские навесные IMT:

Тип изделия	Кол-во
Полка одноярусная IMT-ПО	
Полка многоярусная IMT-ПМ	
Полка комбинированная IMT-ПК	
Лоток одноярусный IMT-ЛО	1
Лоток многоярусный IMT-ЛМ	

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ТУ BY 100991302.009-2010 и признаны годными к эксплуатации.

КОНТРОЛЕР: Хаменко А.Н. МП

ФИО (подпись)

ДАТА «24» августа 2020г.

11. Свидетельство об упаковывании

Полки и лотки медицинские навесные IMT:

Тип изделия	Кол-во ярусов, шт.	Кол-во ящиков, шт.	Кол-во изделий, шт.
Полка одноярусная IMT-ПО			
Полка многоярусная IMT-ПМ			
Полка комбинированная IMT-ПК			
Лоток одноярусный IMT-ЛО	1	-	1
Лоток многоярусный IMT-ЛМ			

упакованы согласно ТУ BY 100991302.009-2010.

УПАКОВЩИК: Корабельников А.Н. МП

ФИО (подпись)

ДАТА «24» августа 2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru