ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зонды желудочные однократного применения

ТУ BY 600012098.013-2008

ИСЖЕ.942271.08ИП **Дата выпуска 10.06.2021. Рев. 03**

Настоящая инструкция применяется для зондов желудочных однократного применения, размерный ряд которых: CH 04 – CH 36.

НАЗНАЧЕНИЕ: Зонды желудочные однократного применения (далее – зонды) предназначены для:

– желудочного зондирования с лечебной целью;

– желудочного зондирования с диагностической целью;

– энтерального питания.

ФОРМА ВЫПУСКА: Детали зонда изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Состоит из коннектора и трубки с боковыми отверстиями. Зонд желудочный выпускается в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Допускается наносить на трубку зонда дистальные метки или сантиметровую шкалу.

Размерный ряд: CH 04; CH 05; CH 06; CH 07; CH 8; CH 9; CH 10; CH 11; CH 12; CH 13; CH 14; CH 15; CH 16; CH 17; CH 18; CH 19; CH 20; CH 21; CH 22 CH 23; CH 24; CH 25; CH 26; CH 27; CH 28; CH 29; CH 30; CH 31; CH 32; CH 33; CH 34; CH 35; CH 36.

Зонд в первичной упаковке стерилен, апирогенен и нетоксичен.

Стерилизованы окисью этилена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Специальные противопоказания неизвестны.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Побочных действий не обнаружено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности зонда желудочного.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлечь зонд желудочный.
3. Измерить расстояние от резца зуба до пупка плюс ширина ладони больного – длина зонда для входа в желудок.
4. Поместить зонд на корень языка и продвигать его вслед глотательным движениям.
5. Убедиться, что зонд в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через зонд 20 мл воздуха).
6. Продвинуть зонд еще на 7–10 см в желудок.
7. По окончании процедуры извлечь зонд через салфетку, смоченную дезраствором.
8. Обработать и утилизировать зонд в установленном порядке.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Зонд предназначен для однократного применения. Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Не использовать не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки.

После использования подлежит обработке и утилизации.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:


Дата изготовления


Использовать до




Код партии


Не использовать повторно


Не применять при повреждении упаковки



Стерилизация с применением окиси этилена

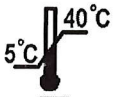

Ограничение температуры


Хрупкое. Осторожно


Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Зонды должны храниться во вторичной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить зонды от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru