Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 10 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф вытяжной настольный/настенный ШВ____,ШВН____ заводской №_____упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____ Подпись

## 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий ТУ BY 800017554.067-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи) или со дня ввода в эксплуатацию.

11 3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

11.4. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует шкаф и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4,
СЗАО «Белмедматериалы»

## 11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок. О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: Беларусь, 225730, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, ком.4. СЗАО «Белмедматериалы»

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Шкаф вытяжной настольный/ настенный ШВ _____, ШВН____ заводской №_____
ТУ BY 800017554.067-2017

Приобретен_____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_____
(дата, подпись и штамп обслуживающей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя
учреждения-владельца

## СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Шкаф вытяжной драгметаллов не содержит.

**СОВМЕСТНОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»**

# МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ

Шкаф вытяжной настольный ШВ 01
Шкаф вытяжной настенный ШВН 01
Шкаф вытяжной настольный ШВ 02
Шкаф вытяжной настенный ШВН 02

**ТУ BY 800017554.067-2017**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
**БИПЯ.942841.067 ШВ**

## 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Приступая к эксплуатации изделия, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации (далее РЭ).

РЭ кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации шкафа.

1.2 Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу:

225730, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая,31б, к.4.

1.3 В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкафы вытяжные (далее – шкафы) входят в комплект мебели лабораторной (КМЛ) (далее - комплект), предназначенные для оснащения рабочих мест в зуботехнических, литейных и других медицинских лабораториях, а также в учебных учреждениях медицинского профиля.

Шкафы не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах по ПЭУ.

2.2 По требованиям безопасности шкафы соответствует СТБ IEC 60601-1-2012.

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические данные шкафов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | ШВ 01 | ШВН 01 | ШВ 02 | ШВН 02 |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br>1210<br>610<br>1350 | <br>1210<br>610<br>400 | <br>710<br>610<br>1350 | <br>710<br>610<br>400 |
| Масса, кг, не более | 65 | 35 | 55 | 25 |
| Допускаемая нагрузка на полку, кг, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Производительность вентилятора, $м^3/ч$ | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Напряжение электрической сети, В | 230 ± 23 | 230 ± 23 | 230 ± 23 | 230 ± 23 |
| Частота электрической сети, Гц | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки шкафов согласно таблицы 2.

Таблица 2.

| Наименование | ШВ 01 | ШВН 01 | ШВ 02 | ШВН 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Количество, шт. | | | |
| Болт М6х16-6g.56.019 | 7 | - | 7 | - |
| Гайка М6-6Н.56.019 | 7 | - | 7 | - |
| Шайба 6.65Г | 7 | - | 7 | - |
| Шайба 8 | 7 | - | 7 | - |
| Дюбель- крюк 8х80 | - | 3 | - | 3 |
| Полка (1125) | 2 | - | - | - |
| Полка (625) | - | - | 2 | - |
| Кронштейн правый | 1 | - | 1 | - |
| Кронштейн левый | 1 | - | 1 | - |
| Корпус (1200) | 1 | - | - | - |
| Корпус (700) | - | - | 1 | - |
| Крышка (1200) | 1 | 1 | - | - |
| Крышка (700) | - | - | 1 | 1 |

## 5 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК СБОРКИ

5.1 В шкафах используется вентилятор производства Erio, Италия или аналогичный

5.2 По конструкции шкафы ШВ 01 и ШВ 02 - настольного типа, шкафы ШВН 01 и ШВН 02 – настенного типа.

5.3 Для установки шкафов ШВН 01 и ШВН 02 используются дюбель-крюки поз.10 . На стенке корпуса шкафа имеются два отверстия для крепления шкафа на стену.

5.4 Для установки шкафов ШВ 01 и ШВ 02 соберите шкафы согласно рисунка 1. К корпусу поз. 1 присоедините крышку поз.2 при помощи винтов, гаек и шайб поз. 3, 4, 5, 6. Установите кронштейны поз. 7, 8 в пазы на корпусе поз. 1 и уложите на их полку поз. 9.

5.5 Выходное отверстие на вентиляторе подключить к общей системе вентиляции.

5.6 Подключить шкаф к сети питания. Включение/выключение шкафа производиться при помощи клавиши, расположенной на крышке поз.2.

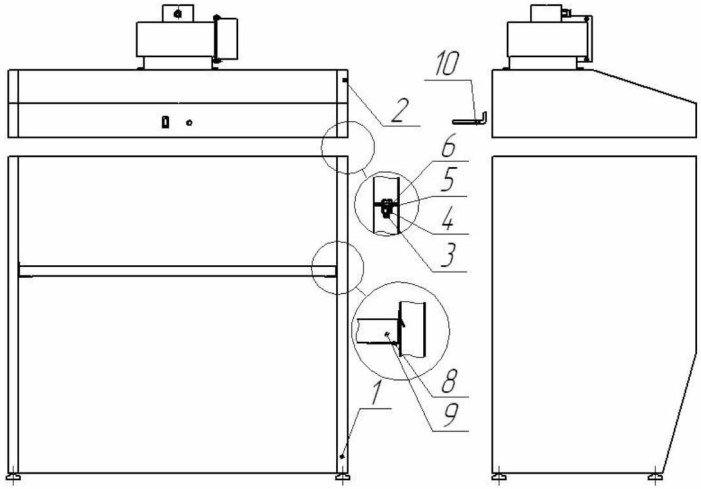



Рисунок 1. Общий вид

## 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Шкаф по защите от поражения электрическим током относится к классу I по СТБ IEC 60601-1-2012.

6.2 Все работы по обслуживанию и ремонту производить только после отключения шкафа от питающей сети.

6.3 Электрическая схема вентилятора приведена на рисунке 2.

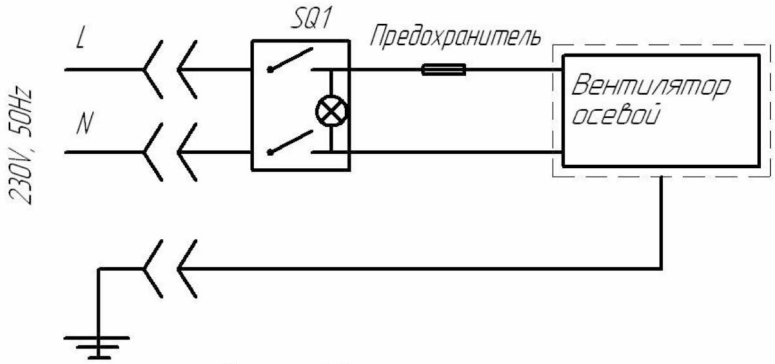



Рисунок 2 Схема электрическая

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Для обеспечения эффективной и надежной работы необходимо правильно и своевременно осуществлять техническое обслуживание.

7.2 На техническое обслуживание, ремонт или проверку технических характеристик шкаф должен быть предъявлен с руководством по эксплуатации.

7.3 Техническое обслуживание проводят в обесточенном состоянии (сетевая вилка извлечена из розетки).

7.4 Периодически, не реже одного раза в полгода, необходимо производить санитарную обработку корпуса шкафа дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

7.5 Периодически, не реже одного раза в полгода, необходимо затягивать крепежные соединения в шкафах ШВ 01, ШВ 02.

## 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

8.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф вытяжной настольный/ настенный ШВ ____, ШВН ____заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.067-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Изделия в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

5.2 Хранить комплект допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель лабораторная в составе п.3 настоящего паспорта соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.067-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

## 7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Мебель лабораторная в составе п.3 настоящего паспорта упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____ Подпись

## 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ BY 800017554.067-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи) или со дня ввода в эксплуатацию.

8 3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

8.4. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует шкаф и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4,

СЗАО «Белмедматериалы»

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Мебель лабораторная в составе п.3 настоящего паспорта ТУ BY 800017554.067-2017

Приобретена_____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_____

(дата, подпись и штамп обслуживающей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя
учреждения-владельца

# СОВМЕСТНОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

# МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ

**Модуль тумбы лабораторной ТЛ 01**
**Модуль тумбы лабораторной ТЛ 02**
**Модуль тумбы лабораторной ТЛ 03**
**Модуль тумбы лабораторной ТЛ 04**
**Модуль тумбы лабораторной ТЛ 05**
**Модуль тумбы лабораторной с мойкой ТЛ 06**
**Модуль тумбы лабораторной с плитой ТЛ 07**
**Основание ОСН**
**Столешница СЛ**

**ТУ BY 800017554.067-2017**

**ПАСПОРТ**
**БИПЯ.942841.067 ТЛ**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1.1 Модули тумб ТЛ01-ТЛ 07, основание ОСН и столешница СЛ (далее – изделия) входят в состав мебели лабораторной, и предназначены для оснащения рабочих мест в зуботехнических, литейных и других медицинских лабораториях, а также в учебных учреждениях медицинского профиля.

1.2 Изделия предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35º С и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25º С.

1.3 Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделий.

1.4 Периодически, не реже одного раза в полгода, необходимо производить санитарную обработку корпусов изделий дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

1.5 В процессе эксплуатации периодически затягивайте ослабленные крепежные соединения.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические данные модулей тумб приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | ТЛ 01 | ТЛ 02 | ТЛ 03 | ТЛ 04 | ТЛ 05 | ТЛ 06 | ТЛ 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более: | | | | | | | |
| длина | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| ширина | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| высота | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Масса, кг, не более | 30 | 38 | 40 | 45 | 55 | 55 | 60 |
| Допускаемая нагрузка на полку, кг, не более | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Допускаемая нагрузка на ящик, кг, не более | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.2 Технические данные оснований и столешниц приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование изделий | Габаритные размеры, мм, не более | | | Масса, кг, не более | Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более | Средний срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | высота | | | |
| Основание ОСН 500 | 500 | 390 | 340 | 15 | - | 5 |
| Основание ОСН 700 | 700 | 390 | 340 | 20 | | |
| Основание ОСН 1000 | 1000 | 390 | 340 | 30 | | |
| Основание ОСН 1250 | 1250 | 390 | 340 | 38 | | |
| Основание ОСН 1500 | 1500 | 390 | 340 | 45 | | |
| Основание ОСН 1750 | 1750 | 390 | 340 | 53 | | |
| Основание ОСН 2000 | 2000 | 390 | 340 | 60 | | |
| Основание ОСН 2250 | 2250 | 390 | 340 | 67 | | |
| Столешница СЛ 500 | 500 | 540 | 40 | 10 | 50 | |
| Столешница СЛ 700 | 700 | 540 | 40 | 15 | 50 | |
| Столешница СЛ 1000 | 1000 | 540 | 40 | 20 | 50 | |
| Столешница СЛ 1250 | 1250 | 540 | 40 | 25 | 50 | |
| Столешница СЛ 1500 | 1500 | 540 | 40 | 30 | 50 | |
| Столешница СЛ 1750 | 1750 | 540 | 40 | 35 | 50 | |
| Столешница СЛ 2000 | 2000 | 540 | 40 | 40 | 50 | |
| Столешница СЛ 2250 | 2250 | 540 | 40 | 45 | 50 | |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки крепежа зависит от поставляемого основания и количества модулей тумб, закрепленных на основании и приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование | ОСН ( один модуль тумбы) | ОСН (два модуля тумб) | ОСН (три модуля тумб) | ОСН (четыре модуля тумб) |
|---|---|---|---|---|
| | Количество, шт. | | | |
| Вкладыш | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Скоба | - | 2 | 4 | 6 |
| Болт М8х16-6g.56.019 | - | 2 | 4 | 6 |
| Гайка М8-6Н.56.019 | 4 | 10 | 16 | 20 |
| Шайба 6.65Г | 4 | 10 | 16 | 20 |
| Шайба 8 | 4 | 10 | 16 | 20 |
| Шуруп 3х16.019 | 8 | 10 | 12 | 16 |

3.2 Комплект поставки (состав мебели лабораторной) приведен в таблице 4 и зависит от заказа потребителя

Таблица 4

| Наименование | Кол.шт. | Зав. № | Наименование | Кол.шт. | Зав. № |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль тумбы лабораторной ТЛ 01 | | | Основание ОСН | 1 | |
| Модуль тумбы лабораторной ТЛ 02 | | | | | |
| Модуль тумбы лабораторной ТЛ 03 | | | Столешница СЛ | 1 | |
| Модуль тумбы лабораторной ТЛ 04 | | | | | |
| Модуль тумбы лабораторной ТЛ 05 | | | Паспорт | 1 | |
| Модуль тумбы лабораторной с мойкой ТЛ 06 | | | | | |
| Модуль тумбы лабораторной с плитой ТЛ 07 | | | | | |

3.3 В состав модуля тумбы лабораторной с мойкой ТЛ 06 входит мойка из нержавеющей стали, кран, сифон.

3.4 В состав модуля тумбы лабораторной с плитой ТЛ 07 входит плита электрическая производства PKM GmbH&Co. KG, Германия или аналогичная.

## 4 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Мебель лабораторная (см. рис.1,2) состоит из модуля тумб поз.1 - поз.7, столешницы поз.8 и основания поз.9 Модули тумб присоединены к основанию при помощи скоб поз. 10, вкладышей поз.11 и крепежа поз.13, поз.14. Модули тумб соединены между собой при помощи крепежа поз.12 - поз.14. Столешница поз.8 соединена с модулями тумб с помощью шурупов поз.15.

4.2 Состав мебели лабораторной согласно п.3.1. Условная схема сборки, обозначения изделий и комплектующих приведены на рисунках 1 и 2.

4.3 При установке комплекта отрегулируйте высоту при помощи опор поз.16.

4.4 Подключить тумбу с плитой к сети питания, вставив вилку в розетку с контактом заземления.

4.5 Каждая конфорка плиты имеет ручку управления (от минимального до максимального значения мощности), при включении которой загорается лампочка-индикатор. Рядом с каждой ручкой управления имеется схематическое изображение плиты, на котором темной точкой обозначена именно та конфорка, которая управляется соответствующей ручкой.

4.6 Тумба с плитой должна подключаться к розетке сети питания, которая не должна закрываться корпусом мебели.

4.7 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

4.7.1 Оставлять без надзора плиту с включенными конфорками.

4.7.2 Держать вблизи включенной плиты легковоспламеняющиеся вещества.

***4.7.3 Эксплуатировать плиту с включенными конфорками без нагрузки (без ёмкостей).***

4.8 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, установленных изготовителем, может ухудшаться защита, применяемая в данном оборудовании.

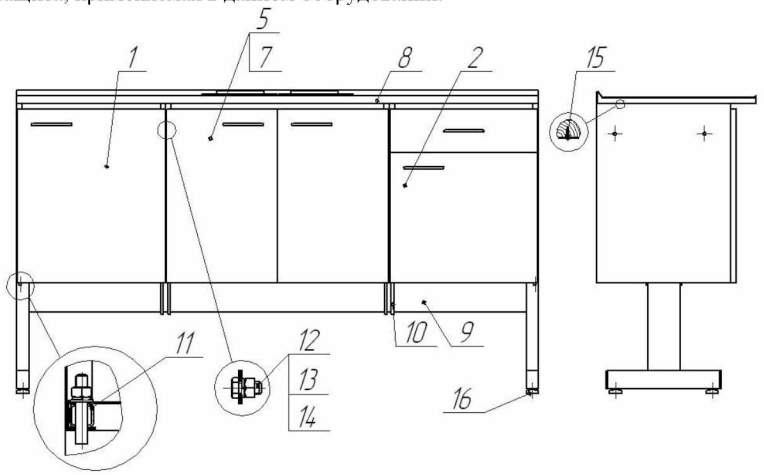



Рисунок 1

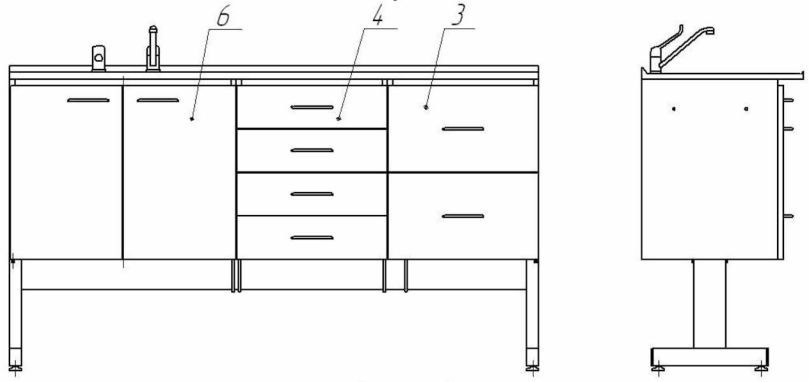



Рисунок 2

1. Модуль тумбы лабораторной ТЛ 01
2. Модуль тумбы лабораторной ТЛ 02
3. Модуль тумбы лабораторной ТЛ 03
4. Модуль тумбы лабораторной ТЛ 04
5. Модуль тумбы лабораторной ТЛ 05
6. Модуль тумбы лабораторной с мойкой ТЛ 06
7. Модуль тумбы лабораторной с плитой ТЛ 07
8. Столешница СЛ
9. Основание ОСН
10. Скоба
11. Вкдадыш
12. Болт М8х16
13. Гайка М8
14. Шайба
15. Шуруп 3х16
16. Опора

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ BY 800017554.067-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи) или со дня ввода в эксплуатацию.

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

## 10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Тумба угловая лабораторная ТЛ 08, заводской номер _____
ТУ BY 800017554.067-2017

Приобретена_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


**СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»**


**МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ**

**Тумба угловая лабораторная ТЛ 08**

**ТУ BY 800017554.067-2017**

**ПАСПОРТ**
**БИПЯ.942841.067 ТЛ 08**

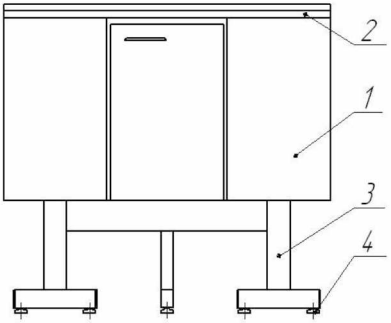

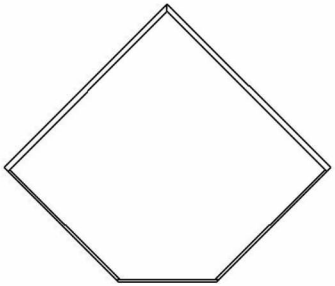1. Корпус
2. Столешница
3. Основание
4 Опоры

**Рисунок**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Госреестре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба угловая лабораторная ТЛ 08 (в дальнейшем - тумба) входит в комплект мебели лабораторный (далее – комплект), и предназначена оснащения рабочих мест в зуботехнических, литейных и других медицинских лабораториях, а также в учебных учреждениях медицинского профиля.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности 80% при температуре +25ºС.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

| | |
|---|---|
| длина…….. | 1080 |
| ширина……..... | 800 |
| высота …… | 1010 |
| 2.2 Масса, кг, не более…….…….. | 57 |
| 2.3 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг…… | 50±0,5 |
| 2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг…… | 5±0,5 |
| 2.5 Срок службы, лет, не менее……..… | 5 |

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

| | |
|---|---|
| тумба …….. | 1 шт.; |
| паспорт …….. | 1 шт. |

## 4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1, столешницы 2, основания 3 и опор 4. Опоры – регулируемые – предназначены для компенсации неровностей пола.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющими на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояние после транспортирования и хранения. Отрегулируйте высоту тумбы с помощью опор 4.

## 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации периодически, не реже одного раза в полгода, затягивайте ослабленные крепежные соединения.

5.2 Периодически, не реже одного раза в полгода, необходимо производить санитарную обработку корпусов изделий дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

6.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба угловая лабораторная ТЛ 08, заводской номер_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.067-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба угловая лабораторная ТЛ 08, заводской номер_____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п.