УТВЕРЖДАЮ

Директор

Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ С.А.Мороз

«15» 06 2021

Кружка Эсмарха однократного применения

ТУ BY 600012098.027-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИСЖЕ.942835.07ИП

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по производству

Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ И.А.Мороз

«14» 06 2021

Руководитель службы контроля качества

Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ Т.А.Прус

«14» 06 2021

Начальник отдела маркетинга и сбыта

Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ М.С.Вафина

«14» 06 2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кружка Эсмарха однократного применения
ТУ BY 600012098.027-2013

ИСЖЕ.942835.07ИП **Дата выпуска 16.06.2021. Рев. 02**

НАЗНАЧЕНИЕ: Кружка Эсмарха однократного применения (далее – кружка) предназначена для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища.

ФОРМА ВЫПУСКА: Кружки выпускаются в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали кружек изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Допускается упаковка в пакет, состоящий из газопроницаемой пленки.

Кружки стерильны внутри.


Стерилизованы окисью этилена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Специальные противопоказания неизвестны.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Побочных действий не обнаружено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности кружки Эсмарха.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлечь кружку Эсмарха.
3. Перекрыть удлинительную трубку 3 (см. рис. 1) с помощью зажима 2.

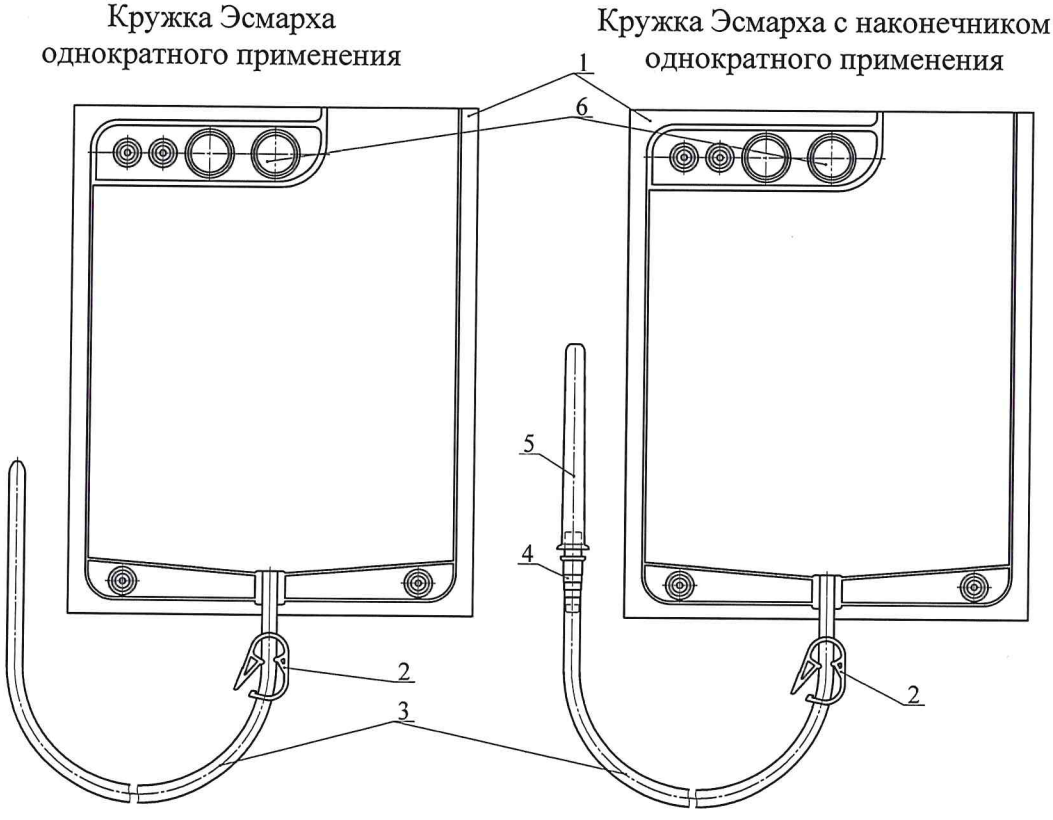

1 – мешок; 2 – зажим; 3 – удлинительная трубка; 4 – штуцер; 5 – наконечник; 6 – узел крепления.
Рисунок 1 – Кружка Эсмарха однократного применения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Заполнить мешок 1 необходимым количеством жидкости. Зафиксировать кружку за узел крепления 6 на высоте 1-1,5 м.

5. Удалить воздух из удлинительной трубки, ослабив зажим 2. Вновь перекрыть подачу жидкости зажимом 2.

6. Ввести дистальный конец трубки 3 или наконечник 5 в полость организма.

7. Ослабить зажим 2 и ввести жидкость, при этом оставить на дне мешка 1 небольшое количество жидкости для предотвращения попадания воздуха в полость организма. Перекрыть ток жидкости зажимом 2.

8. Извлечь дистальный конец трубки 3 или наконечник 5 из полости организма.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Кружка предназначена для однократного применения. Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Не использовать не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки.

После использования подлежит обработке и утилизации.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:


Дата изготовления


Использовать до




Код партии


Не использовать повторно


Не применять при повреждении упаковки



Стерилизация с применением окиси этилена

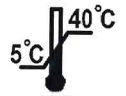

Ограничение температуры


Хрупкое. Осторожно


Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Кружки должны храниться во вторичной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить кружки от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж. Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru