Инструкция по применению

PFR (W) PFXR (W)

Кожные сшивающие аппараты и аппараты для удаления скоб

[Наименование изделия] Кожные сшивающие аппараты и аппараты для удаления скоб

[Спецификация изделия] PFR(W)15, 25, 35, 45, 55, PFXR(W)15, 25, 35 с ,45-

[Основные технические характеристики]

Материал: Активатор выполнен из нержавеющей стали 06Cr19Ni 10 в соответствии с GB/T1220-2007, скобы выполенны из нержавеющей стали 00Cr18Nil4Mo3 в соответствии с GB4234-2003. Рукоятка выполнена из ABS в соответствии с GB/T12672-2009. Экстрактор скоб выполнен из ABS и нержавеющей стали 06Crl9Ni10.

Эксплуатационные характеристики: Нетоксичен, безвреден и стерилен, не вызывает коррозии, хорошая биосовместимость, хорошая стабильность металла, быстрое выполнение швов, хорошее расположение краев раны, применим для различных видов ран и порезов.

Легкое удаление скоб с помощью экстрактора скоб.

[Применение]

используется для ушивания ран и хирургических разрезов.

Инструкция по применению

Инструкция по применению сшивающего аппарата

1. Держите сшивающий аппарат твердо, скобами перпендикулярно участку кожи, слегка отцентрируйте активатор относительно краев раны, прижмите аппарат к коже.

2. Полностью сжимайте подвижную рукоятку, пока не закончится формирование скобы. (Не отпускайте рукоятку, пока скоба не сформируется.)

3. Отпустите подвижную рукоятку до ее возврата в исходное положение. Установите инструмент в следующее положение сшивания.

4. Повторите действия, указанные выше.

Инструкция по применению экстрактора скоб

1. Поместите два крючка экстрактора между скобами и тканью.

2. Закройте экстрактор скоб и извлеките скобы из ткани.

[Предупреждения и меры предосторожности]

1. Если натяжение ткани слишком велико, выполните сводящий шов перед закрытием раны с помощью сшивающего аппарата.

2. Если расстояние между сшиваемой кожей и расположенным под ней жизненно важным органом составляет менее 5 мм, не используйте сшивающий аппарат!

3. Кожный сшивающий аппарат предназначен исключительно для сшивания кожных покровов.

4. Проверьте герметичность упаковки перед использованием. Не использовать инструмент, если упаковка повреждена.

5. Используйте сшивающий аппарат с неистекшим сроком действия стерилизации.

6. Только для одноразового применения!

7. Изделие повторной стерилизации не подлежит.

[Упаковка]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кожный сшивающий аппарат упаковывается в блистерную коробку и стерилизуется с помощью этиленоксида. В индивидуальной упаковке. Внешняя упаковка представляет собой бумажную коробку с маркировкой



Стерилизовано этиленоксидом

Не использовать повторно.

На упаковке также имеется предупреждение “запрещено использовать, если упаковка повреждена”.

Срок действия стерилизации – 3 года.

Аппарат для удаления скоб предназначен для одноразового применения. Упакован в стерильных условиях.

[Хранение]

Место хранения должно быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым. Не допускать повреждения инструмента.




ООО "Джангсу Брайтнес Медикал Девайсис"

АДРЕС: Строение 3, этаж 3, строение 1 и строение 5-3, № 66,

Гехуан Роуд, свободная экономическая зона Джонглоу, Чаньджоу,

Джиангсу 213013, Китай

ФАКС: 0086-519-83908831

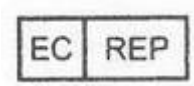

Лепу Медикал (Юроп) Кооператиф У. А.

Адрес: Бульвар Абе Ленстра 36, 8448 JB, Херенвен, Нидерланды

Тел.: +31-515 573399
Факс: +31-515 760020
Дата выпуска: 21.08.2020
Редакция №: A/2



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru