АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Зубы искусственные пластмассовые ЭСТЕДЕНТ-02
Инструкция по применению

1. Назначение

Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 предназначены для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов.

2. Свойства

Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. Зубы обладают хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением к истиранию, твердостью, цветостабильностью. Зубы соответствуют расцветке Vita и выпускаются 9-ти цветовых оттенков: A2; A3; A3,5; B2; B3; C2; C3; D2; D3. Зубы имеют 13 фасонов передних верхних зубов, 5 фасонов передних нижних зубов, 5 фасонов жевательных зубов.

3. Способ применения

Зубы Эстедент-02 устанавливают на восковые базисы съемных конструкций зубных протезов с последующей заменой воска на базисную пластмассу. Подбор цвета зубов производят при естественном освещении, с учетом формы, размера и цвета настоящих зубов. Подбор фасона зубов осуществляют с учетом их сочетаний в соответствии со стандартной картой фасонов и форм зубов искусственных пластмассовых Эстедент-02, приведенной ниже.

СТАНДАРТНАЯ КАРТА ФАСОНОВ И ФОРМ ЗУБОВ ЭСТЕДЕНТ-02 С УЧЕТОМ ИХ СОЧЕТАНИЙ

Передние верхние зубы				Передние нижние зубы			Жевательные зубы		
Фасон и форма	В,мм	в, мм	Н, мм	Фасон	В,мм	в, мм	Фасон	Верхние В, мм	Нижние В, мм
22 ○	40,0	7,5	7,5	11	30,0	4,5	11Ж	26,0	28,0
23 ○; 23 □			8,7						
25 □	42,0	8,0	9,0	12	34,0	5,0	12Ж	29,0	30,5
25 ○	44,0		8,7						
26 ○	43,0		9,6						
27 ○	44,0	8,2	8,0	13; 47	36,5	5,5	13Ж; 48Ж	29,0	31,5
28 ○		8,4	9,8						
29 □		8,3	10,6						
44 *		8,8	11,2						
30 ○	47,0	9,0	9,7	14	39,0	5,8	14Ж	31,0	31,5
31 ▽	48,0	9,2	11,2						
32 ○		9,4	11,6						

Примечание 1 "*" — фасон 44 не артикулируется в гарнитуре из 28 зубов.
Примечание 2 — допускаемые отклонения размеров: В ± 2мм; в ± 0,5мм; Н ± 0,5мм.


Передние верхние зубы



Передние нижние зубы



Жевательные зубы

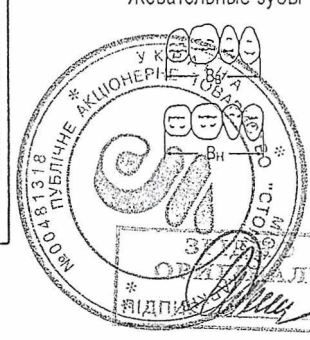

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Правила пользования контейнером:

1. Перед использованием контейнера проверить, что крышка установлена в нейтральном положении: указатель на боковой поверхности крышки должен быть установлен напротив обозначения «!» на этикетке.

2. Для извлечения зубов из контейнера необходимо:

- срезать скальпелем или ножом клапан на крышке с надписью «срезать»;
- поворачивая крышку контейнера, установить указатель на необходимый номер зуба (расшифровка номеров приведена ниже);
- встряхивая контейнер, извлечь зуб.

3. По окончании работы установить крышку в нейтральное положение.

РАСШИФРОВКА
системы обозначения зубов

ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ		МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ	
(верхние правые)	(верхние левые)	(верхние правые)	(верхние левые)
18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28	55 54 53 52 51	61 62 63 64 65
48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38	85 84 83 82 81	71 72 73 74 75
(нижние правые)	(нижние левые)	(нижние правые)	(нижние левые)

Первая цифра обозначает четверть, а вторая – зуб в этой четверти. Для четвертей отводится цифра с 1-й по 4-ю для постоянных зубов и с 5-й по 8-ю – для молочных. Отсчет начинается с верхней правой стороны и идет по часовой стрелке, для зубов одной четверти отводится цифра с 1-й по 8-ю (для молочных зубов – с 1-й по 5-ю), начиная со средины назад. Цифры должны произносится отдельно: так, постоянные клыки имеют обозначение: один-три, два-три, три-три и четыре-три.

4. Комплектность

Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 выпускают на планках в картонных пачках или коробках, а также насыпью в пластмассовых секционных контейнерах.

Виды комплектации гарнитуров зубов на планках:

- 1 полный гарнитур зубов (в коробке): 1×6 передних верхних зубов, 1×6 передних нижних зубов, 1×8 жевательных (боковых) верхних зубов, 1×8 жевательных (боковых) нижних зубов;
- 4 полных гарнитура зубов (в пачке или коробке): 4×6 передних верхних зубов, 4×6 передних нижних зубов, 4×8 жевательных (боковых) верхних зубов, 4×8 жевательных (боковых) нижних зубов;
- 5 полных гарнитуров зубов (в пачке): 5×6 передних верхних зубов, 5×6 передних нижних зубов, 5×8 жевательных (боковых) верхних зубов, 5×8 жевательных (боковых) нижних зубов.

Виды комплектации гарнитуров зубов в пластмассовых секционных контейнерах:

- 4 контейнера полных гарнитуров на 28 зубов – 20 гарнитуров;
- 1 контейнер передних верхних гарнитуров на 6 зубов – 20 гарнитуров;
- 1контейнер передних нижних гарнитуров на 6 зубов – 20 гарнитуров;
- 4 контейнера жевательных (боковых) гарнитуров на 16 зубов – 40 гарнитуров.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Примечание:

Полный гарнитур зубов: 6 передних верхних зубов; 6 передних нижних зубов; 8 жевательных верхних зубов; 8 жевательных нижних зубов.

Гарнитур передних верхних зубов: 6 зубов.

Гарнитур передних нижних зубов: 6 зубов.

Гарнитур жевательных зубов: 8 жевательных верхних зубов; 8 жевательных нижних зубов.

5. Условия хранения

Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 должны храниться при комнатной температуре в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

Гарантийный срок хранения – 4 года с даты изготовления.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru