9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям ТУ BY 800017554.078-202_ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт кресла, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Кресло гинекологическое КГР, ТУ BY 800017554.078-202_
заводской №_____

Приобретено _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГР

ТУ BY 800017554.078-202_

ПАСПОРТ
КГР-1.00.000ПС

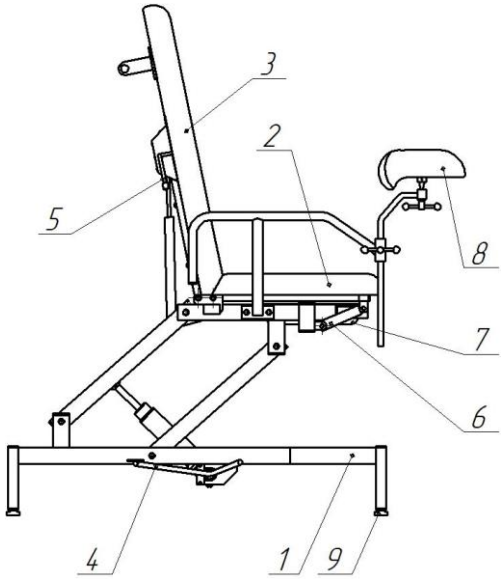

1. Каркас
2. Сиденье
3. Спинка
4. Рычаг регулировки сиденья
5. Рычаг регулировки спинки
6. Механизм подъема сиденья
7. Таз
8. Опоры для ног
9. Регулируемые опоры

Рисунок

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кресло гинекологическое КГР (далее – кресло) предназначено для проведения гинекологических исследований и процедур, а также для проведения оперативных вмешательств в медицинских учреждениях.

1.2 Кресло предназначено для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Габаритные размеры, мм, не более:
- длина (положение- разложено) ……..……...……..... 1750
- ширина……..……..……..... 960
- высота……..……...…....1740
- высота сиденья ……..……..500…900

2.2 Масса, кг, не более...…….…….....….65
2.3 Угол наклона спинки, не более ……..……..80º
2.4 Угол наклона сиденья, не более……...…… 15º
2.5 Допускаемая нагрузка, кг, не более……...……..150
2.7 Срок службы, лет, не менее ……...……...……5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.В комплект поставки входит:
- Кресло ……...…….……..…...1 шт.
- паспорт ……..……...……1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кресло (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварного каркаса поз.1 с закрепленными на нем сиденьем поз.2, спинкой поз.3, с тазом из нержавеющей стали (гастроемкость) поз.7 и опорами для ног поз.8.

4.2 Каркас изготовлен из стальных труб, покрыт порошковой полимерной краской. Мягкие элементы (сиденье, спинка) изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты винилискожей.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Кресло поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте кресло, очистите от пыли. Осмотрите кресло для определения его состояния после транспортирования и хранения.

5.2 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости отрегулировав с помощью опор поз. 9.

5.3 Угол наклона спинки регулируется с помощью рычага поз.5. Угол наклона сиденья регулируется с помощью механизма поз.6: Поднимите сиденье в необходимое верхнее положение (сиденье фиксируется); для возврата в нижнее положение поднимите сиденье до упора вверх, а затем опустите. Высота регулируется с помощью рычага поз.4.

5.3 Опоры для ног поз.8 регулируются по высоте и вокруг своей оси бесступенчато с помощью винт-барашка.

5.3 Выполните санитарную обработку кресла путем протирки ее поверхностей дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом РБ.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Кресло в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

6.2 Хранить кресло допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло гинекологическое КГР, заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.078-202_ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ г._____ м.п. _____

Подпись ответственного за приемку_____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кресло гинекологическое КГР, заводской №_____ упаковано согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____ Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись