
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

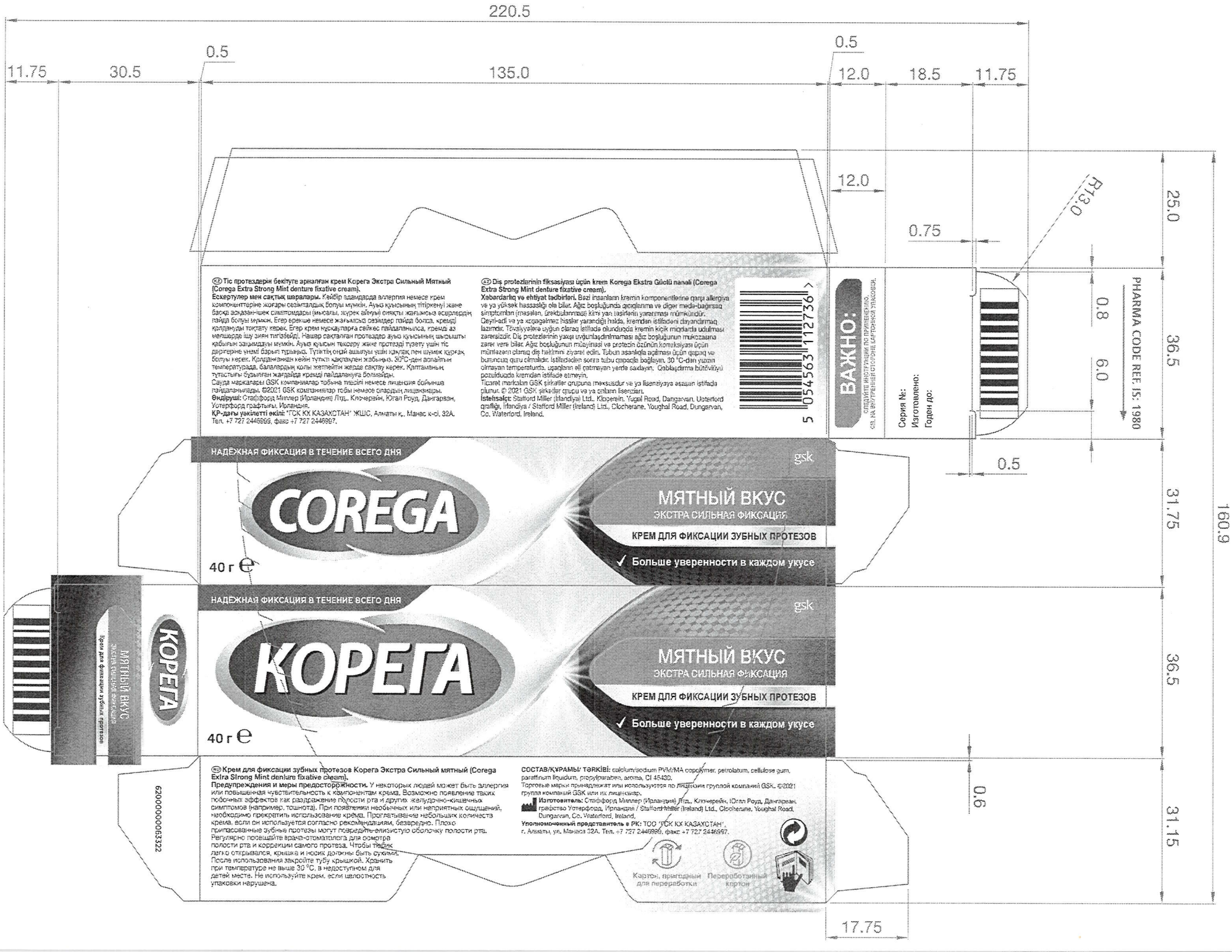

KZ Тіс протездерін бекітуге арналған крем Корега Экстра Сильный Мятный (Corega Extra Strong Mint denture fixative cream).
Ескертулер мен сақтық шаралары. Кейбір адамдарда аллергия немесе крем компоненттеріне жоғары сезімталдық болуы мүмкін. Ауыз қуысының тітіркенуі және басқа асқазаншек симптомдары (мысалы, жүрек айнуы сияқты жанамсыз әсерлердің пайда болуы мүмкін. Егер ерекше немесе жағымсыз әсерлер пайда болса, кремді қолдануды тоқтату керек. Егер крем нұсқауларға сейкес пайдаланылса, кремді аз мөлшерде ішу зиян тигізбейді. Нашар сақталған протездер ауыз қуысының шырышты қабығын зақымдауы мүмкін. Ауыз қуысын тексеру және протезді түзету үшін тіс дәрігеріне уақтылы барып тұрыңыз. Тұтастық онай ашылуы үшін қақпақ пен шүмек құрғақ болуы керек. Қолданғаннан кейін түтікті қақпағын жабыңыз. 30°С-ден аспайтын температурада, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Қаптаманың тұтастығы бұзылған жағдайда кремді пайдалануға болмайды.
Сауда маркалары GSK компаниялар тобына тиесілі немесе лицензия бойынша пайдаланылады. ©2021 GSK компаниялар тобы немесе олардың лицензиары.
Өндіруші: Стаффорд Миллер (Ирландия) Лтд., Ключерейн, Югал Роуд, Дангарван, Уотерфорд графтығы, Ирландия.
ҚР-дағы уәкілетті өкіл: "ГСК КХ КАЗАХСТАН" ЖШС, Алматы қ., Манас к-сі, 32А. Тел. +7 727 2446999, факс +7 727 2446997.

AZ Diş protezlərinin fiksasiyası üçün krem Korega Ekstra Güclü nanəli (Corega Extra Strong Mint denture fixative cream).
Xəbərdarlıq və ehtiyat tədbirləri. Bəzi insanların kremin komponentlərinə qarşı allergiya və ya yüksək həssaslığı ola bilər. Ağız boşluğunda qıcıqlanma və digər mədə-bağırsaq simptomları (məsələn, ürəkbulanması kimi yan təsirlərin yaranması mümkündür. Qeyri-adi və ya xoşagəlməz hisslər yarandığı halda, kremdən istifadəni dayandırmaq lazımdır. Təvəliyələrə uyğun olaraq istifadə olunduqda kremin kiçik miqdarda udulması zərərsizdir. Diş protezlərinin yaxşı uyğunlaşdırılmaması ağız boşluğunun mukozasına zərər verə bilər. Ağız boşluğunun müayinəsi və protezin özünün korreksiyası üçün mütəmadi olaraq diş həkiminə ziyarət edin. Tübün asanlıqla açılması üçün qapaq və burunçuq quru olmalıdır. İstifadədən sonra tübü qapaqla bağlayın. 30 °C-dən yuxarı olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Qablaşdırma bütövlüyü pozulduqda kremdən istifadə etməyin.
Ticarət markaları GSK şirkətlər qrupuna məxsusdur və ya lisenziyaya əsasən istifadə olunur. © 2021 GSK şirkətlər qrupu və ya onların lisenziarı.
İstehsalçı: Stafford Miller (Irlandiya) Ltd., Kloperein, Yugal Road, Dangarvan, Usterford qrafliği, İrlandiya / Stafford Miller (Ireland) Ltd., Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.

RU Крем для фиксации зубных протезов Корега Экстра Сильный мятный (Corega Extra Strong Mint denture fixative cream).
Предупреждения и меры предосторожности. У некоторых людей может быть аллергия или повышенная чувствительность к компонентам крема. Возможно появление таких побочных эффектов как раздражение полости рта и других желудочно-кишечных симптомов (например, тошнота). При появлении необычных или неприятных ощущений, необходимо прекратить использование крема. Проглатывание небольших количеств крема, если он используется согласно рекомендациям, безвредно. Плохо припасованные зубные протезы могут повредить слизистую оболочку полости рта. Регулярно посещайте врача-стоматолога для осмотра полости рта и коррекции самого протеза. Чтобы тюбик легко открывался, крышка и носик должны быть сухими. После использования закройте тубу крышкой. Хранить при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте. Не используйте крем, если целостность упаковки нарушена.


СОСТАВ/ҚҰРАМЫ/ TƏRKİBİ: calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430.
Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний GSK. ©2021 группа компаний GSK или их лицензиар.
Изготовитель: Стаффорд Миллер (Ирландия) Лтд., Ключерейн, Югал Роуд, Дангарван, графство Уотерфорд, Ирландия / Stafford Miller (Ireland) Ltd., Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.
Уполномоченный представитель в РК: ТОО "ГСК КХ КАЗАХСТАН", г. Алматы, ул. Манаса 32А. Тел. +7 727 2446999, факс +7 727 2446997.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


4200000063322

КРЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ КОРЕГА ЭКСТРА СИЛЬНЫЙ МЯТНЫЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Полный верхний зубной протез

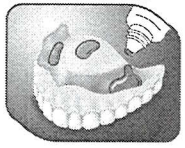

Полный нижний зубной протез

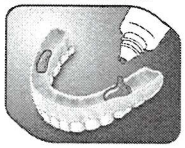

Частичный зубной протез

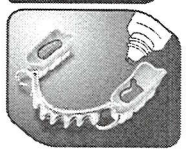

(RU) **Рекомендации по использованию:** При первом применении используйте небольшое количество крема. Чрезмерное количество может просачиваться из-под протеза; если это произошло, в следующий раз используйте меньшее количество крема. Возможно потребуется несколько попыток, чтобы подобрать оптимальное количество. Используйте крем 1 раз в день для надёжной фиксации. Если появляется необходимость использовать крем чаще – обратитесь за консультацией к стоматологу.

Как зафиксировать зубной протез:

1. Помойте и высушите протез.
2. Нанесите крем короткими полосками как показано на рисунке, не слишком близко к краю протеза.
3. Прополощите рот перед фиксацией протеза.
4. Вставьте протез в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсти на несколько секунд для лучшей фиксации.

Как извлечь зубной протез:

1. Прополощите рот водой.
2. Медленно извлеките протез, осторожно раскачивая его.
3. При помощи тёплой воды и мягкой щётки удалите остатки крема с поверхности протеза и изо рта.
4. Используйте таблетки Корега для тщательного очищения протеза, затем ополосните протез водой.

(KZ) **Пайдалану жөніндегі ұсыныстар:** Бірінші рет қолданған кезде, кремнің аз мөлшерін пайдаланыңыз. Протездің астынан шамадан тыс мөлшері алып кетуі мүмкін; егер бұл жағдай орын алса, келесі жолы кремді аз мөлшерде пайдаланыңыз. Оңтайлы мөлшерді таңдау үшін, бірнеше әрекет қажет болуы мүмкін. Сенімді бекіту үшін, кремді күніне 1 рет пайдаланыңыз. Егер кремді жиі қолдану қажет болса – кеңес алу үшін тіс дәрігеріне хабарласыңыз.

Тіс протезін қалай бекітуге болады:

1. Протезді жуыңыз және құрғатыңыз.
2. Кремді сүзгіге керектігіндей етіп қысқа жолақтар түрінде жағыңыз, протездің шетіне жақын қылып жақпаңыз.
3. Протезді бекітер алдында ауыздыққа шайыңыз.
4. Протезді ауыз қуысына салыңыз, жақсылап бекіту үшін, жақтарды мықтап қысып, бірнеше секундқа жабыңыз.

Тіс протезін қалай алу керек:

1. Ауызыңызды сумен шайыңыз.
2. Протезді абайлап айналдыра отырып, ақырын шығарыңыз.
3. Жылы сумен және жұмсақ щеткамен протездің бетінен және ауызынан қалған кремді алып тастаңыз.
4. Протезді жуынт тазалау үшін, Корега таблеткаларын қолданыңыз, содан кейін протезді сумен шайып тастаңыз.


(AZ) **İstifadəyə dair tövsiyələr:** İlk istifadəetmədə az miqdarda kremdən istifadə edin. Həddindən artıq miqdar protezin altından sızıb bilər; əgər bu baş verərsə, növbəti dəfə kremi daha az miqdarından istifadə edin. Optimal miqdarı tapmaq üçün bir neçə cəhd tələb oluna bilər. Etibarlı fiksasiya üçün kremdən gündə 1 dəfə istifadə edin. Əgər kremdən daha tez-tez istifadə etmək zərurəti meydana çıxarsa, məsləhət üçün diş həkiminə müraciət edin.

Diş protezini necə fiksasiya etmək olar:

1. Protezi yuyun və qurudun.
2. Kremi protezin konturuna çox yaxın olmayaraq, şəkildə göstərildiyi kimi qısa zolaqlarla çəkin.
3. Protezin fiksasiyasından əvvəl ağzınızı yaxalayın.
4. Protezi ağız boşluğuna yerləşdirin, bərk basın və daha yaxşı fiksasiya üçün çənələrinizi bir neçə saniyə sıxın.


Diş protezini necə çıxarmaq olar:

1. Ağzınızı su ilə yaxalayın.
2. Protezi ehtiyatla yelləyərək yavaş-yavaş çıxarın.
3. Ilıq su və yumşaq firçanın köməyi ilə kremin qalıqlarını protezin səthindən və ağızdan təmizləyin.
4. Protezin hərtərəfli təmizlənməsi üçün Korega tabletlərindən istifadə edin, sonra protezi su ilə yaxalayın.

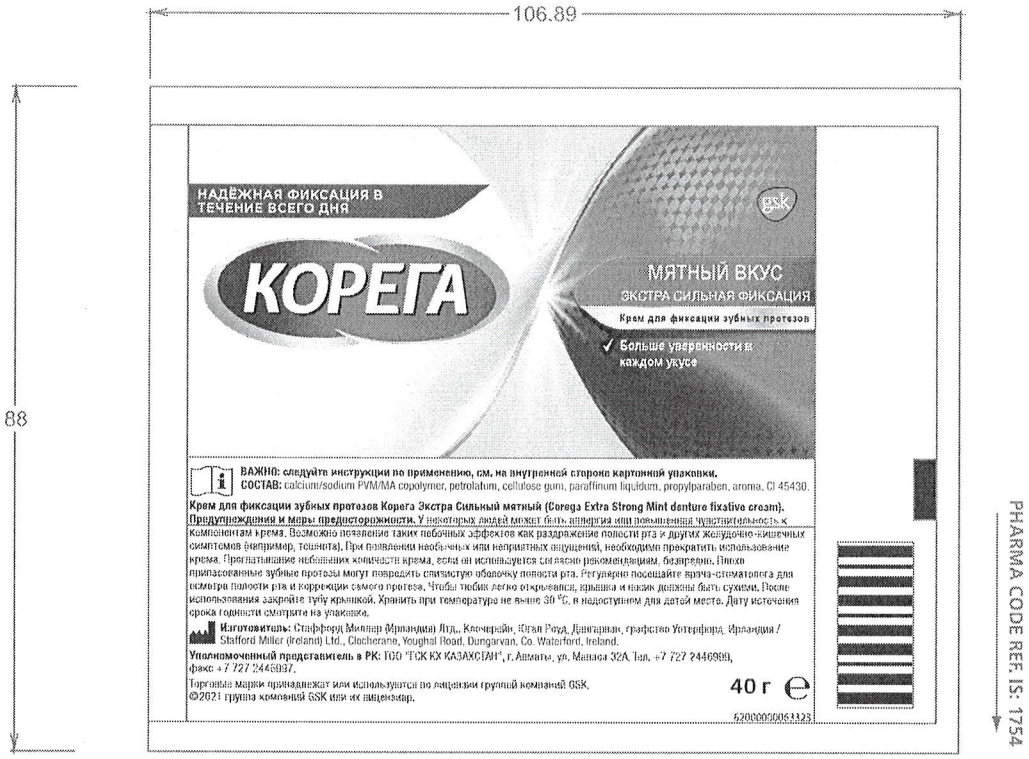

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

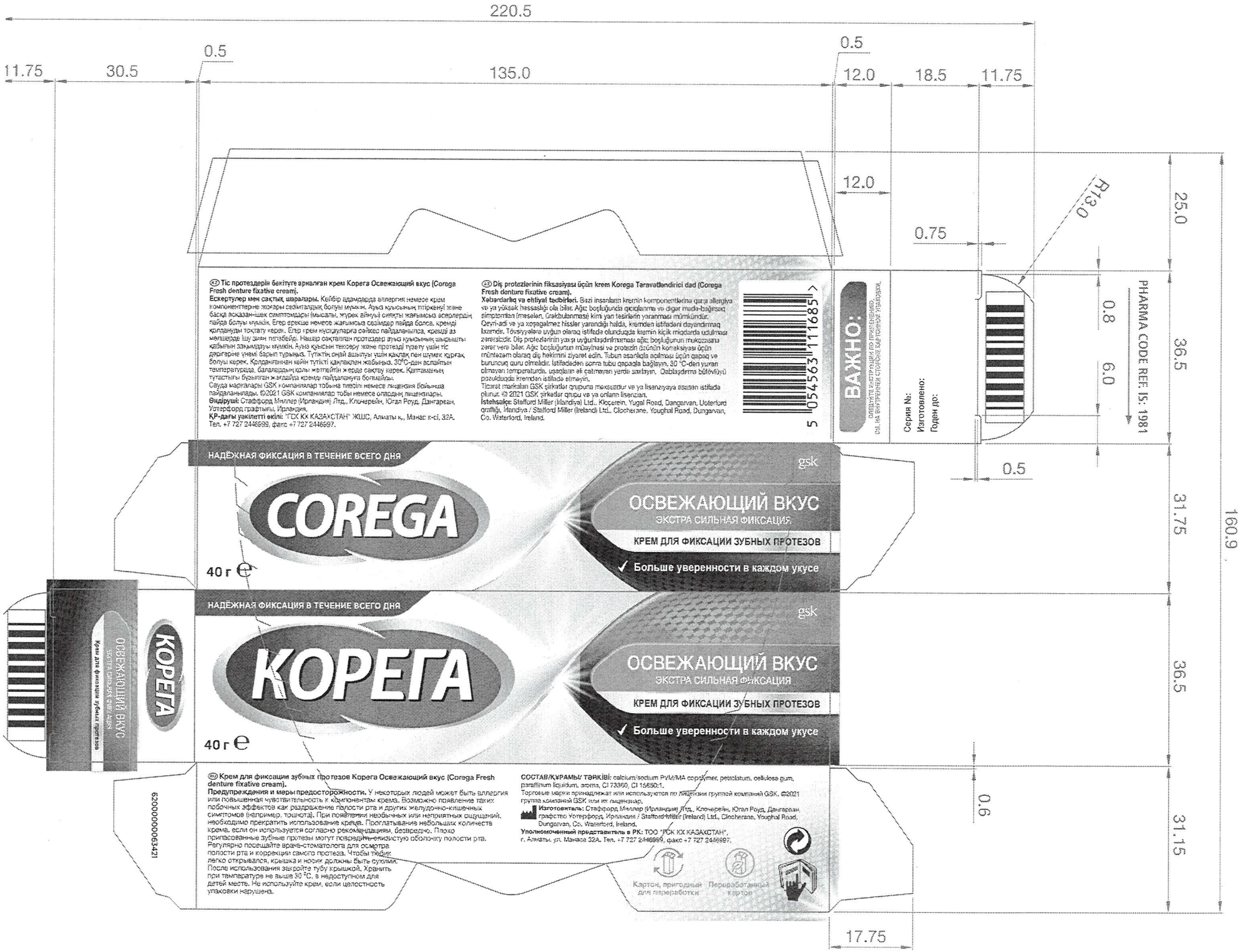

(RU) **Крем для фиксации зубных протезов Корега Освежающий вкус (Corega Fresh denture fixative cream).**
Предупреждения и меры предосторожности. У некоторых людей может быть аллергия или повышенная чувствительность к компонентам крема. Возможно появление таких побочных эффектов как раздражение полости рта и других желудочно-кишечных симптомов (например, тошнота). При появлении необычных или неприятных ощущений, необходимо прекратить использование крема. Проглатывание небольших количеств крема, если он используется согласно рекомендациям, безвредно. Плохо пригнанные зубные протезы могут повредить слизистую оболочку полости рта. Регулярно посещайте врача-стоматолога для осмотра полости рта и коррекции самого протеза. Чтобы тюбик легко открывался, крышка и носик должны быть сухими. После использования закройте тубу крышкой. Хранить при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте. Не используйте крем, если целостность упаковки нарушена.

СОСТАВ/ҚҰРАМЫ/ ТӘРКІБІ: calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, aroma, CI 73360, CI 15850:1.
Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний GSK. ©2021 группа компаний GSK или их лицензиар.
Изготовитель: Стаффорд Миллер (Ирландия) Лтд., Ключерейн, Югал Роуд, Дангарван, графство Уотерфорд, Ирландия / Stafford-Miller (Ireland) Ltd., Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.
Уполномоченный представитель в РК: ТОО "ГСК КХ КАЗАХСТАН", г. Алматы, ул. Манаса 32А. Тел. +7 727 2446999, факс +7 727 2446997.

(KZ) **Тіс протездерін бекітуге арналған крем Корега Освежающий вкус (Corega Fresh denture fixative cream).**
Ескертулер мен сақтық шаралары. Кейбір адамдарда аллергия немесе крем компоненттеріне жоғары сезімталдық болуы мүмкін. Ауыз қуысының тітіркенуі және басқа жоғарыдағы симптомдары (мысалы, жүрек айнуы сияқты жағымсыз әсерлердің пайда болуы мүмкін. Егер ерекше немесе жағымсыз сезімдер пайда болса, кремді қолдануды тоқтату керек. Егер крем нұсқауларға сәйкес пайдаланылса, кремді аз мөлшерде шу зиян тигізбейді. Нашар сақталған протездер ауыз қуысының шырышты қабығын зақымдауы мүмкін. Ауыз қуысын тексеру және протезді түзету үшін тіс дәрігеріне үнемі барып тұрыңыз. Тұтастің сынай ашылуы үшін қалақ пен шүмек құрғақ болуы керек. Қолданғаннан кейін түтікті қалақпен жабыңыз. 30°С-дан аспайтын температурада, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Қаптаманың тұтастығы бұзылған жағдайда кремді пайдалануға болмайды.
Сауда маркалары GSK компаниялар тобына тиесілі немесе лицензия бойынша пайдаланылады. ©2021 GSK компаниялар тобы немесе оларға лицензиарлар.
Өндіруші: Стаффорд Миллер (Ирландия) Лтд., Ключерейн, Югал Роуд, Дангарван, Уотерфорд графтығы, Ирландия.
ҚР-дағы уәкілетті өкіл: "ГСК КХ КАЗАХСТАН" ЖШС, Алматы қ., Манас к-сі, 32А. Тел. +7 727 2446999, факс +7 727 2446997.

(UZ) **Diş protezlerinin fiksasiyası üçün krem Korega Təravətləndirici dad (Corega Fresh denture fixative cream).**
Xəbərdarlıq və ehtiyat tədbirləri. Bəzi insanlarda kremin komponentlərinə qarşı allergiya və ya yüksək həssaslıq ola bilər. Ağız boşluğunda qıcıqlanma və digər mədə-bağırsaq simptomları (məsələn, ürəkbulanması) kimi yan təsirlərin yaranması mümkündür. Qeyri-adi və ya xoşagəlməz hisslər yarandığı halda, kremdən istifadəni dayandırmaq lazımdır. Tövsiyyələrə uyğun olaraq istifadə olunduqda kremin kiçik miqdarda uddulması zərərsizdir. Diş protezlərinin yaxşı uyğunlaşdırılmaması ağız boşluğunun mukozasına zərər verə bilər. Ağız boşluğunun müayinəsi və protezin düzgün korreksiyası üçün müntəzəm olaraq diş həkimini ziyarət edin. Tubun asanlıqla açılması üçün qapaq və burunçuq quru olmalıdır. İstifadədən sonra tubu qapaqla bağlayın. 30 °C-dən yuxarı olmayan temperaturda, uşaqların əl çatmayan yerdə saxlayın. Qablaşdırma bütövlüyü pozulduqda kremdən istifadə etməyin.
Ticarət markaları GSK şirkətlər qrupuna məxsusdur və ya lisenziyaya əsasən istifadə olunur. © 2021 GSK şirkətlər qrupu və ya onların lisenziarı.
İstehsalçı: Stafford Miller (Irland)yal Ltd., Kloçerein, Yugal Road, Dangarvan, Uoterford qrafliği, İrlandiya / Stafford Miller (Ireland) Ltd., Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4820000003421

КРЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ КОРЕГА ОСВЕЖАЮЩИЙ ВКУС
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



(RU) **Рекомендации по использованию:** При первом применении используйте небольшое количество крема. Чрезмерное количество может просачиваться из-под протеза: если это произошло, в следующий раз используйте меньшее количество крема. Возможно потребуется несколько попыток, чтобы подобрать оптимальное количество. Используйте крем 1 раз в день для надёжной фиксации. Если появляется необходимость использовать крем чаще – обратитесь за консультацией к стоматологу.

Как зафиксировать зубной протез:
1. Помойте и высушите протез.
2. Нанесите крем короткими полосками как показано на рисунке, не слишком близко к краю протеза.
3. Прополощите рот перед фиксацией протеза.
4. Вставьте протез в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсти на несколько секунд для лучшей фиксации.

Как извлечь зубной протез:
1. Прополощите рот водой.
2. Медленно извлеките протез, осторожно раскачивая его.
3. При помощи тёплой воды и мягкой щётки удалите остатки крема с поверхности протеза и изо рта.
4. Используйте таблетки Корега для тщательного очищения протеза, затем ополосните протез водой.

(KZ) **Пайдалану жөніндегі ұсыныстар:** бірінші рет қолданған кезде, кремнің аз мөлшерін пайдаланыңыз. Протездің астынан шамадан тыс мөлшері ағып кету мүмкін: егер бұл жағдай орын алса, келесі жолы кремді аз мөлшерде пайдаланыңыз. Оңтайлы мөлшерді таңдау үшін, бірнеше әрекет қажет болуы мүмкін. Сенімді бекіту үшін, кремді күніне 1 рет пайдаланыңыз. Егер кремді жиі қолдану қажет болса – кеңес алу үшін тіс дәрігеріне хабарласыңыз.

Тіс протезін қалай бекітуге болады:
1. Протезді жуыңыз және құрғатыңыз.
2. Кремді суретте көрсетілгендей етіп қысқа жолақтар түрінде жағыңыз. протездің шетіне жақын қылып жағпаңыз.
3. Протезді бекіту алдында ауызыңызды шайыңыз.
4. Протезді ауыз қуысына салыңыз. жақсылап бекіту үшін, жақтарды мықтап қысып, бірнеше секундқа жабыңыз.

Тіс протезін қалай алу керек:
1. Ауызыңызды сумен шайыңыз.
2. Протезді абайлап айналдыра отырып, ақырын шығарыңыз.
3. Жылы сумен және жұмсақ щеткамен протездің бетінен және ауызынан қалған кремді алып тастаңыз.
4. Протезді мұқият тазалау үшін, Корега таблеткаларын қолданыңыз, содан кейін протезді сумен шайып тастаңыз.

(AZ) **İstifadəyə dair tövsiyələr:** İlk tətbiqetmədə az miqdarda kremdən istifadə edin. Hədsizdən artıq miqdar protezin altından sızla bilər: əgər bu baş verərsə, növbəti dəfə kremin daha az miqdarından istifadə edin. Optimal miqdarı tapmaq üçün bir neçə cəhd tələb oluna bilər. Etibarlı fiksasiya üçün kremdən gündə 1 dəfə istifadə edin. Əgər kremdən daha tez-tez istifadə etmək zərurəti meydana çıxarsa, məsləhət üçün diş həkiminə müraciət edin.


Diş protezini necə fiksasiya etmək olar:
1. Protezi yuyun və qurudun.
2. Kremi protezin kənarına çox yaxın olmayaraq, şəkildə göstərildiyi kimi qısa zolaqlarla çəkin.
3. Protezin fiksasiyasından əvvəl ağzınızı yaxalayın.
4. Protezi ağız boşluğuna yerləşdirin, bərk basın və daha yaxşı fiksasiya üçün çənələrinizi bir neçə saniyə sıxın.

Diş protezini necə çıxarmaq olar:
1. Ağzınızı su ilə yaxalayın.
2. Protezi ehtiyatla yelləyərək yavaş-yavaş çıxarın.
3. İsti su və yumşaq fırçanın köməyi ilə kremin qalıqlarını protezin səthindən və ağızdan təmizləyin.
4. Protezin hərtərəfli təmizlənməsi üçün Korega tabletlərindən istifadə edin, sonra protezi su ilə yaxalayın.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

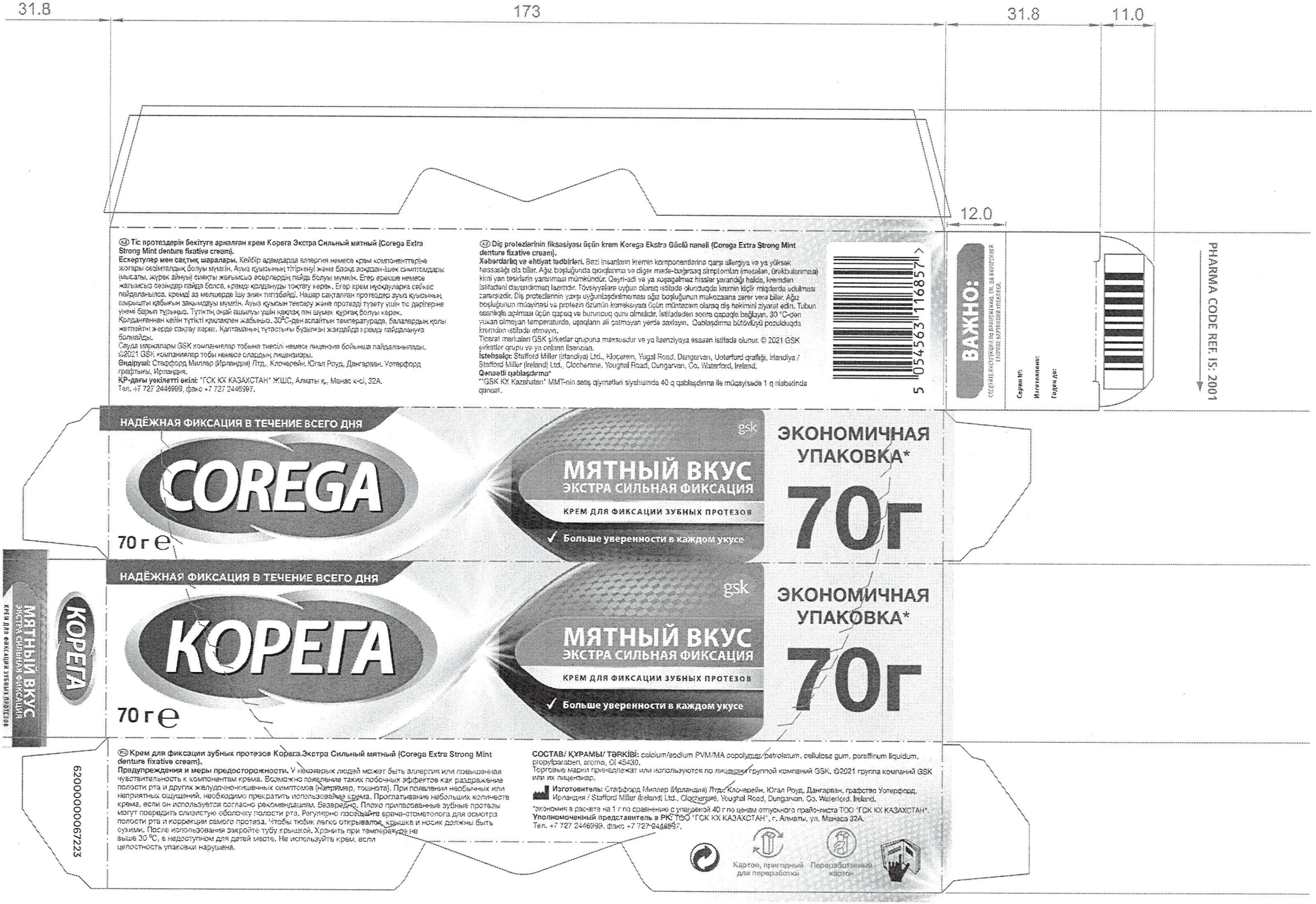

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6200000006722З

КРЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ КОРЕГА ЭКСТРА СИЛЬНЫЙ МЯТНЫЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



(RU) **Рекомендации по использованию:** При первом применении используйте небольшое количество крема. Чрезмерное количество может просачиваться из-под протеза: если это произошло, в следующий раз используйте меньшее количество крема. Возможно потребуется несколько попыток, чтобы подобрать оптимальное количество. Используйте крем 1 раз в день для надёжной фиксации. Если появляется необходимость использовать крем чаще – обратитесь за консультацией к стоматологу.

Как зафиксировать зубной протез:
1. Помойте и высушите протез.
2. Нанесите крем короткими полосками как показано на рисунке, не слишком близко к краю протеза.
3. Прополощите рот перед фиксацией протеза.
4. Вставьте протез в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсти на несколько секунд для лучшей фиксации.

Как извлечь зубной протез:
1. Прополощите рот водой.
2. Медленно извлеките протез, осторожно раскачивая его.
3. При помощи тёплой воды и мягкой щётки удалите остатки крема с поверхности протеза и изо рта.
4. Используйте таблетки Корега для тщательного очищения протеза, затем сполосните протез водой.

(KZ) **Пайдалану жөніндегі ұсыныстар:** Бірінші рет қолданған кезде, кремнің аз мөлшерін пайдаланыңыз. Протездің астынан шамадан тыс мөлшері ағып кетуі мүмкін; егер бұл жағдай орын алса, келесі жолы кремді аз мөлшерде пайдаланыңыз. Оңтайлы мөлшерді тағайындау үшін, бірнеше әрекет қажет болуы мүмкін. Сенімді бекіту үшін, күнде 1 рет пайдаланыңыз. Егер кремді жиі қолдану қажет болса – кеңес алу үшін тіс дәрігеріне хабарласыңыз.

Тіс протезін қалай бекітуге болады:
1. Протезді жуыңыз және құрғатыңыз.
2. Кремді суретте көрсетілгендей етіп қысқа жолақтар түрінде жағыңыз, протездің шетіне жақын қылып жақтаңыз.
3. Протезді бекітер алдында ауызыңызды шайыңыз.
4. Протезді ауыз қуысына салыңыз, жақсылап бекіту үшін, жақтарды мықтап қысып, бірнеше секундқа жабыңыз.

Тіс протезін қалай алу керек:
1. Ауызыңызды сумен шайыңыз.
2. Протезді абайлап айналдыра отырып, ақырын шығарыңыз.
3. Жылы сумен және жұмсақ щеткамен протездің бетінен және ауызынан қалған кремді алып тастаңыз.
4. Протезді жұқпат пазалау үшін, Корега таблеткаларын қолданыңыз, содан кейін протезді сумен шайып тастаңыз.

(AZ) **İstifadəyə dair tövsiyələr:** İlk tətbiqetmədə az miqdarda kremdən istifadə edin. Həddindən artıq miqdar protezin altından sızıla bilər; əgər bu baş verirsə, növbəti dəfə kremin daha az miqdarından istifadə edin. Optimal miqdarı tapmaq üçün bir neçə cəhd tələb oluna bilər. Etibarlı fiksasiya üçün kremdən gündə 1 dəfə istifadə edin. Əgər kremdən daha tez-tez istifadə etmək zərurəti meydana çıxarsa, məsləhət üçün diş həkiminə müraciət edin.

Diş protezini necə fiksasiya etmək olar:
1. Protezi yuyun və qurudun.
2. Kremi protezin kənarına çox yaxın olmayaraq, şəkildə göstərildiyi kimi qısa zolaqlarla çəkin.
3. Protezin fiksasiyəsindən əvvəl ağzınızı yaxalayın.
4. Protezi ağız boşluğuna yerləşdirin, bərk basın və daha yaxşı fiksasiya üçün çənələrinizi bir neçə saniyə sıxın.

Diş protezini necə çıxarmaq olar:
1. Ağzınızı su ilə yaxalayın.
2. Protezi ehtiyatla yelləyərək yavaş-yavaş çıxarın.
3. İsti su və yumşaq fırçanın köməyi ilə kremin qalıqlarını protezin səthindən və ağızdan təmizləyin.
4. Protezin hərtərəfli təmizlənməsi üçün Korega tabletlərindən istifadə edin, sonra protezi su ilə yaxalayın.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru