Самоскрепляющийся эластичный бинт Нестерильный

Описание изделия
Самоскрепляющийся эластичный бинт 3M™ Coban™ — это когезивный эластичный бинт, состоящий из нетканого материала и эластичных волокон. Когезивные свойства позволяют прикрепляться слоям бинта друг к другу, однако не прилипать к другим материалам или коже. Изделие поставляется нестерильным.

Показания к применению
Самоскрепляющийся эластичный бинт Coban™ предназначен для наложения эластичных компрессионных либо фиксирующих повязок и закрепления других повязок либо устройств. Это изделие не разработано, не продается и не предназначено для использования в других целях.

Противопоказания
Не известны


Предупреждения
1. Слои самоскрепляющегося эластичного бинта Coban™ не смещаются относительно друг друга, и наложенная повязка не ослабляется после наложения. НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ бинт с натяжением, чтобы избежать нарушения кровообращения и серьезной травмы. Риск нарушения кровообращения более высок при применении у детей.
2. Время от времени проверяйте область наложения (не реже одного раза в 24 часа) на отсутствие признаков отеков, изменения цвета кожи, боли, онемения, покалываний и других изменений чувствительности. При выявлении этих симптомов немедленно удалите эластичный бинт и обратитесь в медицинское учреждение.
3. НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ самоскрепляющийся эластичный бинт Coban™ непосредственно на открытую рану, поскольку это может привести к заражению.

Внимание!
Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

Меры предосторожности
1. При использовании с целью компрессионной терапии важно убедиться в достаточном артериальном кровообращении, чтобы избежать последующих осложнений. Самоскрепляющийся эластичный бинт Coban™ следует использовать с целью компрессионной терапии только под наблюдением специалиста по уходу за ранами.
2. Не используйте повторно. Повторное использование может нарушить целостность изделия и (или) привести к неблагоприятному результату.

Указания к применению
1. Размотайте самоскрепляющийся эластичный бинт Coban™ примерно на 30 см (12 дюймов), позволив бинту находиться в свободном, ненатянутом состоянии.
2. Без натяжения наложите один тур бинта, перекрыв затем предыдущий. Слегка прижмите область перекрытия туров бинта для удержания конца бинта на месте. (см рис. 1)
3. Продолжайте бинтовать, создавая натяжение в той степени, которая необходима для создания желаемой компрессии. Всегда разматывайте рулон самоскрепляющегося эластичного бинта Coban™ на длину большую, чем необходимо для наложения очередного тура так, чтобы не произошло избыточного натяжения бинта. См. рисунок 2.
4. Когда наложение повязки закончено, отрежьте избыток самоскрепляющегося эластичного бинта Coban™. Закрепите конец бинта легким прижатием.



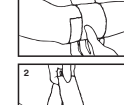

Хранение, срок годности, утилизация
Хранить при комнатной температуре. Не допускайте воздействия избыточного тепла и влажности. Для наилучших результатов храните самоскрепляющийся эластичный бинт Coban™ в его индивидуальной упаковке непосредственно до применения. Срок годности каждой единицы указан на картонной коробке. Номер партии и срок годности указаны на индивидуальной упаковке.

Форма поставки
Поставляется в коробках с отдельно упакованными рулонами. Все рулоны самоскрепляющегося эластичного бинта Coban™ в растянутом состоянии имеют длину 4,5 м (5 ярдов), за исключением 1584L, который в растянутом состоянии имеет длину 6 м (6,5 ярдов). За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю 3M или свяжитесь с нами, перейдя на сайт 3M.com и выбрав страну. В случае серьезных происшествий, связанных с устройством, сообщите в компанию 3M и местный компетентный орган власти (EC) или местный регулирующий орган.

Глоссарий к символам

Название символа	Символ	Описание символа и справочный материал
Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	EC REP	Указывает уполномоченного представителя в Европейском сообществе. Источник: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/EU и/или 2014/30/EU
Код партии	LOT	Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия. Источник: ISO 15223, 5.1.5
Номер по каталогу	REF	Указывает номер медицинского изделия по каталогу изготовителя. Источник: ISO 15223, 5.1.6
Осторожно		Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут, по разным причинам, быть размещены на медицинском изделии. Источник: ISO 15223, 5.4.4
Маркировка CE	CE	Указывает на соответствие медицинского изделия нормативным положениям и директивам ЕС в отношении медицинских устройств.
Содержит или имеет в составе натуральный латекс	LATEX	Указывает, что натуральный каучук или сухой натуральный латекс используется в конструкции медицинского изделия или в его упаковке. Источник: ISO 15223, 5.4.5
Дата изготовления		Указывает дату, когда было изготовлено медицинское изделие. ISO 15223, 5.1.3
Запрет на повторное применение		Указывает, что медицинское изделие предназначено для единичного использования, или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры. Источник: ISO 15223, 5.4.2
Знак «Зелёная точка»		Указывает об участии в финансировании национальной компании по утилизации упаковки в соответствии с европейской директивой №. 94/62 и соответствующим национальным законом. Европейская организация по утилизации упаковки.
Импортер		Обозначает учреждение, занимающееся импортом медицинского изделия в ЕС.
Изготовитель		Указывает изготовителя медицинского изделия, как это определено в Директиве Европейского сообщества 2017/745, ранее Директиве ЕС 93/42/ЕЕС. Источник: ISO 15223, 5.1.1
Медицинское изделие	MD	Указывает, что изделие является медицинским изделием.
Не стерильно	NON STERILE	Указывает, что медицинское изделие не подвергалось стерилизации. Источник: ISO 15223, 5.2.7
Использо-вать до		Указывает дату, после исте-чения которой медицинское изделие не должно использо-ваться. ISO 15223, 5.1.4
Уникальный идентификатор устройства	UDI	Указывает на то, что изделие было испытано и одобрено компанией Underwriters' Laboratories, Inc. для реализации в США и Канаде.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru