

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом лечебным при искусственном анусе БНЗ-02-01

1. Бандаж лечебный при искусственном анусе БЗ-02-01 (далее бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике образованию грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.

1.2 Размер бандажа должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2. Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

3. Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье или без него, застегнуть на застежку текстильную «контакт», вывести калоприемник в отверстие, затем застегнуть клапан.

4. Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать застежку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.



Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом лечебным при искусственном анусе БНЗ-02-01

1. Бандаж лечебный при искусственном анусе БЗ-02-01 (далее бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике образованию грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.

1.2 Размер бандажа должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2. Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

3. Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье или без него, застегнуть на застежку текстильную «контакт», вывести калоприемник в отверстие, затем застегнуть клапан.

4. Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать застежку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.



Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом послеродовым БН2-01

1 Бандаж послеродовый БН2-01 (далее-бандаж) предназначен для женщин в послеродовой период для поддержания мышц брюшного пресса у женщин, а также при опущении внутренних органов малого таза, в послеоперационный период при слабости послеоперационных швов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4	5	6
Обхват талии, мм	600-690	700-790	800-890	900-990	1000-1090	1100-1190	1200-1290

1.2 При индивидуальном изготовлении размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.

3. Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье.

4. Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5. Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

-стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;

-не кипятить;

-после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;

-выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;

-сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;

-не подвергать глажению;

-периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», 212001 г. Могилев, пер.Базный,8.



Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом послеродовым БН2-01

1 Бандаж послеродовый БН2-01 (далее-бандаж) предназначен для женщин в послеродовой период для поддержания мышц брюшного пресса у женщин, а также при опущении внутренних органов малого таза, в послеоперационный период при слабости послеоперационных швов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4	5	6
Обхват талии, мм	600-690	700-790	800-890	900-990	1000-1090	1100-1190	1200-1290

1.2 При индивидуальном изготовлении размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.

3. Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье.

4. Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5. Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

-стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;

-не кипятить;

-после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;

-выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;

-сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;

-не подвергать глажению;

-периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», 212001 г. Могилев, пер.Базный,8.



**Памятка – инструкция по уходу и
эксплуатации за бандажом лечебным
БНЗ-00**

1 Бандаж лечебный БНЗ-00 (далее бандаж) назначается при опущении внутренних органов в послеоперационный период (опущение почек, печени, желудка и кишечника) при слабости послеоперационных швов, прогрессирующем истощении. Бандаж обеспечивает необходимое внутрибрюшное давление, ограничивает смещение внутренних органов.

Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать необходимо с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3 Режим ношения бандажа определяет врач.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев,
пер. Базный, 8.

**Памятка – инструкция по уходу и
эксплуатации за бандажом лечебным
БНЗ-00**

1 Бандаж лечебный БНЗ-00 (далее бандаж) назначается при опущении внутренних органов в послеоперационный период (опущение почек, печени, желудка и кишечника) при слабости послеоперационных швов, прогрессирующем истощении. Бандаж обеспечивает необходимое внутрибрюшное давление, ограничивает смещение внутренних органов.

Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать необходимо с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3 Режим ношения бандажа определяет врач.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев,
пер. Базный, 8.

**Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за бандажом
лечебным при искусственном анусе
БНЗ-02**

1 Бандаж лечебный при искусственном анусе БНЗ-02 (далее бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

Противопоказаниями к назначению являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нателное белье или без него, застегивать, начиная с нижней пуговицы, вывести калоприемник в отверстие, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев,
пер. Базный, 8.

**Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за бандажом
лечебным при искусственном анусе
БНЗ-02**

1 Бандаж лечебный при искусственном анусе БНЗ-02 (далее бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

Противопоказаниями к назначению являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нателное белье или без него, застегивать, начиная с нижней пуговицы, вывести калоприемник в отверстие, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев,
пер. Базный, 8.

1. Бандаж лечебный почечный БНЗ-01 (далее-бандаж) назначает^{ся} при опущении почек, почечно-каменной болезни, опухолях, пиелитах, послеоперационных грыжах и неокрепших рубцах или других послеоперационных состояниях.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом.


2. Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье.

3. Застегивать бандаж необходимо начиная с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку, застегивать ремень-подхват и подбедренники.

4. Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5. Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- утюжить при температуре не более 110°C, исключая эластичные вставки.

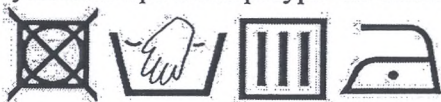

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

1. Бандаж лечебный по () ный БНЗ-01 (далее-бандаж) назначается при опущении почек, почечно-каменной болезни, опухолях, пиелитах, послеоперационных грыжах и неокрепших рубцах или других послеоперационных состояниях.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом.


2. Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье.

3. Застегивать бандаж необходимо начиная с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку, застегивать ремень-подхват и подбедренники.

4. Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5. Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- утюжить при температуре не более 110°C, исключая эластичные вставки.

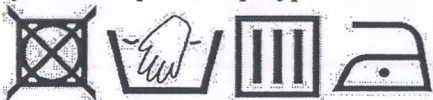

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев, пер. Базный, 8.



1.1 Бандаж лечебный БНЗ-03 (далес-бандаж) назначается при (дении органов малого таза, слабости мышц стенок влагалища, выпадении и опущении шейки матки. Вправимых паховых грыжах и грыжах белой линии живота у женщин. Бандаж служит для удержания органов малого таза, создает правильное внутрибрюшное давление и ограничивает смещение внутренних органов.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- дерматит, гнойничковая инфекция в области применения бандажа;
- невправимые грыжи;
- сдавливание и ущемление органов малого таза;
- синдром портальной гипертензии.

1.3 Размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать нужно с нижней пуговицы, затем затягивать и застегивать ластовицу и нижний ремень-подхват, далее застегнуть основной ремень-подхват.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень похват.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев, пер. Базный, 8.

1.1 Бандаж лечебный (-03 (далее-бандаж) назначается при опущении органов малого таза, слабости мышц стенок влагалища, выпадении и опущении шейки матки. Вправимых паховых грыжах и грыжах белой линии живота у женщин. Бандаж служит для удержания органов малого таза, создает правильное внутрибрюшное давление и ограничивает смещение внутренних органов.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- дерматит, гнойничковая инфекция в области применения бандажа;
- невправимые грыжи;
- сдавливание и ущемление органов малого таза;
- синдром портальной гипертензии.

1.3 Размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать нужно с нижней пуговицы, затем затягивать и застегивать ластовицу и нижний ремень-подхват, далее застегнуть основной ремень-подхват.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень похват.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев, пер. Базный, 8.



Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом-поясом

лечебным грыжевым (пупочным)

БНЗ-05

1. Бандаж-пояс лечебный грыжевой (пупочный) далее (бандаж) применяется при пупочных грыжах различной степени выраженности и вентральных грыжах различной локации.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Режим ношения бандажа-пояса определяется лечащим врачом.

3. Бандаж рекомендуется надевать на нательное белье, в положении лежа.

4. Бандаж фиксируется на теле с помощью застежки на пуговицы или крючки.

5. Грыжа удерживается пелотом и ремнем-подхватом.

6. Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой достать из кармана пелот;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом-поясом

лечебным грыжевым (пупочным)

БНЗ-05

1. Бандаж-пояс лечебный грыжевой (пупочный) далее (бандаж) применяется при пупочных грыжах различной степени выраженности и вентральных грыжах различной локации.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Режим ношения бандажа-пояса определяется лечащим врачом.

3. Бандаж рекомендуется надевать на нательное белье, в положении лежа.

4. Бандаж фиксируется на теле с помощью застежки на пуговицы или крючки.

5. Грыжа удерживается пелотом и ремнем-подхватом.

6. Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой достать из кармана пелот;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом-поясом

лечебным грыжевым (пупочным)

БНЗ-05-01

1. Бандаж-пояс лечебный грыжевой (пупочный) далее (бандаж) применяется при пупочных грыжах различной степени выраженности и вентральных грыжах различной локации.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Режим ношения бандажа-пояса определяется лечащим врачом.

3. Бандаж рекомендуется надевать на нательное белье, в положении лежа.

4. Бандаж фиксируется на теле с помощью застежки на пуговицы или крючки.

5. Грыжа удерживается пелотом и ремнем-подхватом.

6. Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой достать из кармана пелот;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом-поясом

лечебным грыжевым (пупочным)

БНЗ-05-01

1. Бандаж-пояс лечебный грыжевой (пупочный) далее (бандаж) применяется при пупочных грыжах различной степени выраженности и вентральных грыжах различной локации.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Режим ношения бандажа-пояса определяется лечащим врачом.

3. Бандаж рекомендуется надевать на нательное белье, в положении лежа.

4. Бандаж фиксируется на теле с помощью застежки на пуговицы или крючки.

5. Грыжа удерживается пелотом и ремнем-подхватом.

6. Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой достать из кармана пелот;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами грыжевыми паховыми

Бандажи грыжевые паховые (далее бандажи): односторонние БН5-03-00ЛП, БН5-03-01ЛП, БН5-03-02ЛП, БН5-05-00ЛП, БН5-07-00ЛП назначаются при односторонних прямых, косых (пахово-мошоночных) паховых грыжах; двусторонние БН5-04-00, БН5-04-01, БН5-04-02, БН5-04-03, БН5-04-04, БН5-04-05, БН5-08-00 назначаются при двухсторонних прямых, косых (пахово-мошоночных) паховых грыжах. Бандажи предназначены для профилактики увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактики развития одно- или двухсторонних грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, а также для профилактики рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

Бандажи обеспечивают плотное прилегание пелота в области грыжевых ворот, надёжно удерживая грыжу во вправленном состоянии. Противопоказаниями к назначению бандажей являются:

- индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- синдром портальной гипертензии;
- ущемление грыжи;
- невправимые грыжи.

Бандажи БН5-03-00ЛП, БН5-03-01ЛП, БН5-05-00ЛП, БН5-07-00ЛП, БН5-04-00, БН5-04-01, БН5-04-03, БН5-08-00 выпускаются в индивидуальном исполнении и серийно. Бандажи БН5-03-02ЛП, БН5-04-02, БН5-04-04, БН5-04-05 выпускаются только в индивидуальном исполнении.

При серийном изготовлении размер бандажей определяется обхватом бёдер без учёта выступа живота в соответствии с таблицей 1. Предельные отклонения размеров должны быть ± 10 мм.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4
Обхват бёдер без учёта выступа живота, (мм)	780-870	880-970	980-1070	1080-1170	1180-1270

Обхват бёдер без учёта выступа живота измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне бёдер без учёта выступа живота.


Размер бандажа при индивидуальном изготовлении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

Бандажи следует надевать на нательное бельё, в положении лежа. Сначала следует неплотно застегнуть пояс, вправить грыжи, расположить пелоты над местами выпячивания грыж. Затем плотно зафиксировать пояс бандажа, застегнуть и отрегулировать подбедренники, расположив их сзади под ягодичную складку. Вставить нужно аккуратно, придерживая паховые пелоты.

Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом. Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

Для обеспечения правильного ухода за бандажами необходимо:

- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- кожаные детали протирать влажной салфеткой без замачивания;
- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.

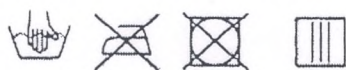

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Могилевский филиал

Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8.

**Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за
бандажом послеоперационным
БНЗ-08**

1. Бандаж послеоперационный БНЗ-08 (далее-бандаж) назначается после операций по поводу грыж с неокрепшими послеоперационными рубцами, с рубцами после вторичного заживления раны, а также с целью профилактики расхождения послеоперационных рубцов.

При обширных грыжах брюшной стенки назначается бандаж с пелотом на место расположения грыжевого кольца.

1.1 Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.2 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4	5	6
Обхват талии, мм	600-690	700-790	800-890	900-990	1000-1090	1100-1190	1200-1290

1.3 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам указанным в бланке заказа.

Жим носки бандажа устанавливает врач.

Надевать бандаж в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой достать планшетки и пелот из карманов;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

**Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом
грыжевым паховым двусторонним на широком эластичном поясе**

БН5-04-06

1.1 Бандаж грыжевой паховый двусторонний на широком эластичном поясе БН5-04-06 (далее бандаж) назначается при двухсторонних прямых, косых (пахово-мошоночных) и паховых грыжах. Для профилактики увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактики развития одно – или двухсторонних грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, а также для профилактики рецидивов грыж в послеоперационном периоде. Бандаж обеспечивает плотное прилегание пелота в области грыжевых ворот, надёжно удерживая грыжу во вправленном состоянии.

1.1 Противопоказаниями к назначению являются:

- индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты применяемых материалов, синдром портальной гипертензии, ущемление грыжи, невправимые грыжи.

1.3 Размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Размер бандажа	0	1	2	3	4
Обхват бедер без учета выступа живота, (мм)	780-870	880-970	980-1070	1080-1170	1800-1270

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье. Сначала следует неплотно застегнуть корпус на застёжку текстильную «контакт», вправить грыжи, расположить пелоты над местами выпячивания грыж. Затем плотно зафиксировать корпус бандажа и отрегулировать подбедерники. Вставить нужно аккуратно, придерживая паховые пелоты.

3 Стим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- перед стиркой вынуть пелоты из кармана;
- стирку производить вручную, при температуре воды 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8.



**Памятка инструкция по уходу и эксплуатации за
бандажом-поясом дородовым БН1-05**

1 Бандаж дородовый БН1-05 (далее-бандаж) предназначен для женщин в дородовый период для поддержания органов брюшной полости и плода в период второй половины беременности и предупреждения растяжения, дряблости брюшной стенки и расхождения прямых мышц живота.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

1.2 Обхват бедер без учета выступа живота измеряют лентой сантиметровой по ТНПА, накладывая ее горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек и замыкая на правой стороне туловища.

Таблица 1.

Размер бандажа	1	2	3	4	5
Обхват бедер без выступа живота, мм	850-940	950-1040	1050-1140	1150-1240	1250-1340

1.3 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливается врачом.

3 Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье. Застегнуть начала застежку основной детали, затем застежку ремня-подхвата.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать низ живота.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- перестиркой вынуть планшетки из карманов;
- стирать производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде. В подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- после высыхания вставить планшетки в карманы;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев,
пер. Базный, 8.