Приложение Б
(обязательное)

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за поясами радикулитным

1 Пояса радикулитные (далее пояса) предназначены для лечения остеохондроз предотвращения или коррекции деформаций позвоночника, снятия болев ощущений при сколиозах и радикулитах, фиксации позвоночника после операц повреждения и других патологических состояниях, имеющие усиленные часть виде жестких вставок или полос различной ширины из металла, пластмассы и др.


2 Пояс необходимо надевать на нижнее белье. Пояс нужно застегнуть текстильную застежку «контакт», затем застегнуть ремень-подхват на текстильн застежку «контакт».

3 Режим носки пояса определяется врачом ортопедом - травматологом. Пер сном пояс нужно снимать.

4 Сняв пояс, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом вытирать насухо полотенцем.

5 Чтобы сохранить внешний вид пояса необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40° С короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощ щетки;
- перед стиркой из пояса следует вынимать планшетки (при наличии), мехову подкладку (при наличии);
- после стирки пояс хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- пояс выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивани
- не подвергать глажению;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вда от отопительных приборов;
- после высыхания в пояс вставить планшетки (при наличии), пристегну меховую подкладку (при наличии).

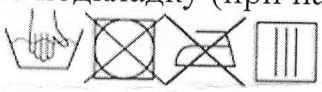



Изготовитель: Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качест производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефоны д справок (0152) 62-42-91, 62-42-92, 62-42-93.
сайт: bpovc-grodno.by
E-mail: grodno@bpovc.by



Генеральный директор
В. А. Наливко

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru