ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование:
Кюветы для анализаторов мочи Urised Cuvettes (кат. номер URS-9974)

Кюветы и способ их применения запатентованы 77 Elektronika Műszeripari Kft, ул. Фехервари 98, 1116 Будапешт, Венгрия.

Введение
Благодарим Вас за выбор кювет для анализаторов мочи серии URISED, произведенных компанией 77 Elektronika Muszeripari Kft., ул. Фехервари 98, 1116 Будапешт, Венгрия (ЕС).
Мы надеемся, что Вы будете довольны этим продуктом.

Общее описание кювет
Кювета изготовлена из высокоочищенного пластика, с двумя круглыми отверстиями на верхней поверхности и двумя оптически прозрачными стенками. Кюветы предназначены для проведения измерений осадка мочи. Кюветы уложены в определенном порядке в штативе (держателе кювет) по 50 шт. Штатив запечатан с одной стороны специальной защитной лентой. Кюветы являются одноразовым расходным материалом для анализаторов мочи серии URISED. Повторное использование запрещено!



Биологическая опасность!
Кюветы могут быть инфицированы в процессе использования. Утилизацию кювет необходимо производить в соответствии с местными правилами обращения с объектами, несущими биологическую опасность.

Технические данные

Количество кювет в штативе	50 кювет
Количество кювет (штативов) в 1 упаковке	600 кювет (12 штативов)
Внешние размеры штатива	23,43 x 23,43 x 143,93 мм
Размер кюветы	14.4 x 9.9 x 1.1 мм
Объем образца для анализа	175 мкл

Примечание!

- **Кюветы предназначены только для однократного использования.**
- **Никогда не прикасайтесь к неиспользованным кюветам, так как любое загрязнение может помешать микроскопической оценке.**

Применение кювет
Кюветы должен устанавливать только специально обученный персонал или сертифицированный специалист.
Кюветы предназначены для исследования осадка мочи на анализаторах мочи серии URISED производства 77 Elektronika.
Штативы с кюветами необходимо разместить в слот держателя кювет или в барабан штатива кювет в соответствии с инструкцией пользователя к соответствующему анализатору.
После установки на борт анализатора штатива (-ов) необходимо удалить защитную ленту.
Анализатор автоматически считывает сигнал от радиочастотной (RFID) метки штатива кювет.

Внимание!

- **Так как моча является жидкостью человеческого происхождения, то она может быть инфицированной и может нести возможность биологических рисков!**
- **Обращайтесь с кюветами и предметами, контактирующими с мочой, с осторожностью! Всегда надевайте резиновые перчатки или иную защиту при работе с кюветами и с анализаторами мочи серии URISED!**

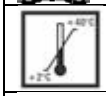
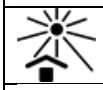
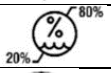
Версия 2.0 16/06/2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Процедуры утилизации
Процедуры утилизации должны отвечать требованиям соответствующих местных норм.

Хранение и срок годности невскрытого продукта
Хранить при температуре: 0^0– +45°C.
Общий срок годности: не менее 24 месяцев с даты производства.
Не допускать попадания влаги, прямых солнечных лучей, хранить вдали от источников тепла.
При надлежащем хранении кюветы сохраняют свои свойства до истечения срока годности, указанного на упаковке.
Запрещается использовать кюветы с истекшим сроком годности.

Символы

	CE маркировка соответствия
	Номер по каталогу
LOT	Код партии
	Изделие медицинское для диагностики *in vitro*
	Производственная площадка производителя
	Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации
	Биологический риск
	Ознакомьтесь с руководством пользователя
	Температурный диапазон
	Использовать до …
	Не допускать воздействия солнечного света
	Количество
	Диапазон влажности
	Не использовать повторно
®	Зарегистрированный товарный знак



URISED®

Производитель:	**Производственная площадка:**	**Уполномоченный представитель на принятие претензий на территории Республики Беларусь:**
77 Elektronika Műszeripari Kft ул. Фехервари 98, 1116 Будапешт, Венгрия Tel: + 36 1 206 - 1480 Факс: + 36 1 206 - 1481 E-mail: sales@e77.hu	77 Elektronika Műszeripari Kft ул. Фехервари 98, 1116 Будапешт, Венгрия Tel: + 36 1 206 - 1480 Факс: + 36 1 206 - 1481 E-mail: sales@e77.hu	ООО «БелИстМедика» 220018, г. Минск, ул. Одоевского, д. 129, каб. 408

Версия 2.0 16/06/2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru