
Brightway®

Nitrile Examination Gloves – Powder Free

Examination Gloves - instructions for use.

How to put on your gloves

1. Clean your hands with soap and water or hand sanitizer before touching the gloves.
2. Remove a glove from the box and make sure there are no obvious tears or holes.
3. Determine the thumb up side of the glove and hold the inner cuff opposing the hand. Slide in your hand into the glove working it into the glove.
4. Repeat the process with the second glove.

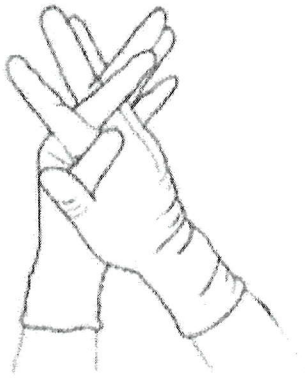

How to remove gloves

1. Thoroughly clean your gloved hands with soap and water or hand sanitizer before touching the mask.
2. Avoid touching your skin when removing the gloves.
3. Pinch the glove at the cuff on the hand with you are removing the gloves from. Gently remove the glove keeping hold of the glove in the remaining gloved hand.
4. With your un-gloved hand pinch the INSIDE of the cuff at the wrist and draw the glove inside out to remove it so it enclosed the previously removed glove.
5. Place the removed gloves into the trash/waste ensuring that, where possible, the gloves are disposed where it cannot be removed from the trash/waste by a 3rd party.
6. Thoroughly clean your hands with soap and water or hand sanitizer.

If gloves have been used in an environment where there is the potential for viral contamination then gloves should be disposed of in clinical waste. If this is not possible the gloves should be disposed of in sealed double bags to avoid contamination downstream.

Brightway Holdings Sdn. Bhd. (180521-T)
Lot 1559, Jalan Ikhtiar, Batu Salah, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel:(603) 3343 1007, 3343 1094

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Brightway®

Нитриловые диагностические перчатки - неопудренные

Смотровые перчатки - инструкции по использованию.

Как надевать перчатки

1. Прежде чем прикасаться к перчаткам, вымойте руки с мылом и водой или обработайте руки антисептиком.
2. Выньте перчатку из коробки и убедитесь, что в ней нет очевидных разрывов или дырок.
3. Определите сторону перчатки, где находится большой палец, и возьмите перчатку за внутреннюю часть манжеты противоположной рукой. Вставьте руку в перчатку.
4. Повторите процесс со второй перчаткой.

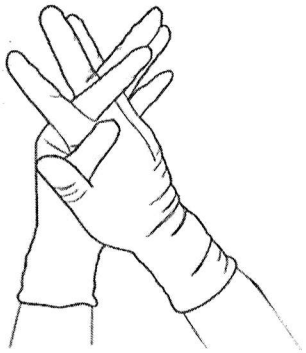

Как снять перчатки

1. Прежде чем прикасаться к маске, тщательно вымойте руки в перчатках с мылом и водой или обработайте их антисептиком.
2. При снятии перчаток постарайтесь не прикасаться к коже.
3. Захватите манжету перчатки на руке, с которой вы ее снимаете. Аккуратно снимите перчатку, не выпуская ее из руки, которая остается в перчатке.
4. Рукой без перчатки захватите внутреннюю сторону манжеты на запястье и выверните перчатку наизнанку, стягивая ее с руки так, чтобы ранее снятая перчатка оказалась внутри.
5. Выбросьте снятые перчатки в мусор/отходы, убедившись, что по возможности перчатки будут утилизированы так, чтобы третья сторона не могла вынуть их из мусора/отходов.
6. Тщательно вымойте руки с мылом и водой или обработайте их антисептиком для рук.

Если перчатки использовались в среде, где существует вероятность вирусного заражения, их следует утилизировать вместе с медицинскими отходами. Если это невозможно, перчатки следует утилизировать в запечатанных двойных пакетах, чтобы избежать дальнейшего загрязнения.

Brightway Holdings Sdn. Bhd. (169521-T)
Lot 1559, Jalan Istimewa, Batu Selah, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Малайзия). Тел.:(603) 3343 1007, 3343 109

Верно: Директор ФГБУ [illegible] А.Ю. Фудалев
27.12.21

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru