НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

EUROSTERIL®

Стерилизационные пакеты и рулоны Eurosteril® используются для стерилизации медико-хирургических приборов и изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации паром или этилен-оксидным газом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Пакеты и рулоны имеют 2 слоя: один из высокоустойчивой медицинской бумаги, другой – из полиэстера/полипропилена голубого цвета.
Они доступны в форме рулоны, пакетов и самоклеящихся пакетов различных размеров для удовлетворения разнообразных нужд упаковки.

Температура склеивания от 170°C до 200°C.

Отвороты на обоих концах пакетов обеспечивают их открытие и заполнение.
Печать на запечатанном крае представляет собой две параллельные полосы, разделенные одинарным рифлением для рулонов шириной 5 см, и три параллельные полосы, разделенные двойным рифлением для всех других размеров.

На бумажном слое печатаются два химических индикатора процесса стерилизации. Один для парового, другой – для этилен-оксидного, свидетельствующие об окончании процесса стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделия в темном месте при температуре от 5°C до 30°C, при относительной влажности воздуха < 50%.
Хранить вдали от прямых источников тепла.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты изготовления (дата изготовления указана на упаковке)

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ

Хранение: простерилизованные пакеты и рулоны должны храниться максимально короткое время, по возможности содержаться в чистых закрытых помещениях при контролируемых температуре и влажности.

При условии соблюдения вышеприведенных правил хранения (при максимальной температуре от 8°C до 23°C и относительной влажности от 30% до 70%) изделия Eurosteril могут сохранять стерильность вложенных инструментов до 6 месяцев и в любом случае до истечения срока годности изделий Eurosteril, если он составляет менее 6 месяцев от даты стерилизации.

УПАКОВКА

Рулоны длиной 200 м доступны в модификациях с разной шириной: 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см, 40 см.

Рулоны длиной 100 м. шириной: 20 см x 5 см, 25 см x 5 см, 25 см x 6,5 см.

Пакеты: 5 см x 25 см, 7,5 см x 25 см, 10 см x 25 см.

Самоклеящиеся пакеты: 9 см x 25 см, 14 см x 26 см, 19 см x 33 см.

Уполномоченный представитель производителя
***Euronda S.p.A.** (Италия)*
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент"
220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99
email: belexpodent@yandex.ru
web: belexpodent.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ РУЛОНЫ И ПАКЕТЫ

EUROSTERIL® STERILIZATION ROLLS AND POUCHES

Euronda®

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Размещение загрузки

То, каким образом размещена загрузка стерилизатора, также весьма важно для процесса стерилизации. Всегда соблюдайте ограничение по максимальной загрузке, указанное в данной инструкции, это значение проверено производителем и является обязательным.

- Всегда используйте подставки для кювет для обеспечения циркуляции пара.
- Не ставьте в камеру незагруженные кюветы.
- Неиспользованные кюветы загружайте дном вверх, чтобы не было скопления воды в бойлере.
- Если есть необходимость стерилизовать неупакованные инструменты, рекомендуется прикрыть кювету листами специальной бумаги, чтобы не было прямого контакта инструментов с кюветой.
- Инструменты из различных материалов должны быть рассортированы и помещены в разные кюветы.
- Для лучшей стерилизации раскройте такие инструменты, как пинцеты, ножницы и другие инструменты из нескольких частей.
- Инструменты должны находиться достаточно далеко друг от друга в течение всего процесса стерилизации.
- Не наваливайте инструменты на кювету: перегрузка может испортить стерилизацию.
- Зеркала необходимо укладывать стеклом вниз.
- Не ставьте кюветы одну на другую, пользуйтесь подставкой. Между кюветами должно оставаться пространство для циркуляции пара во время фазы стерилизации и далее для просушки.
- Химический индикатор стерилизации кладите на каждую кювету.

- Трубки -

- После обычной промывки трубок, промойте их водой с пирогеном.
- Кладите их в кювету так, чтобы оба конца были свободны, и чтобы они не изгибались и не вращались.

- Упаковки -

- Размещайте упаковки одну над другой, они не должны касаться стенок камеры.

- Материал в упаковках -

- При стерилизации материала в упаковках, упаковки на кюветах не должны лежать одна на другой (Рис. А3-1).
- Пакет должен лежать прозрачной стороной вниз (контактируя с кюветой) и бумажной стороной вверх (Рис. А3-2). Инструменты должны быть разложены по отдельным пакетам.

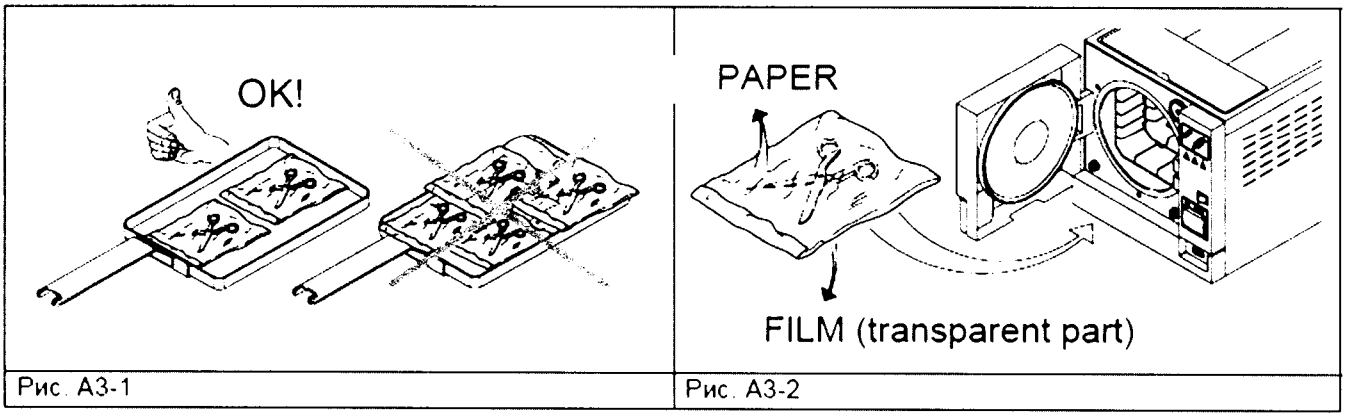


Рис. А3-1 Рис. А3-2

После выполнения перечисленных выше указаний, поместите держатель кювет и кюветы в стерилизационную камеру.

Euronda®

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru