CE 2265

REVOFIL Soft Filler 2 мл

AQUASHINE
AQUASHINE[BR]

Описание

REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] — прозрачный и стерильный гель, поставляемый в стеклянном шприце. Этот продукт предназначен для однократного использования. REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] — уникальная форма гиалуроновой кислоты неживотного происхождения концентрацией 15 мг/мл и пептидного комплекса. Каждая коробка содержит один предварительно наполненный шприц объемом 2 мл с REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] и две этикетки для отслеживания (одна для пациента, а другая для хранения врачом в карточке пациента). Объем каждого шприца указан на упаковке коробки, а также на каждом шприце.

Состав

	AQUASHINE	**AQUASHINE[BR]**
Растворитель	Физиологический раствор с фосфатным буфером	
Естественный увлажнитель	Гиалуронат натрия (1,5%)	
Пептиды	Олигопептид-34, Ацетил декапептид -3, Олигопептид-24, Олигопептид-72	Олигопептид-34, Олигопептид-51, Декапептид-23, Олигопептид-72

Назначение

REVOFIL Aquashine / REVOFIL Aquashine[BR] вводят в средний и глубокий слой дермы в местах ослабления кожи, таких как морщины на лице, складки или носогубные складки, при необходимости имплантации для лечения повреждений подкожной ткани, вызванных химическим, физическим или травматическим воздействием, а также для восстановления формы лица.

Противопоказания

REVOFIL Aquashine / REVOFIL Aquashine[BR] не следует применять:

- для инъекций в веки
- для выполнения прочих инъекций, кроме подкожных
- в комбинации с пилингом, лазерной или ультразвуковой обработкой
- для пациентов с кожными заболеваниями, воспалением или инфекцией в месте выполнения процедуры или вблизи него
- для пациентов с гиперчувствительностью к гиалуроновой кислоте
- для пациентов, у которых была серьезная аллергия или анафилактический шок
- для пациентов с аутоиммунными заболеваниями
- при беременности, кормлении грудью и для детей в возрасте до 18 лет
- при возможных взаимодействиях с другими филлерами для которых не проводились соответствующие исследования, не рекомендуется вводить REVOFIL Aquashine / REVOFIL Aquashine[BR] в места, где присутствуют другие филлеры

Предупреждения и побочные эффекты

- Отложите использование REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] в местах с активными воспалительными процессами (кожные высыпания, такие как кисты, прыщи, сыпь или крапивница) или инфекцией до восстановления контроля над процессом.
- Реакции в месте инъекции (например, зуд, покраснение, повышенная чувствительность или боль) на REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] в виде, в основном, кратковременного слабого или умеренного воспаления начиная сразу после процедуры и длительностью до 7 дней.
- REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] не должны вводиться в кровеносные сосуды. После инъекции в кожный сосуд или возле него, например, в области глабиллярных линий, могут возникать локализованные поверхностные некрозы. Считается, что это происходит в результате травмы, закупорки или повреждения кровеносных сосудов.
- Сообщалось об отсроченном возникновении воспалительных папул после использования кожных филлеров.
- Воспалительные папулы, которые могут возникать редко, следует рассматривать и лечить как инфекцию мягких тканей.

Меры предосторожности

- REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] должны применяться только профессионалами, обученными техникам проведения инъекций для коррекции морщин и увеличения объема губ.
- REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] упакованы для использования с одним пациентом. Не стерилизуйте повторно. Не используйте, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Как и при всех чрескожных инъекциях введение REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] несет риск инфицирования. Следует соблюдать стандартные меры предосторожности при инъекциях.
- Филлер с гиалуроновой кислотой может вызвать гиперпигментацию в месте введения.
- REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] следует с осторожностью использовать для пациентов, проходящих иммуносупрессивную терапию.
- В местах введения REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] могут возникать синяки или кровотечения. REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] следует с осторожностью использовать для пациентов, которые в последние 3 недели прошли терапию с использованием тромболитиков, антикоагулянтов или ингибиторов скопления тромбоцитов.
- С использованными шприцами и иглами следует обращаться, как с потенциальной биологической угрозой. Утилизация должна выполняться в соответствии с принятыми практиками и требованиями.
- Пациенты должны свести к минимуму чрезмерное воздействие солнца на обработанную область. Следует избегать воздействия света УФ-ламп или чрезмерного холода до исчезновения любых первоначальных раздражений и покраснений.
- REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] представляет собой прозрачный, бесцветный гель без включений. Не используйте шприц, если его содержимое имеет признаки расслоения и/или помутнения. Стекло шприца может быть повреждено при неосторожном обращении. Следует соблюдать осторожность во избежание повреждений кожи или других травм при обращении со стеклянным шприцем или осколками стекла.
- REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] не должны смешиваться с другими продуктами перед введением содержимого устройства.
- При необходимости дополнительных инъекций REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] минимальный интервал времени между первой и дополнительной инъекций должен составлять 2–4 недели.

Процедура

Рекомендации перед процедурой

Перед процедурой пациент не должен принимать аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты, зверобой или пищевые добавки с высоким содержанием витамина Е. Эти вещества могут усилить образование синяков и кровотечений в месте инъекции.

1. Необходимо проконсультировать пациента и обсудить соответствующие показания, риски, выгоды и ожидаемые реакции на применение REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR]. Перед началом процедуры порекомендуйте пациенту необходимые меры предосторожности.
2. Оцените нужду пациента в соответствующем обезболивании необходимом для обеспечения комфорта — местная анестезия или блокада нервов.
3. Лицо пациента должно быть вымыто мылом и водой и высушено чистым полотенцем. Очистите область, которая будет обрабатываться, спиртом или другим подходящим антисептиком.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. При выполнении инъекций REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] рекомендуется использовать стерильные перчатки.
5. Перед инъекцией осторожно нажмите на поршень шприца до появления маленькой капли на кончике иглы.
6. REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] вводятся с использованием тонкой стерилизованной иглы (27G x 13 мм или 30G x 13 мм). Стерилизованная игла вводится под углом примерно 30° параллельно длине морщины или складки. REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] должны вводиться в средний и глубокий слои дермы. При слишком поверхностном введении REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] могут образоваться видимые опухоли и/или голубоватые изменения цвета кожи.
7. Вводите REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] равномерно нажимая на поршень шприца. Важно, чтобы инъекция прекращалась непосредственно перед извлечением шприца из кожи, чтобы предотвратить утечку или слишком поверхностное завершение инъекции.
8. Выполняйте коррекцию только до достижения 100% желаемого объемного эффекта. Не делайте чрезмерную коррекцию. При деформациях кожи наилучшие результаты достигаются, когда дефект можно вручную растянуть до его исчезновения. Степень и длительность коррекции зависят от характера обрабатываемого дефекта, стресса кожи в месте инъекции, глубины заполнения кожи и техники инъекции.
9. Типичное применение при каждом сеансе процедуры зависит от места и глубины морщин. Либо нанесите на очищенную поверхность кожи и дождитесь полного впитывания.
10. После процедуры вклейте этикетку для отслеживания в карточку пациента.

Техники инъекций

1. REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR] могут вводиться с использованием различных техник, выбор которых зависит от опыта и предпочтений врача, выполняющего инъекции, а также характеристик пациента.
2. Последовательные уколы представляют собой несколько близкорасположенных инъекций вдоль морщин или складок. Несмотря на то, что последовательные уколы позволяют очень точно размещать филлер, они создают множество ранок, которые могут быть нежелательны для некоторых пациентов.
3. Линейная инъекция выполняется путем полного введения иглы в середину морщины или складки и инъекции филлера вдоль морщины/складки в виде «нити». Наиболее часто инъекция начинается после полного введения иглы при ее извлечении. Но инъекцию также можно начинать при введении иглы (техника «выталкивания перед собой»).
4. Последовательная инъекция — техника, использующая элементы обоих подходов.
5. Перекрестная техника состоит из серии параллельных линейных инъекций, выполняемых с интервалом 5–10 мм, за которым следует новая серия линейных инъекций под прямым углом к первой серии инъекций. Эта техника особенно полезна при формировании контуров лица, когда необходимо максимальное покрытие области обработки.
6. Для окончательного результата процедуры правильная техника инъекций имеет решающее значение. Рассечение субэпидермальной плоскости боковым движением иглы, быстрое введение (>0,3 мл/мин) или большие объемы могут вызвать увеличение числа кратковременных эпизодов образования синяков, опухолей, покраснений, боли или повышенной чувствительности в месте инъекции.
7. После завершения инъекции место обработки следует аккуратно помассировать, чтобы оно соответствовало контуру окружающих тканей. При чрезмерной коррекции для получения оптимальных результатов необходимо сильно помассировать область между пальцев или на нижележащей поверхностной кости.
8. При появлении так называемого «побледнения», то есть когда кожа сверху белеет, необходимо немедленно прекратить инъекцию и массировать область до тех пор, пока она не вернется к нормальному цвету.
9. Если морщина нуждается в дальнейшей обработке, эту же процедуру следует повторять до получения удовлетворительных результатов. Для получения требуемой коррекции может понадобиться дополнительная инъекция REVOFIL Aquashine, Aquashine[BR].
10. Если область обработки опухает сразу после процедуры, на нее на короткое время можно поместить упаковку со льдом. Во избежание получения термической травмы лед следует использовать с осторожностью, если область обработки еще находится под воздействием анестезии.
11. В области инъекции могут проявляться реакции от мягких до умеренных, которые обычно проходят через несколько дней.

Условия хранения

Хранить при температуре 2–25 °C вдали от солнечного света. Перед использованием убедитесь в отсутствии видимых признаков повреждения.

Срок годности

24 месяца при соблюдении рекомендуемых условий.

Производитель

Caregen Co., Ltd.
46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 14119 Южная Корея
тел.: +82-31-420-9200
факс: +82-31-452-3869
www.caregen.co.kr
e-mail: sales@caregen.com


Представитель в ЕС

EC REP

Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Брюссель, Бельгия
тел.: +32-2-732-59-54
факс: +32-2-732-60-03
e-mail: mail@obelis.net

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 2265

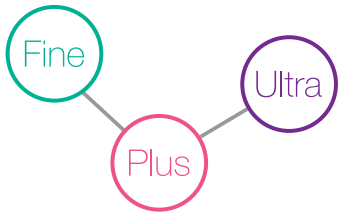

REVOFIL

Soft Touch Filler
Sub Touch Filler
Deep Touch Filler

Описание

REVOFIL Fine, Plus, Ultra — прозрачный, стерильный гель гиалуроновой кислоты (HA), вырабатываемый бактериями стрептококка, химически связанный с BDDE (бутандиеловый диглицедиловый эфир), стабилизированный и суспендированный в физиологическом растворе с фосфатным буфером при pH=7 и концентрации 23 мг/мл (HA) и пептидным комплексом. Каждая коробка содержит один предварительно наполненный шприц с REVOFIL Fine, Plus, Ultra. Для каждого шприца в коробке находятся два стерильные иглы (27G x 13 мм или 30G x 13 мм: из-за разницы в комплексной вязкости стерильная игла 30G должна использоваться с REVOFIL Fine, а игла 27G для REVOFIL Plus и REVOFIL Ultra) и две этикетки для отслеживания (одна для пациента, а другая для хранения врачом в карточке пациента). Объем каждого шприца указан на упаковке коробки, а также на шприце. Линия REVOFIL состоит из филлеров Soft Touch Filler REVOFIL Fine, Sub Touch Filler REVOFIL Plus и Deep Touch Filler REVOFIL Ultra. Сырье и метод производства всех трех продуктов идентичны, но их комплексная вязкость существенно отличается. Комплексная вязкость снижается в следующем порядке REVOFIL Ultra, REVOFIL Plus и REVOFIL Fine. Применяемый продукт следует выбирать в зависимости от состояния морщин.

Состав

Физиологический раствор с фосфатным буфером
Кроссполимер-2 гиалуроната натрия
Олигопептид-72, Олигопептид-50

Назначение

REVOFIL Fine, Plus, Ultra вводят в средний и глубокий слой дермы в местах ослабления кожи, таких как морщины, складки или носогубные складки, при необходимости имплантации для лечения повреждений подкожной ткани, вызванных химическим, физическим или травматическим воздействием, а также для восстановления формы лица.

REVOFIL Fine, Plus, Ultra биологически разлагаются и со временем медленно рассасываются. Для получения оптимальной коррекции обычно необходима одна, но иногда могут потребоваться две процедуры в зависимости от глубины морщин. Последующие периодические сеансы инъекций позволяют поддерживать желаемую степень коррекции.

Противопоказания

REVOFIL Fine, Plus, Ultra не следует применять:

- для инъекций в веки
- для выполнения прочих инъекций, кроме подкожных
- в комбинации с пилингом, лазерной или ультразвуковой обработкой
- для пациентов с кожными заболеваниями, воспалением или инфекцией в месте выполнения процедуры или вблизи него
- для пациентов с гиперчувствительностью к гиалуроновой кислоте
- для пациентов, у которых была серьезная аллергия или анафилактический шок
- для пациентов с аутоиммунными заболеваниями
- при беременности, кормлении грудью и для детей в возрасте до 18 лет
- при возможных взаимодействиях с другими филлерами для которых не проводились соответствующие исследования, не рекомендуется вводить REVOFIL Fine, Plus, Ultra в места, где присутствуют другие филлеры

Предупреждения и побочные эффекты

- Отложите использование REVOFIL Fine, Plus, Ultra в местах с активными воспалительными процессами (кожные высыпания, такие как кисты, прыщи, сыпь или крапивница) или инфекцией до восстановления контроля над процессом.
- Реакции в месте инъекции (например, зуд, покраснение, повышенная чувствительность или боль) на REVOFIL Fine, Plus, Ultra в виде, в основном, кратковременного слабого или умеренного воспаления начиная сразу после процедуры и длительностью до 7 дней.
- REVOFIL Fine, Plus, Ultra не должны вводиться в кровеносные сосуды. После инъекции в кожный сосуд или возле него, например, в области глабиллярных линий, могут возникать локализованные поверхностные некрозы. Считается, что это происходит в результате травмы, закупорки или повреждения кровеносных сосудов.
- Сообщалось об отсроченном возникновении воспалительных папул после использования кожных филлеров.
- Воспалительные папулы, которые могут возникать редко, следует рассматривать и лечить как инфекцию мягких тканей.


Меры предосторожности

- REVOFIL Fine, Plus, Ultra должны применяться только профессионалами, обученными техникам проведения инъекций для коррекции морщин и увеличения объема губ.
- REVOFIL Fine, Plus, Ultra упакованы для использования с одним пациентом. Не стерилизуйте повторно. Не используйте, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Как и при всех чрескожных инъекциях введение REVOFIL Fine, Plus, Ultra несет риск инфицирования. Следует соблюдать стандартные меры предосторожности при инъекциях.
- Филлер с гиалуроновой кислотой может вызвать гиперпигментацию в месте введения.
- REVOFIL Fine, Plus, Ultra следует с осторожностью использовать для пациентов, проходящих иммуносупрессивную терапию.
- В местах введения REVOFIL Fine, Plus, Ultra могут возникать синяки или кровотечения. REVOFIL Fine, Plus, Ultra следует с осторожностью использовать для пациентов, которые в последние 3 недели прошли терапию с использованием тромболитиков, антикоагулянтов или ингибиторов скопления тромбоцитов.
- С использованными шприцами и иглами следует обращаться, как с потенциальной биологической угрозой. Утилизация должна выполняться в соответствии с принятыми практиками и требованиями.
- Пациенты должны свести к минимуму чрезмерное воздействие солнца на обработанную область. Следует избегать воздействия света УФ-ламп или чрезмерного холода до исчезновения любых первоначальных раздражений и покраснений.
- REVOFIL Fine, Plus, Ultra представляет собой прозрачный, бесцветный гель без включений. Не используйте шприц, если его содержимое имеет признаки расслоения и/или помутнения. Стекло шприца может быть повреждено при неосторожном обращении. Следует соблюдать осторожность во избежание повреждений кожи или других травм при обращении со стеклянным шприцем или осколками стекла.
- REVOFIL Fine, Plus, Ultra не должны смешиваться с другими продуктами перед введением содержимого устройства.
- При необходимости дополнительных инъекций REVOFIL Fine, Plus, Ultra минимальный интервал времени между первой и дополнительной инъекций должен составлять 2–4 недели.

Указания по сборке

Установите иглу 27G x 13 мм или 30G x 13 мм на шприц (стерильная игла 30G используется для REVOFIL Fine, а 27G — для REVOFIL Plus, Ultra). Для безопасного использования REVOFIL Fine, Plus, Ultra важно правильно установить иглу. Неправильная установка может привести к отделению иглы от шприца во время инъекции.
См. рисунки:

1. Осторожно открутите крышку наконечника шприца (A).

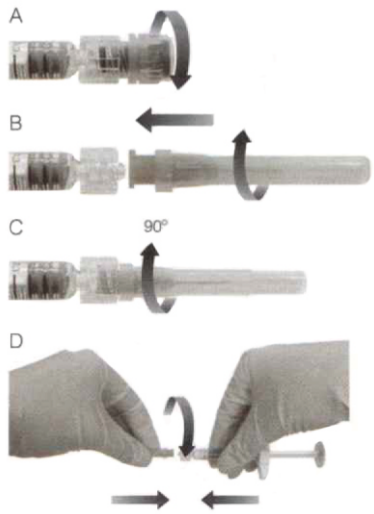

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. Легко возьмитесь за узкую часть кожуха иглы; установите иглу на адаптер Luer-Lok (B) и вращайте ее до упора. Крепко возьмитесь за более широкую часть кожуха иглы.
3. Нажмите и поверните кожух иглы на 90° (четверть оборота). Этот поворот необходим для фиксации иглы на шприце.
4. Снимите кожух иглы.
5. Большим и указательным пальцами плотно удерживайте стеклянный цилиндр шприца и адаптер Luer-Lok. Другой рукой возьмитесь за кожух иглы. Для обеспечения правильной сборки толкайте и вращайте одновременно.

Процедура

Рекомендации перед процедурой

Перед процедурой пациент не должен принимать аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты, зверобой или пищевые добавки с высоким содержанием витамина Е. Эти вещества могут усилить образование синяков и кровотечений в месте инъекции.

1. Необходимо проконсультировать пациента и обсудить соответствующие показания, риски, выгоды и ожидаемые реакции на применение REVOFIL Fine, Plus, Ultra. Перед началом процедуры порекомендуйте пациенту необходимые меры предосторожности.
2. Оцените нужду пациента в соответствующем обезболивании, необходимом для обеспечения комфорта — местная анестезия или блокада нервов.
3. Лицо пациента должно быть вымыто мылом и водой и высушено чистым полотенцем. Очистите область, которая будет обрабатываться, спиртом или другим подходящим антисептиком.
4. При выполнении инъекций REVOFIL Fine, Plus, Ultra рекомендуется использовать стерильные перчатки.
5. Перед инъекцией осторожно нажмите на поршень шприца до появления маленькой капли на кончике иглы.
6. REVOFIL Fine, Plus, Ultra вводятся с использованием тонкой иглы (27G x 13 мм или 30G x 13 мм). Игла вводится под углом примерно 30° параллельно длине морщины или складки. REVOFIL Fine, Plus, Ultra должны вводиться в средний и глубокий слои дермы. При слишком поверхностном введении REVOFIL Fine, Plus, Ultra могут образоваться видимые опухоли и/или голубоватые изменения цвета кожи.
7. Вводите REVOFIL Fine, Plus, Ultra равномерно нажимая на поршень шприца. Важно, чтобы инъекция прекращалась непосредственно перед извлечением шприца из кожи, чтобы предотвратить утечку или слишком поверхностное завершение инъекции.
8. Выполняйте коррекцию только до достижения 100% желаемого объемного эффекта. Не делайте чрезмерную коррекцию. При деформациях кожи наилучшие результаты достигаются, когда дефект можно вручную растянуть до его исчезновения. Степень и длительность коррекции зависят от характера обрабатываемого дефекта, стресса кожи в месте инъекции, глубины заполнения кожи и техники инъекции.
9. Типичное применение при каждом сеансе процедуры зависит от места и глубины морщин. Либо нанесите на очищенную поверхность кожи и дождитесь полного впитывания.
10. После процедуры вклейте этикетку для отслеживания в карточку пациента.

Техники инъекций

1. REVOFIL Fine, Plus, Ultra могут вводиться с использованием различных техник, выбор которых зависит от опыта и предпочтений врача, выполняющего инъекции, а также характеристик пациента.
2. Последовательные уколы представляют собой несколько близкорасположенных инъекций вдоль морщин или складок. Несмотря на то, что последовательные уколы позволяют очень точно размещать филлер, они создают множество ранок, которые могут быть нежелательны для некоторых пациентов.
3. Линейная инъекция выполняется путем полного введения иглы в середину морщины или складки и инъекции филлера вдоль морщины/складки в виде «нити». Наиболее часто инъекция начинается после полного введения иглы при ее извлечении. Но инъекцию также можно начинать при введении иглы (техника «выталкивания перед собой»).
4. Последовательная инъекция — техника, использующая элементы обоих подходов.
5. Перекрестная техника состоит из серии параллельных линейных инъекций, выполняемых с интервалом 5–10 мм, за которым следует новая серия линейных инъекций под прямым углом к первой серии инъекций. Эта техника особенно полезна при формировании контуров лица, когда необходимо максимальное покрытие области обработки.
6. Для окончательного результата процедуры правильная техника инъекций имеет решающее значение. Рассечение субэпидермальной плоскости боковым движением иглы, быстрое введение (>0,3 мл/мин) или большие объемы могут вызвать увеличение числа кратковременных эпизодов образования синяков, опухолей, покраснений, боли или повышенной чувствительности в месте инъекции.
7. После завершения инъекции место обработки следует аккуратно помассировать, чтобы оно соответствовало контуру окружающих тканей. При чрезмерной коррекции для получения оптимальных результатов необходимо сильно помассировать область между пальцев или на нижележащей поверхностной кости.
8. При появлении так называемого «побледнения», то есть когда кожа сверху белеет, необходимо немедленно прекратить инъекцию и массировать область до тех пор, пока она не вернется к нормальному цвету.
9. Если морщина нуждается в дальнейшей обработке, эту же процедуру следует повторять до получения удовлетворительных результатов. Для получения требуемой коррекции может понадобиться дополнительная инъекция REVOFIL Fine, Plus, Ultra.
10. Если область обработки опухает сразу после процедуры, на нее на короткое время можно поместить упаковку со льдом. Во избежание получения термической травмы лед следует использовать с осторожностью, если область обработки еще находится под воздействием анестезии.
11. В области инъекции могут проявляться реакции от мягких до умеренных, которые обычно проходят через несколько дней.

Стерильные иглы

- Следуйте национальным, местным или отраслевым рекомендациям по обращению с острыми медицинскими устройствами и их утилизации. В случае травмы обратитесь за срочной медицинской помощью.
- Во избежание поломки иглы не пытайтесь выпрямлять изогнутую иглу — выбросите ее и завершите процедуру с помощью запасной иглы.
- Не устанавливайте кожух на использованные иглы. Это опасная практика, которую следует избегать.
- Утилизируйте незащищенные иглы в специально предназначенных сборниках для острых предметов.
- REVOFIL Fine, Plus, Ultra поставляются с иглами, которые не имеют специализированной защиты от травм.
- Введение REVOFIL Fine, Plus, Ultra требует непосредственной визуализации процесса, полного и постепенного введения иглы, что делает специализированную защиту невозможной. Во избежание воздействия острых предметов следует проявлять осторожность.

Условия хранения

Хранить при температуре 2–25 °C вдали от солнечного света. Перед использованием убедитесь в отсутствии видимых признаков повреждения.

Срок годности

24 месяца при соблюдении рекомендуемых условий.

Производитель

Caregen Co., Ltd.
46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 14119 Южная Корея
тел.: +82-31-420-9200
факс: +82-31-452-3869
www.caregen.co.kr
e-mail: sales@caregen.com

Представитель в ЕС

EC REP

Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Брюссель, Бельгия
тел.: +32-2-732-59-54
факс: +32-2-732-60-03
e-mail: mail@obelis.net

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru