«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
_____ В.П. Чуев
"___" _____ 2021 г.

Версия/Version: № 10, 19.09.2019

RU *Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала для временных пломб
"Дентин-паста"
по ТУ 9391-005-45814830-2003

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал для временных пломб "Дентин-паста" (далее по тексту – материал "Дентин-паста") предназначен для временного пломбирования полостей на период 1-2 недели, для временной изоляции лекарственного средства в кариозной полости, а также в качестве подкладки под пломбы из амальгам.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал "Дентин-паста" является цинк-сульфатным цементом на полимерной основе и представляет собой готовую к применению однородную пасту. Материал "Дентин-паста" отверждается под воздействием влаги полости рта в течение 2-3-х часов, в процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое прилегание. Материал "Дентин-паста" обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и превосходной адгезией к твердым тканям зуба, не вызывает раздражения тканей полости рта.

Материал "Дентин-паста" выпускается белого или розового цвета с различными отдушками (гвоздика, мята, цитрон, клубника, вишня, лимон) и без отдушки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Перед пломбированием полость зуба необходимо увлажнить. Шпателем отобрать необходимое количество материала "Дентин-паста", соответствующее размеру пломбируемой полости, и поместить на стеклянную пластину или на лист блокнота для замешивания. ***Сразу герметично закрыть банку с пастой для предотвращения поверхностного твердения материала!*** Необходимое количество материала внести в полость зуба и провести конденсацию пасты штопфером.

ВНИМАНИЕ: ***Оставшийся на стеклянной пластине пломбировочный материал запрещается помещать обратно в банку с материалом «Дентин-паста».***

Поверхностное твердение материала начинается в течение 20-30 минут. Через 2-3 часа временная пломба способна выдержать жевательные нагрузки (пациенту не рекомендуется принимать пищу до истечения этого времени).

Материал "Дентин-паста" легко удаляется из полости крупными фрагментами с помощью экскаватора или зонда. Остаток материала вымывается из полости водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (банка)	- 50 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Допускается выпуск материала "Дентин-паста" другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПРОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом месте (относительная влажность < 50%) в плотно закрытой таре при температуре **от +5°С до +25°С.**

Срок годности - **2 года.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30^{0}С до +30^{0}С.**

ВНИМАНИЕ:

Избегать попадания влаги, прямых солнечных лучей и непосредственной близости нагревательных приборов!

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала "Дентин-паста" и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00996 от 02.10.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество
“Опытно-экспериментальный завод”
“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

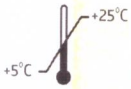
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

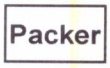
 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date

 - Код партии/Batch number

 - Температурный диапазон/Temperature limitation

 - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки / Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru