Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Велоколяска прогулочная рычажная для детей ПрРД и подростков ПрРП

Руководство по эксплуатации
ЦСИЕ.03.178.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Велоколяска к пользователю поступает в рабочем состоянии, в чехле. Для использования велоколяски необходимо:

3.1.2 Расчехлить, поставить на колеса.

3.1.3 Шины колес подкачать так, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 до 10 мм.

3.2 Работа

3.2.1 Движение велоколяски осуществляется за счёт поочерёдного перемещения приводных рычагов 4.

Для стояночного торможения задних колес используется стояночный тормоз 8.

Для удобного положения начального и конечного положения рычагов пользователь самостоятельно может отрегулировать длину тяг 9, для чего необходимо отвернуть винты 10, установить такую длину тяг, которая обеспечит удобное расположение рычагов, после чего затянуть винты 10.

4 Техническое обслуживание

Велоколяска поступает в отрегулированном виде и особого обслуживания не требует.

4.1 Сиденье и спинку велоколяски необходимо протирать моющими средствами для удаления грязи.

4.2 Остальные части велоколяски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

4.3 Давление воздуха в шинах колес значительно влияет на лёгкость хода. Накаченные шины под нагрузкой должны прогибаться в пределах от 8 до 10мм.

4.4 Смазку подшипников и трущихся поверхностей производить не реже 2-х раз в год смазкой ЛИТОЛ - 24 ГОСТ 21150 или УС - 1 ГОСТ 1033 .

5 Меры безопасности

5.1 Запрещается эксплуатировать велоколяску, не изучив «Правила дорожного движения».

5.2 Перед использованием велоколяски проверять надёжность стояночного тормоза.

5.3 Запрещается перевозить грузы и пассажиров.

5.4 Запрещается подвергать велоколяску ударам.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.178.00.00.00РЭ (далее – РЭ), предназначено для ознакомления пользователя с устройством велоколяски прогулочной рычажной для детей ПрРД ЦСИЕ.03.178.00.00.00 и подростков ПрРП ЦСИЕ.03.178.00.00.00-01 (далее – велоколяска), с условиями эксплуатации и технического обслуживания

1 Назначение

Велоколяска предназначена для передвижения больных и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата по дорогам с твёрдым покрытием или грунтовым с углом уклона не более 10°. Перемещение осуществляется за счёт мускульной силы рук пользователя. Велоколяска изготавливается двух исполнений, различающихся по ширине.

2 Технические данные

2.1. Технические данные приведены в таблице.

Таблица

Наименование параметра	ЦСИЕ.03.178.00.00.00	ЦСИЕ.03.178.00.00.00-01
Длина, мм, не более	1630	1630
Ширина, мм, не более	544	604
Высота, мм, не более	910	910
Ширина сиденья, мм	310	370
Глубина сиденья, мм	425	425
Расстояние между задними колёсами, мм,	452±10	512±10
База (расстояние между осями переднего и задних колес), мм,	1100±10	1100±10
Масса коляски, кг, не более	29	31
Максимальная грузоподъёмность (масса пользователя), кг	50	75

3 Устройство и работа

Велоколяска (см. рисунок) состоит из следующих основных узлов:

рама 1, два задних колеса 2, переднее колесо с поворотной вилкой 3, два приводных рычага 4, сиденье 5, спинка 6, педали 7, стояночный тормоз 8, тяги 9, винты 10.

Примечание *– Изображение велоколяски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД. Допускаются изменения конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства коляски.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.5 Запрещается оставлять велоколяску в незаторможенном состоянии.

5.6 Запрещается использование велоколясок на дорогах с углом наклона более 10°.

6 Комплектность

В комплект поставки входит:

6.1 Велоколяска	- 1 шт.
6.2 Велонасос	- 1 шт.
6.3 Клин	- 2 шт.
6.4 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

7 Маркировка

Маркировка велоколяски должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

8 Свидетельство о приемке

Велоколяска рычажная прогулочная для детей ПрРД

наименование изделия

ЦСИЕ.03.178.00.00.00

обозначение *заводской номер*

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.063-2012, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-20017.

МП

личная подпись *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство об упаковывании

Велоколяска рычажная прогулочная для детей ПрРД
наименование изделия

ЦСИЕ.03.178.00.00.00
обозначение *заводской номер*

упакована на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Нач.участка ***Шацкий В.В.***
должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

число, месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации велоколяски – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт велоколяски в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на велоколяски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений покрышек и камер велоколяски.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования велоколяски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Сведения о государственной регистрации

Велоколяска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.99397/1801.


Действительно до 05.01.2023 г.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081479; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081434; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

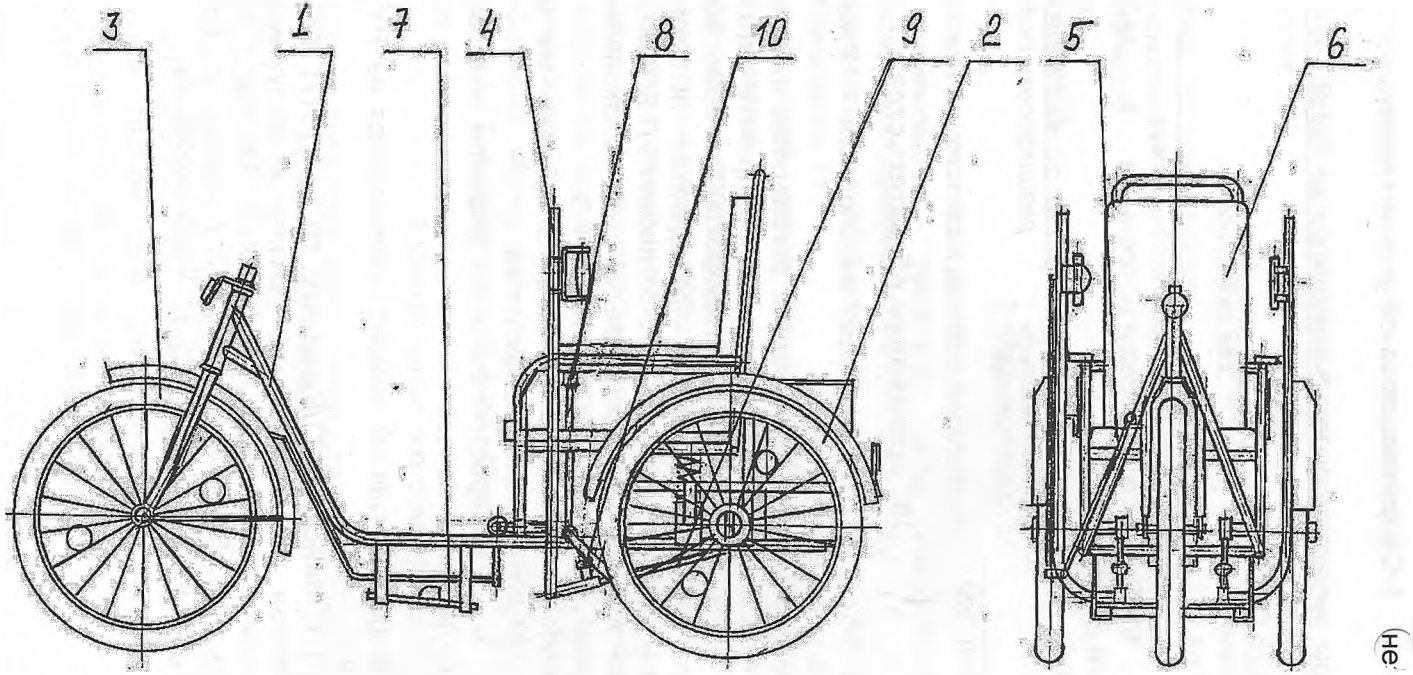

Рисунок

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081479; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081434; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство т(да и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Велоколяска прогулочная рычажная для взрослых ПрРВ

Руководство по эксплуатации
ЦСИЕ.03.808.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.1.3 Шины (колес подкачать так, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 мм до 10 мм.

3.2 Работа

3.2.1 Движение велоколяски осуществляется за счёт поочерёдного перемещения приводных рычагов - правого рычага 5 и левого рычага 6.

Поворот осуществляется за счёт поворота ручки 17, закреплённой на правом рычаге 5, через тягу 15.

Торможение во время движения производится поворотом ручки левого рычага 6 по часовой стрелке. Для стояночного торможения задних колес необходимо повернуть ручку рычага 6 по часовой стрелке максимально. Зафиксировать тормоз поворотом фиксатора 16 по часовой стрелке до упора.

Для осуществления движения накатом необходимо расцепить задние колеса перемещением рукоятки рычага 10 вперед.

ВНИМАНИЕ! Включение сцепления задних колес осуществлять только при движении велоколяски.

4 Техническое обслуживание

Велоколяска поступает в отрегулированном виде и особого обслуживания не требует.

4.1 Сиденье и спинку коляски необходимо протирать моющими средствами для удаления грязи. Не подвергать стирке!

4.2 Остальные части велоколяски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

4.3 Застёжку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других загрязнений.

4.4 Давление воздуха в шинах колес значительно влияет на лёгкость хода. Накаченные шины под нагрузкой должны прогибаться в пределах от 8 мм до 10 мм.

4.5 Смазку подшипников и трущихся поверхностей производить не реже 2-х раз в год смазкой ЛИТОЛ - 24 ГОСТ 21150 или УС - 1 ГОСТ 1033.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации Ц( )Е.03.808.00.00.00 РЭ (далее – РЭ), предназначено для ознакомления пользователя с устройством велоколяски прогулочной рычажной для взрослых ПрРВ ЦСИЕ.03.808.00.00.00 (далее – велоколяска), с условиями эксплуатации и технического обслуживания

1 Назначение

Велоколяска предназначена для передвижения больных и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата по дорогам с твёрдым покрытием или грунтовым с углом уклона не более 10˚. Перемещение осуществляется за счёт мускульной силы рук пользователя.

2 Технические данные

2.1. Габаритные размеры, не более:
- длина – 2020 мм;
- ширина – 814 мм;
- высота – 1061 мм.

2.2 Расстояние между задними колёсами – (692±10) мм.
2.3 Расстояние между осями переднего и задних колес – (1295±5) мм.
2.4 Ширина сиденья – не более 467 мм.
2.5 Глубина сиденья – не более 427 мм.
2.6 Масса коляски – не более 55 кг.
2.7 Максимальная грузоподъёмность (масса пользователя) – 100 кг.

3 Устройство и работа

Велоколяска (см. рисунок, стр. 6) состоит из следующих основных узлов: рамы 1; переднего колеса 2; двух задних колес 3; сиденья 4; приводного правого рычага 5; приводного левого рычага 6; двух боковин 7; спинки 8; двух подлокотников 9; рычага 10; амортизатора 11; рычага 12; подножки 13; поворотной вилки 14; тяги 15; фиксатора стояночного тормоза 16; ручки 17; инструментального ящика 18.

Примечание *– Изображение велоколяски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД. Допускаются изменения конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства коляски.*

3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Велоколяска к пользователю поступает в рабочем состоянии в чехле. Для использования коляски необходимо:

3.1.2 Расчехлить, поставить на колеса 2 и 3.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Меры безопасноС

5.1 Запрещается эксплуатировать велоколяску, не изучив «Правила дорожного движения».

5.2 Перед использованием велоколяски проверять надёжность предохранительного тормоза (плавный поворот ручки левого рычага 6 по часовой стрелке) и стояночного тормоза (поворот ручки левого рычага 6 до упора и фиксирование тормоза поворотом фиксатора 16 по часовой стрелке до упора).

5.3 Запрещается перевозить грузы и пассажиров.

5.4 Запрещается подвергать велоколяску ударам.

5.5 Запрещается оставлять велоколяску в незаторможенном состоянии.

5.6 Запрещается использование велоколясок на дорогах с углом наклона более 10°.

5. 7 Нагрузка на велоколяску не должна превышать 100 кг.

6 Комплектность

В комплект поставки входит:

6.1 Велоколяска	1 шт.
6.2 Велонасос	1 шт.
6.3 Руководство по эксплуатации	1 шт.

7 Маркировка

Маркировка велоколяски должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство о приемке

Велоколяска прогулочная рычажная для взрослых ПрРВ
наименование изделия

ЦСИЕ.03.808.00.00.00 _____
обозначение *зав. номер*

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.063-2012, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

_____ _____
личная подпись *расшифровка подписи*

_____
число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Велоколяска прогулочная рычажная для взрослых ПрРВ
наименование изделия

ЦСИЕ.03.808.00.00.00 _____
обозначение *зав. номер*

упакована на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя


согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Нач.участка _____ ***Шацкий В.В.***
должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

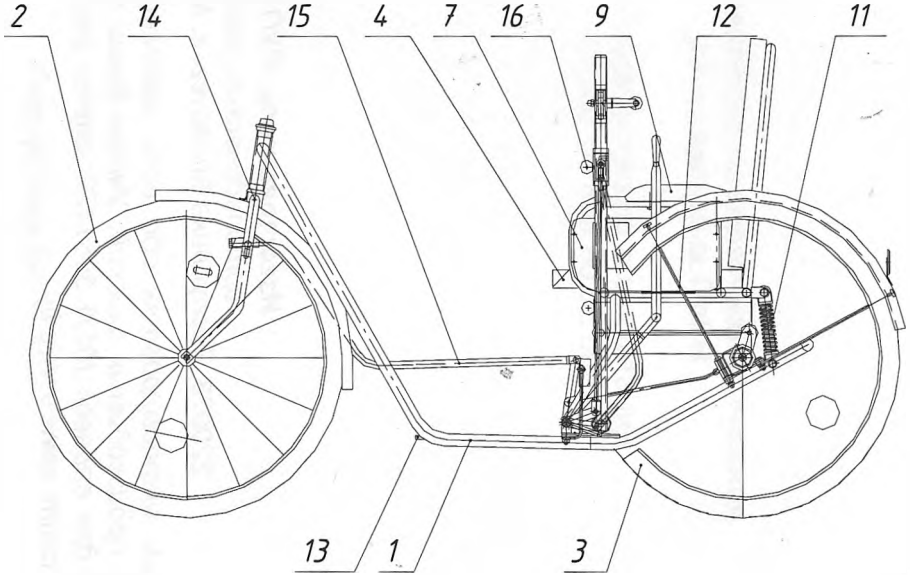

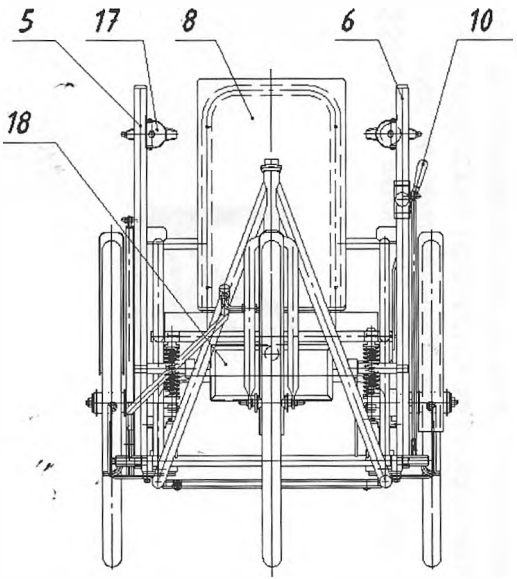


Рисунок 1

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации велоколяски – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт велоколяски в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на велоколяски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений покрышек и камер велоколяски.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования велоколяски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

11 Сведения о государственной регистрации

Велоколяска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственно реестре изделий медицинского назначения и медицинской техник ИМ-7.99397/1801.

Действительно до 05.01.2023 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10

Велоколяска прогулочная для взрослых ПрВ

Руководство по эксплуатации
ОПИ-74.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

упора. Для удобного расположения руля 5 необходимо отвернуть болт 15 на вилке 2 на 4-5 оборотов, установить руль в удобное положение для пользователя и затянуть болт 15.

При движении велоколяски вперед необходимо вращать рукоятку 6 от себя, для движения назад вращение рукоятки производится на себя.

При остановке велоколяски необходимо повернуть руль таким образом, чтобы переднее колесо стало под углом к продольной оси коляски в сторону, противоположную тормозу. Чтобы затормозить велоколяску необходимо нажать на ручку тормоза 8 от себя до упора. Для притормаживания передних колес необходимо нажать на рукоятку тормоза 8а.

Под сиденьем 11 велоколяски расположен багажник. Для поднятия сиденья необходимо приподнять его вверх, потянуть его на себя и откинуть на спинку велоколяски. Чтобы опустить сиденье на место необходимо проделать обратную операцию.

Для лёгкости хода шины колес необходимо накачать таким образом, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 мм до 10 мм.

4 Меры безопасности

4.1 При эксплуатации велоколяски на улицах населённых пунктов и дорогах строго соблюдать «Правила дорожного движения».

4.2 Запрещается подвергать велоколяску ударам.

4.3 Запрещается перевозить грузы и пассажиров.

4.4 Запрещается оставлять велоколяску в незаторможенном состоянии.

5 Техническое обслуживание

5.1 Велоколяска поступает к потребителю в отрегулированном состоянии.

5.2 Сиденье и спинку велоколяски необходимо протирать моющими средствами для удаления грязи, не подвергать стирке. Остальные части протирают влажной ветошью и вытирают насухо.

5.3 Застёжку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других загрязнений.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатац ОПИ-74.00.00РЭ (далее – РЭ), предназначено для ознакомления пользователя с устройством велоколяски прогулочной для взрослых ПрВ ОПИ-74.00.00 (далее – велоколяска), с условиями эксплуатации и технического обслуживания

1 Назначение

Велоколяска предназначена для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на значительные расстояния. Конструкция велоколяски представляет собой жесткую раму, на которой крепятся вилка с передним колесом, два задних колеса и ручной цепной правосторонний привод на одно из задних колес.

Примечание – Велоколяска по требованию заказчика может быть изготовлена с левосторонним приводом (ОПИ-74.00.00-01).

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, не более:

- длина – 1997 мм;
- ширина – 810 мм;
- высота – 1287 мм.

2.2 Ширина сиденья – не более 477 мм.

2.3 Глубина сиденья – не более 387 мм.

2.4 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя)- 100 кг.

2.5 Масса велоколяски – не более 65 кг.

3 Устройство и принцип работы

3.1 Велоколяска (см. рисунок) состоит из следующих узлов и деталей: рамы 1; вилки передней 2 с колесом 3 и передним щитком 4; руля 5; приводного механизма 6 с ведущей звездочкой, закрытой кожухом 7; стояночных тормозов 8 и ручных тормозов 8а; подлокотников 9; спинки 10; сиденья 11; заднего приводного колеса с ведомой звездочкой 12; заднего колеса 13 и задних щитков 14, болтов 15.

Примечание – Изображение велоколяски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

3.2 Работа

Велоколяска к пользователю поступает в собранном виде и готовой к эксплуатации.

Посадка в велоколяску производится с левой стороны. При посадке и высадке из велоколяски руль 5 поднимается вверх до

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.4 Давление воздуха в шинах, при необходимости, следует подкачивать. Накачанные шины под нагрузкой должны прогибаться в пределах от 8 мм до 10 мм.

5.5 Необходимо следить за натяжением в цепи. В случае ослабления цепи отвернуть гайки на оси колеса на 3-4 оборота, потянуть ось на себя и затянуть гайки.

6 Комплектность

6.1 Велоколяска - 1 шт;
6.2 Велонасос - 1 шт;
6.3 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

Маркировка велоколяски должна иметь:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство о приемке

Велоколяска прогулочная для взрослых ПрВ ОПИ-74.00.00

наименование изделия *обозначение* *заводской номер*

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.063-2012 действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

_____ _____

личная подпись *расшифровка подписи*

_____

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Велоколяска прогулочная для взрослых ПрВ ОПИ-74.00.00

наименование изделия *обозначение* *заводской номер*

упакована на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Нач.участка _____ ***Шацкий В.В.***

должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

_____

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт велоколяски в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на велоколяски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений покрышек и камер велоколяски.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования велоколяски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

11 Сведения о государственной регистрации

Велоколяска является изделием медицинского назначения.


Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.99397/1801.

Действительно до 15.01.2023 г.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

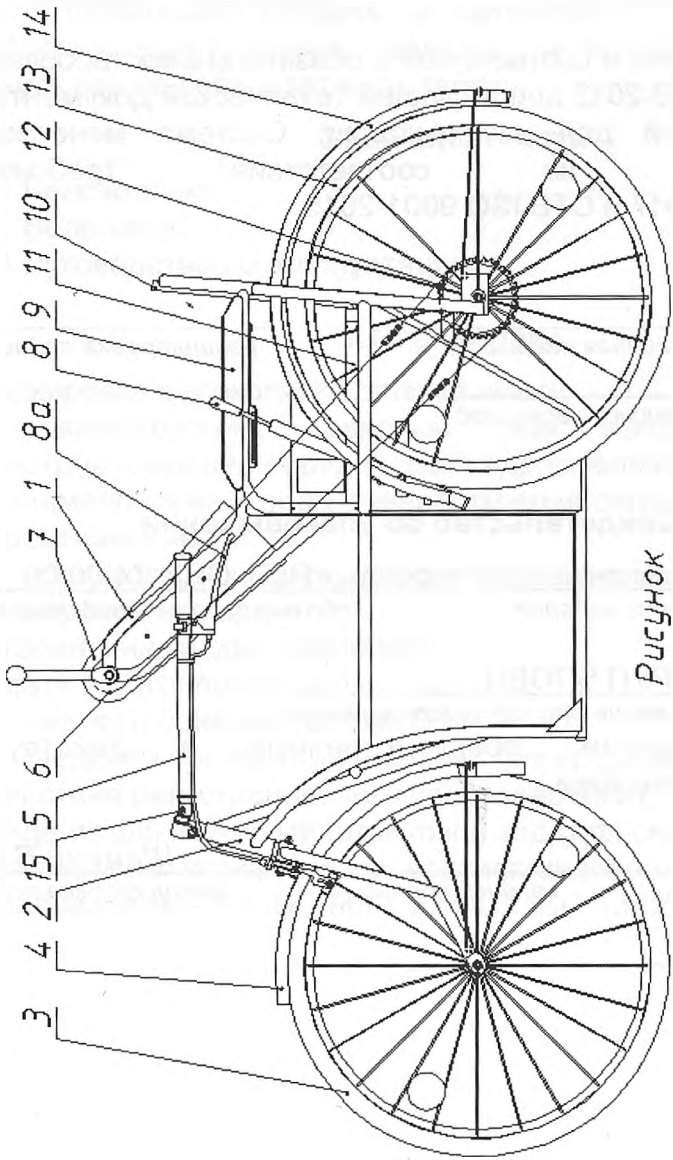

Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru