9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Штатив для капельниц ШК-1П (на опорах), заводской №_____ , ТУ РБ 200079626.003-2002

Приобретен_____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию_____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____города_____

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения - владельца


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ШТАТИВ ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ ШК-1П (на опорах)

ТУ РБ 200079626.003-2002

Паспорт
ШК-1П.05.000ПС

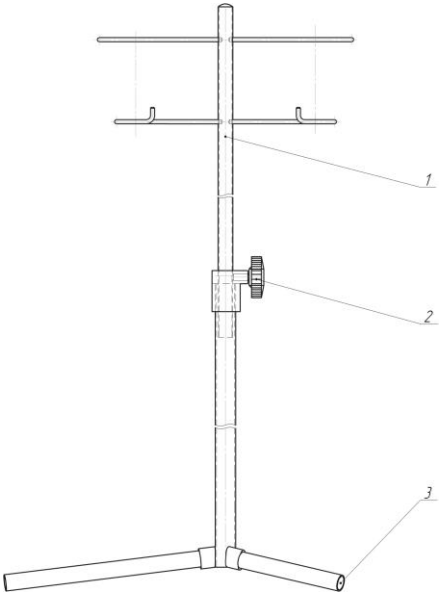

1. Штатив для капельниц
2. Винт-барашка
3. Опоры

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Штатив для капельниц ШК-1П (в дальнейшем – штатив) предназначен для установки емкостей различной формы (флаконы, пакеты) для переливания лекарственных препаратов на определенной высоте в вертикальном положении. Применяется в медицинских учреждениях.

1.2 Штатив предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при 25ºС.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм:

диаметр основания, не более……..….600

высота ……..…от 1200 до 2100

2.2 Масса, кг, не более……..…….85

2.3 Средний срок службы, лет, не менее……7

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:

- штатив ……..……1 шт.
- паспорт ……....1 шт.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Штатив поставляется потребителю в собранном виде. Штатив состоит из опорного основания и стойки, изготовлен из круглых труб, покрыт полимерной порошковой краской. Верхняя часть стойки выдвижная с четырьмя кольцами для размещения флаконов (пакетов).

Примечание – по заказу потребителя штатив может быть изготовлен из нержавеющей стали или частично из нержавеющей стали (выдвижная штанга)

4.2 Распакуйте штатив, очистите от пыли. Осмотрите штатив для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.3 Проверьте надежность крепления опор к основанию. Регулировку высоты штатива производить с помощью винт-барашка.

4.4 Выполните санитарную обработку штатива путем протирки его поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению.

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Во избежание поломки опор штатив не следует перемещать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия.

5.2 Периодически, не реже одного раза в полгода производите осмотр опор.

5.3 Периодически обрабатывайте штатив дезинфицирующими средствами.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Штатив транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от-50ºС до+50ºС и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25ºС

6.2 Хранить штатив допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив для капельниц ШК-1П (на опорах), заводской № ___ соответствует ТУ РБ 200079626.003-2002 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Штатив для капельниц ШК-1П (на опорах), заводской № ___ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Штатив для капельниц ШК-1П (на колесах),
заводской №__ _____ , ТУ РБ 200079626.003-2002

Приобретен_____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию_____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____города_____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия
Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ШТАТИВ ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ ШК-1П (на колесах)

ТУ РБ 200079626.003-2002

Паспорт
ШК-1П.06.000ПС

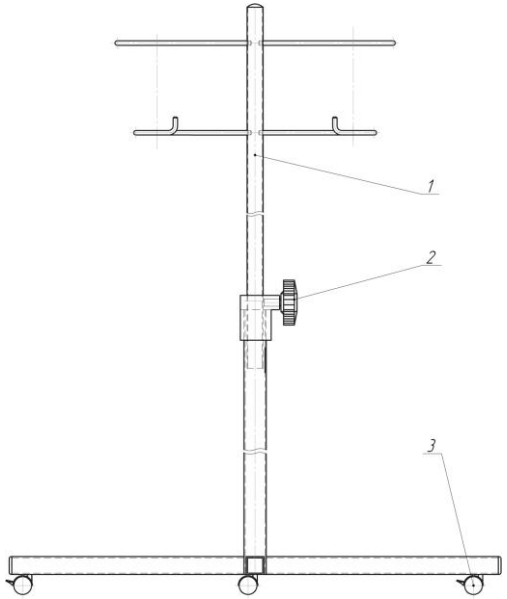

1. Штатив для капельниц
2. Винт-барашка
3. Колесная опора

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Штатив для капельниц ШК-1П (на колесах) (в дальнейшем – штатив) предназначен для установки емкостей различной формы (флаконы, пакеты) для переливания лекарственных препаратов на определенной высоте в вертикальном положении и перемещении их. Применяется в медицинских учреждениях.

1.2 Штатив предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при 25ºС.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм
диаметр основания, не более……600
высота ……..……..…..…от 1200 до 2100
2.2 Масса, кг, не более……..……..…..…8
2.3 Усилие перемещения штатива с капельницами
по горизонтальной поверхности, Н, не более ……50
2.4 Средний срок службы, лет, не менее……7

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:
- штатив для капельниц ……..……1 шт.
- паспорт ……..…….....1 шт.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Штатив поставляется потребителю в собранном виде. Штатив состоит из опорного основания на колесах и стойки, изготовлен из металлических труб, покрыт полимерной порошковой краской. Верхняя часть стойки выдвижная с двумя кольцами и двумя кольцами-крючками для размещения флаконов (пакетов).

Примечание – по заказу потребителя штатив может быть изготовлен из нержавеющей стали или частично из нержавеющей стали (выдвижная штанга), опорное основание – на 4-х колесах (четырехлучевое) или на 5-ти колесах (пятилучевое).

4.2 Распакуйте штатив, очистите от пыли. Осмотрите штатив для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.3 Проверьте надежность крепления колесных опор к основанию. Регулировку высоты направляющей штатива производить с помощью винт-барашка.

4.4 Выполните санитарную обработку штатива путем протирки его поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Во избежание поломки колесных опор штатив не следует перемещать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия.

5.2 Периодически, не реже одного раза в полгода производите затягивание колесных опор.

5.3 Периодически обрабатывайте штатив дезинфицирующими средствами.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Штатив транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от-50ºС до+50ºС и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25ºС

6.2 Хранить штатив допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив для капельниц ШК-1П (на колесах), заводской № ___ соответствует техническим условиям ТУ РБ 200079626-003-2002 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Штатив для капельниц ШК-1П (на колесах), заводской № ___ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru