Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник смотровой передвижной ССП, заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.012-2023 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Светильник смотровой передвижной ССП, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____м.п. _____Подпись

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи.

13 3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

13.4. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении руководства по эксплуатации по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл.. Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4

СЗАО «Белмедматериалы»

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

14.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя:

225730, Беларусь, Брестская обл.. Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4

СЗАО «Белмедматериалы»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Светильник смотровой передвижной ССП, заводской №_____ ТУ BY 800017554.012-2023

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_____

(дата, подпись и штамп обслуживающей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя
учреждения-владельца

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Светильник смотровой передвижной ССП драгметаллов не содержит.

СОВМЕСТНОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

СВЕТИЛЬНИК СМОТРОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ССП

ТУ BY 800017554.012-2023

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ССП-01.00.000.РЭ

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Приступая к эксплуатации светильника смотрового передвижного ССП (далее – светильник), внимательно изучите данное руководство по эксплуатации (далее РЭ).

1.2 Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

1.3 В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Светильник предназначен для проведения медицинских осмотров и лечебных процедур в медицинских учреждениях.

Светильник не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПЗУ.

2.2 Светильник относится к электрическому оборудованию класса I по СТБ IEC 60601-1-2012.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Характеристика
Тип ламп (7 шт.)	**Светодиодные**
Регулируемая освещенность в центре рабочего поля на расстоянии 0,5 м, Лк, не менее	**80000**
Диаметр рабочего поля на расстоянии 0,5 м при максимальном уровне освещенности, мм, не менее	**150**
Время установления рабочего режима, сек, не более	**10**
Напряжение электрической сети, В (номинальное)	**230 ± 23**
Рабочее напряжение, В	**100-240**
Частота электрической сети, Гц	**50,0±2,5**
Потребляемая мощность, Вт, не более	**10**
Степень защиты по ГОСТ 14254	**IP20**
Габаритные размеры, мм: - высота - длина/ширина основания, не менее	 **1300…1770** **310 / 310**
Длина шнура, м, не менее	**5**
Масса, кг, не более	**15**
Средний срок службы, лет	**5**

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Светильник ……..- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК СБОРКИ

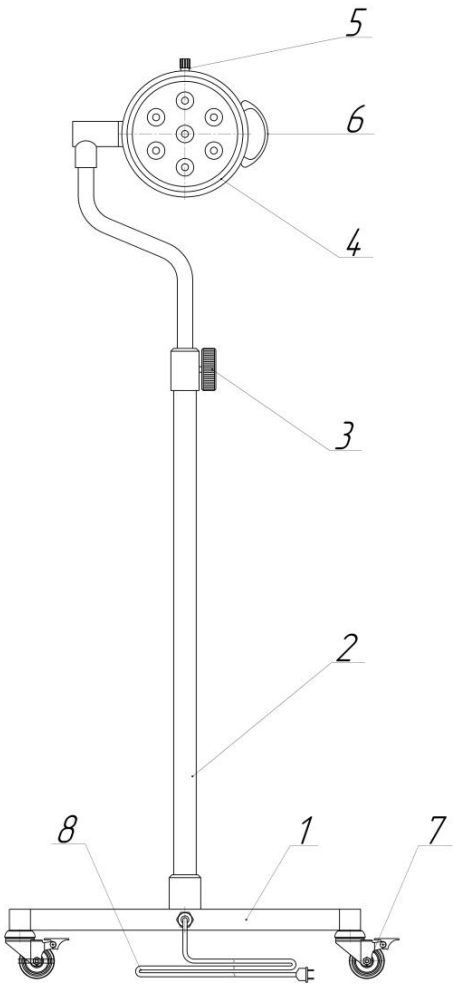


Рисунок 1

5.1 Светильник поставляется потребителю в собранном виде.

5.2 Светильник (рис.1) состоит из основания поз.1, стойки поз.2, выдвижной стойки со светильником поз.4. Фиксация светильника по высоте осуществляется с помощью винт-барашка поз.3. На головной части светильника поз.4 расположена кнопка включения/выключения и изменения яркости поз.5. Перемещение осуществляется с помощью четырех колес диаметром 50 мм с тормозом поз.7. Регулировка углов наклона - при помощи ручки поз.6.

5.3 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть светильник выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 4-5 часов.

5.4 Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию всех наружных поверхностей светильника.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Подключите светильник к сети переменного тока с помощью сетевого шнура поз.8.

6.2 Включение/выключение светильника осуществляется поворотом ручки поз.5 по часовой стрелке/ против часовой стрелки до щелчка.

6.3 Регулировка яркости осуществляется поворотом ручки поз.5 по часовой/против часовой стрелки.

6.4 Высота светильника регулируется подъемом / опусканием стойки со светильником поз.4, фиксация выбранного положения - с помощью винт-барашка поз.3.

ВНИМАНИЕ! Светильник относится к передвижному типу. При перемещении светильника, а также при управлении светильником необходимо придерживать головной светильник за ручку поз.6.

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Светильник относится к электрическому оборудованию класса I по СТБ IEC 60601-1-2012.

7.2 К эксплуатации светильника допускаются лица, внимательно изучившие настоящее РЭ, освоившие правила эксплуатации и прошедшие инструктаж в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок".

7.3 Все работы по обслуживанию и ремонту производить только после отключения прибора от питающей сети.

7.4 Утилизация вышедшего из строя светильника должна производиться в соответствии с действующими нормами и правилами.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Для обеспечения эффективной и надежной работы прибора необходимо правильно и своевременно осуществлять техническое обслуживание.

8.2 На техническое обслуживание, ремонт или проверку технических характеристик светильник должен быть предъявлен с руководством по эксплуатации.

8.3 Ремонт выполняется только специалистами ремонтных предприятий, с обязательным соблюдением мер безопасности, указанных в разделе 6 настоящего РЭ,

8.4 Техническое обслуживание проводят в обесточенном состоянии (сетевая вилка извлечена из розетки) с соблюдением мер безопасности, изложенных в разделе 7.

8.5 Ежедневно необходимо производить санитарную обработку поверхностей светильника 3% раствором перекиси водорода с 5% раствором моющего средства (салфетка должна быть отжата) или любым методом согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения", утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Вероятная причина	Способ устранения
Конструкция неустойчива	Ослабло крепление узлов	Подтянуть крепежные соединения
Светильник не включается	Вышел из строя блок питания	Обратиться на завод-изготовитель

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Светильник в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 ºС до +50 ºС и относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре +25 ºС.

10.2 Хранить светильник допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50 ºС до +40 ºС и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.