PAROSIN

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ДЕСНЕВЫХ КАРМАНОВ

ARKONA

MD Медицинское изделие 1 класса

Препарат в виде жидкости со шприцем-дозатором для полоскания, промывания и чистки десневых карманов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Снимите наконечник и вместо него установите аппликатор. Осторожно поместите его как можно глубже в десневой карман. Медленно нажимая на поршень шприца, промойте место воспаления. Промывать до тех пор, пока все твёрдые отложения не выйдут из кармана. По окончании промывания порекомендовать пациенту прополоскать рот водой.
Для уменьшения болевых ощущений во время полоскания слегка нагреть препарат перед использованием, поместив его, например, в тёплую воду.

ПРИМЕНЕНИЕ
- Десневые карманы
- Области полостей II класса
- Область зубов с затруднённым прорезыванием, особенно восьмёрок
- После удаления зубного камня
- Отёки дёсен под протезами и в области зубов, поддерживающих брекеты
- Под ортопедическими конструкциями (мосты, коронки)
- Перед экстракцией, в десневых карманах, прилегающих к зубу, подлежащему удалению
- В области ортодонтических аппаратов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Не имеется при проведении процедуры в соответствии с показаниями.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Препарат для стоматологов и гигиенистов.
Препарат PAROSIN не следует применять для полоскания корневых каналов. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте.
Препарат можно применять при язвенной болезни, сахарном диабете и в состоянии беременности. Не вызывает привыкания и осложнений. Может использоваться, исходя из индивидуальных потребностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания в глаза. В случае контакта промыть большим количеством воды и обратиться к специалисту.

ГАРАНТИЯ
Компания ARKONA обменивает продукцию, которая имеет выявленные недостатки, или возвращает стоимость покупки. ARKONA не несёт ответственности за убытки или ущерб, вызванные неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

СОСТАВ
1. Озонированная вода
2. Наноколлоид серебра
3. Нитрат натрия
4. Ароматизаторы
5. Ортофосфорная кислота
6. Молочная кислота

1. Воспаление десневых карманов
2. Область зубов с затруднённым прорезыванием (особенно восьмёрок)
3. Под ортопедическими конструкциями (мосты, коронки)
4. Области рядом с полостями II класса

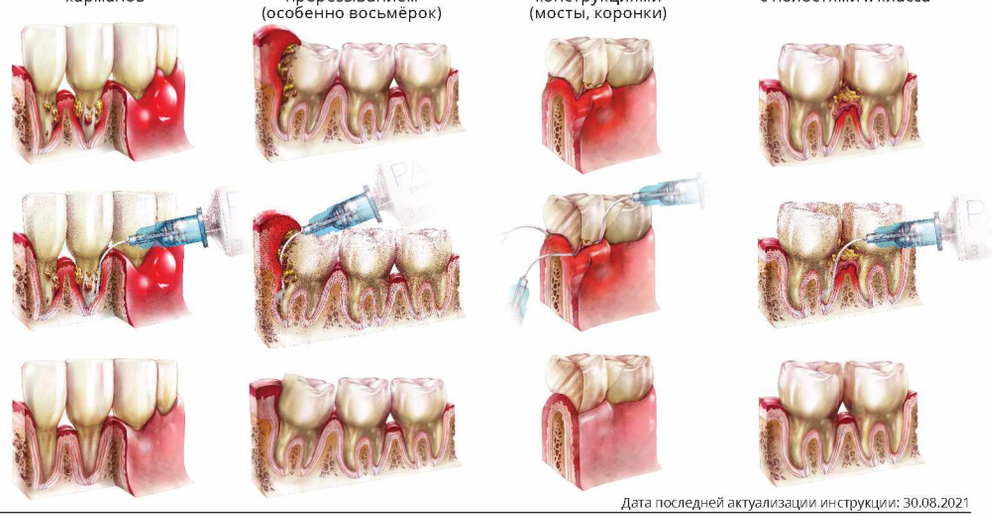

Дата последней актуализации инструкции: 30.08.2021

CE 1639

ARKONA

ARKONA
Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk Nasutow 99C,
21-025 Niemce, Poland, Сделано в Польше,
www.arkonadent.ru

5mm

7mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Республике Беларусь | www.medtekhnika.by | info@medtekhnika.by

ARKONA

MUSON

ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ, РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ

90 таблеток

MUSON – медицинское изделие в виде шипучих таблеток. **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** поддержание гигиены полости рта, частичное или полное снятие любых воспалительных процессов полости рта и горла. **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** 1. Растопить 1 таблетку в 100 мл холодной воды (прибл. половина стакана) и подождать до полного растворения таблетки (30-40 с); 2. Несколько раз прополоскать рот приготовленным раствором; 3. Выплюнуть. Не глотать. Использовать непосредственно после приготовления. Осадок после растворения – это нормальное свойство шипучих продуктов. **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** MUSON уменьшает количество микроорганизмов в ротовой полости, предотвращая их попадание в организм и перенос их на людей, находящихся в ближайшем окружении. Это особенно важно для предотвращения распространения болезней, передающихся капельным путем. MUSON способствует поддержанию правильной микрофлоры полости рта, защищает от развития патогенных микроорганизмов. MUSON безопасен и может использоваться в соответствии с индивидуальными потребностями. Он не содержит алкоголя и может использоваться повторно в течение суток без риска пересыхания слизистой оболочки ротовой полости. **СОСТАВ:** Хлоргексидина диацетат, лимонная кислота, винная кислота, бикарбонат натрия, сорбитол, мятный аромат. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Не использовать MUSON в случае аллергии на какой-либо компонент. **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:** Не обнаружено, однако у особенно чувствительных людей могут выступить признаки аллергической реакции. В этом случае необходимо перестать использовать продукт. В случае острого воспаления слизистой оболочки или открытых ран полости рта использование продукта может вызвать болевую реакцию. **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Таблетки MUSON очень гигроскопичны. После извлечения таблетки из упаковки следует немедленно закрыть ёмкость. В ходе длительного хранения таблетки могут подвергаться натуральному потемнению. Это не влияет на эффективность действия препарата. Препарат можно использовать при язвенной болезни желудка, сахарном диабете, беременности. Препарат не оказывает негативного влияния на управление автомобилем и обслуживание механических устройств. Избегать контакта с глазами. В случае контакта промыть большим количеством воды. В случае недомогания обратитесь к врачу или фармацевту. Не использовать по истечении срока годности. Не использовать у детей до 6 лет. **ХРАНЕНИЕ:** Хранить при комнатной температуре, в сухом месте, недоступном для детей. **ГАРАНТИЯ:** ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем, или возвращает их стоимость. Компания не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

Наименование производственной площадки:

«ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk», Nasutow 99C, 21-025 Niemce, Poland, Сделано в Польше, www.arkonadent.ru

25°C

Уполномоченный представитель производителя в Беларуси:

ЗАО «Белмедпоставка» 225730, Беларусь, Брестская область, Пинский район, деревня Пинковичи, ул. Поперечная 36 +37 5165680923, www.medtekhnika.by

7mm

5mm