ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, этаж 3, помещение CXIX, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кристи»

_____/ Мнацаканян А.М.

«01» января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения

Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016, исполнения: “Классик”/ “Премиум”/ “Классик специальный“/ “Классик специальный плюс“

1. Наименование медицинского изделия.

Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016, исполнения: “Классик”/ “Премиум”/ “Классик специальный“/ “Классик специальный плюс“.

2. Назначение медицинского изделия

Экран защитный для лица, многоразовый предназначен для защиты лица медицинского персонала от воздействия прямого или частично бокового попадания твердых грубодисперсных частиц, брызг жидкостей и пыли, при использования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Возможно использование изделия в косметологии, маникюрном и педикюрном сервисе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие не по назначению.

3. Характеристики изделия.

Область применения – стоматология и челюстно-лицевая хирургия, косметология.

Экран защитный для лица, многоразовый применяется в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях.

По конструктивному исполнению экраны относятся к типу лицевых экранов. Оголовье выполнено в виде оправы (очкового типа).

Щитки, в зависимости от технологии изготовления и химического состава материала,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

относятся к типу органических стекол (поликарбонат). Щитки выпускаются без корригирующего эффекта.

Экраны обеспечивают защиту от грубодисперсных аэрозолей (пыли) и брызг жидкостей:
- при установке щитка для лица - полную защиту лица (глаза, нос, рот);
- при установке щитка для глаз – полную защиту глаз и части лица от прямого и частично бокового попадания брызг жидкостей.
Экраны не предназначены для защиты от воздействия высокоскоростных частиц.

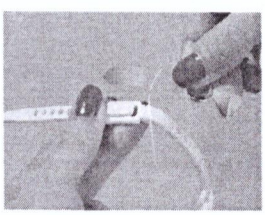
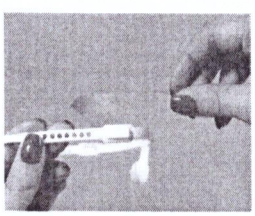
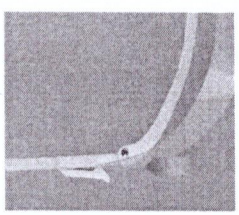
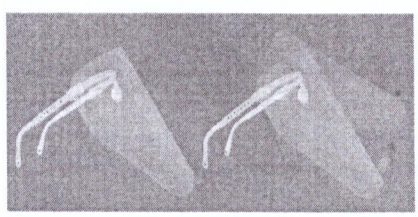
4. Техника безопасности.

Для безопасного использования изделия следует выполнять следующие правила техники безопасности:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие не по назначению.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при наличии повреждений на экране.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать изделие в химические растворы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ стерилизация изделия в автоклаве.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать медицинские изделия после истечения срока годности.

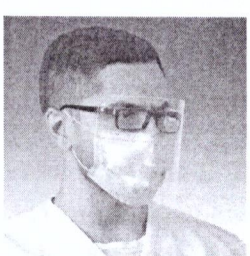
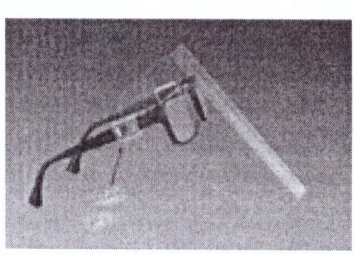
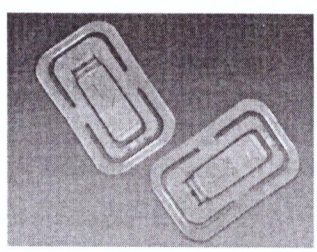
5. Способ применения.

Защитный экран для лица, многоразовый
(варианты исполнения: «Классик», «Премиум»)

Снимите защитную пленку с двух сторон щитка для лица типа О или щитка для глаз защитного экрана. Возьмите прозрачный щиток экрана и закрепите его зажимами на заушине оправы, сначала одну сторону, затем другую. При необходимости отрегулируйте высоту и наклон щитка экрана.

Защитный экран для лица, многоразовый
(варианты исполнения: «Классик специальный»,
«Классик специальный плюс» при работе в очках)

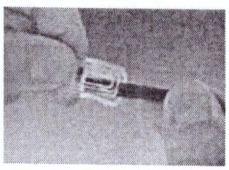
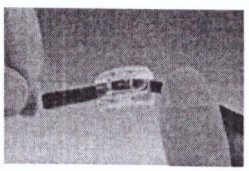
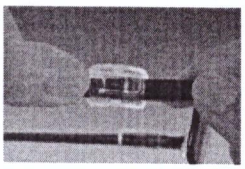
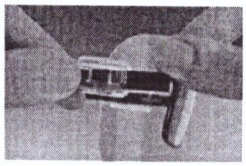
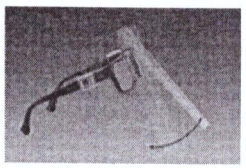
Возьмите пластиковые крепления-зажимы (клипоны) для фиксации защитных щитков к очкам, в том числе и с увеличивающими изображение лупами и закрепите на заушине оправы, сначала одну сторону, затем другую. Клипоны легко крепятся и снимаются. Для хорошей фиксации

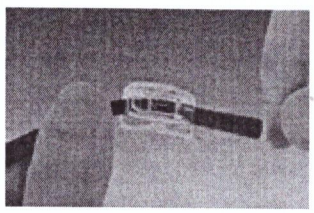
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

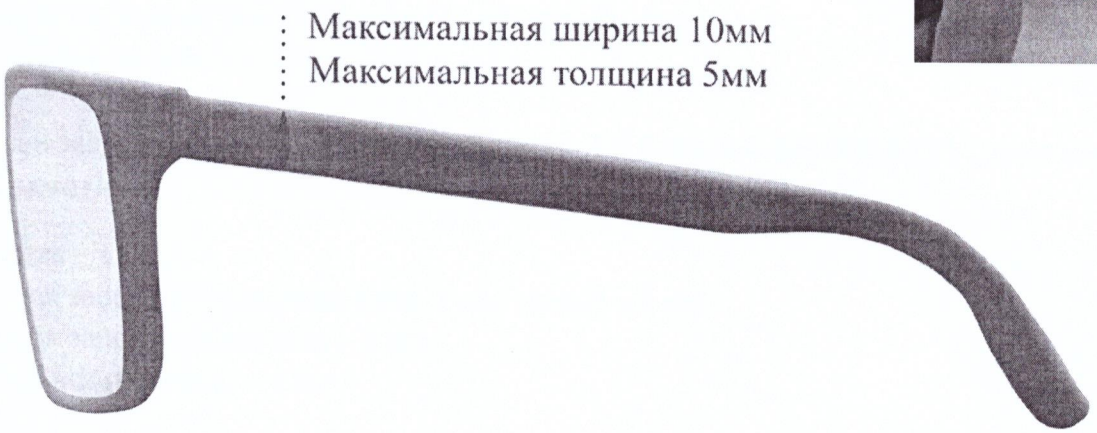
клипонов на оправе очков оптимальный размер заушников должен быть с максимальной шириной 10 мм. и максимальной толщиной 5 мм.

Снимите защитную пленку с двух сторон щитка для лица типа О или типа Л защитного экрана. Для обычных очков используется щиток для лица типа О классического размера (ширина 220 мм), а щиток типа Л большего размера (ширина 240 мм) позволяет надевать щиток с помощью клипонов поверх очков с увеличительными стеклами.

Возьмите прозрачный щиток экрана и закрепите его креплениями-зажимами (клипонами) на заушине оправы, сначала одну сторону, затем другую. При необходимости отрегулируйте высоту и наклон щитка экрана





Внимание!!!
Для хорошей фиксации клипонов на оправе очков оптимальный размер заушников должен быть с максимальной шириной 10 мм. и максимальной толщиной 5 мм.

6. Правила хранения и эксплуатации. Указания по очистке и дезинфекции.
Регулярно, после каждого приема пациента, необходимо очищать поверхность оправ и щитков защитного экрана. Для этой цели использовать раствор 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или моющее средство для оптических поверхностей, эффективно удаляющее грязь и бактерии и, в тоже время, щадящее материал.

Способ обеззараживания: погружение изделия в раствор на 60 минут с последующим промыванием в воде.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание!!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать изделия в химические растворы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ стерилизация изделий в автоклаве.

После очистки рекомендуется хранить экран в заводской упаковочной коробке.

Необходимо защищать щитки экрана от механических повреждений, особенно от соприкосновения щитков с острыми металлическими предметами.

Изделие в упаковке должно храниться в сухих отапливаемых и вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +40°С с влажностью воздуха до 80% без образования конденсации, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

7. Комплект поставки.

1. Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016, исполнение **«Классик»:**

   Оправа – 1 шт.
   Щиток защитный для лица, типа О или типа Л – 5 шт.
   Упаковка (коробка) – 1 шт.

2. Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016, исполнение **«Премиум»:**

   Оправа – 1 шт.
   Щиток защитный для лица, типа О или типа Л – 5 шт.
   Щиток защитный для глаз – 5 шт.
   Упаковка (коробка) – 1 шт.

3. Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016, исполнение **«Классик специальный»:**

   Крепление-зажим (клипон) для очков – 2 шт.
   Щиток защитный для лица, типа О– 5 шт.
   Пакет полиэтиленовый – 1 шт.
   Инструкция по применению – 1 шт.

4. Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016, исполнение **«Классик специальный плюс»:**

   Крепление-зажим (клипон) для очков – 2 шт.
   Щиток защитный для лица, типа Л– 5 шт.
   Пакет полиэтиленовый – 1 шт.
   Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Продолжительность хранения.
Срок годности изделий составляет 5 лет.

9. Утилизация.
Использованное изделие/ изделие с истекшим сроком годности должно быть утилизировано в соответствии с правилами и инструкциями, действующими в данном лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, действующими в стране потребителя.

10. Сведения о производителе изделия.
Общество с ограниченной ответственностью «Кристи» (ООО «Кристи»)
Юридический адрес/адрес места производства: Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., д. 21
Контактный телефон: +7(495)517-40-22
Электронная почта: kristident@mail.ru
Сайт: www.kristident.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Генеральный директор ООО «Кристи»

Мнацаканян А.М.

08.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru