Российская Федерация
ООО « Спецдеталь»

350010, г. Краснодар ул. Офицерская 48
(юридический адрес)
350010, г. Краснодар ул. Офицерская 48
(фактический адрес)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Р/с 40702810707550074995
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 2310001784, КПП 231001001
ОКПО 88976097

Медицинские гипсовые бинты – инструкция по использованию


Температура воды – погружать в воду температурой около **20°С.**

Условия хранения – хранить рекомендуется в заводской упаковке. Вскрывать следует перед применением.

Указания по применению:




1. Перед наложением гипсовых бинтов кожа пациента может быть соответствующим образом защищена трикотажным трубчатым бинтом, и/или подгипсовой подкладкой.

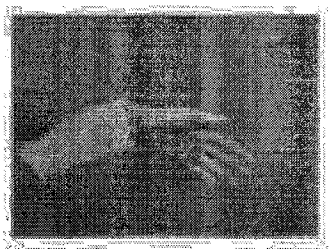

2. Накладывать гипсовый бинт рекомендуется в медицинских перчатках.



3. Следует вскрыть упаковку и изъять бинт из упаковки.

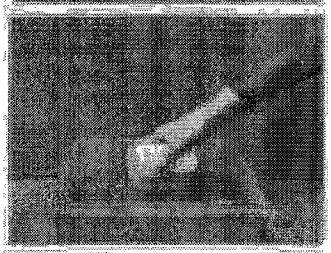

4. Бинт замочить в воде под углом 45° к уровню воды до окончания появления пузырьков воздуха. Оптимальное время выдержки в воде – 2-3 секунды. Если для наложения повязки требуется больше одного бинта, то мочить бинты следует по одному.



5. Вынуть бинт из воды и отжать излишек воды руками, нажимая мягко на концы рулона по направлению к середине. Не допустимым является оставлять повязку в воде!



6. Накладывайте бинт непрерывно, не выпуская из рук. Процесс наложения должен быть закончен до начала схватывания гипсовой композиции.
7. После изъятия бинта из воды время моделирования для БСХ (быстросхватывающихся) 2-3 минуты, для типовых – 5-10 минут, таким образом, иммобилизирующая повязка должна быть корректно смоделирована в этот период. Пациент должен сохранять неподвижность, от этого зависит результат наложения повязки.

Директор ООО Спецдеталь Терешкин А.В

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru