PharmLine s.r.o.
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

ver.01 from 20.02.2020

Instructions for the use of nonsterile wound plasters

Direction for use:
1. Make sure that the corn and the area around it are clean and dry.
2. Remove protective strips from the patch without touching the adhesive surface.
3. Place the patch firmly on the corn.
4. Leave the patch in place until it starts to peel off. The patch lasts up to 48 hours.
5. For best results, use until the skin is completely healed.
6. Replace the patch once it turns white, as this indicates it is completely filled.

Models:
0308-010 FootExpert Hydrocolloid plaster, 6 pcs. Size: 2.8x4.6 cm (oval).
0308-011 FootExpert Hydrocolloid plaster, 6 pcs. Size: 3.7x5.5 cm (oval).
0308-012 FootExpert Hydrocolloid plaster, 8 pcs. Size: 2.2x4.1 cm (oval).
0308-013 FootExpert Hydrocolloid plaster, 6 pcs. Size: 2.2x4.1 cm. (oval) – 3 pcs, 2.9x6.0 cm (rectan[illegible] pcs..

Storage conditions: Keep in a dry place at 6 to 25°.

Shelf live: 5 years

Manufacturer: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Production place: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd., No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Approved by:
CEO PharmLine s.r.o
Shavrin Sergei

PharmLine s.r.o.
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

вер.01 от 20.02.2020

Инструкция по применению

Способ применения:
1. Убедитесь, что площадь мозоли чистая и сухая.
2. Снимите защитные полоски с пластыря, стараясь не касаться клейкой поверхности.
3. Плотно наклейте пластырь на мозоль.
4. Оставьте пластырь на месте, пока он сам не начнет отклеиваться. Пластырь может держаться до 48 часов.
5. Для лучшего результата используйте пластырь до полного заживления кожи.
6. Замените пластырь, когда он побелеет, так как это означает, что он работает и полностью заполнен.

Модели лейкопластрей:
0308-010 Foot Expert пластырь мозольный гидроколлоидный от влажных мозолей, в наборе 6 шт. Размер: 2.8x4.6 см (овальный).
0308-011 Foot Expert пластырь мозольный гидроколлоидный от влажных мозолей, в наборе 6 шт. Размер: 3.7x5.5 см (овальный).
0308-012 Foot Expert пластырь мозольный гидроколлоидный от влажных мозолей, в наборе 8 шт. Размер: 2.2x4.1 см (овальный).
0308-013 Foot Expert пластырь мозольный гидроколлоидный от влажных мозолей, в наборе 6 шт. Размер: 2.2x4.1 см (овальный) – 3 шт., 2.9x6.0 см (прямоугольный), - 3шт.

Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре от +6 до +25°C.

Срок годности: 5 лет

Производитель: Фармлайн ООО (PharmLine s.r.o.), зарегистрированная по адресу: Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика (Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. **Адрес места производства:** Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd., No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Утверждено:
Генеральный директор PharmLine s.r.o. Шаврин Сергей Михайлович

PharmLine s.r.o
Dobronická 12
Kunratice, 148 00
Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

вер.01 от 20.02.2020

Инструкция по применению

Способ применения: распарить и тщательно высушить стопу. Снять защитную плёнку с пластыря. Подушечка с действующим веществом наложить на сухую мозоль и прижать пластырь для фиксации. Рекомендуется повторять процедуру ежедневно до полного удаления мозоли.

Модели лейкопластрей:
0108-011 Лейкопластырь мозольный Master Uni в наборе 6 шт. Размер: 6.5 x 2.0 см.

Условия хранения: хранить вдали источников тепла, при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Производитель: Фармлайн ООО (PharmLine s.r.o.), зарегистрированная по адресу: Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика (Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. **Адрес места производства:** No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functio[illegible] 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Утверждено:
Генеральный директор PharmLine s.r.o. Шаврин Сергей Михайлович

PharmLine s.r.o.
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG **Pharmline s.r.o**

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

ver.01 from 20.02.2020

Instructions for the use of nonsterile corn plasters

Direction for use: Steam and thoroughly dry the foot. Remove the protective film from the patch. Place the pad with the active substance on a dry corn and press the patch for fixation. Repeat this procedure daily until the corn is completely removed. Replace daily. Do not reuse.

Models:
0108-011 Master Uni Corn plaster for removal of dry corns, 6 pcs. Size: 6,5x2,0 cm.

Storage conditions: Keep in a dry place at 5° to 30°C and relative air humidity of 65% away from direct sunlight, away from sources of heat and away from children's reach.

Shelf live: 5 years

Manufacturer: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Production place: No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Approved by:
CEO PharmLine s.r.o
Shavrin Sergei

PharmLine s.r.o.
Dobronická 1257
Kunratice, 148 00
Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PharmLine s.r.o.
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

PLG

Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

ver.01 from 20.02.2020

Instructions for the use of Non-Sterile Capsicum Plasters

Directions: open the package, remove the protective paper strip, fix the patch. Effective for 24-48 hou
in the area of application must be clean and dry.

Models:
0107-001 Master Uni Capsicum plaster, 6x10 cm.
0107-002 Master Uni Capsicum plaster, 10x18 cm.

Storage conditions: Keep in a dry place at 5° to 30°C and relative air humidity of 65% away from direct sunlight, away from sources of heat and away from children's reach.

Shelf live: 5 years

Manufacturer: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Production place: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd., No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Approved by:
CEO PharmLine s.r.o
Shavrin Sergei

PharmLine s.r.o
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

вер.01 от 20.02.2020

Инструкция по применению

Способ применения: вскрыть упаковку, снять защитную бумажную полоску, зафиксировать пластырь. Эффективен в течение 24-48 часов. Кожа в области наложения должна быть чистой и сухой

Модели лейкопластрей:
0107-001 MASTER UNI Пластырь медицинский перфорированный перцовый в индивидуальных упаковках, размер, см: 6x10.
0107-002 MASTER UNI Пластырь медицинский перфорированный перцовый в индивидуальных упаковках, размер, см: 10×18.

Условия хранения: хранить вдали источников тепла, при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Производитель: Фармлайн ООО (PharmLine s.r.o.), зарегистрированная по адресу: Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика (Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. **Адрес места производства:** Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd., No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

PharmLine s.r.o.
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

Утверждено:
Генеральный директор PharmLine s.r.o. Шаврин Сергей Михайлович

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PharmLine s.r.o.
Dobronicka 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

ver.01 from 20.02.2020

Instructions for the use of sterile wound plasters

Direction for use: wash hands, clean and dry wound and surrounding area thoroughly, without touching a sorptior pad with fingers, position an adhesive plaster over wound and press down the edges firmly without creasing. Change daily. Do not reuse.


Models:
0108-002 Sterile wound plasters Master Uni Travel Kit. Polymeric base, 72x19 mm, 20 pcs.
0108-003 Sterile wound plasters Master Uni Sensitive. Non-woven base, 72x19 mm, 20 pcs.
0108-005 Sterile wound plasters Master Uni Elastic. Textile base, 72x19 mm, 56x19 mm, Ø22 mm, 20 pcs.
0108-007 Sterile wound plasters Master Uni Invisible. Polymeric base, 72x19 mm, 20 pcs.
0108-008 Sterile wound plasters Master Uni Kids. Polymeric base, 56x19 mm, 20 pcs.
0208-001 Sterile wound plasters Teneris Fun Kids. Polymeric base, 56x19 mm, 20 pcs.
0208-002 Sterile wound plasters Teneris Comfort Flex. Polymeric base, 76x19 mm, 20 pcs.
0208-003 Sterile wound plasters Teneris Sensitive. Non-woven base, 76x19 mm, 20 pcs.
0208-005 Sterile wound plasters Teneris Elastic. Textile base, 76x19 mm, 20 pcs.
0208-006 Sterile wound plasters Teneris Universal. Polymeric base, 76x19 mm, 20 pcs.
0208-022 Sterile wound plasters Teneris Aqua Silver. Polymeric base, 76x19 mm, 20 pcs.
0211-001 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 6x7 cm.
0211-002 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 8x10 cm.
0211-003 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 8x15 cm.
0211-004 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 10x10 cm.
0211-005 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 10x15 cm.
0211-006 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 10x20cm.
0211-007 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 10x25cm.
0211-008 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base. Size: 10x30 cm.
0211-029 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base, 10 pcs. Size: 6x7cm.
0211-030 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base, 10 pcs. Size: 8x10cm.
0211-032 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base, 10pcs. Size: 7x5cm.
0211-033 Sterile wound plasters with pad Teneris. Non-woven base, 10pcs. Size: 8x15cm.

Storage conditions: Keep in a dry place at 4 to 25° and relative air humidity of 65% away from direct sunlight, away from sources of heat and away from children's reach.

Shelf live: 5 years

Manufacturer: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Production place: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd., No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Approved by:
CEO PharmLine s.r.o
Shavrin Sergei

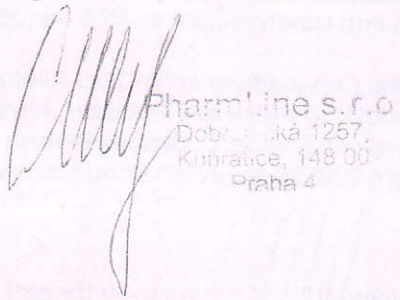

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

вер.01 от 20.02.2020

Инструкция по применению

Способ применения: вымойте руки, очистите и высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к сорбционной прокладке пальцами, приложите лейкопластырь на поврежденную поверхность кожи, плотно прижмите края, не допуская складок. Меняйте ежедневно. Не используйте повторно.

Модели лейкопластрей:
0108-002 Master Uni Travel Kit Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе в наборе, 20 шт. Размер: 7,2 x 1,9 см.
0108-003 Master Uni Sensitive Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе (телесного цвета) в наборе, 20 шт. Размер: 7,2x1,9 см.
0108-005 Master Uni Elastic Лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе в наборе, 20 шт. Размер: 7,2x1,9 см, 5,6x1,9 см, ∅2,2 см.
0108-007 Master Uni Invisible Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе в наборе 20 шт. Размер: 7,2x1,9 см.
0108-008 Master Uni Kids Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе с рисунками в наборе, 20 шт. Размер: 5,6x1,9 см.
0208-001 Teneris Fun Kids Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе с рисунками. 20 шт. Размер: 56x19 мм.
0208-002 Teneris Comfort Flex Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе. 20 шт. Размер: 76x19мм.
0208-003 Teneris Sensitive Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе. 20 штук. Размер: 76x19 мм.
0208-005 Teneris Elastic Лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе. 20 шт. Размер: 76x19 мм.
0208-006 Teneris Universal Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе. 20 штук. Размер: 76x19 мм.
0208-022 Teneris Aqua Silver Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе. 20 штук. Размер: 76x19 мм.
0211-001 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 6x7 см.
0211-002 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 8x10 см
0211-003 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 8x15 см.
0211-004 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 10x10 см.
0211-005 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 10x15 см.
0211-006 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 10x20 см.
0211-007 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 10x25 см.
0211-008 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размер: 10x30 см.
0211-029 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, 10 шт. Размер: 6x7 см.
0211-030 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, 10 шт. Размер: 8x10 см.
0211-032 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, 10 шт. Размер: 7x5 см.
0211-033 Teneris Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, 10 шт. Размер: 8x15 см.

Условия хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Производитель: Фармлайн ООО (PharmLine s.r.o.), зарегистрированная по адресу: Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика (Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. **Адрес места производства:** Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd., No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

PharmLine s.r.o
Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00
Praha 4

Утверждено:
Генеральный директор PharmLine s.r.o. Шаврин Сергей Михайлович

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

вер.01 от 20.02.2020

Инструкция по применению

Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять при необходимости.

Модели лейкопластрей:
0506-010 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе Master Uni, 1x500 см.
0506-011 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе Master Uni, 2x500 см.
0506-012 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе Master Uni, 3x500 см.
0506-013 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе Master Uni, 4x500 см.
0506-014 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе Master Uni, 5x500 см.
0506-022 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе Master Uni, 1x500 см.
0506-023 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе Master Uni, 2x500 см.
0506-024 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе Master Uni, 3x500 см.
0506-025 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе Master Uni, 4x500 см.
0506-026 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе Master Uni, 5x500 см.
0506-033 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе Master Uni, 1x500 см.
0506-034 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе Master Uni, 2x500 см.
0506-035 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе Master Uni, 3x500 см.
0506-036 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе Master Uni, 4x500 см.
0506-037 Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе Master Uni, 5x500 см.

Условия хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Производитель: Фармлайн ООО (PharmLine s.r.o.), зарегистрированная по адресу: Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика (Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. **Адрес места производства:** No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Утверждено:
Генеральный директор PharmLine s.r.o. Шаврин Сергей Михайлович

PharmLine s.r.o.
Kunratice, 148 00
Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PLG Pharmline s.r.o

ID: 27376851
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
USD: CZ89 4000 0000 0052 3381 0031 Expobank
SWIFT: EXPNCZPP

ver.01 from 20.02.2020

Instructions for the use of nonsterile wound plasters

Direction for use: apply on dry skin, press down; change if necessary.

Models:
0506-010 Textile tape Master Uni 1x500 cm
0506-011 Textile tape Master Uni 2x500 cm.
0506-012 Textile tape Master Uni 3x500 cm.
0506-013 Textile tape Master Uni 4x500 cm.
0506-014 Textile tape Master Uni 5x500 cm.
0506-022 Non-woven tape Master Uni 1x500 cm.
0506-023 Non-woven tape Master Uni 2x500 cm.
0506-024 Non-woven tape Master Uni 3x500 cm.
0506-025 Non-woven tape Master Uni 4x500 cm.
0506-026 Non-woven tape Master Uni 5x500 cm.
0506-033 Polymeric tape Master Uni 1x500 cm.
0506-034 Polymeric tape Master Uni 2x500 cm.
0506-035 Polymeric tape Master Uni 3x500 cm.
0506-036 Polymeric tape Master Uni 4x500 cm.
0506-037 Polymeric tape Master Uni 5x500 cm.

Storage conditions: Keep in a dry place at 4 to 25° and relative air humidity of 65% away from direct sunlight, away from sources of heat and away from children's reach.

Shelf live: 5 years

Manufacturer: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Production place: No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Approved by:
CEO PharmLine s.r.o
Shavrin Sergei

Praha 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru