Мэнифолды [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для подключения устройств во время интервенционной операции.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОМПОНЕНТЫ

Изделие состоит из присоединительного конуса, корпуса, ручек и защитного колпачка.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Благодаря использованию прозрачных материалов пути потока коллекторов хорошо видны при использовании.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снять упаковку. Не использовать, если упаковка повреждена.

2. Извлечь коллекторы и снять защитный колпачок, затем подсоединить линии в соответствии с правилами, проверить все соединения, чтобы убедиться в отсутствии утечек жидкости и / или воздуха.

3. В соответствии с потребностями пациента вводите соответствующую медицинскую жидкость для проведения диагностики и лечения.

4. Только для однократного применения. Утилизировать после использования.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

- Наименование изделия, модель и спецификация.
- Дата изготовления, серия/партия.
- Срок годности стерилизации.

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет. Подтвердить дату стерилизации перед использованием и не использовать по истечении срока годности.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения.
  После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.
- Стерилизовано этиленоксидом. Не использовать, если упаковка повреждена.

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4091, РЕД.02/DCR20-017

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Наборы Y-коннекторов [ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Изделие является вспомогательным инструментом при чрескожной ангиопластике.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОМПОНЕНТЫ
Изделие состоит из Y-коннектора, устройства для вращения проводника, направляющей канюли и защитной оболочки.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Удобно создавать путь, используя это изделие при чрескожной ангиопластике. Вспомогательные изделия могут использоваться для введения проводника в катетер, они являются гибкими и простыми в использовании.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Снять упаковку, не использовать, если упаковка повреждена.
2. Подсоединить Y-коннектор к порту катетера и вставить направляющую канюлю.
3. Вставить проводник в катетер с помощью устройства для вращения.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата производства, серия/партия. 3. Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:


- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет. Подтвердить дату стерилизации перед использованием и не использовать по истечении срока годности.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения.
- После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.
- Стерилизовано этиленоксидом. Не использовать, если упаковка повреждена.



BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

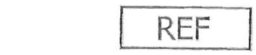

Каталожный номер


Производитель


Дата производства


СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



СОДЕРЖАНИЕ

GRA-4093, РЕД.02/DCR20-017

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru