STERILE EO

Проводники ангиографические периферические [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Изделие играет вспомогательную и направляющую роль при использовании вместе с катетером «J» и другими медицинскими изделиями при эндоскопии.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При правильном использовании медицинским персоналом абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Изделие обладает хорошей маневренностью, гибкостью, видимостью, отслеживаемостью, плавностью и поддержкой.

STERILE EO
Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности

LOT
Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1) Проверить упаковку. НЕ использовать, если упаковка повреждена.
2) Проверить на наличие загибов и отсутствие повреждений наконечника проводника ангиографического периферического. НЕ использовать при обнаружении дефектов.
3) Использовать любым из следующих способов:
   a. Под контролем эндоскопа или другого вспомогательного оборудования проводник вводится вдоль канала эндоскопа для биопсии до тех пор, пока не достигнет заданного местоположения. При введении соблюдать меры предосторожности во избежание перегиба проводника. Проводник можно удерживать во время использования.
   b) Предварительно загрузить проводник в катетер и ввести его вдоль отверстия эндоскопа для биопсии под контролем эндоскопа или другого вспомогательного оборудования до достижения заранее определенного места. Проводник можно удерживать во время использования.
   c) Вставить проводник через предварительно установленный катетер под контролем эндоскопа или другого вспомогательного оборудования. Проводник можно удерживать во время использования.
4 Утилизировать устройство в соответствии с больничными процедурами после операции.

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

6. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата изготовления, серия/партия.
3. Срок годности стерилизации.

7. ВНИМАНИЕ:

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет, необходимо подтвердить дату стерилизации перед использованием.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения. После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.

АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4088, РЕД.02
DCR20-0177

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Соединительные трубки [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для соединения трубок и устройств, обеспечивающих путь введения жидкости или/и инвазивного контроля артериального давления при интервенционной операции.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При правильном использовании медицинским персоналом абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОНСТРУКЦИЯ

Изделие состоит из зажима, мужских и женских конических фитингов, колпачка наконечника Люэра, корпуса трубки и колпачка.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие отличается высокой прозрачностью, гарантирующей, что любое образование пузырьков в трубке можно увидеть при нормальном или скорректированном зрении.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снять упаковку. Не использовать, если упаковка повреждена.
2. Подсоединить соединительную трубку к порту Люэра соответствующего изделия. Трубку можно использовать непосредственно после затягивания.

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата изготовления, серия/партия.
3. Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте

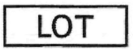

Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 0197

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

PHT
ДЭГФ Содержит или присутствует фталат: ди-(2-этилгексил) фталат (DEHP)

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.

АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4086,
РЕД.02/DCR20-0177

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru