Турникеты, жгуты пневматические [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для использования при гемостазе после катетеризации лучевой артерии.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОМПОНЕНТЫ

Устройство состоит из закрепленной панели, фиксирующей ленты и эластомера.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Расположение точки прокола под устройством можно четко наблюдать. Устройство может оказывать давление на место прокола для остановки кровотечения.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снять упаковку. Не использовать в случае отделения эластомера или повреждения упаковки.

2. Собрать фиксирующую ленту и отрегулировать ее.

3. Поместить эластомер устройства на место прокола, закрепить фиксирующую ленту, затем повернуть ручку, чтобы отрегулировать давление.

4. Только для одноразового использования, выбросить после использования.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте

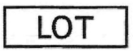

Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

- Наименование изделия, модель и спецификация.
- Дата изготовления, серия/партия.
- Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:

- Устройство стерилизовано и действительно в течение трех лет. Убедиться, что устройство используется в течение срока годности.
- Не использовать при отсоединении эластомера.
- Не использовать, если фиксирующая лента не может быть хорошо закреплена.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения. После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.
- Стерилизовано этиленоксидом. Не использовать, если упаковка повреждена.

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4092, РЕД.02/DCR20-017

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru