Инструкция

BD Vacutainer® Flashback Игла для взятия венозной крови



Предусмотренное применение

Игла для взятия крови BD Vacutainer® Flashback — это стерильное медицинское изделие одноразового применения для взятия образцов венозной крови. Она разработана специально для усовершенствования процесса сбора образцов крови медицинским работником. Камера иглы позволяет медицинскому работнику визуализировать обратный ток крови во время венепункции, подтверждая введение иглы в вену, что облегчает взятие образцов крови.

Описание изделия

Игла для взятия крови BD Vacutainer® Flashback представляет собой стерильное одноразовое изделие, состоящее из внутривенной (в/в) канюли и не контактирующей с пациентом (НКП) канюли с резиновым клапаном, которые закреплены на противоположных концах формованной камеры иглы, расположенной посередине. Камера иглы изготовлена из прозрачного пластика, что позволяет медицинскому работнику визуализировать обратный ток крови во время венепункции. Все изделие заключено в два пластиковых защитных колпачка на обоих концах канюли. Место соединения колпачков закрыто этикеткой контроля вскрытия.

Меры предосторожности и предупреждения

Меры предосторожности:


- Общие практические меры предосторожности. Для защиты от брызг и проливания крови, а также возможного воздействия гемоконтактных патогенов следует использовать перчатки, халаты, средства защиты глаз и другие средства индивидуальной защиты, а также надлежащие технические средства.
- Бумажная этикетка, закрывающая место соединения колпачков иглы, разрывается при вскрытии. Не используйте иглу, если этикетка контроля вскрытия разорвана до венепункции.

Предупреждения:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Обращайтесь со всеми биологическими образцами и острыми инструментами для сбора крови (ланцеты, иглы, люэр-адаптеры и наборы для взятия крови) в соответствии с правилами и стандартами вашего медицинского учреждения. Обратитесь за получением соответствующей медицинской помощи в случае любого контакта с биологическими образцами (например, при травме от укола), поскольку при этом можно заразиться вирусными гепатитами, ВИЧ (СПИД) или другими инфекционными заболеваниями. Утилизируйте все защитные механизмы, если таковые предусмотрены конструкцией устройства для взятия крови. Утилизируйте все острые инструменты для взятия крови в устойчивые к проколам контейнеры для биологически опасных отходов, предназначенные для их утилизации.
2. Не использовать при наличии инородных материалов.
3. Не снимать колпачок в/в иглы, наклоняя его вниз, чтобы избежать повреждения иглы (рис. 6).
4. Не надевать обратно снятые колпачки игл (рис. 7). Повторное надевание колпачка повышает риск травмы от укола иглой.

Общая инструкция по применению

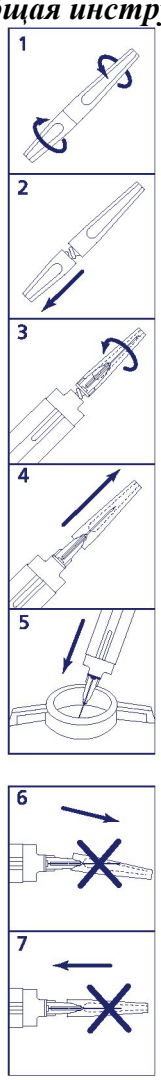

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Одной рукой возьмитесь за цветной колпачок иглы. Другой рукой поверните и снимите белый колпачок иглы (рис. 1, 2).
- Установите иглу для взятия крови в держатель. Убедитесь в плотной посадке иглы, чтобы исключить ее выкручивание при использовании (рис. 3).
- Вставьте пробирку в держатель. Примечание. Не прокалывайте пробку пробирки.
- Выберите место для венепункции.
- Наложите жгут. Обработайте место венепункции подходящим антисептиком. НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ.
- Снимите колпачок иглы (рис. 4). Убедитесь, что антисептик высох и выполните венепункцию С РУКОЙ В НИСХОДЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ. Наблюдайте за появлением крови в камере.
- При прокалывании пробки располагайте пробирку по центру держателя, чтобы исключить прокол боковой стенки и преждевременную потерю вакуума в результате этого. Аккуратно надавите на пробирку так, чтобы игла проколола пробку.
- УДАЛИТЕ ЖГУТ, КАК ТОЛЬКО КРОВЬ ПОЯВИТСЯ В ПРОБИРКЕ. В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СОДЕРЖИМОГО ПРОБИРКИ С ПРОБКОЙ ИЛИ КОНЦОМ ИГЛЫ.
- Когда первая пробирка заполнится до указанного на ней объема, и поток крови остановится, извлеките пробирку из держателя.
- Вставляйте в держатель следующие пробирки, прокалывая пробку для обеспечения тока крови.
- После завершения заполнения последней пробирки выньте пробирку из держателя, извлеките иглу из вены, прижав к месту прокола сухой стерильный тампон, удерживайте тампон до тех пор, пока не прекратит течь кровь.
- После свертывания крови в месте прокола при желании наложите повязку.
- Утилизируйте иглу и держатель в утвержденном контейнере для острых отходов (рис. 5).

Условия хранения и транспортировки

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от + 15 °С до + 25 °С. Беречь от солнечных лучей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Расшифровка символов и маркировки

Расшифровка символов и маркировки

EC REP	Уполномоченный представитель
LOT	Код серии
REF	Номер по каталогу
	Не использовать повторно
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Избегать попадания прямых солнечных лучей
LATEX	Не содержит латекса
	Производитель
STERILE R	Метод стерилизации облучением
	Срок годности

«BD», логотип «BD Logo» и другие торговые марки являются собственностью компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». © БД, 2015

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru