Регистрация МЦ в Росздравнадзоре
www.nevaexcert.ru | info@nevaexcert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

«ЭЗ-«Целит» является медицинским изделием кратковременного применения. Выпускается в нестерильной форме для профессионального пользования врачами-стоматологами. «ЭЗ-«Целит» предназначен для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врача-стоматолога от прямого попадания мелких частиц и пыли, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением.

Способ применения

Снимите защитную плёнку с обеих сторон щитка при помощи стикера. Оттяните зажим и закрепите щиток сначала с одной стороны оправы очковой, а затем с другой стороны оправы очковой (рис.1). Щиток может быть расположен под разным углом и на разном расстоянии от лица (рис.2).

Техническое обслуживание и ремонт

«ЭЗ - «Целит» техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Методы очистки и дезинфекции

Дезинфекции подвергают оправу очковую. После каждого использования «ЭЗ-«Целит» отделите щиток от оправы очковой, использованный щиток утилизируйте. Смочите салфетку из бязи 3 % раствором перекиси водорода, обработайте оправу очковую двукратным протиранием с интервалом 15 минут. После дезинфекции оправу очковую применяют по назначению.

Масса и Габаритные размеры «ЭЗ-«Целит»

«ЭЗ-«Целит» в сборе (одна оправа очковая и один щиток) - 25±2 г. Оправа очковая: ширина не более 138 мм, длина не более 145 мм. Щиток: высота 165±5 мм, длина большего основания 250±5 мм, длина меньшего основания 130±5мм.

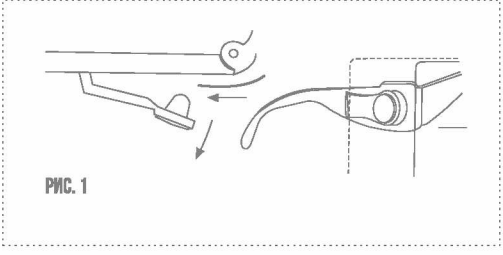


РИС. 1

Условия транспортирования и хранения

Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. «ЭЗ-«Целит» хранить в упакованном виде в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямого солнечного света при температуре от +5° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

Комплект поставки

Оправа очковая	1 шт.
Щиток	5 шт.
Коробка с напечатанной инструкцией по применению	1 шт.
Стикер	5 шт.

Выпускаемые цвета оправ

Белый; Зеленый; Розовый; Фиолетовый.

Гарантия изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие «ЭЗ-«Целит» всем требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ в течение 5 лет.

Условия эксплуатации

«ЭЗ-«Целит» эксплуатировать при температуре воздуха от +10° до +45° С и относительной влажности не более 98%.

Утилизация отходов

Отходы при использовании «ЭЗ - «Целит» в виде пленки, оправы и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.27.90-10 класса А.

РУ №ФСР 2011/11223 от 28.06.2011.
ТУ 9398-018-10614163-2006

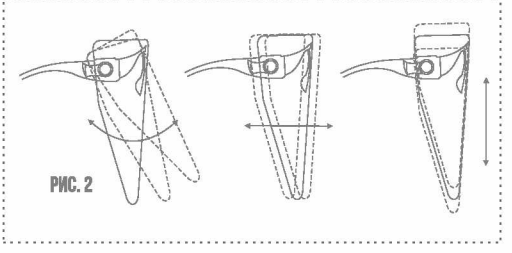


РИС. 2