ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наборы для ультразвуковой факоэмульсификации

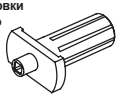
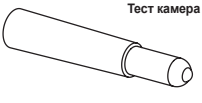
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02810

Набор для ультразвуковой факоэмульсификации Ultrasound MicroPhaco Kit может использоваться с ультразвуковыми рукоятками ALCON® 375/40, *Neosonix*® Infiniti®, ультразвуковыми (U/S) и Infiniti® *Neosonix*® U/S.

Смотрите соответствующую Инструкцию по эксплуатации относительно перечня утвержденных рукояток для системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Инструкция по применению набора для ультразвуковой факоэмульсификации не предназначена для замещения Инструкции по эксплуатации, которая поставляется с управляющим инструментом, и Инструкции по применению процедурного набора. Инструкция по эксплуатации, которая поставляется с инструментом и Инструкция по применению, которая поставляется с процедурным набором, содержат углубленный материал, предназначенный для ознакомления персонала операционной со средствами управления и функциями инструмента.

ОПИСАНИЕ: Каждый набор для ультразвуковой факоэмульсификации содержит стерильные принадлежности одноразового использования для применения в процедуре удаления хрусталика. Ниже представлен перечень отдельных предметов набора. Тип ультразвукового наконечника сильно зависит от конфигурации набора. ¹Полимерная трубка имеется только в конфигурациях наконечников ***Mackool***®.

Ультразвуковой наконечник с полимерной трубкой¹ 	**Ключ для установки ультразвукового наконечника/ ключ для игл** 	**Тест камера** 	**Усеченный инфузионный рукав со вставкой для подавления образования пузырей (BSI)** 

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ: Смотрите Инструкцию по эксплуатации управляющего инструмента и Инструкции по применению процедурного набора для установки рукоятки, а также для инструкций по заливке и проверке. Усеченный рукав не предназначен для инфузии жидкости в глаз. Инфузия жидкости достигается через отдельную ирригационную рукоятку (не входит в набор).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Ненадлежащее использование или монтаж могут привести к возникновению условий потенциального риска для пациента.
2. Использование ирригационных рукояток или параметров настроек с несоответствующими характеристиками потока, может привести к жидкостному дисбалансу и к измельчению или спадению передней камеры.
3. Проверьте наличие и правильное позиционирование полимерной трубки на наконечниках ***Mackool***®.
4. Если любой из предметов в наборе для ультразвуковой факоэмульсификации получен в неисправном состоянии, немедленно известите «Алкон». Не используйте ничего из содержимого упаковки, если стерильная упаковка повреждена или каким-либо образом нарушена герметичность. Во всех выше перечисленных случаях, пожалуйста, обращайтесь по телефону или по адресу:

   По телефону:
   В США: (800) 445-2389
   Отдел: по работе с клиентами (Международный) (713) 668-9100
   или обращайтесь в представительство компании «Алкон» в Вашей стране

   Для писем:
   Alcon Laboratories, Inc.
   Внимание: отдел по работе с клиентами
   9965 Buffalo Speedway,
   Houston TX 77054-1309 USA

   За пределами США, обращайтесь в представительство компании «Алкон» в Вашей стране:
   ООО «Алкон Фармацевтика» Россия, 125315, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3
   Тел. (495) 961-13-33

   Для возможности проведения оперативного контроля каждый набор для ультразвуковой факоэмульсификации идентифицируется по серийному номеру. Поэтому всегда указывайте серийный номер при обсуждении конкретного набора.
5. Стерильные медицинские изделия однократного использования не должны использоваться повторно (Руководство по аккредитации для лечебных учреждений, 1982).
   - **Потенциальный риск от многократного использования или после повторной обработки инструмента включает: снижение режущей способности наконечника, образование неровностей на поверхности наконечника, утечки в жидкостном канале или закупорка, приводящая к снижению функции жидкостного обмена, проникновение посторонних частиц в глаз.**
6. Компоненты набора для ультразвуковой факоэмульсификации предназначены только для одной процедуры удаления хрусталика – не использовать повторно! Ненадлежащее использование или монтаж могут привести к условиям потенциального риска для пациента. «Алкон» не несёт ответственность за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного использования или неправильного использования любого из изделий в составе набора для ультразвуковой факоэмульсификации.
7. Оборудование, используемое совместно с набором для ультразвуковой факоэмульсификации «Алкон», составляет целостную хирургическую систему. Использование расходных материалов производства другой компании (не «Алкон») может повлиять на работу системы и создать потенциальный риск, а также, если это окажется причиной нарушения функционирования оборудования, которое используется по контракту, может привести к аннулированию контракта и/или выставлению счета по превалирующим почасовым ставкам.

Определения символов, которые можно встретить на этикетках продукции:

	ВНИМАНИЕ: СМОТРИ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ			НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЙ СУХОЙ КАУЧУК	
	ГОДЕН ДО: (ГОД - МЕСЯЦ)		EC REP	АВТОРИЗОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС	
	ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ		Только следующие стерилизационные символы используются на этой упаковке:		
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ УПАКОВКА ПОВРЕЖДЕНА		STERILE R STERILE EO	STERILE - СТЕРИЛИЗОВАНО ОБЛУЧЕНИЕМ STERILE – СТЕРИЛИЗОВАНО ЭТИЛЕНОКСИДОМ	
℞ only	ВНИМАНИЕ! ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН США РАЗРЕШАЕТ ПРОДАЖУ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВРАЧУ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА				
REF / REF	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	LOT	НОМЕР СЕРИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ		НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ		ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

EC REP

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации / импортер / организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:ООО "Алкон Фармацевтика"Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.3
тел. +7 (495) 961-1333

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 0123

© 2004, 2009, 2010, 2013 Novartis

Alcon®
ALCON LABORATORIES, INC.
6201 SOUTH FREEWAY
FORT WORTH, TX 76134-2099 USA
a Novartis company
MADE IN USA

316-2513-001 REV. F

Произведено в США
Производственная площадка): ALCON Research, LLC, США (9965 Buffalo Speedway Houston, TX USA 77054)

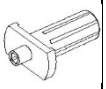
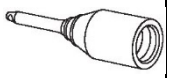
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплект для факоэмульсификации

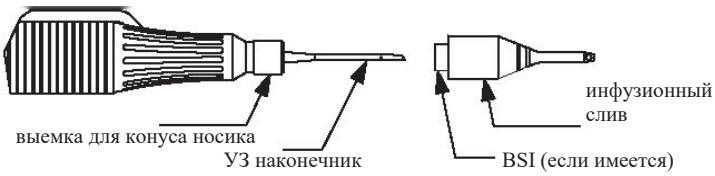
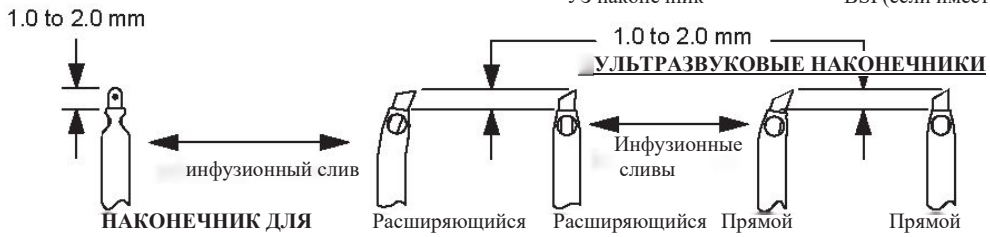
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящая инструкция по применению не отменяет необходимость в прочтении и усвоении инструкции по эксплуатации системы ***INFINITI***. Инструкция по эксплуатации, прилагаемая к оборудованию, включает в себя подробный материал, предназначенный для ознакомления персонала операционной с органами управления и функциями данного оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Федеральный закон США разрешает продажу данного изделия только врачу или по заказу врача.

ОПИСАНИЕ: Каждый пакет содержит стерильные принадлежности однократного использования, необходимые для выполнения одной процедуры факоэмульсификации с помощью системы ***INFINITI*** Vision System**.** Ниже приведен список деталей, входящих в комплект, и краткое объяснение их использования. Доступность отдельных деталей зависит от конфигурации комплекта.

ультразвуковой наконечник 	ключ для ультразвукового наконечника 	ключ для игл 	слив инфузионный 
тест-камера 	кассета 	чехол 	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКТА КАССЕТЫ

1.	Накинуть чехол на столик и на опорный рычаг инструмента. Сдвиньте драпировку вниз для получения мешочка.	Операционная медицинская сестра
2.	Оставшиеся компоненты упаковки перенесите на стерильное поле. Поднимите трубку и размотайте ее. Поместите в карман, образованный крышкой.	Операционная медицинская сестра
3.	Установить кассету, вставив нижнюю часть в жидкостный модуль консоли. Вдавить рукоятку в модуль. Проверьте, чтобы мешок для сбора жидкости висел свободно.	Дежурная или операционная медицинская сестра
4.	Проколоть ирригационный флакон или пакет. Сжать капельницу до ее наполнения примерно на 2/3–3/4 объема.	Дежурная медицинская сестра
5.	Присоединить синий разъем Люэра линии аспирации к белому разъему Люэра линии ирригации.	Операционная медицинская сестра
6.	Убедитесь, что выбраны правильные настройки для врача, рукоятки, наконечники и процедуры. Нажмите кнопку Настройка (Setup) на передней панели или воспользуйтесь пультом дистанционного управления для перехода к Настройке (Setup) и нажмите Ввод (Enter). Экран установки автоматически открывается при запуске или снятии кассеты для факоэмульсификации (FMS) после завершения процедуры.	Дежурная или операционная медицинская сестра
7.	Для запуска последовательности заливки нажмите кнопку Заполнение кассеты (Prime FMS) на передней панели или используйте пульт дистанционного управления для перехода к Заполнению кассеты (Prime FMS) и нажмите Ввод (Enter). После успешного завершения последовательности проверки вакуума/вентиляции система останется в режиме настройки и отобразит индикатор состояния Заполнение (Primed). Если процедуру проверки вакуумирования/вентиляции не удалась выполнить, отобразится информационное сообщение. После завершения заполнения программа установки автоматически переключится на этап заливки, но не активирует заливку до тех пор, пока не будет нажата кнопка заливки.	Дежурная или операционная медицинская сестра
8.	Наденьте ультразвуковой наконечник на ультразвуковую рукоятку. Надежно затяните ключом для установки наконечника. Снимите ключ для установки наконечника и сохраните его для последующего снятия наконечника. Только для наконечников ***INFINITI Mackool***‡ - Перед использованием проверьте наличие и правильность положения полимерной трубки. **Совместить соответствующую цветовую кодировку ультразвукового наконечника и соответствующего инфузионного слива** в разделе D **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.** Прикрутите инфузионный слив к рукоятке сверху на ультразвуковой наконечник. Если комплект содержит инфузионный слив с системой подавления образования пузырей BSI, используйте эту конфигурацию с УЗ-наконечником. Конец слива должен иметь скос на УЗ-наконечнике на 1-2 мм. Избегайте скручивания слива. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Инфузионные сливы совмещаются как с УЗ наконечниками, так и с наконечниками для ирригации-аспирации. Совместите отверстия портов, как показано: **СБОРКА С УЗ РУКОЯТКОЙ**   	Операционная медицинская сестра
9.	Подключите белую ирригационную линию Люэра с внешней резьбой и синюю аспирационную линию Люэра с внутренней резьбой к УЗ наконечнику. Чтобы дать ирригационной жидкости вытекать из УЗ наконечника, нажмите кнопку Заполнение (Fill) на передней панели или воспользуйтесь пультом дистанционного управления для переходя к Fill (Заполнение) и нажмите кнопку Ввод (Enter). Заполните тест-камеру. Наблюдайте за потоком ирригационной жидкости через ирригационно-аспирационные отверстия, когда нажата кнопка Заполнение (Fill). Если поток жидкости слабый или отсутствует, хороший жидкостный обмен не будет достигнут. Надлежащая клиническая практика предписывает необходимость тестирования адекватности потоков ирригации и аспирации перед введением наконечника в глаз. Сдвиньте тест-камеру над инфузионным сливом, убедившись в отсутствии пузырьков воздуха. Поместите рукоятку вертикально в чехол с карманом для рукоятки	Операционная медицинская сестра
10.	Для выполнения настройки наконечника и проверки потока нажмите кнопку Испытание рукоятки (Test Handpiece) на передней панели или используйте пульт дистанционного управления для перехода к Испытанию рукоятки и нажмите кнопку	Дежурная или операционная

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Ввод (Enter). Если наконечник не проходит настройку или испытание потока, отображается сообщение. Процесс настройки рукоятки может быть прерван в любой момент нажатием кнопки Отмена (Cancel).	медицинская сестра
11.	Для перехода к первому этапу процедуры снятия линзы для выбранного врача нажмите кнопку Хирургия (Surgery) на экране настройки. Кнопка Хирургия (Surgery) и, следовательно, экран Хирургия (Surgery) недоступны в случае, если система выполняет заполнение, заливку или настройку. Успешная заправка/настройка наконечника автоматически войдет в первый этап процедуры снятия линзы.	Дежурная или операционная медицинская сестра
12.	При необходимости наденьте наконечник И/А на наконечник И/А. Надежно затяните ключом для установки наконечника И/А. Снимите ключ для установки наконечника и сохраните его для последующего снятия наконечника. Прикрутите инфузионный слив к рукоятке сверху на наконечник И/А. Конец слива должен иметь скос на наконечнике И/А на 1-2 мм. Избегайте скручивания слива. Совместите отверстия портов, как показано в шаге 8, и убедитесь, что аспирационное отверстие наконечника И/А ничем не закрыто. Подключите белую ирригационную линию Люэра с внешней резьбой и синюю аспирационную линию Люэра с внутренней резьбой к наконечнику И/А. Находясь на экране установки, используйте кнопку Заполнение (Fill), дав ирригационной жидкости течь из наконечника И/А. На экране Хирургия (Surgery) нажмите педаль в положение 1, направив поток ирригационной жидкости из ирригационного порта, и активируйте функцию рефлюкса для потока ирригационной жидкости из порта аспирации наконечника И/А. Наблюдайте за потоком ирригационной жидкости из портов ирригации и аспирации. Если поток ирригационной жидкости слабый или отсутствует, хороший жидкостный обмен не будет достигнут. Надлежащая клиническая практика предписывает необходимость тестирования адекватности потоков ирригации и аспирации перед введением наконечника в глаз.	Операционная медицинская сестра

ДЛЯ СНЯТИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАКОНЕЧНИКА С РУКОЯТКИ: Наденьте держатель/ключ наконечника на ультразвуковой наконечник, слегка поверните его, пока плоские части наконечника не войдут в контакт с держателем/ключом наконечника. Затем нажмите до упора на держатель/ключ для наконечника. Поверните против часовой стрелки, пока ультразвуковой наконечник не будет полностью удален.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

A. Использование этого продукта может потребовать корректировки хирургических настроек. Обеспечьте соответствующие настройки системы ***INFINITI*** с помощью пакетов системы ***INFINITI***. Перед первым использованием для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю Alcon. (В США звоните 800-TO-ALCON или 8I7-293-0450. За пределами США обратитесь к местному торговому представителю компании Alcon.)

B. Если какой-либо элемент в пакете получен в неисправном состоянии, следует немедленно уведомить об этом компанию Alcon. Не используйте любую деталь при повреждении стерильной упаковки или при любом повреждении упаковки. В таких случаях обращайтесь:

По телефону:
в США — (800) 757-9780
Обратитесь к специалисту по медицинской безопасности
Международный 817-293-0450
Или обратитесь к местному представителю компании Alcon

По почте:
Alcon Research, LLC.
Вниманию: Специалист по медицинской безопасности
9965 Баффало Спидвей (Buffalo Speedway)
Houston, TX 77054-1309 USA (США)

По электронной почте:
MedicalSafetyHouston@alcon.com

На территории Российской Федерации обращайтесь в представительство компании «Алкон»: ООО «Алкон Фармацевтика», Россия, 125315, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп.3
Тел. (495) 961-13-33

На каждый пакет нанесен код партии, который обеспечивает прослеживаемость и должен быть предоставлен в Управление по медицинской безопасности при обсуждении вопросов по данному пакету.

C. Компоненты пакета предназначены только для одной процедуры факоэмульсификации.

D. Неправильное использование или сборка могут привести к созданию потенциально опасного условия для пациента.
Несоответствие расходных материалов и использование не соответствующих настроек для конкретных комбинаций расходных материалов, может создать потенциально опасный дисбаланс жидкости.
- Использование неутвержденных наконечников может создать потенциально опасный дисбаланс жидкости.
- Использование разрезов по размеру меньших, чем рекомендовано, может привести к механическому и/или термальному повреждению тканей глаза.

Тип сливов/инфузии	Цвет слива	Рекомендованные наконечники	Рекомендованный размер разреза
Высокоскоростной инфузионный слив 1,1 мм	Голубой	***ABS**** 1,1 мм и 1,1 мм, Расширяющийся наконечник **ABS** 1,1 мм, Расширяющийся наконечник ***Mackool***‡ **ABS** 1,1 мм, Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник ***AquaLase**** 1,1 мм и 1,1 мм Наконечник стандартный И/А, силиконовый И/А, ***INTREPID**** И/А	3,2 мм
Слив 1,1 мм	Темно-синий	***ABS*** 1,1 мм и 1,1 мм, Расширяющийся наконечник ***ABS*** 1,1 мм, Расширяющийся наконечник ***Mackool***‡ **ABS** 1,1 мм, Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник ***AquaLase**** 1,1 мм и 1,1 мм Наконечник стандартный И/А, силиконовый И/А, ***INTREPID**** И/А	3,0 мм
Слив Micro 1,1 мм	Синий/зеленый	***ABS*** 1,1 мм и 1,1 мм, Расширяющийся наконечник ***ABS*** 1,1 мм, Расширяющийся наконечник ***Mackool***‡ **ABS** 1,1 мм, Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник ***AquaLase*** 1,1 мм Наконечник стандартный И/А, силиконовый И/А, ***INTREPID**** И/А	2,75 мм
Слив Ultra 1,1 мм	Зеленый	Расширяющийся наконечник ***ABS*** 1,1 мм, 1,1 мм Расширяющийся наконечни ***Mackool***‡ ***ABS***, Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник ***AquaLase*** 1,1 мм, Силиконовый И/А, ***INTREPID*** И/А	2,2 мм
Слив Nano 1,1 мм	Светло-зеленый	Расширяющийся наконечник ***ABS*** 1,1 мм Наконечник ***ALCON® UltraChopper*** 0,9 мм Наконечник силиконовый И/А, ***INTREPID*** И/А	1,8 м

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Высокоскоростной инфузионный слив 0,9 мм	Светло-фиолетовый	Наконечник ***ABS*** Micro 0,9 мм и 0,9 мм, Конический наконечник ABS Micro 0,9 мм Расширяющийся наконечник ***ABS Micro*** 0,9 мм, Расширяющийся наконечник Micro ***Mackool‡ ABS*** 0,9 мм, Наконечник Mini ***ABS*** и расширяющийся Mini ***ABS*** 0,9 мм Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник стандартный стандартный И/А, силиконовый И/А, ***INTREPID**** И/А	3,2 мм
Слив Micro 0,9 мм	Темно-фиолетовый	Наконечник ***ABS*** Micro 0,9 мм и 0,9 мм, Конический наконечник ABS Micro 0,9 мм Расширяющийся наконечник ***ABS Micro*** 0,9 мм, Расширяющийся наконечник Micro ***Mackool‡ ABS*** 0,9 мм, Наконечник Mini ***ABS*** и расширяющийся Mini ***ABS*** 0,9 мм Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник стандартный И/А, силиконовый И/А, ***INTREPID**** И/А	2,75 мм
Слив Ultra 0,9 мм	Красный	Расширяющийся наконечник ***ABS Micro*** 0,9 мм, Наконечник Mini ***ABS*** и расширяющийся Mini ***ABS*** 0,9 мм Наконечник ***ALCON® UltraChopper**** 0,9 мм Наконечник силиконовый И/А, ***INTREPID*** И/А	2,2 мм
Слив Nano 0,9 мм	Оранжевый	Расширяющийся наконечник ***ABS Micro*** 0,9 мм, Наконечник Mini ***ABS*** и расширяющийся Mini ***ABS*** 0,9 мм Наконечник ***ALCON® UltraChopper*** 0,9 мм Наконечник силиконовый И/А, ***INTREPID*** И/А	1,8 мм

E. Стерильные одноразовые медицинские изделия не должны использоваться повторно (Accreditation Manual for Hospitals, 1982). Компания Alcon не принимает никакой ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате повторного или неправильного использования данного устройства.

- **Потенциальный риск от многократного использования или повторной обработки включает: снижение режущей способности наконечника, наличие заусенцев на наконечнике, утечки или препятствия на пути прохождения жидкости, приводящие к ухудшению рабочих характеристик жидкости, а также попадание посторонних частиц в глаз.**

F. Оборудование, используемое совместно с набором расходных материалов одноразового использования ***ALCON®***, составляет целостную хирургическую систему. Использование расходных материалов производства другой компании (не «Алкон») может повлиять на работу системы и создать потенциальный риск, а также, если это окажется причиной нарушения функционирования оборудования, которое используется по контракту, может привести к аннулированию контракта и/или выставлению счета по превалирующим почасовым ставкам.

G. Не превышайте максимальную вместимость мешка для сбора жидкости (500 мл). Избыточное давление из-за превышения максимального объема может создать потенциально опасные условия для пациента.

Определения символов, которые могут появляться на этикетках продукта:

	СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		МЕСТО ОТКРЫТИЯ ПЛЕНКИ	LOT/LOT	КОД ПАРТИИ
	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО		ОДНОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО	REF/REF	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ		НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
STERILE EO	СТЕРИЛЬНО – СТЕРИЛИЗОВАНО ЭТИЛЕНОКСИДОМ		НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС ИЛИ СУХОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК	PHT/DEHP	СОДЕРЖИТ ДЭГФ
EC REP	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ	Rx only	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН США ДОПУСКАЕТ ПРОДАЖУ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ТОЛЬКО ВРАЧУ ИЛИ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА		

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации / импортер / организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:ООО "Алкон Фармацевтика"Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.3
тел. +7 (495) 961-1333

Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, 76134-2099, USA
Произведено в США

Производственная площадка): ALCON Research, LLC, США (9965 Buffalo Speedway Houston, TX USA 77054)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru