
-Открытое акционерное общество «Опытно-механический завод»
г. Минск

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КМФ-9
Модель КМФ9-10

ПАСПОРТ

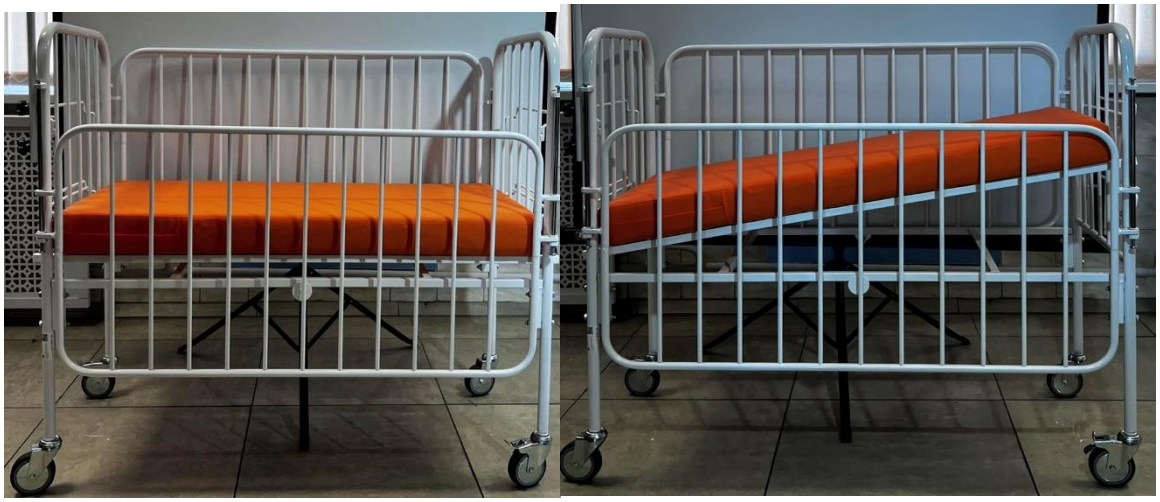

Назначение

Кровать медицинская детская КМФ9 предназначена для реабилитации в условиях стационара больных детей в возрасте от 3 до 13 лет. Каркас кровати КМФ9 выполнен из металлической трубы и уголка. Ложе из жесткой сварной сетки. Передняя и задняя стенки кровати опускаются до уровня колес, что позволяет обеспечить доступ к больному для выполнения процедур. Механизм опускания – ручной. Модель КМФ9-10 имеет возможность регулировки ложа по высоте и углу наклона.

Кровать имеет 4 колеса (два с тормозом, два без тормоза). Материал колес подходит для любого типа полов (не оставляют следов, не царапают). Покрытие металлических частей – полимер. Покрытие и все детали кровати легко переносят гигиеническую обработку и дезинфекцию.

В комплект кровати входит матрац с чехлом из влагооталкивающей, паропроницаемой ткани. Наполнение матраца – пенополиуретан, 70 мм.

Основные технические данные

1. Габаритные размеры кровати КМФ9, не менее, мм:
   L x B x H – 1220-1250 x 620-650 x 1100-1130.
2. Высота от пола до сетки не менее, мм – 500.
3. Размеры матраца не более, мм: l x b x s – 1160 x 570 x 70±10
4. Масса не более, кг – 48.
5. Спинки и стенки - металлические, стенки – подъемные.
6. Максимальная нагрузка на кровать не должна превышать значения:
   - номинальная нагрузка, Н, - 400;
   - максимальная нагрузка, Н, - 1000.
7. Максимальное усилие, необходимое для перемещения кровати на колесах под нагрузкой по твердому горизонтальному покрытию, прикладываемое к спинке кровати не более, Н - 100.
8. Усилие, необходимое для отведения ручки, фиксирующей положение стенки, должно быть не более, Н - 90.
9. Усилия, необходимые для подъема стенки кровати от исходного и из крайнего нижнего положения должны быть не более, Н - 160.
10. Усилия на педаль тормоза колеса, необходимые для фиксации и растормаживания колеса, должны быть не более, Н - 100.
11. Диаметр колес, мм, в пределах – 75 – 100. Два колеса должны иметь тормозы

Соответствие стандартам

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать соответствует требованиям ТУ РБ 37339638.005-2000 изм. «4»; регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь № ИМ-7.1066/1309; сертификат собственного производства №240.1/1602-1 (Минское отделение БелТПП).

Правила транспортирования и хранения

Транспортировать кровати следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Кровать рассчитана на хранение в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий, группа 2 по ГОСТ 15150. Кровать следует хранить на складах в упаковке. Кровати КМФ9-00 следует хранить в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Диапазон температуры воздуха при хранении от плюс 40 до минус 50 С.

Подготовка к работе

После освобождения составных частей кровати от упаковки, промыть теплой водой с мылом и протереть насухо.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям ТУ РБ 37339638.005-2000 изм. «4» при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки.
3. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет кровать и его части в случае неисправностей при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
4. Пересылка кровати, подлежащей гарантийному ремонту, производится за счет предприятия – изготовителя.
5. Срок службы кровати – не менее 6 лет.
6. При неисправности кровати на гарантийный ремонт необходимо приложить гарантийный талон.

Адрес предприятия – изготовителя:

220113. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича,10

Гарантийный талон на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока.

Изделие медицинской техники: Кровать медицинская детская
(наименование)

ТУ РБ 37339638.005-2000 изм. «4»
Номер и дата изготовления

_____
(заполняется предприятием – изготовителем)

Приобретена

_____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

М.П.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru