iMed GT 121

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за то, что выбрали измеритель артериального давления **iMed**. Измерения артериального давления с помощью данного прибора соответствуют измерениям, проводимым квалифицированным лицом с помощью манжеты и стетоскопа аускультативным методом.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с сопутствующей документацией.
Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство.
Сохраните это руководство для использования в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Измеритель артериального давления iMed содержит высокоточные узлы и детали. Не подвергайте прибор действию экстремальных температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей. Старайтесь не ронять и не ударять прибор, защищайте его от пыли.

2. Во избежание нежелательных ситуаций и выхода из строя, прибор не должен использоваться детьми.

3. Техническое обслуживание данного прибора потребителем не производится. Не следует пытаться открыть прибор с использованием инструментов или производить настройку узлов и деталей внутри прибора. При возникновении проблем в работоспособности прибора обращайтесь к продавцу или изготовителю.

4. Для прекращения измерения в любое время откройте выпускной клапан для быстрого стравливания воздуха.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

1. После измерения оберните манжету вокруг манометра и груши и поместите их в футляр вместе со стетоскопом.

2. При хранении прибора воздух из манжеты должен быть полностью выпущен.

3. Избегайте повреждения манжеты или ее частей острыми предметами.

4. Точность манометра можно проверить визуально: при полностью выпущенном из манжеты воздухе стрелка манометра должна находиться в пределах нулевого значения в обозначенном квадратике. При обычных условиях эксплуатации для обеспечения точности измерений рекомендуется проводить калибровку прибора каждые два года.

5. Чистку измерителя артериального давления iMed следует проводить с осторожностью, используя слегка влажную мягкую ткань. При этом избегайте сильных нажимов. Нельзя мыть измеритель артериального давления **iMed** в воде или применять для ее чистки химические очистители. Для чистки нельзя использовать растворители, спирт или бензин.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Измеритель артериального давления механический **iMed** предназначен для измерения артериального давления на плече.

2. Не нагнетайте давление выше 300 мм рт. ст.

3. Процедура измерения артериального давления не должна продолжаться более 3 минут.

4. Рекомендуемое время повторного измерения **1-2 минуты**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон**:**	0-300 мм рт. ст.
Точность:	± 3 мм рт. ст.
Условия эксплуатации:	от +10°С до +40°С;
Влажность:	до 85%
Условия хранения:	от -10°С до +60°С;
Влажность:	до 90%
Габариты:	175x105x70 мм
Вес:	400±10 г

Состав:

- манометр
- манжета (размер S, M или L)
- пневмокамера
- нагнетатель
- игольчатый клапан
- стетоскоп
- футляр для хранения
- руководство пользователя
- гарантийный талон

Первые две цифры серийного номера **WWYY00000** указывают неделю производства, вторые две цифры указывают год производства.

Измеритель артериального давления предназначен для применения в быту при отсутствии метрологической поверки

Гарантийный срок эксплуатации на прибор составляет 2 года. Срок службы прибора 10 лет

Изготовитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building 1, № 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province, Китай

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

1. Наложите манжету на плечо и оберните ее вокруг руки таким образом, чтобы трубка указывала в сторону ладони. (рис.1)

2. Край манжеты должен располагаться на расстоянии примерно 2 - 3 см выше локтевого сгиба. (рис. 1)

3. Плотно закрепите манжету.

4. Поместите оливы стетоскопа в уши, а головку стетоскопа на артерию под манжету. (рис. 1)

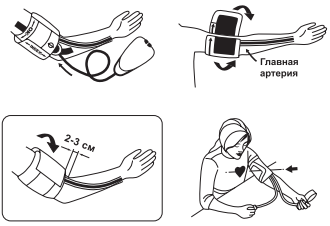


Рис. 1

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

1. При закрытом клапане нажимайте на нагнеталь (грушу) и нагнетайте давление в манжете до значения, превышающего Ваше обычное артериальное давление на 20-30 мм рт. ст. (Рис. 2)

2. Откройте клапан и постепенно стравливайте воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм рт. ст. в секунду. (Рис. 3)

3. Давление, при котором становятся слышны звуки сердца (тоны Короткова), является систолическим давлением, а давление, при котором они исчезают, является диастолическим давлением.

4. После завершения измерения полностью откройте клапан для стравливания оставшегося в манжете воздуха.

Очень важно регулярно посещать своего врача. Он пояснит Вам, какие значения артериального давления являются нормальными, а какие могут быть опасными для Вашего здоровья.

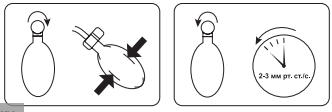


Рис. 2 Рис. 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

iMed GT 110

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за то, что выбрали измеритель артериального давления **iMed**. Измерения артериального давления с помощью данного прибора соответствуют измерениям, проводимым квалифицированным лицом с помощью манжеты и стетоскопа аускультативным методом.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с сопутствующей документацией.
Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство.
Сохраните это руководство для использования в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Измеритель артериального давления iMed содержит высокоточные узлы и детали. Не подвергайте прибор действию экстремальных температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей. Старайтесь не ронять и не ударять прибор, защищайте его от пыли.

2. Во избежание нежелательных ситуаций и выхода из строя, прибор не должен использоваться детьми.

3. Техническое обслуживание данного прибора потребителем не производится. Не следует пытаться открыть прибор с использованием инструментов или производить настройку узлов и деталей внутри прибора. При возникновении проблем в работоспособности прибора обращайтесь к продавцу или изготовителю.

4. Для прекращения измерения в любое время откройте выпускной клапан для быстрого стравливания воздуха.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

1. После измерения оберните манжету вокруг манометра и груши и поместите их в футляр вместе со стетоскопом.

2. При хранении прибора воздух из манжеты должен быть полностью выпущен.

3. Избегайте повреждения манжеты или ее частей острыми предметами.

4. Точность манометра можно проверить визуально: при полностью выпущенном из манжеты воздухе стрелка манометра должна находиться в пределах нулевого значения в обозначенном квадратике. При обычных условиях эксплуатации для обеспечения точности измерений рекомендуется проводить калибровку прибора каждые два года.

5. Чистку измерителя артериального давления iMed следует проводить с осторожностью, используя слегка влажную мягкую ткань. При этом избегайте сильных нажимов. Нельзя мыть измеритель артериального давления **iMed** в воде или применять для ее чистки химические очистители. Для чистки нельзя использовать растворители, спирт или бензин.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Измеритель артериального давления механический **iMed** предназначен для измерения артериального давления на плече.

2. Не нагнетайте давление выше 300 мм рт. ст.

3. Процедура измерения артериального давления не должна продолжаться более 3 минут.

4. Рекомендуемое время повторного измерения **1-2 минуты**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон**:**	0-300 мм рт. ст.
Точность:	± 3 мм рт. ст.
Условия эксплуатации:	от +10°С до +40°С;
Влажность:	до 85%
Условия хранения:	от -10°С до +60°С;
Влажность:	до 90%
Габариты:	175x105x70 мм
Вес:	400±10 г

Состав:

- манометр
- манжета (размер S, M или L)
- пневмокамера
- нагнетатель
- игольчатый клапан
- стетоскоп
- футляр для хранения
- руководство пользователя
- гарантийный талон

Первые две цифры серийного номера **WWYY00000** указывают неделю производства, вторые две цифры указывают год производства.

Измеритель артериального давления предназначен для применения в быту при отсутствии метрологической поверки

Гарантийный срок эксплуатации на прибор составляет 2 года. Срок службы прибора 10 лет

Изготовитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building 1, № 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province, Китай.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

1. Наложите манжету на плечо и оберните ее вокруг руки таким образом, чтобы трубка указывала в сторону ладони. (рис.1)

2. Край манжеты должен располагаться на расстоянии примерно 2 - 3 см выше локтевого сгиба. (рис. 1)

3. Плотно закрепите манжету.

4. Поместите оливы стетоскопа в уши, а головку стетоскопа на артерию под манжету. (рис. 1)

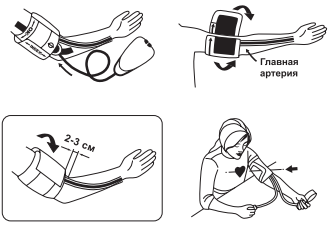


Рис. 1

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

1. При закрытом клапане нажимайте на нагнеталь (грушу) и нагнетайте давление в манжете до значения, превышающего Ваше обычное артериальное давление на 20-30 мм рт. ст. (Рис. 2)

2. Откройте клапан и постепенно стравливайте воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм рт. ст. в секунду. (Рис. 3)

3. Давление, при котором становятся слышны звуки сердца (тоны Короткова), является систолическим давлением, а давление, при котором они исчезают, является диастолическим давлением.

4. После завершения измерения полностью откройте клапан для стравливания оставшегося в манжете воздуха.

Очень важно регулярно посещать своего врача. Он пояснит Вам, какие значения артериального давления являются нормальными, а какие могут быть опасными для Вашего здоровья.

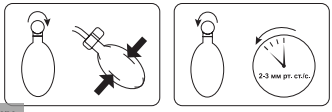


Рис. 2 Рис. 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru