Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



Поручень поворотный настенный

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.31.500.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.31.500.00.00.00 РЭ (далее – РЭ), предназначено для ознакомления пользователя с устройством поручня поворотного настенного ЦСИЕ.31.500.00.00.00 (далее – поручень), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Поручень предназначен для обеспечения опоры человека с ограниченными физическими возможностями при вставании и передвижении.

Поручень изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для монтажа на ровных поверхностях стен.

Может устанавливаться внутри помещений жилых, общественных и административно - бытовых зданий.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры (см. рисунок 1), не более:
- длина, L – 820 мм;
- ширина, B – 120 мм;
- высота, H – 215 мм.

2.2 Расстояние между крепёжными отверстиями:
- B_1 = 45 мм;
- B_2 = 90 мм;
- B_3 = 85 мм.

2.3 Масса – не более 3 кг.

2.4 Номинальная нагрузка – не более 120 кг.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 Устройство

Поручень (см. рисунок 1) состоит из следующих основных элементов: опоры 1 и кронштейна 2.

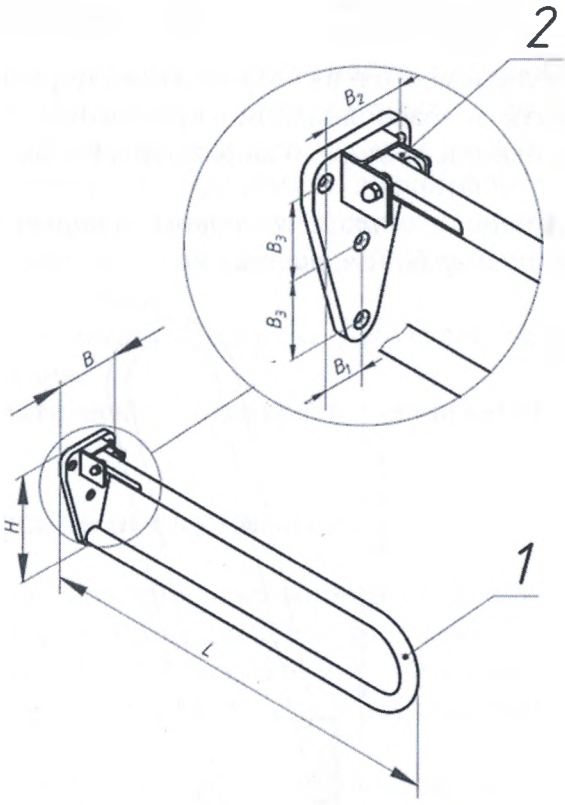


Рисунок 1 – Общее устройство поручня

Примечание - допускаются изменения в конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства поручня.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.1 Подготовка к использованию

Приспособление поступает к пользователю в собранном виде в чехле. Для монтажа изделия необходимо выполнить следующее:

3.1.1 Расчехлить поручень.

3.1.2 Внимательно ознакомиться с РЭ.

3.1.3 Определить место и высоту монтажа поручня.

3.1.4 Разметить расположение крепежных отверстий под установку анкеров, выдерживая размеры B_1, B_2.

Примечание – при установке поручня необходимо учитывать размер H_1 (см. рисунок 2).

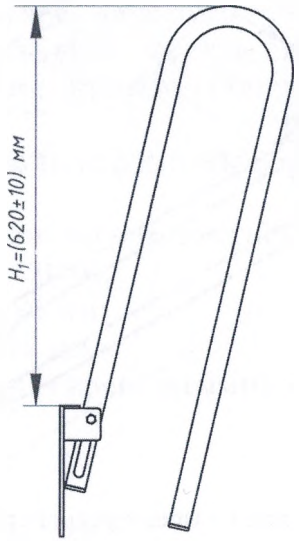


Рисунок 2

3.1.5 Просверлить по разметке отверстия сверлом 10 мм на глубину не менее 75 мм.

3.1.6 Установить анкера в просверленные отверстия так, чтобы цанга анкера утопала в отверстии.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.1.7 Вывернуть винты из цанг анкеров и закрепить ими поручень в отверстия.
3.1.8 Перед использованием убедиться, что все части приспособления надежно закреплены и неподвижны.

4 Меры безопасности

4.1 Перед использованием проверяйте поручень на наличие повреждений. Поверхности деталей поручня не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. Не используйте повреждённое изделие.
4.2 В процессе эксплуатации не допускать резких ударов и падения поручня.
4.3 Систематически проверять надежность резьбовых соединений.

5 Техническое обслуживание

5.1 Регулярно проверять надежность крепления конструкции и надежность фиксации резьбовых соединений.
5.2 Все детали приспособления необходимо протирать дезинфицирующими или моющими средствами и вытирать насухо.
5.3 Запрещается для чистки использовать растворители и спиртосодержащие вещества.

6 Комплектность

6.1 Поручень поворотный настенный– 1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6.3 Анкер стальной – 4 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 Маркировка

Маркировка поручня должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приёмке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство о приемке

Поручень поворотный настенный ЦСИЕ.31.500.00.00.00

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

должность *личная подпись* *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

9 Свидетельство об упаковывании

Поручень поворотный настенный ЦСИЕ.31.500.00.00.00

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

упакован на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность *личная подпись* *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантии изготовителя

10.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт поручня, в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведённых пользователем или третьими лицами без предварительного согласия с РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на изделие без РЭ, а так же на поручень, имеющий нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10,
тел. (017) 308-14-85, 308-14-34

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам:

г. Барановичи, ул. Царюка, 39;
г. Витебск, ул. Лазо, 113;
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а;
г. Гродно, ул. Белуша, 47А;
г. Могилев, пер. Базный, 8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Сведения о государственной регистрации

Поручень является изделием медицинского назначения.
Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: _____
Действительно до_____

12 Утилизация

12.1 Изделие не представляет эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также не оказывает негативного воздействия на среду обитания.
12.2 Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса А.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты РБ
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



Приспособление для туалета для взрослых складное

Руководство по эксплуатации
ЦСИЕ.31.080.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.31.080.00.00.00РЭ далее - РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с риспособлением для туалета для взрослых складным ЦСИЕ.31.080.00.00.00 (далее - приспособление), с условиями ксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Приспособление предназначено для удовлетворения естественных адобностей в имеющуюся ёмкость больных и престарелых людей далее - пользователей) с нарушением опорно-двигательного аппарата, для использования в туалетах, не оборудованных унитазами.

Особенности конструкции приспособления:

- возможность регулировки высоты;
- наличие подлокотников, обеспечивающих удобное вставание;
- расположение ножек под небольшим углом, обеспечивающих стойчивость на поверхности пола;
- складная модель удобна в использовании, мобильна, легко истится и дезинфицируется.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры:
- длина – (573...579 ± 10) мм;
- ширина – (592 ± 10) мм;
- высота – (673...794) ± 10 мм.

2.2 Ширина сиденья – 400 мм.
2.3 Длина сиденья - 400 мм.
2.4 Высота от пола до сиденья - (390...515) мм.
2.5 Масса – не более 9 кг.
2.6 Масса пользователя (номинальная нагрузка) – не более 100 кг.
2.7 Срок службы – 2 года.

3 Устройство приспособления


Приспособление (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов:

каркас 1, основание 2, боковина левая 3, боковина правая 4, спинка 5, опора 6, сиденье 7, судно 8, замки 9.

Примечание: Изображение приспособления на рисунке – условное и не служит для контроля на соответствие КД.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

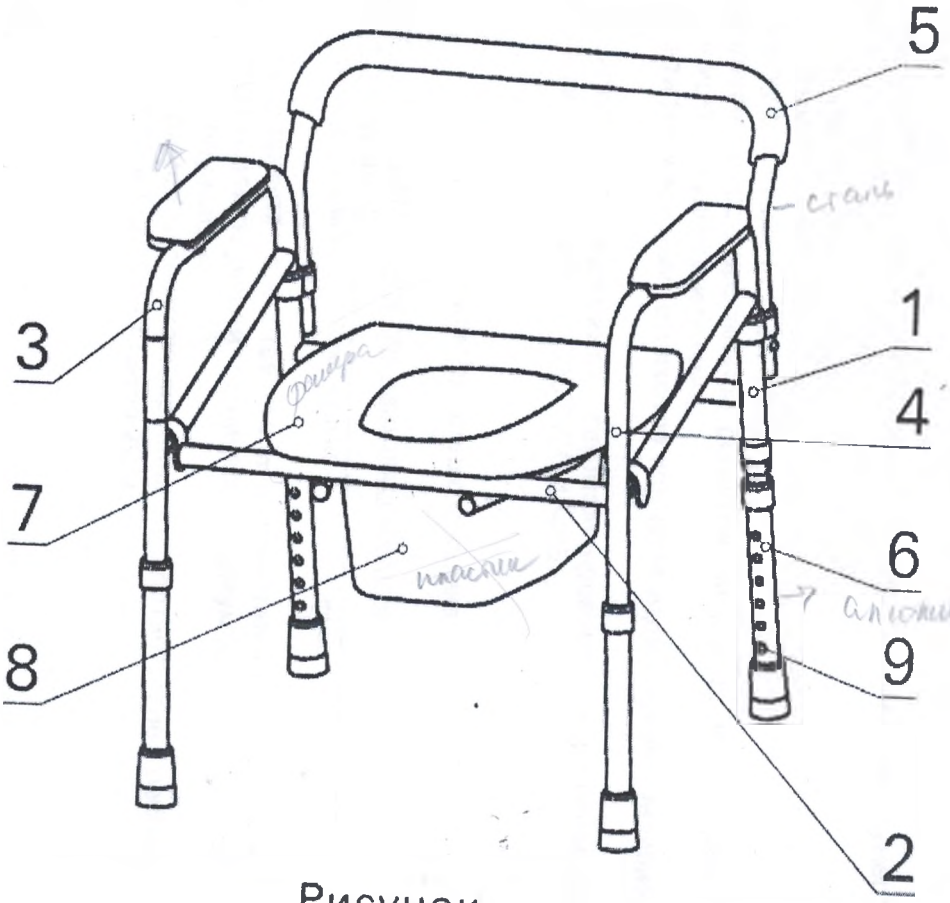

Рисунок

3.1 Подготовка к использованию

3.1.1 Расчехлить.

3.1.2 Развести в стороны боковины 3 и 4.

3.1.3.Поднять основание 2 вместе с судном 8.

3.1.4 Закрепить основание 2 на левой 3 и правой 4 боковинах, установить сиденье 7 на основание 2.

3.1.5 Установить приспособление на нужную высоту, перемещая опоры 6, зафиксировать их замком 9.

Приспособление подготовлено к использованию.

3.1.6 Приспособление складывается в обратном порядке.

4 Меры безопасности

4.1 Запрещается подвергать приспособление ударам, воздействию высокой температуры, влажности.

4.2 Систематически проверять надёжность крепления фиксаторов и замков.

4.3 При повреждении или износе резиновых наконечников на опорах 6 необходимо произвести их замену.

5 Техническое обслуживание

5.1 Все части приспособления периодически или по мере необходимости для удаления грязи протирать влажной ветошью с чистящими средствами и дезинфицирующим раствором.

5.2 После санитарной обработки вытереть приспособление насухо.

6 Комплектность

6.1 Приспособление для туалета	- 1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки должна содержать:

-наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приёмке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

8 Свидетельство о приемке

Приспособление для туалета для взрослых складное
ЦСИЕ.31.080.00.00.00
наименование изделия обозначение зав номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 900-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017 .

МП

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство об упаковывании

Приспособление для туалета для взрослых складное
ЦСИЕ.31.080.00.00.00
наименование изделия обозначение зав номер

упакован на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации приспособления 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт приспособления в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ.

10.3 Гарантия не распространяется на приспособления, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.


10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений .

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

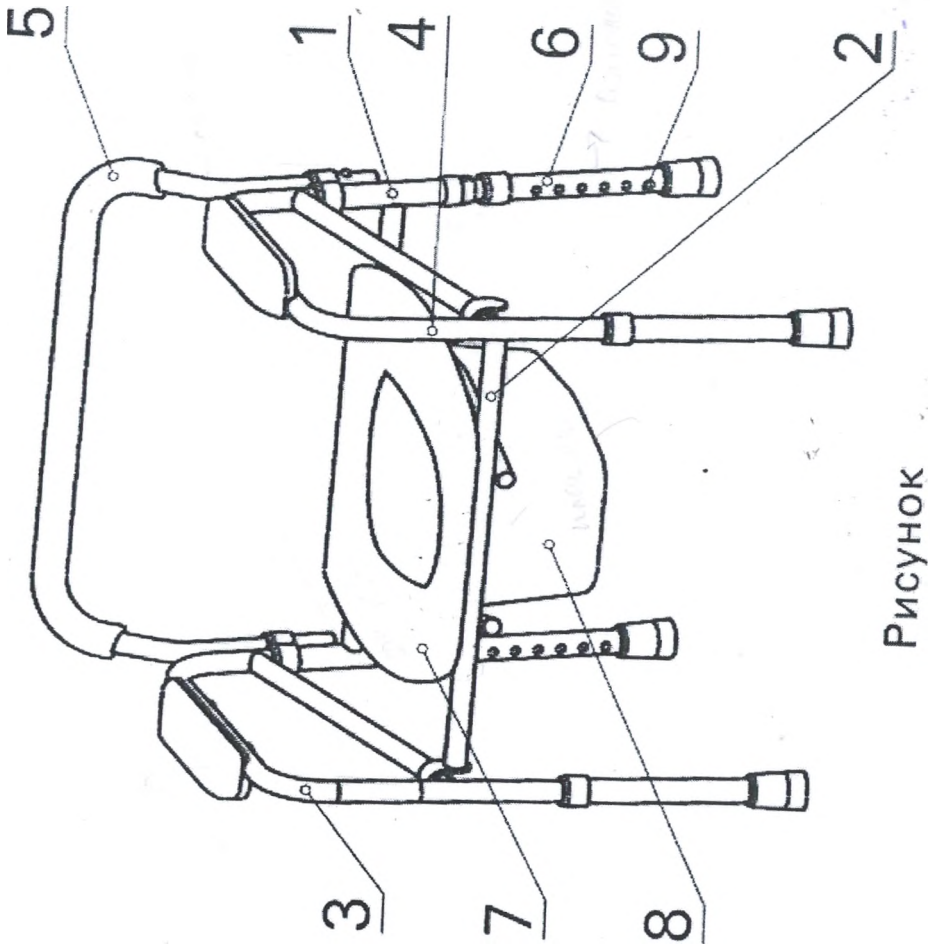

Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Сведения о государственной регистрации

11.1 Приспособление является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники №_____.

Действительно до _____

12 Утилизация

12.1 Приспособление не представляет эпидемиологическую, токсикологическую и радиационную опасности, а также не оказывают негативного воздействия на среду обитания.

12.2 Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса А.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru