«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
"01" 08 2022 г.

Версия/Version: № 6, 24.10.2018
RU

Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине ***tdvladmiva.ru***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала стоматологического антисептического гемостатического для зубных лунок

«АЛЬВАНЕС®»

(паста)

по ТУ 9391-048-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок **«Альванес»** (паста) (далее по тексту – **паста «Альванес»**) применяется как вяжущее средство при снятии зубных камней, кюретаже парадонтальных карманов, гингивэктомии и после снятия слепков.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста «Альванес» гемостатическая - кровоостанавливающее рассасывающееся средство для альвеол, которое обволакивает кровоточащую поверхность и, благодаря набуханию при контакте с кровью, оказывает давление на поврежденные капилляры, что в совокупности с действием аминокапроновой кислоты быстро останавливает кровотечение.

В состав **пасты «Альванес» гемостатической** входят:

- аминокапроновая кислота – гемостатик;
- гидрохлорид лидокаина - местный анестетик;
- цетримид - сильный антисептик;
- гелеобразователь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Паста «Альванес» гемостатическая не совместима с пенициллином.

Паста «Альванес» антисептическая – антисептическое средство для альвеол, которое легко вносится и хорошо удерживается в лунке альвеолярной кости, образуя пластичную лечебную повязку, быстро снимает боль и воспаление, формирует барьер, препятствующий бактериальному заражению костной ткани альвеолярной лунки. Применяется для профилактики и лечения альвеолита.

В состав **пасты «Альванес» антисептической** входят:

- прополис, который обеспечивает противовоспалительное, ранозаживляющее и обезболивающее действие материала;
- пчелиный воск, обладающий сильными бактерицидными свойствами;
- йодоформ, выделяющий йод при соприкосновении с живыми тканями, оказывая антимикробное действие, активизируя образование грануляционной ткани, а также обладающий вяжущими и противовоспалительными свойствами.
- пастообразователь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Применение **пасты «Альванес» антисептической** противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к препаратам йода, а также индивидуальной непереносимостью продуктов пчеловодства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Паста «Альванес» гемостатическая.

Скатать из пасты шарик и поместить в зубную лунку. Сверху наложить ватный тампон и рекомендовать пациенту сильно накусить его. Через 10 минут ватный тампон удалить, а компресс по

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

истечении 4-6 часов рассосется или станет студнеобразным, в зависимости от количества препарата и степени пропитанности кровью.

Паста «Альванес» антисептическая.

Для профилактики альвеолита после удаления зуба или корня зуба необходимо провести санацию лунки, с целью удаления грануляционной или инфицированной ткани, а также костных фрагментов. Внести в альвеолярную лунку **пасту «Альванес» антисептическую**, при необходимости ушить края раны.

При лечении альвеолита провести адекватное обезболивание. Затем провести кюретаж альвеолярной лунки (удалить все некротизированные ткани) и промыть лунку физиологическим раствором. Спровоцировать кровотечение, чтобы альвеолярная лунка полностью заполнилась кровью. Внести в альвеолярную лунку **пасту «Альванес» антисептическую**, при необходимости ушить края раны.

После внесения не требуется никаких специальных процедур, кроме наблюдения за процессом заживления. Материал постепенно самостоятельно вытесняется из альвеолы в течение 30 дней.

ФОРМА ВЫПУСКА

I. Паста «Альванес» гемостатическая

Паста (банка)	- 20 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

II. Паста «Альванес» антисептическая

1) Паста (шприц)	- 3 г х 2 шт.
Иглы изогнутые в п/э пакете типа «Ziplock»	- 3 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
2) Паста (банка)	- 10 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск **пасты** «**Альванес**» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в герметично закрытой таре, в сухом, **защищенном от прямых солнечных лучей месте**, при температуре от **+5°С до +25°С**.

Срок годности - **3 года.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°С до +30°С.**

ВНИМАНИЕ:

Недопустимо наличие инородных тел и некротизированных тканей в альвеолярной лунке перед внесением материала.

Не применять материал у пациентов, имеющих аллергическую реакцию на его компоненты.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки **пасты** «**Альванес**» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07668 от 28.08.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Акционерное общество
“Опытно-экспериментальный завод”
“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

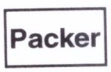
 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date

 - Код партии/Batch number

 - Температурный диапазон/Temperature limitation

 - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
"01" 06 2022 г.

Версия/Version: № 4, 06.11.2018
RU *Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине* ***tdvladmiva.ru***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического антисептического
гемостатического для зубных лунок
«АЛЬВАНЕС®»
(порошок)
по ТУ 9391-048-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ
Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок «**Альванес**» (порошок) (далее по тексту – порошок «**Альванес**») применяется как гемостатическое средство при снятии камней, кюретаже пародонтальных карманов, гингивэктомии, выравнивании гребнеобразных альвеолярных отростков, обработке зубных лунок и после снятия слепков. Для больных гемофилией применяются обычные способы лечения.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Порошок **«Альванес»** - препарат, останавливающий капиллярное кровотечение. Мелкодисперсный порошок легко распыляется, покрывая кровоточащую поверхность слизистой.

В состав порошка **«Альванес»** входят:
- природный пищевой полисахарид, образующий с кровью гель;
- альгинат натрия, ускоряющий образование сгустков крови;
- антисептик (иодоформ 0,01%).

Порошок **«Альванес»** нетоксичен, его можно совмещать как с антибиотиками, так и с антисептиками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Порошок **«Альванес»** применяется методом пульверизации или тампонирования. В случае слабого кровотечения обработать ранку тампоном из стерильной гигроскопической марли и нанести на поверхность ранки тонкий слой препарата пульверизацией.

В случае длительного кровотечения необходимо подождать, пока из ранки выделится достаточное количество крови, излишки ее удалить тампоном из стерильной гигроскопической марли. Тампонирование необходимо для того, чтобы обеспечить прямой контакт между капиллярами и артериолами, с одной стороны, и препаратом **«Альванес»** с другой.

В условиях отсутствия крови необходимо слегка надавить на обрабатываемое место до побледнения поверхности, затем распылить препарат на поверхность. По окончании пульверизации необходимо убедиться в том, что вся поверхность и края ранки хорошо покрыты тонкой пленкой препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА
Порошок (флакон) - 7 г
Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Картонная упаковка - 1 шт.
Допускается выпуск порошка «**Альванес**» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом месте в герметично закрытых флаконах при температуре **от +5°С до +25°С**, избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности - **3 года.**
Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30^{0}С до +30^{0}С.**

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки порошка «**Альванес**» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07668 от 28.08.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество
“Опытно-экспериментальный завод”
“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
"01" 06 2022 г.

Версия/Version: № 7, 26.09.2018

RU *Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине* ***tdvladmiva.ru***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала стоматологического антисептического
гемостатического для зубных лунок
«АЛЬВАНЕС®»
по ТУ 9391-048-45814830-2001
(губки гемостатической коллагеновой)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок «**Альванес**» (губка) (далее по тексту – губка «**Альванес**») выпускается:

- ***с йодоформом;***
- ***с хлоргексидином и метронидазолом;***
- ***с линкомицином.***

Губка «**Альванес**» предназначена для лечения и профилактики воспалительных осложнений в хирургической стоматологии и пародонтологии: после удаления зубов, в частности лечение альвеолита и пародонтальных абсцессов; а также заполнение пародонтальных карманов после местной противовоспалительной терапии или кюретажа.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Губка «Альванес» состоит из лиофилизированного коллагена, в который введены кровоостанавливающие компоненты, влияющие на отдельные стадии свертывания крови, в частности на остановку капиллярного кровотечения, а также анестетические компоненты (лидокаин).

В качестве антисептика губка **«Альванес» (с йодоформом)** содержит йодоформ, который при соприкосновении с живыми тканями выделяет йод, оказывая антимикробное действие, активизируя образование грануляционной ткани, а также обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами.

Эффективность противомикробной губки «**Альванес**» (с хлоргексидином и метронидазолом) обусловлена наличием в ее составе компонентов: хлогексидина и метронидазола.

Метронидазол обладает антипротозойным и антибактериальным действием по отношению к анаэробным простейшим и бактериям. Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении нитрогрупп метронидазола и дальнейшем их взаимодействии с ДНК клетки микроорганизмов, что ингибирует синтез нуклеиновых кислот и ведет к гибели бактерий.

Хлоргексидин, входящий в состав губки, активен в отношении широкого спектра вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, дрожжей и липофильных вирусов. Бактерицидный эффект обусловлен связыванием катионов, образующихся в результате диссоциации хлоргексидина в физиологической среде с отрицательно-заряженными фосфатными группами бактериальных клеточных мембран и экстрамикробных комплексов.

Входящий в состав губки «**Альванес**» (с линкомицином) линкомицин, ингибирует синтез белков в микроорганизмах, оказывая бактериостатическое и бактерицидное действие. Эффективен в отношении грамположительных микроорганизмов и микоплазм.

Губка «**Альванес**» не обладает местным раздражающим и биотоксическим действием, стимулирует регенерацию ткани в стадии заживления. Не требует вмешательства врача для ее извлечения, резорбируется в течение нескольких дней.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

При удалении зубов

После удаления зуба или корня зуба необходимо провести санацию лунки, с целью удаления грануляционной или инфицированной ткани, а также костных фрагментов. Взять пинцетом один кубик губки «**Альванес**» и поместить его в лунку. Поверх губки наложить сухой тампон. В случае травматического удаления зуба, поверх губки могут быть наложены швы.

В пародонтологии

В зоне пародонтальных дефектов губка «**Альванес**» способствует образованию кровяного сгустка и быстрому заживлению раны.

После механической обработки зубодесневых карманов губку или ее часть поместить в подготовленную полость, что помогает снять воспалительный процесс и исключает проникновение инфекции в костную ткань.

ВНИМАНИЕ:

Только для местного применения!

ВНИМАНИЕ:

Применение материала противопоказано больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода!

ФОРМА ВЫПУСКА

Губка (флакон)	- 30 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск губок «**Альванес**» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном прохладном месте при температуре от **+5°С до +25°С**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°С до +30°С**.

Срок годности - **3 года**.

Избегать попадания влаги!

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки губки «**Альванес**» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07668 от 28.08.2017 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество
“Опытно-экспериментальный завод
“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date

LOT - Код партии/Batch number

 - Температурный диапазон/Temperature limitation

Packer - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru