Инструкция
по применению корсета фиксирующего КР0 - 12

1 Корсет фиксирующий КР0-12 (далее изделие) предназначен для ограничения подвижности грудопоясничного отдела позвоночника, при различных патологиях. Используется для обеспечения ограничения нефизиологических движений с целью фиксации и поддержания их в покое при ушибах, миозитах, компрессионных переломах и переломах отростков позвонков в грудном и грудопоясничном отделах позвоночника в подостром и восстановительном периодах.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:
- тяжёлая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие необходимо надевать на бельe.


2.1 Изделие следует застёгивать на застежку текстильную «контакт», затем застегнуть ремень-подхват.

3 Изделие должно плотно охватывать позвоночник.

4 Режим ношения изделия определяется врачом ортопедом - травматологом. Перед сном изделие рекомендуется снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать застежку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

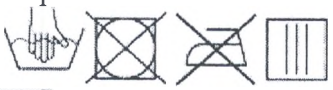

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению корсета для фиксации головы из пенополиуретана КР0-02-05

Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждений связок и костей, кривошее у детей и др.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Крепление изделия и регулировка фиксации на шее за счет застежки текстильной «контакт».

Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом и высотой шеи в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват шеи, мм	280-370	370-430	430-500	280-370	370-430	430-500	280-370	370-430	280-370	370-430
Высота шеи, мм	50-70	50-70	50-70	70-90	70-90	70-90	90-110	90-110	110-130	110-130

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 30°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- не подвергать химчистке, не использовать растворители и отбеливатели;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению корсета корригирующего типа Шено КР4-16-05 ПЭТ

Корсет корригирующий типа Шено (далее-корсет) - ортопедическое изделие индивидуального изготовления, предназначенное для оказания воздействия на искривленный позвоночник с целью коррекции деформации, восстановления баланса туловища. Корсет изготавливается в соответствии с назначениями в бланке заказа, оформленном с учетом медицинских показаний и анатомо-физиологических особенностей пациента.

Корсет следует носить поверх хлопчатобумажной футболки, которая должна быть без швов по краям, достаточно длинной и как можно тоньше, можно одевать корсет в трикотажном х/б чехле без нательного белья.

Длительность использования и общая продолжительность применения корсета определяются в соответствии с рекомендациями и планом наблюдения, утвержденным врачом-травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за корсетом необходимо:

- внутреннюю поверхность корсета протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- стирку чехла производить только вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами, выжимать слегка, без выкручивания;
- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- сушить чехол в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- гладить чехол при температуре не более 100 °С;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании корсета необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендуется самостоятельно вносить изменения в конструкцию корсета, производить корректировку и ремонт.

Ремонт корсета необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует износостойкость и надежность в течение - 7 месяцев со дня выдачи готового корсета, на элементы крепления - 30 дней со дня выдачи готового корсета при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно производит ремонт корсета, гарантия не распространяется на корректировочные работы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-рекомендация по первоначальному использованию корсета корригирующего типа Шено КР4-16-05 ПЭТ

Корсет корригирующий типа Шено (далее-корсет) - ортопедическое изделие индивидуального изготовления, предназначенное для оказания воздействия на искривленный позвоночник с целью коррекции деформации, восстановления баланса туловища. Корсет изготавливается в соответствии с назначениями в бланке заказа, оформленном с учетом медицинских показаний и анатомо-физиологических особенностей пациента.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

При регулярном использовании корсета осуществляется воздействие на позвоночник, путем давления на определенные зоны достигается коррекция искривления позвоночника. Для получения и закрепления корригирующего эффекта необходимо приложить дополнительно и собственные усилия, включающие лечебную гимнастику с дыхательными упражнениями, и ЛФК в воде. Рекомендуется выполнять упражнения несколько раз в день (время назначается врачом индивидуально). Без собственных усилий действие корсета будет незначительным, а причиняемые неудобства существенными.

Основное условие корсетного лечения: в течение первых 2-х недель время ношения корсета должно достичь до 23-х часов в сутки.

НАДЕВАНИЕ КОРСЕТА:

- надевать корсет следует с помощью другого человека (особенно при первоначальном применении);
- корсет следует носить поверх хлопчатобумажной футболки, которая должна быть без швов по краям, достаточно длинной и как можно тоньше, можно одевать корсет в трикотажном х/б чехле без нательного белья;
- **корсет следует надевать стоя с расстегнутыми застежками, затем необходимо лечь;**
- положить обе руки на талию и потянуться вверх;
- **застегнуть все ремни и застежки;**
- **затянуть поочередно по одной застежке до нужной нагрузки;**
- расправить аккуратно белье под корсетом.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ КРЕПЛЕНИЯ:

- **для застегивания элементов крепления ремни необходимо брать в расправленном состоянии без перекосов, складок и заминов, и равномерно затянуть по длине (нельзя сжимать в кулак, резко затягивать до нужной нагрузки);**
- **необходимо разгладить и прижать рукой место соединения застежек;**
- **периодически элементы крепления следует очищать от ниток и ворсинок.**

Правильный уход, использование элементов крепления продлевает их срок эксплуатации.

ЭТАПЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОРСЕТА:

Этап 1 1-й и 2-й день (6 часов:2+2+2)

- 2 часа носить корсет, затем снимать и проверять, нет ли покраснения кожи или синяков на теле.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ:

- не допускать повреждений кожи. Кожа должна оставаться мягкой, особенно в тех местах, где корсет плотно прилегает к телу;
- мыть кожу детским мылом, лучше принимать душ, а не ванну. Надевать корсет через 15 минут после душа (необходимо, чтобы кожа высохла);
- необходимо покрасневшие места протирать 40% этиловым спиртом или антисептическим раствором (мукосанина, септомирина) в первые 2-3 недели применения корсета;
- нельзя наносить мази или лосьоны на кожу непосредственно под корсет.

При повреждении кожи корсет временно не носить (до заживления кожи). Для лечения, консультации следует обратиться к врачу. Иногда кожа на местах, которые находятся под давлением, темнеет. Это нормальное явление. После окончания использования корсета кожа постепенно приобретет свой естественный цвет.

Этап 2 3-й и 4-й день (12 часов).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Если по истечении 6 часов ношения корсета не возникло осложнений, то его можно носить 3 раза в день по 4 часа в период бодрствования и 2-3 часа в период сна.

Этап 3 5-й и 6-й день (16 часов).

Носить корсет следует весь день, и 4-5 часов ночного сна. Через каждые 4 часа кожу необходимо проверять.

Этап 4 7-й и 8-й день

Если после прохождения 3-го этапа не возникло осложнений, тогда наступает 23-х часовой режим ношения корсета, оставшиеся 60 мин. необходимы для ухода за телом, корсетом, лечебной гимнастики.

Необходимо осуществлять контроль и уход за кожей до 3-х раз в день.

УХОД ЗА КОРСЕТОМ:

- внутреннюю поверхность корсета протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- стирку чехла производить только вручную при температуре не свыше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами и выжимать слегка, без выкручивания;
- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- сушить чехол в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- гладить чехол при температуре не более 100 °С.

ОДЕЖДА:

- рекомендуется носить брюки с резинкой на талии или комбинезон, свободные платья.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В КОРСЕТЕ?

В корсете можно вести обычный образ жизни. По поводу физических нагрузок необходимо проконсультироваться с врачом-травматологом-ортопедом. Не допускается делать упражнения связанные с ударами, толчками и подъемом тяжестей.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию корсета;
- переходить на следующий этап, только завершив предыдущий;
- при возникновении проблем с кожей проконсультироваться с врачом;
- во время приема пищи корсет немного ослабить (лучше частое, дробное питание);
- соблюдать рекомендации врача-травматолога-ортопеда;
- первичный осмотр 1 раз в 3 месяца, повторный и последующие осмотры 1 раз в 6 месяцев с посещением **каб. 209, г. Минск, ул. Одоевского 10.**

Ремонт корсета необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует износостойкость и надежность в течение - 7 месяцев со дня выдачи готового корсета, на элементы крепления 30 дней со дня выдачи готового корсета при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно производит ремонт корсета, гарантия не распространяется на корректировочные работы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
ортеза на лучезапястный сустав
ТР0-05, ТР0-05-01

Ортез на лучезапястный сустав ТР0-05, ТР0-05-01, ТР0-05-XX-XXX (далее ортез) назначается в период ранней реабилитации после травм и операций на дистальном (нижнем) отделе предплечья, лучезапястном суставе, для профилактики и лечения сгибательных контрактур, при тендовагинитах, повреждении связок лучезапястного сустава, спастическом парезе.

Противопоказаниями к назначению ортеза является индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Ортез выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер ТР0-05 определяется обхватом кисти в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1(S)	2(M)
Обхватом кисти, мм	190 ±10	210 ±10

При серийном изготовлении размер ТР0-05-01 определяется обхватом на середине предплечья в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Размер	1(S)	2(M)	3(L)
Обхват на середине предплечья, мм	160 ± 20	180 ± 20	240 ± 20

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

Ортез из текстильных материалов ремонту не подлежит.

Рекомендуется носить ортез по назначению врача ортопеда -травматолога. Ортез надевать на чехол.

Для обеспечения правильного ухода за ортезом необходимо:

- перед стиркой извлечь планшетки, шины, мячик;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40^0С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- ортез выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- после высыхания в ортез вложить планшетки, шины мячик;
- не подвергать глажению.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению реклинаторов КР1-03, КР1-04

Реклинаторы КР1-03 и КР1-04 (далее изделия) предназначены для детей и подростков с начальными формами нарушения осанки и лёгких нефиксированных деформациях, преимущественно с локализацией в верхне-грудном отделе позвоночника, при слабой функции мышечно - связочного аппарата для исправления искривления в сагиттальной плоскости, преимущественно при сутулости.

Размер изделия определяется для КР1-03 - длиной спины, для КР1-04 – обхватом груди, длиной спины в соответствии с таблицами 1, 2.

Таблица 1

Размер изделия	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (3XL)	8 (4XL)
Длина спины, мм	340-350	350-360	360-370	370-380	380-390	390-400	400-410	410-420

Таблица 2

Размер изделия	1 (XXS)	2 (XS)	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)	7 (XXL)
Обхват груди мм	500-560	560-620	620-720	720-810	810-900	900-1000	1000-1090
Длина спины мм	270-300	300-330	330-350	330-350	350-380	350-380	380-410

Обхват груди измеряется горизонтально вокруг туловища под основанием молочных желез.

Длина спины измеряется от точки основания шеи сзади до отметки уровня талии на позвоночнике.

Противопоказаниями к назначению изделий являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие надевать в положении стоя поверх майки, облегающей тело. Прежде чем натянуть ремни и застегнуть изделие, следует пациенту придать надплечьям положение максимально возможного отведения назад, свести лопатки, подтянуть живот и держать голову прямо.

Рекомендуется пользоваться изделием во время сидения на школьных и домашних занятиях. Во время сна, прогулок, бега, игр, связанных с частичной сменой поз, изделие необходимо снимать.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;

сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;

- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
ортеза на верхнюю конечность ТР8-06

Ортез на верхнюю конечность ТР8-06 (далее изделие) назначается в период реабилитации после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече, при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, при подвывихах, вывихах плеча.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделия выпускаются по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер изделия определяется длиной от локтевого отростка до середины ладони (рисунок 1) в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1 (S)	2 (M)
Длина от локтевого отростка до середины ладони, мм	300 - 340	340 - 380

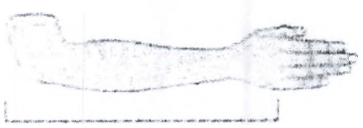


Рисунок 1

В период использования изделия необходимо выполнять рекомендации врача травматолога - ортопеда.

Изделие необходимо надевать на одежду.

Изделие крепится на теле пользователя при помощи ремня и пряжек, что позволяет осуществлять регулировку, натяжение и фиксацию.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40^0С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

Изделие ремонту не подлежит.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению тутора на нижнюю конечность

Туторы на нижние конечности ТН0, ТН2, ТН4, ТН6, ТН8 (далее туторы) - технические средства реабилитации, в которых отсутствуют шарнирные соединения и которые предназначены для жесткой фиксации сустава(ов) и (или) сегмента(ов) нижней конечности, их частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Противопоказаниями к назначению туторов являются:

- наличие судорожного синдрома;
- наличие декомпенсированных соматических состояний;
- наличие декомпенсированных состояний при органических поражениях ЦНС;
- психоэмоциональное состояние пациента;
- наличие декомпенсированных состояний со стороны кожных покровов;
- локальные дерматиты, гнойничковая инфекция в местах соприкосновения с тутором;
- аллергические реакции на материал приемной гильзы.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом - травматологом - ортопедом РУП БПОВЦ.

Наименование (артикул, марку, шифр) элементов, полуфабрикатов, комплектующих определяет врач - травматолог - ортопед по каталогу производителя при назначении тутора.

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

- тутор рекомендуется надевать на чулок (носок, колготки);
- расположить приемную гильзу на нижней конечности и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

- избегать сильных ударов тутором и по тутору;
- тутор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо протирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать тутор, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;
- тутор хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании тутора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно изменять схему построения тутора, производить корректировку и ремонт.

Ремонт тутора необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу тутора в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Допустимая максимальная нагрузка на тутор _____кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению тутора на верхнюю конечность

Туторы на верхние конечности ТР0, ТР2, ТР4, ТР6, ТР8 (далее туторы) - технические средства реабилитации, в которых отсутствуют шарнирные соединения и которые предназначены для фиксации сустава(ов) и (или) сегмента(ов) или всей верхней конечности, их частичной разгрузки в приданном положении коррекции и (или) обеспечения косметичности при различных патологических состояниях.

Противопоказаниями к назначению туторов являются:

- наличие судорожного синдрома;
- наличие декомпенсированных соматических состояний;
- наличие декомпенсированных состояний при органических поражениях ЦНС;
- психоэмоциональное состояние пациента;
- наличие декомпенсированных состояний со стороны кожных покровов;
- локальные дерматиты, гнойничковая инфекция в местах соприкосновения с тутором;
- аллергические реакции на материал приемной гильзы.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом - травматологом - ортопедом РУП БПОВЦ.

Наименование (артикул, марку, шифр) элементов, полуфабрикатов, комплектующих определяет врач - травматолог - ортопед по каталогу производителя при назначении тутора.

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

- тутор рекомендуется надевать на нательное белье;
- расположить приемную гильзу на верхней конечности и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

- избегать сильных ударов тутором и по тутору;
- тутор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильзы необходимо протирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать тутор, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;
- тутор хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании тутора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно изменять схему построения тутора, производить корректировку и ремонт.

Ремонт тутора необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу тутора в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению ортопедического аппарата на нижнюю конечность

Ортопедические аппараты на нижние конечности АН0, АН4, АН6, АН8 (далее аппараты) - техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на всю нижнюю конечность или ее сегменты с захватом (или без) туловища. Противопоказаниями к назначению аппаратов являются:

- вывих бедра;
- выраженное спастическое сокращение приводящих мышц, которое невозможно удержать конструкцией аппарата;
- укорочение приводящих мышц и мышц задней группы бедра;
- выраженная торсия большеберцовой кости и деформация дистального отдела конечности;
- наличие судорожного синдрома;
- наличие сгибательных контрактур тазобедренных и коленных суставов более 20°;
- наличие эквино-вальгусных и эквино-варусных деформаций стоп, требующих оперативного лечения;
- наличие декомпенсированных соматических состояний;
- наличие декомпенсированных состояний при органических поражениях ЦНС;
- психоэмоциональная непереносимость;
- наличие декомпенсированных состояний со стороны кожных покровов;
- локальные дерматиты, гнойничковая инфекция в местах соприкосновения с аппаратом;
- аллергические реакции на материал приемной гильзы.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом - травматологом - ортопедом РУП БПОВЦ.

Наименование (артикул, марку, шифр) узлов, элементов, полуфабрикатов, комплектующих определяет врач - травматолог - ортопед по каталогу производителя при назначении аппарата.

НАДЕВАНИЕ АППАРАТА:

- аппарат рекомендуется надевать на трикотажный чулок;
- расположить нижнюю конечность в приемные гильзы;
- найти наиболее удобное положение нижней конечности в приемных гильзах, после чего дать нагрузку на конечность;
- отрегулировать крепление.

УХОД ЗА АППАРАТОМ:

- избегать сильных ударов аппаратом и по аппарату, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали аппарата и стопы;
- при ходьбе на аппарате с двойным следом необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении аппарата, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- аппарат необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо протирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать аппарат, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей, шарниров;
- аппарат хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- трущиеся металлические части аппарата и шарнирные соединения необходимо периодически осматривать и смазывать смазочными материалами;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

Режим ношения аппарата определяется состоянием здоровья пациента и рекомендациями врача - травматолога - ортопеда.

По вопросам индивидуального пользования аппаратом необходимо проконсультироваться с врачом - травматологом - ортопедом.

При использовании аппарата необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно изменять схему построения аппарата, производить регулировку и ремонт.

Ремонт аппарата необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу аппарата в течение трех месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Допустимая максимальная нагрузка на аппарат _____кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru